

OneGloss M

MOUNTED

One-Step per la rifinitura
e lucidatura del composito e smalto



Rifinire e lucidare con un

I gommini lucidanti monopassaggio in silicone e ossido di alluminio garantiscono una rifinitura ottimale di tutti i tipi di restauri in composito: modificando semplicemente la pressione di utilizzo si passa dalla rifinitura alla lucidatura.

- I gommini OneGloss M sono montati su un gambo CA in acciaio inossidabile e sono sterilizzabili
- Rifinitura con una pressione di utilizzo elevata (ca. 1,0 N)
- Lucidatura con una pressione di utilizzo leggera (ca. 0,3 N)
- Rimozione di residui di composito o di cemento e lucidatura dello smalto dentale esercitando una pressione da moderata a leggerissima
- Lucidatura dello smalto dopo la rimozione degli attacchi ortodontici e del tartaro o eliminazione di discromie con una leggerissima pressione d'utilizzo
- Numero di giri consigliato da 3.000 min⁻¹ a 10.000 min⁻¹ spruzzando acqua a intermittenza; non superare la velocità massima consentita di 15.000 min⁻¹



solo strumento

Scelta della forma

L'assortimento comprende quattro forme appositamente studiate per le superfici dentali da lavorare.


Coppa

per cuspidi, area incisale, oclusale



Midipoint

per l'area labiale, linguale, vestibolare, oclusale

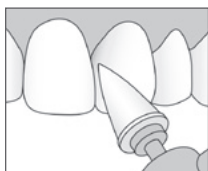


Minipoint

per solchi, area cervicale



IC

per l'area labiale, linguale, vestibolare, interprossimale

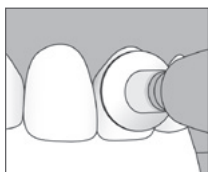

Informazioni per gli ordini

OneGloss M

con gambo CA, 12 pz. per confezione



Forma: Minipoint

PN 0186



Forma: Coppa

PN 0187



Forma: Midipoint

PN 0188



Forma: IC

PN 0189



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

[EC REP] SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

www.shofu.de