

*dal 1949 al servizio  
della comunità odontoiatrica  
ricerca e selezione  
Qualità & Soluzioni  
per voi!*



**B | BRAUN**  
**SHARING EXPERTISE**



## SUTURE ED EMOSTATICI DENTALI

[www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

# INDICE

## SUTURE DENTALI

Generalità	03
------------	----

## SUTURE NON ASSORBIBILI

### Monofilamento

SUPRAMID - Poliammide	04
-----------------------	----

ELASYN® - PTFE	06
----------------	----

DAFILON® - Poliammide	07
-----------------------	----

OPTILENE® - Polipropilene e Polietilene	08
---	----

### Intrecciate

PREMICRON® - Poliestere	09
-------------------------	----

SILKAM® - Seta	10
----------------	----

## SUTURE ASSORBIBILI

### Monofilamento

MONOSYN® - Gliconato	12
----------------------	----

MONOSYN® QUICK - Gliconato rapido	14
-----------------------------------	----

### Intrecciate

NOVOSYN® CHD - PGLA con clorexidina	15
-------------------------------------	----

NOVOSYN® - PGLA	16
-----------------	----

NOVOSYN® QUICK - PGLA rapido	18
------------------------------	----


## EMOSTATICI

LYOSTYPT® - Feltro in collagene	19
---------------------------------	----

GELITA® - Tampone in gelatina	19
-------------------------------	----

HISTOACRYL® - Adesivo tissutale	19
---------------------------------	----

GAMMA DI AGHI AD ALTE PRESTAZIONI **Easyslide**

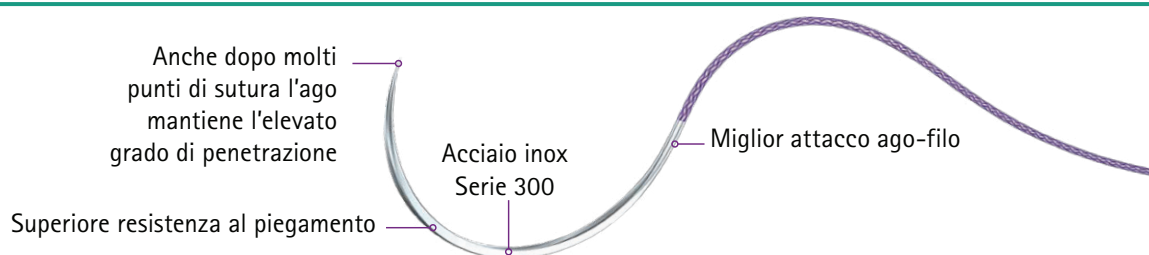

TIPOLOGIE DI AGHI

**DORSO TAGLIANTE (S)** ▼

Ago a sezione triangolare con lato esterno tagliente, che permette una facile penetrazione anche su tessuti resistenti. Il profilo si estende per tutta la lunghezza dell'ago e garantisce un'eccellente conservazione del tessuto.



**DORSO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE (SMP)** ▼

Ago a sezione triangolare con Punta di precisione. Il corpo dell'ago è leggermente appiattito per assicurare la massima stabilità sul porta-ago. Ago ideale per interventi di estrema delicatezza.



**CILINDRICO (R)** ●

Il corpo cilindrico si affusola in una punta sottile e tagliente. La parte centrale è appiattita per assicurare la migliore stabilità sul porta-ago. Gli aghi cilindrici penetrano il tessuto senza tagliarlo e sono indicati per tessuti molli.




**CILINDRICO PUNTA TAPERCUT (RC)** ⊙







Ago a corpo cilindrico con Punta Tapercut che garantisce una migliore penetrazione attraverso tessuti ispessiti o sclerotici.

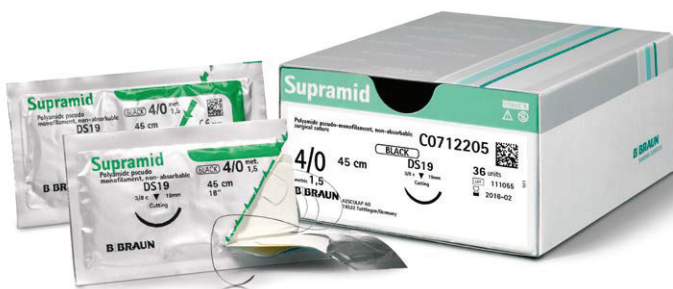

LEGENDA SIGLE

Curvatura dell'ago	Corpo dell'ago	Punte speciali
D = 3/8 Cerchio	S = Dorso tagliente	MP = Punta di precisione
H = 1/2 Cerchio	R = Cilindrico	C = Punta Tapercut
P = Progressivo		


**Poliamide pseudomonofilamento con rivestimento integrato e grande tenuta del nodo**





Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
11 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		nero	6/0	0,7	45 cm	36	C0716073
		nero	5/0	1	45 cm	36	C0716081
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		nero	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0712060 / G0712060
		nero	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0712078 / G0712078
		nero	5/0	1	75 cm	36	C0714070
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0712086 / G0712086
		bianco	4/0	1,5	45 cm	36	C0692085
15 mm 3/8 Cerchio Cilindrico		nero	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0712094 / G0712094
		bianco	4/0	1,5	75 cm	36	C0691097
		bianco	3/0	2	75 cm	36	C0691098
15 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente		nero	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0712035 / G0712035
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0712043 / G0712043
		nero	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0712051 / G0712051
15 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		nero	5/0	1	45 cm	36	C0716189
		nero	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0712124 / G0712124
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0712132 / G0712132
		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0714135
		bianco	4/0	1,5	45 cm	36	C0692131
		nero	3/0	2	45 cm	36	C0712140
		bianco	3/0	2	45 cm	36	C0692132

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



<b>Struttura</b>	pseudomonofilamento
<b>Materiale</b>	poliammide 6,6
<b>Rivestimento</b>	poliammide 6
<b>Calibri USP (EP)</b>	6/0 -3 (0,7-6)
<b>Colore</b>	nero / bianco

### Poliammide pseudomonofilamento con rivestimento integrato e grande tenuta del nodo

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0710130
		nero	3/0	2	75 cm	36	C0710148
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0710149
18 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		nero	4/0	1,5	45 cm	36	C0716219
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		nero	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0712191 / G0712191
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0712205 / G0712205
		nero	4/0	1,5	75 cm	36 / 12	C0714208 / G0714208
		nero	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0712213 / G0712213
		nero	3/0	2	75 cm	36 / 12	C0714216 / G0714216
		bianco	3/0	2	75 cm	36	C0692212
		nero	2/0	3	45 cm	36 / 12	C0712221 / G0712221
		nero	2/0	3	75 cm	36	C0714224

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



Struttura	monofilamento
Materiale	politetrafluoroetilene
Rivestimento	nessuno
Calibri USP (EP)	6/0-3/0 (0,7-2)
Colore	bianco

### PTFE monofilamento biologicamente inerte, ad elasticità bilanciata e porosità ridotta

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente	▼ HS12	bianco	6/0	0,7	75 cm	12	1069800
		bianco	5/0	1	75 cm	12	1069801
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS12	bianco	5/0	1	75 cm	12	1069802
		bianco	4/0	1,5	75 cm	12	1069803
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS16	bianco	4/0	1,5	75 cm	12	1069804
		bianco	3/0	2	75 cm	12	1069805
18 mm 3/8 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut	⊙ DRT18	bianco	5/0	1	75 cm	12	1069806
		bianco	4/0	1,5	75 cm	12	1069807
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS19	bianco	4/0	1,5	75 cm	12	1069808
		bianco	3/0	2	75 cm	12	1069809

\*Solo confezioni da 12 pezzi



Struttura	monofilamento
Materiale	poliammide 6 e 6,6
Rivestimento	nessuno
Calibri USP (EP)	11/0-1 (0,1-4)
Colore	blu

**Poliammide monofilamento ad alta resistenza ed elevata elasticità**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS12	blu	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0932060 / G0932060
		blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0932078 / G0932078
		blu	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0932086 / G0932086
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▼ DSMP13	blu	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0936081 / G0936081
		blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0936090 / G0936090
		blu	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0936103 / G0936103
15 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▼ HSMP15	blu	5/0	1	45 cm	36	C0936618
		blu	4/0	1,5	45 cm	36	C0936626
		blu	3/0	2	45 cm	36	C0935418
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS16	blu	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0932116 / G0932116
		blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0932124 / G0932124
		blu	5/0	1	75 cm	36 / 12	C0935123 / G0935123
		blu	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0932132 / G0932132
		blu	4/0	1,5	75 cm	36	C0935131
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▼ DSMP16	blu	3/0	2	75 cm	36	C0935107
		blu	6/0	0,7	45 cm	36	C0936146
		blu	5/0	1	45 cm	36	C0936154
		blu	4/0	1,5	45 cm	36	C0936162
		blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0932191 / G0932191
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS19	blu	5/0	1	75 cm	36 / 12	C0935190 / G0935190
		blu	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0932205 / G0932205
		blu	4/0	1,5	75 cm	36 / 12	C0935204 / G0935204
		blu	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0932213 / G0932213
		blu	3/0	2	75 cm	36 / 12	C0935212 / G0935212
		blu	2/0	3	75 cm	36	C0935213

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



Struttura	monofilamento
Materiale	polipropilene e polietilene
Rivestimento	nessuno
Calibri USP (EP)	10/0-0 (0,2-3,5)
Colore	blu

**Polipropilene e Polietilene monofilamento, a memoria minima ed eccezionale compatibilità tissutale**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS12	blu	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C3090206 / G3090206
		blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C3090207 / G3090207
13 mm 1/2 Cerchio Cilindrico	● HR13	blu	6/0	0,7	75 cm	36	C3090499
		blu	5/0	1	75 cm	36 / 12	C3090500 / G3090500
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▼ DSMP13	blu	7/0	0,5	45 cm	36 / 12	C3090617 / G3090617
		blu	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C3090618 / G3090618
		blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C3090619 / G3090619
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico	● HR17	blu	5/0	1	75 cm	36	C3090012
		blu	4/0	1,5	75 cm	36	C3090013
		blu	3/0	2	75 cm	36	C3090014
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut	⊙ HRC17	blu	4/0	1,5	75 cm	36 / 12	C3090561 / G3090561
		blu	3/0	2	75 cm	36	C3090579
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS19	blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C3090219 / G3090219
		blu	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C3090220 / G3090220
		blu	3/0	2	45 cm	36 / 12	C3090221 / G3090221
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▼ DSMP19	blu	5/0	1	45 cm	36 / 12	C3090675 / G3090675
		blu	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C3090676 / G3090676

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi





Struttura	intrecciata
Materiale	polietilene tereftalato
Rivestimento	silicone
Calibri USP (EP)	7/0-5 (0,5-7)
Colore	verde

**Poliestere intrecciato, dall'estrema maneggevolezza ed eccezionale compatibilità tissutale**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		verde	6/0	0,7	45 cm	36	C0026171
		verde	5/0	1	45 cm	36	C0026172
		verde	5/0	1	75 cm	36	C0026242
		verde	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0026173 / G0026173
13 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		verde	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0026029 / G0026029
		verde	4/0	1,5	45 cm	36	C0026030
		verde	3/0	2	75 cm	36	C0026032
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		verde	5/0	1	45 cm	36	C0026176
		verde	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0026177 / G0026177
		verde	4/0	1,5	75 cm	36 / 12	C0026245 / G0026245
		verde	3/0	2	75 cm	36	C0026246
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		verde	5/0	1	75 cm	36	C0026003
		verde	4/0	1,5	75 cm	36 / 12	C0026004 / G0026004
		verde	3/0	2	75 cm	36 / 12	C0026005 / G0026005
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		verde	2/0	3	75 cm	36 / 12	C0026006 / G0026006
		verde	4/0	1,5	75 cm	36	C0026937
		verde	3/0	2	75 cm	36	C0026938
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		verde	5/0	1	45 cm	36	C0026551
		verde	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0026552 / G0026552
		verde	4/0	1,5	75 cm	36	C0026231
		verde	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0026553 / G0026553
		verde	3/0	2	75 cm	36 / 12	C0026232 / G0026232
		verde	2/0	3	45 cm	36	C0026554
		verde	2/0	3	75 cm	36	C0026233

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



## Seta intrecciata, a calibro costante lungo il filo e rivestimento inerte







Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
11 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▽ DSMP11	nero	6/0	0,7	45 cm	36	C0766070
		nero	5/0	1	45 cm	36	C0766089
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▽ DS12	nero	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0762075 / G0762075
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0762083 / G0762083
		nero	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0762091 / G0762091
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▽ DSMP13	nero	6/0	0,7	45 cm	36	C0766186
		nero	5/0	1	45 cm	36	C0766194
		nero	5/0	1	75 cm	36	C0764191
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0766208 / G0766208
13 mm 1/2 Cerchio Cilindrico	● HR13	nero	5/0	1	45 cm	36	C0760072
		nero	4/0	1,5	45 cm	36	C0760080
		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0764086
		nero	3/0	2	45 cm	36	C0760099
		nero	3/0	2	75 cm	36	C0764094
15 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente	▽ HS15	nero	5/0	1	45 cm	36	C0762032
		nero	5/0	1	75 cm	36	C0765490
		nero	4/0	1,5	45 cm	36	C0762040
		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0765503
		nero	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0762059 / G0762059
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▽ DS16	nero	5/0	1	75 cm	36	C0764124
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0762130 / G0762130
		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0764132
		nero	3/0	2	45 cm	36	C0762148
		nero	3/0	2	75 cm	36	C0764140
		nero	2/0	3	75 cm	36	C0764159

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi




Struttura	intrecciata
Materiale	seta naturale
Rivestimento	cera e silicone
Calibri USP (EP)	8/0-6 (0,4-8)
Colore	nero

### Seta intrecciata, a calibro costante lungo il filo e rivestimento inerte

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		nero	6/0	0,7	45 cm	36	C0766216
		nero	5/0	1	45 cm	36	C0766224
		nero	4/0	1,5	45 cm	36	C0766232
		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0764230
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		nero	5/0	1	75 cm	36 / 12	C0760129 / G0760120
		nero	4/0	1,5	75 cm	36 / 12	C0760137 / G0760138
		nero	3/0	2	75 cm	36 / 12	C0760145 / G0760146
		nero	2/0	3	75 cm	36 / 12	C0760153 / G0760154
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0760765
		nero	3/0	2	75 cm	36	C0760766
		nero	2/0	3	75 cm	36	C0760767
18 mm 1/2 Cerchio Dorso tagliente		nero	4/0	1,5	45 cm	12	G0762563
		nero	3/0	2	45 cm	36	C0762547
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		nero	5/0	1	45 cm	36	C0765199
		nero	5/0	1	75 cm	36	C0765198
		nero	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0762202 / G0762202
		nero	4/0	1,5	75 cm	36	C0765201
		nero	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0762210 / G0762210
		nero	3/0	2	75 cm	36	C0765210
		nero	2/0	3	75 cm	36	C0765228
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		nero	5/0	1	45 cm	36	C0766704
		nero	4/0	1,5	45 cm	36	C0766682
		nero	3/0	2	45 cm	36	C0766690

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi

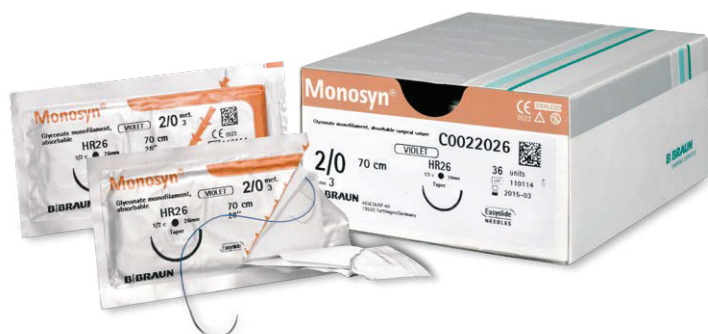





Gliconato monofilamento a medio assorbimento, maneggevole e con straordinaria tenuta del nodo

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS12	incolore	6/0	0,7	70 cm	36 / 12	C2023412 / G2023412
		incolore	5/0	1	70 cm	36 / 12	C2023413 / G2023413
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▼ DSMP13	viola	7/0	0,5	45 cm	36	C0022608
		viola	6/0	0,7	45 cm	36	C0022432
		viola	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0022433 / G0022433
		incolore	5/0	1	45 cm	36 / 12	C2023603 / G2023603
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C0022434
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C2023604 / G2023604
13 mm 1/2 Cerchio Cilindrico	● HR13	incolore	3/0	2	45 cm	36	C0023605
		viola	7/0	0,5	45 cm	36 / 12	C0022132 / G0022132
		viola	6/0	0,7	70 cm	36	C0022301
		viola	5/0	1	70 cm	36 / 12	C2022008 / G0022008
		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C0022009
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS16	incolore	4/0	1,5	70 cm	36	C0023009
		incolore	6/0	0,7	45 cm	36	C0023562
		viola	5/0	1	45 cm	36 / 12	C2022419 / G0022419
		incolore	5/0	1	70 cm	36 / 12	C2023423 / G0023423
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C2023303 / G2023303
		viola	3/0	2	45 cm	36	C0022421
		incolore	3/0	2	70 cm	36 / 12	C2023425 / G2023425

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi

<b>Struttura</b>	monofilamento
<b>Materiale</b>	72% glicolide, 14% trimetilene carbonato, 14% ε-caprolattone
<b>Rivestimento</b>	nessuno
<b>Calibri USP (EP)</b>	6/0-1 (0,7-4)
<b>Mantenimento forza tensile</b>	14 giorni 50%
<b>Assorbimento del materiale</b>	60/90 giorni
<b>Colore</b>	viola / incolore

### Gliconato monofilamento a medio assorbimento, maneggevole e con straordinaria tenuta del nodo

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		incolore	5/0	1	45 cm	36 / 12	C2023613 / G2023613
		incolore	5/0	1	70 cm	36	C0023162
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C2023614 / G0023614
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36	C2023163
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		viola	6/0	0,7	70 cm	36 / 12	C2022002 / G0022002
		viola	5/0	1	70 cm	36 / 12	C2022003 / G2022003
		incolore	5/0	1	70 cm	36	C0023003
		viola	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C2022004 / G2022004
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36	C0023004
		viola	3/0	2	70 cm	36 / 12	C2022005 / G0022005
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		incolore	3/0	2	70 cm	36	C0023005
		incolore	5/0	1	70 cm	36 / 12	C2023403 / G2023403
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C2023404 / G2023404
		viola	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0022504 / G0022504
		viola	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C2022204 / G2022204
		viola	3/0	2	70 cm	36 / 12	C2022205 / G2022205
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		incolore	3/0	2	70 cm	36 / 12	C2023405 / G2023405
		incolore	5/0	1	45 cm	36	C0023623
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36	C2023624
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C2023627 / G2023627
		incolore	3/0	2	45 cm	36 / 12	C2023625 / G2023625
		incolore	3/0	2	70 cm	36 / 12	C2023628 / G2023628

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



Struttura	monofilamento
Materiale	72% glicolide, 14% trimetilene carbonato, 14% ε-caprolattone
Rivestimento	nessuno
Calibri USP (EP)	6/0-1 (0,7-4)
Mantenimento forza tensile	6/7 giorni 50%
Assorbimento del materiale	56 giorni
Colore	incoloro

**Gliconato monofilamento a rapido assorbimento permette utilizzo esterno senza rimozione della sutura**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		incoloro	6/0	0,7	45 cm	36	C0025134
		incoloro	5/0	1	70 cm	36	C0025323
		incoloro	4/0	1,5	45 cm	36	C0025136
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		incoloro	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0025023 / G0025023
		incoloro	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0025024 / G0025024
		incoloro	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0025025 / G0025025
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		incoloro	5/0	1	70 cm	36	C0025331
		incoloro	4/0	1,5	70 cm	36	C0025332
		incoloro	3/0	2	70 cm	36	C0025333
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		incoloro	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0025028 / G0025028
		incoloro	4/0	1,5	70 cm	36	C0025130
		incoloro	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0025030 / G0025030
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		incoloro	6/0	0,7	45 cm	36	C0025216
		incoloro	5/0	1	70 cm	36	C0025051
		incoloro	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C0025052 / G0025052
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		incoloro	3/0	2	70 cm	36	C0025053
		incoloro	6/0	0,7	70 cm	36	C0025005
		incoloro	5/0	1	70 cm	36	C0025006
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		incoloro	4/0	1,5	70 cm	36	C0025007
		incoloro	3/0	2	70 cm	36	C0025008
		incoloro	5/0	1	45 cm	36	C0025031
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		incoloro	4/0	1,5	70 cm	36	C0025036
		incoloro	3/0	2	70 cm	36 / 12	C0025037 / G0025037

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



<b>Struttura</b>	intrecciata
<b>Materiale</b>	Poliglactin 910
<b>Rivestimento</b>	Poliglactin 370 + calcio stearato + Clorexidina diacetato
<b>Calibri USP (EP)</b>	5/0-2 (1-5)
<b>Mantenimento forza tensile</b>	21 giorni 50%
<b>Assorbimento del materiale</b>	56/70 giorni
<b>Colore</b>	viola / incolore






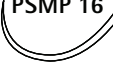
**PGLA intrecciato a rilascio progressivo di clorexidina, con azione battericida**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS12	viola	4/0	1,5	70 cm	36	C1068508
13 mm 1/2 Cerchio Cilindrico	● HR13	viola	5/0	1	70 cm	36	C1068007
		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C1068008
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▽ DSMP13	incolore	5/0	1	45 cm	36	C1069619
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C1068624
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS16	viola	5/0	1	45 cm	36	C1068212
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C1068213
		viola	3/0	2	70 cm	36	C1068514
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione	▽ DSMP16	incolore	5/0	1	45 cm	36	C1069525
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36	C1069524
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico	● HR17	viola	5/0	1	70 cm	36	C1068012
		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C1068013
		viola	3/0	2	70 cm	36	C1068014
18 mm 3/8 Cerchio Cilindrico	● DR18	viola	4/0	1,5	70 cm	36	C1068150
		viola	3/0	2	70 cm	36	C1068151
18 mm 3/8 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut	⊕ DRC18	viola	4/0	1,5	70 cm	36	C1068124
		viola	3/0	2	70 cm	36	C1068128
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente	▼ DS19	viola	5/0	1	45 cm	36	C1068219
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C1068220
		viola	3/0	2	45 cm	36	C1068221

\*Solo confezione da 36 pezzi




**PGLA intrecciato a medio assorbimento con reazioni infiammatorie estremamente ridotte**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		viola	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0068206 / G0068206
		viola	6/0	0,7	70 cm	36	C0068506
		viola	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0068207 / G0068207
		viola	5/0	1	70 cm	36 / 12	C0068507 / G0068507
12 mm 3/8 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		viola	6/0	0,7	70 cm	36	C0068300
		viola	5/0	1	70 cm	36	C0068301
		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C0068302
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		viola	6/0	0,7	45 cm	36 / 12	C0068622 / G0068622
		viola	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0068623 / G0068623
		viola	5/0	1	70 cm	36	C0068723
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C0068624
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		viola	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0068212 / G0068212
		viola	5/0	1	70 cm	36	C0068512
		viola	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0068213 / G0068213
		viola	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C0068513 / G0068513
		viola	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0068214 / G0068214
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		viola	3/0	2	70 cm	36 / 12	C0068514 / G0068514
		viola	6/0	0,7	45 cm	36	C0068530
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C0068531
		viola	3/0	2	45 cm	36	C0068529
16 mm Curv. progress. Dorso tagliente Punta di precisione		incolore	5/0	1	45 cm	36	C0069602
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C0069600 / G0069600






\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi





<b>Struttura</b>	intrecciata
<b>Materiale</b>	Poliglactin 910
<b>Rivestimento</b>	Poliglactin 370 + calcio stearato
<b>Calibri USP (EP)</b>	8/0-2 (0,4-5)
<b>Mantenimento forza tensile</b>	21 giorni 50%
<b>Assorbimento del materiale</b>	56/70 giorni
<b>Colore</b>	viola / incolore

### PGLA intrecciato a medio assorbimento con reazioni infiammatorie estremamente ridotte

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		viola	6/0	0,7	70 cm	36 / 12	C0068011 / G0068011
		viola	5/0	1	70 cm	36 / 12	C0068012 / G0068012
		viola	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C0068013 / G0068013
		viola	3/0	2	70 cm	36 / 12	C0068014 / G0068014
		viola	2/0	3	70 cm	36 / 12	C0068015 / G0068015
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		viola	5/0	1	70 cm	36 / 12	C0068312 / G0068312
		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C0068313
		viola	3/0	2	70 cm	36	C0068314
18 mm 3/8 Cerchio Cilindrico T Punta apercut		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C0068460
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente		viola	5/0	1	45 cm	36 / 12	C0068219 / G0068219
		viola	5/0	1	70 cm	36	C0068419
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C0068220
		viola	4/0	1,5	70 cm	36	C0068420
		viola	3/0	2	45 cm	36 / 12	C0068221 / G0068221
		viola	3/0	2	70 cm	36	C0068421
		viola	2/0	3	70 cm	36	C0068422
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliente Punta di precisione		viola	5/0	1	45 cm	36	C0068626
		viola	5/0	1	70 cm	36	C0068528
		viola	4/0	1,5	45 cm	36	C0068630
		viola	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C0068823 / G0068823
		viola	3/0	2	45 cm	36	C0068631
		viola	3/0	2	70 cm	36 / 12	C0068824 / G0068824

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi



Struttura	intrecciata
Materiale	Poliglactin 910
Rivestimento	Poliglactin 370 + calcio stearato
Calibri USP (EP)	6/0-2 (0,7-5)
Mantenimento forza tensile	5 giorni 50%
Assorbimento del materiale	42 giorni
Colore	incolore

**PGLA intrecciato a rapido assorbimento permette utilizzo esterno senza rimozione della sutura**

Ago	Sezione & Sigla	Colore Filo	USP	EP	Lunghezza Filo	Confezione	Codici*
12 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliante		incolore	6/0	0,7	70 cm	36	C3046201
		incolore	5/0	1	70 cm	36	C3046202
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36	C3046203
13 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliante Punta di precisione		incolore	5/0	1	45 cm	36 / 12	C3046619 / G3046619
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C3046620 / G3046620
13 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		incolore	6/0	0,7	70 cm	36	C3046001
		incolore	5/0	1	70 cm	36	C3046002
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliante		incolore	5/0	1	70 cm	36 / 12	C3046212 / G3046212
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C3046213 / G3046213
		incolore	3/0	2	70 cm	36 / 12	C3046214 / G3046214
16 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliante Punta di precisione		incolore	5/0	1	45 cm	36	C3046611
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36	C3046685
		incolore	3/0	2	70 cm	36	C3046686
17 mm 1/2 Cerchio Cilindrico		incolore	5/0	1	70 cm	36 / 12	C3046012 / G3046012
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C3046013 / G3046013
		incolore	3/0	2	70 cm	36	C3046014
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliante		incolore	5/0	1	70 cm	36	C3046419
		incolore	4/0	1,5	70 cm	36 / 12	C3046420 / G3046420
		incolore	3/0	2	45 cm	36	C3046221
19 mm 3/8 Cerchio Dorso tagliante Punta di precisione		incolore	3/0	2	70 cm	36 / 12	C3046421 / G3046421
		incolore	4/0	1,5	45 cm	36 / 12	C3046629 / G3046629
		incolore	3/0	2	70 cm	36 / 12	C3046530 / G3046530

\*C=confezione da 36 pezzi, G=confezione da 12 pezzi

## EMOSTATICI

### LYOSTYPT® - Feltro in collagene assorbibile deantigenizzato, composto da fibrine di origine bovina



**Descrizione:** La lesione dell'endotelio vascolare stimola l'adesione dei trombociti ai fasci di fibre di collagene (in questo caso rappresentati dalla superficie di LYOSTYPT®). La rapida aggregazione piastrinica (ADP dipendente) porta alla formazione di un reticolo organizzato lungo tutta la superficie di contatto<sup>1</sup>.

**Tempo di emostasi:** tempo medio 2 minuti e 20 secondi, +/- 1 minuto e 40 secondi in relazione al campo di impiego ed alla tipologia di sanguinamento

**Tempo di riassorbimento:** 3 settimane circa in relazione all'area di impiego ed al quantitativo di materiale impiantato. Assorbimento completo per fagocitosi e demolizione enzimatica.

- Alto livello di assorbibilità, che riduce la quantità di materiale impiegato
- Emostasi veloce ed efficace con minore perdita di sangue e di tempo
- Ottima affinità alle superfici sanguinanti, non aderisce a guanti e strumenti
- Per utilizzo dopo avulsioni, rimozione di epulidi, nelle frenulectomie e apicectomie, nelle alveoliti, nella chirurgia parodontale e nelle comunicazioni oro-antrali<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Alpaslan C et al. "Tissue reaction to three subcutaneously implanted local hemostatic agents". Br J Oral Maxillofac 35 (1977) 129-132.

<sup>2</sup>A. Di Maggio, L. Ciavarelli Macozzi: "L'uso di prodotti emostatici topici in chirurgia stomatologica" – Doctor Os n.4 Aprile 1990

Dimensioni	Confezione	Codice
3x5 cm	12 pz.	1069128
5x8 cm	6 pz.	1069152
5x30 cm	4 pz.	1069306

### GELITA® - Tampone in gelatina assorbibile temperata di origine suina



**Descrizione:** cubi spugnosi ricchi di polipeptidi con aminoacidi privi di anelli aromatici, che costituiscono un efficace supporto per la formazione del coagulo di fibrina. Soffici, malleabili e facilmente sagomabili.

**Tempo di emostasi:** applicato a piccole emorragie e sanguinamenti di minore entità porta alla formazione del coagulo in circa 3 minuti.

**Tempo di riassorbimento:** 3-5 settimane circa per assorbimento completo, tramite fagocitosi e demolizione enzimatica.

- Elevata compatibilità tissutale
- Ampia superficie porosa per una rapida coagulazione del sangue
- Per riempimento degli alveoli e di cavità ossee nella chirurgia dentale
- Per la profilassi di emorragie a seguito di avulsioni complesse

Dimensioni	Confezione	Codice
1x1x1 cm	10 pz.	2070014
1x1x1 cm	50 pz.	2070103
1,5x1,5x1 cm	50 pz.	2070154

### HISTOACRYL® - Adesivo tissutale chirurgico a base di enbucrilato (n-butil-2 cianoacrilato)



**Descrizione:** sutura di ferite nette e recenti che non siano soggette a sollecitazioni meccaniche. Da utilizzarsi a lembo accostato e non all'interno della ferita.

**Meccanismo d'azione:** grazie all'umidità presente nei tessuti, HISTOACRYL® polimerizza in 20-30 secondi in una sostanza solida che si lega al tessuto stesso e dopo 3 minuti l'indurimento è completo e la superficie non è più aderente.

HISTOACRYL® provvede a mantenere uniti i margini della ferita fino ad avvenuta cicatrizzazione ed ha dimostrate proprietà batteriostatiche in quanto è in grado di sigillare la ferita immediatamente dopo l'apposizione in modo uniforme.

- Eccellente risultato estetico
- Elevata stabilità meccanica
- Tempi rapidi di trattamento, non necessario l'uso di anestetici locali
- Evita traumi addizionali e la rimozione del punto chirurgico

Colore	Confezioni	Codice
blu	5 pz. (0,5 ml)	1050052
incolore	5 pz. (0,5 ml)	1050060

AESULAP® – a B. Braun brand



B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano

Tel. 02 662181 | Fax 02 66218.357 | [www.aesulap-dental.com](http://www.aesulap-dental.com)



**IVAN ILIC'** srl

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646

[ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com)

 [www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)