

BlueView VariStrip™

La nostra matrice anteriore più conosciuta

Sagomatura: Curvatura ottimale e altezza variabile ideale praticamente per tutti i restauri anteriori.

Altezza variabile: da 6 mm a 10 mm, per avere sempre l'altezza giusta per tutti i denti anteriori.

Colorazione blu: Evidenzia il contrasto tra la matrice e la struttura del dente senza alterare la polimerizzazione del composito.

La matrice Blue View VariStrip™ è una matrice anteriore sagomata innovativa in grado di offrire una curvatura e un'altezza ottimali, praticamente per tutti i tipi di restauro dei settori anteriori. Questa matrice anatomica è in poliestere, con uno spessore di 0,05 mm di spessore è arrotondata su entrambi i lati.

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo
VS02	VariStrip™	50	€ 75,00

SlickBands™ Tofflemire-style



Matrice per il rialzo del gradino cervicale

Tecnologia antiaderente sviluppata da Garrison: I moderni agenti adesivi possono aderire alle matrici non rivestite – Le matrici Slick Bands™ possono essere rimosse facilmente.

Una matrice per la rilocazione coronale del margine consentirà un adattamento gengivale e una sagomatura della zona del margine ottimali. La matrice per la rilocazione coronale del margine presenta un'altezza variabile, per consentire un migliore adattamento alla zona del margine.



Normales Tofflemire Band Margin Elevation Band

Codice	Descrizione	Contenuto	Prezzo
SMT500S01	Matrice rialzo gradino cervicale - antiaderente (blu) Margin Elevation Band	20 pz	€ 25,00



Il nuovo eZr™ Garrison FPZK01-X - kit eZr
I gommini diamantati lucidanti consentono ai dentisti di rifinire e lucidare, facilmente ed in tutta sicurezza, Zirconia e Disilicato di Litio, riducendo la possibilità di microfratture e scheggiature.



1 Iniziare con una sgrassatura mediante i gommini a grana grossa blu. Usare il tronco di cono con estremità piatta per le superfici occlusali/ vestibolari/linguali/buccali ed il disco per le superfici interprossimali



2 Usare i gommini lucidanti a grana media verdi per levigature e prelucidatura. Usare la punta per i solchi occlusali, la coppetta per le superfici labiali/linguali/buccali ed il disco per le superfici interprossimali



3 Usare i gommini lucidanti a grana fine arancio per la brillantatura. Usare la punta per i solchi occlusali, la coppetta per le superfici labiali/linguali/buccali, ed il disco per le superfici interprossimali.



Kit FPZK01-X

Kit completo con 2 gommini abrasivi e 6 gommini lucidanti

€ 178,00

2 gommini per sgrassatura (blu)
3 lucidanti per rifinitura e prelucidatura (verdi)
3 lucidanti per brillantature (arancio)

Kit eZr FPZK01-X

Garrison
Dental Solutions



IVAN ILIC' srl
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646
ilic@garrisdental.com



PMIT221

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



GARRISON
Dental Solution



DENTAL ADVISOR
TOP AWARD
SECTIONAL
MATRIX



Composi-Tight® 3D Fusion™ Sectional Matrix System



2020
Nuove matrici
COMPOSI-TIGHT®
3D FUSION™
FIRM



Garrison
Dental Solutions

THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS

Composi-Tight® 3DFusion™

Firm Matrix Bands



Cod. FX-HHF-00
€ 449,00

Acquista senza rischi con la garanzia "60 gg soddisfatti o rimborsati"

Nuovo kit introduttivo con matrici rigide

Le nuove matrici Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm resistono quasi il 70% in più delle altre matrici, mantenendo uno spessore supersottile di 0,038 mm.

contenuto	descrizione	NOVITÀ
	1 anello blu	
	1 anello arancione	
	1 anello verde	
	80 cunei assortiti nelle 4 misure	
	70 matrici rigide assortite nelle 5 misure	
	1 pinza allarga-anelli	

Il nuovo sistema di matrici sezionali Composit-Tight® 3D Fusion™ fornisce la soluzione per tutte le cavità di classe II.

Punti di contatto perfetti: grazie alle estremità in silicone, la matrice si adatta perfettamente al dente e l'anello non salterà via.

contenuto	descrizione	NOVITÀ
	1 anello blu	
	1 anello arancione	
	1 anello verde	
	80 cunei assortiti nelle 4 misure	
	70 matrici antiaderenti colorate nelle 5 misure	
	1 pinza allarga-anelli	

Cod. FX-KFF-00
€ 459,00

Acquista senza rischi con la garanzia "60 gg soddisfatti o rimborsati"

Composi-Tight® 3DFusion™

Codice: FX400



- Per denti corti e malposizionati
- Si fissa sulla diga
- Altissima forza di separazione

Codice: FX400
€ 195,00
(2 pz/confez.)

Codice: FX400-1
€ 102,00
(1 pz/confez.)

Codice: FX500



- Per grandi molari o molto convessi
- Particolarmente forte, punti di contatto stretti garantiti dalla forza di separazione
- Piedini dell'anello alti chiudono perfettamente alla cresta marginale del dente

Codice: FX500
€ 195,00
(2 pz/confez.)

Codice: FX500-1
€ 102,00
(1 pz/confez.)

Codice: FX600




- Il primo anello per cavità ampie e per quando manca una cuspid
- Le estremità in silicone non schiacciano la matrice all'interno della cavità
- La forza di separazione resta nella zona inferiore

Codice: FX600
€ 195,00
(2 pz/confez.)

Codice: FX600-1
€ 102,00
(1 pz/confez.)

NOVITÀ
COSA
ABBIAMO
MIGLIORATO

La plastica rigida bianca separa interprossimalmente i denti

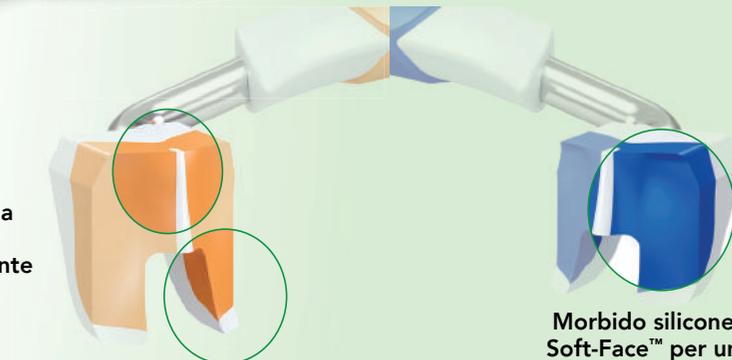

Le punte ritentive Ultra-Grip™ impediscono all'anello di scivolare

Morbido silicone Soft-Face™ per un perfetto adattamento della matrice al dente



Lunga durata grazie al nuovo metodo di produzione



Primo anello per cavità ampie

Composi-Tight® 3DFusion™

Firm Matrix Bands

NUOVE!



spessore 0,038 mm

Matrici Fusion Firm :

- Resistono alla deformazione quasi il 70% in più !
- Supersottili, solo 0,038 mm.
- Cinque misure ideali !

Perfette per :

- Spazi interprossimali stretti !
- Maggiori preparazioni in conservativa !
- Per principianti e per esperti.

	Canini/premolari	Canini/premolari con est.	Canini alti e molari bassi	Molari	Molari alti con est. cervicale
Spessore 0,038 mm					
Codice	FXH100-M	FXH150-M	FXH175-M	FXH200-M	FXH300-M
Altezza	4,3 mm	5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	7,7 mm
Quantità	50/ pz.	50/ pz.	50/ pz.	50/ pz.	50/ pz.
Prezzo	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €



Confezione assortita 150 matrici firm rigide, nelle 5 misure - FXHB05 125,00 €

Risparmia 15 €!

Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non-Stick Matrices

Le matrici Composit-Tight® 3D Fusion™ hanno uno speciale rivestimento antiaderente, Slick Bands™, inventato da Garrison. Adesivi e composito non si appiccicheranno e rimuovere le matrici sarà facilissimo. Le matrici Full Curve avvolgono il dente, isolandolo e facilitando il posizionamento dell'anello.

	Canini/premolari	Canini/premolari con est.	Canini alti e molari bassi	Molari	Molari alti con est. cervicale
Spessore 0,038 mm					
Codice	FX100-M	FX150-M	FX175-M	FX200-M	FX300-M
Altezza	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Quantità	50/ pz.	30/ pz.	50/ pz.	50/ pz.	30/ pz.
Prezzo	52,50€	52,50€	52,50€	52,50€	52,50€



Confezione assortita 210 matrici 3D Fusion antiaderenti nelle 5 misure - FXB02 235,00 €

Risparmia 27 €!