

**Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!**



EZ-BREATHE

DPI III° cat.

DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CE 0068

EZ- BREATHE

Mascherina per protezione da CoViD progettata per la protezione di tutti gli operatori sanitari. Consente una respirazione regolare anche dopo molte ore di utilizzo.

- Anallergica, non irrita la pelle.
 - Fabbricata ed imbustata durante il processo di lavorazione direttamente in macchina.
 - Saldatura ad ultrasuoni, senza collante.
 - Consente una respirazione regolare anche dopo molte ore di utilizzo.
 - Monouso, non riutilizzabile.
 - Progettata per la protezione di operatori sanitari, ideale per tutti i settori.
-
- Ponte nasale regolabile garantisce maggior aderenza al viso, mentre i doppi.
 - Elastici non irritano la zona dell'orecchio e fermano lo spostamento della maschera durante i movimenti.
 - La singolare forma a becco d'anatra consente una maggior superficie filtrante ed una elevata capacità d'aria.
 - Si adatta perfettamente a qualsiasi viso, anche con barba.



La maschera filtrante BREATHE è certificata come dispositivo di protezione individuale (DPI III°cat.) per la protezione delle vie respiratorie contro il COVID19.

Comoda e leggera anche dopo molte ore di indosso, la maschera filtrante BREATHE dal singolare design a becco d'anatra limita l'affaticamento e garantisce un corretto smaltimento dell'anidride carbonica. Ha un fattore di protezione nominale equivalente a quello di una classe FFP2 per la protezione da COVID19.

È destinata non solo agli operatori sanitari ma a chiunque desideri una protezione superiore senza affaticarsi nell'uso di tutti i giorni.



Certificazione:	PPE-R/02.075 version 2 CE0068
Numero di strati e composizione:	S+MMM+S S: Spunbond M: Meltblown
Elementi incorporati:	Strati protettivi antigoccia, doppio elastico, ponte nasale
Capacità di filtraggio:	> 94%
Dimensione maschera:	250x98 mm (c.ca)
Dimensione busta:	290x170 mm
Taglia:	Unica
Peso netto ±:	4,5 g
Resistenza respiratoria (mbar):	Inspirazione 30 l/min < 0,7 Inspirazione 95 l/min < 2,4 Espirazione 160 l/min < 3,0

DPI III° cat. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CE 0068

NON CONTIENE LATTICE / PVC/FIBRE DI VETRO


La maschera filtrante BREATHE risponde ai requisiti del Regolamento Europeo 425/2016 (Dispositivi di Protezione Individuale) ed è certificata CE come DPI di III categoria per la protezione da COVID19 in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009 e alla RfU PPE-R/02.075 versione 2. La certificazione CE e il controllo (Modulo C2) sono effettuati da MTIC InterCert S.r.l. (Organismo Notificato n°0068).

OFFERTA LANCIO:

1 cf da 25 Ez-Breathe Anti Covid 19 confezionati singolarmente

€ 40,00 (€ 55,00) rif. 0EZB1

Istruzioni per l'indosso della maschera filtrante BREATHE

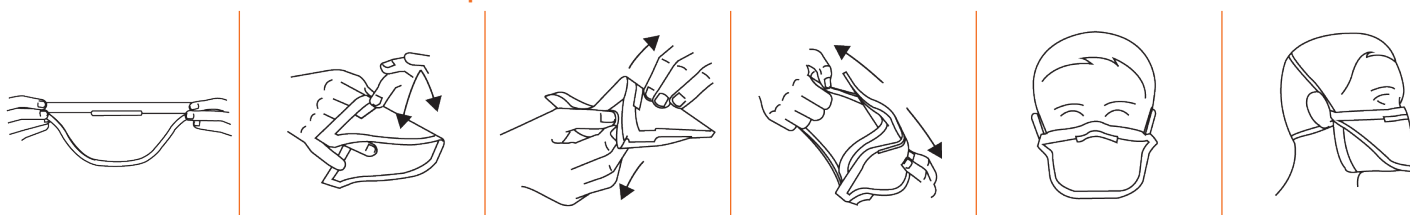

La maschera filtrante BREATHE è realizzata con saldature ad ultrasuoni (SENZA USO DI COLLANTI). Semplice e veloce da indossare.

Superficie di aderenza al viso, rispetto alle altre maschere in commercio, notevolmente più ampia. La maschera si adatta al viso permettendo tutti i movimenti facciali senza compromettere la sua azione protettiva. L'ampia superficie permette inoltre di ottenere un potere filtrante elevato ed una ridotta resistenza respiratoria. Il ponte nasale si modella adattandolo alla forma del naso ed i doppi elastici con elongazione calibrata aumentano la vestibilità. Non contiene lattice, PVC, fibre di vetro.

Tutto il processo di converting, dalla fabbricazione all'imbustamento della maschera avviene direttamente in macchina. La lavorazione è priva di contatto ed alterazioni da agenti esterni. La maschera deve essere conservata in ambiente con massimo 80% di umidità.

