

dal 1949 al servizio
della comunità odontoiatrica
ricerca e seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE



WAMkey

*Il nuovo standard
per rimuovere corone e ponti!*



DELICATO

La pressione esercitata da WAMkey® sul dente di supporto aumenta in maniera molto progressiva fino alla rimozione, senza urti. WAMkey® è un procedimento del tutto **indolore**. Senza la minima anestesia, il paziente avverte al massimo la sensazione di masticare un alimento duro.




RAPIDO

Rimozione **molto facile** di una corona in 1 o 2 min.
Ponti e corone riutilizzabili per un risparmio di tempo, denaro e materiali (evitare di tagliare l'intera protesi, comporta anche il risparmio di frese e contrangoli).
WAMkey è **efficace in oltre il 90% dei casi** (qualsiasi cemento, tutti i tipi di corone, ponti, ecc.).




CONSERVATIVO

Le aree cervicali, occlusali e punti di contatto sono preservate. La protesi rimossa rimane funzionale dopo una semplice otturazione in ambulatorio o una riparazione in laboratorio e potrà servire da provvisorio o da protesi permanente.

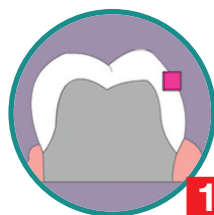


1

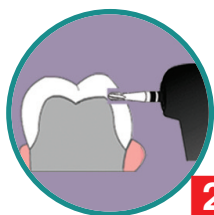


2




3

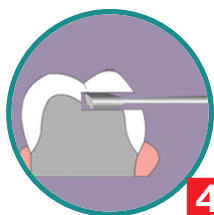

4

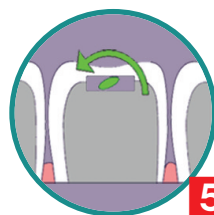


5

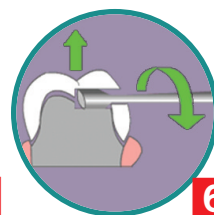

6

È LOGICO


L'utilizzo di un **levacorone classico** sottopone il legamento a impatti e **movimenti di bascula molto rischiosi** per la preparazione e la radice. Le estremità cervicali della corona possono anche risultare danneggiate.

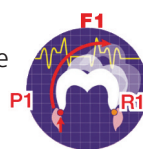

Con **WAMkey®** la corona sceglie liberamente la propria traiettoria di disinserimento. Inoltre non vi è alcuna perdita di energia nel legamento. Pertanto, le forze necessarie alla rimozione sono minime e i **rischi di frattura inesistenti**.



Rimozione di una corona Richmond - Dr William MULLER

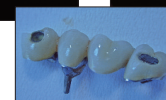

33 14510 Levacorone WAMKey Kit

3 chiavi assortite

1 CD interattivo

€ 355,00

Ricambi

33 14511 Levacorone WAMKey n.1 (piccola)

33 14512 Levacorone WAMKey n.2 (media)

33 14513 Levacorone WAMKey n.3 (large)

€ 132,00



33 12IK Zen Intro Kit (WAM INTRO+WAMX)

3 chiavi assortite

1 pinza

3 paia di morsetti assortiti,

3 paia di anelli di silicone e

1 CD Rom interattivo

€ 895,00



RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ



- Dimenticate i metodi e i dispositivi complessi o che richiedono troppo tempo.
- Evitate ai pazienti interventi chirurgici scomodi e dai risultati aleatori.
- WAM'X® consente di rimuovere in tutta semplicità qualsiasi perno moncone in 5 - 10 minuti al massimo

SICUREZZA



- La separazione nell'asse del perno preserva la radice e assicura al paziente un confort eccezionale.
- WAM'X® consente al perno una totale libertà di traiettoria, riducendo così al minimo i rischi incorsi dalla radice.

POLIVALENZA



- La forma originale di WAM'X® consente di operare su tutte le protesi con attacco intraradiculare metallico, comprese quelle sui denti posteriori.




Caratteristiche

Accessibilità




Le estremità curve consentono di accedere a tutte le parti della dentatura, persino ai denti posteriori.

Adattabilità

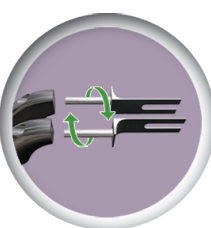


Morsetti mobili che consentono al perno di scegliere liberamente il proprio asse di disinserimento. 3 misure di morsetti intercambiabili in grado di adattarsi a ogni situazione.

Semplicità

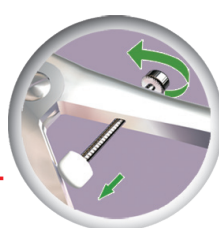

La vite di battuta limita l'apertura della pinza durante e dopo l'estrazione del perno. Utilizzabile anche chiusa: mantenendo la pressione si controlla la salita del perno

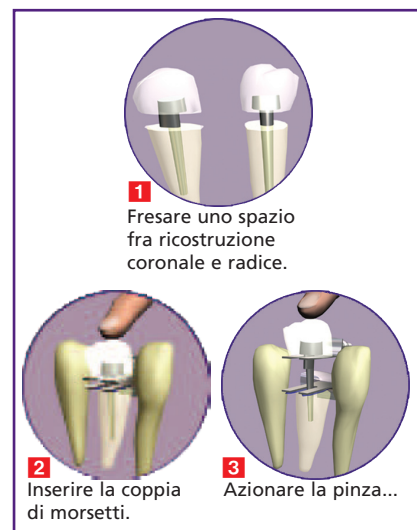

33 11850	Wam'X Ultimate Kit, pinza con: 3 paia di morsetti, 3 paia di anellini ass., 5 mors. SuperQuick	€ 795,00
33 11856	Morsetti SuperQuick assortimento 5 pz.	€ 149,00

Morsetto SuperQuick 1 pz. € 38,00	XS: 33 11851	S: 33 11852	M: 33 11853	L: 33 11854	XL: 33 11855
-----------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

33 11810	Wam'X Kit, pinza con: 3 paia di morsetti ass., 3 paia di rotelle ass. in silicone		€ 695,00
----------	---	---	----------

Morsetto standard 1 pz. € 28,50	S n. 1: 33 11811	M n. 2: 33 11812	L n. 3: 33 11813
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

33 11816	Anelli in silicone assortiti per Pinza Wam'X, 6 pz.		€ 24,00
----------	---	--	---------

Omnis 1, Omnis 2

Polivalenti!

Nettamente più rigidi delle curette tradizionali, hanno polivalenza e resistenza incredibili. L'estremità sottile a gancio è comune ad entrambi, consente di grattare, agganciare o rimuovere provvisori.

Le estremità 1 o 2 hanno un profilo a 3 lame affilatissime da utilizzare per eliminare cemento o composito in eccesso.



Gancio per la rimozione (nel senso di «dissigliare») di ponti e corone provvisori, scheletrati, tappi di protezione di pilastri implantari.



33 14531	Omnis1 € 34,50
33 14531-3	Omnis1 Save Pack, 3 pz. € 83,00
33 14532	Omnis2 € 34,50
33 14532-3	Omnis2 Save Pack, 3 pz. € 83,00



MD Guide

Per non correre più il rischio di un impianto mal posizionato

- Nessun cambiamento della propria procedura abituale
- Non serve più realizzare dime chirurgiche o protesiche.
- Evita lo stress e le problematiche di un cattivo posizionamento mesio-distale dell'impianto.

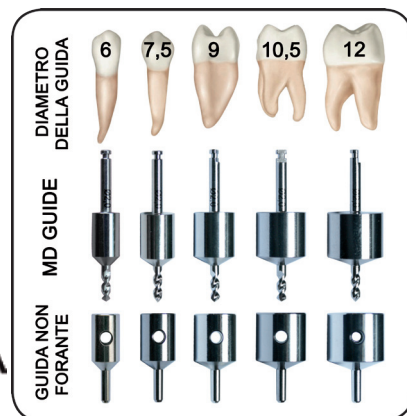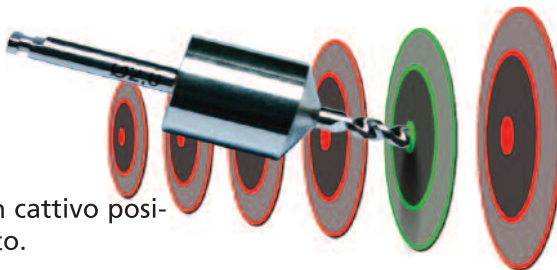


F+RA
BENE

Un millimetro può fare la differenza

Le frese pilota MD Guide garantiscono una guida mesio-distale precisa per distanza corretta nel posizionamento degli impianti. Ogni fresa è dotata di un cilindro, il cui diametro corrisponde alle dimensioni dei denti da sostituire. Si appoggia il cilindro della fresa contro il dente adiacente, in questo modo si sarà certi dello spazio necessario. Quando si devono posizionare più impianti, nel primo foro si inserisce la guida cilindrica non forante (analoga della fresa della dimensione scelta). L'analogo MD simula la presenza della futura corona protesica e funge da appoggio per la realizzazione del foro successivo con la fresa MD adatta.

È veramente facile, sicuro e rapido ricostruire un'intera arcata!

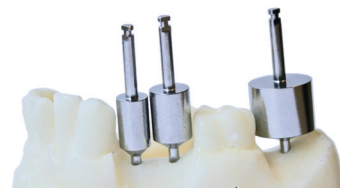

56 12GK1 MD Guide Kit 5 frese calibrate, 5 analoghi € 695,00

Pinzette WAM Tweezers

Semplicità

L'apertura così come la chiusura delle pinze WAM'Tweezers non necessita di alcuno sforzo. Per rilasciare l'oggetto trasportato, basta una semplice pressione sulle branche. Non occorre lottare con alcun meccanismo.

Sicurezza


A riposo, l'incrocio delle branche delle WAM'Tweezers assicura una presa perfetta di tutti i piccoli oggetti (cotone, cunei, perni, punte di carta, ecc...). Non si corre alcun rischio di apertura inopportuna.

Efficacia

Una volta afferrato l'oggetto fra le ganasce, l'assistente può passare le pinze senza il minimo rischio di apertura inopportuna. Può anche posarle sul tray o sul banco per effettuare altre operazioni.

E se ti risparmiassi un po'?

Al contrario delle WAM'Tweezers, ogni volta che si afferra un oggetto di piccole dimensioni con pinze tradizionali, avviene un dispendio di energia fisica e mentale, apparentemente minimo, ma che alla fine della giornata, a causa della ripetitività dell'operazione, spiega una parte non trascurabile della stanchezza dell'odontoiatra.

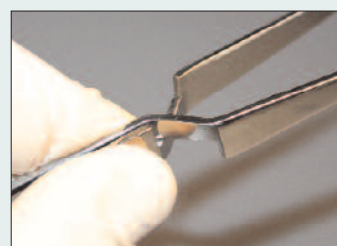

Non perdere la presa !

Con le estremità zigrinate, le Classic Tweezers® costituiscono lo strumento di presa più polivalente. Sostituiranno convenientemente le pinze tradizionali per afferrare tutto o quasi (elementi protesici, cotone, chavette, filo...).

INDISPENSABILI! Queste pinze invertite non rischiano di aprirsi spontaneamente e non bisogna lottare per aprirle. Ideali per la posa di perni, coni di guttaperca, matrici...

33 16100 Pinzetta Classic Kit Eco, 6 pz. € 135,00

33 16101 Pinzetta Classic, 1 pz. € 29,50



Perni moncone

Provisori

Pellet di cotone

Filo di retrazione

Pinzette Endo Tweezers



Le scanalature longitudinali e trasversali delle Endo Tweezers semplificano la manipolazione di tutti gli oggetti di forma cilindrica.


Sono ideali in particolare per trasportare coni di guttaperca, perni, punte di carta, ecc.

Oltre a beneficiare dei vantaggi offerti dalle Classic Tweezers (chiusura sicura e grande semplicità di apertura), queste pinze autobloccanti sono dotate di scanalature longitudinali e trasversali che consentono di maneggiare in modo ancora più agevole piccoli oggetti cilindrici (perni, coni di guttaperca, ecc.).


Diventano presto **INDISPENSABILI!**

33 11700 Pinzetta Endo Kit Eco, 6 pz. € 135,00

33 11701 Pinzetta Endo, 1 pz. € 29,50

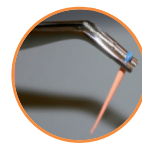


Coni di guttaperca

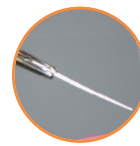

Punte di carta



Perni metallici

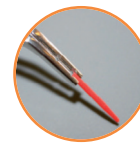


Perni in resina

Pinzette Geko Tweezers *Una presa senza apprensione*

Per manipolare anche le corone posteriori in tutta **sicurezza**

Geko Tweezers®

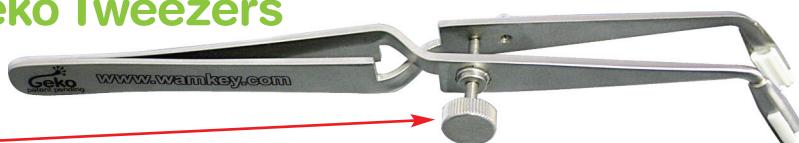

Vite di regolazione micrometrica: consente di regolare e di mantenere un'apertura costante tra gli attacchi e una pressione costante sull'oggetto che si trasporta.

La posa di una corona, persino su denti posteriori, diventa un gioco da ragazzi con le Geko Tweezers. Gli attacchi autoclavabili in silicone ultra morbido e la pasta adesiva Geko (fornita nel kit) consentono una presa perfetta e risparmio di tempo prezioso nell'eliminazione del cemento in eccesso.

Pinze incrociate (autobloccanti e autoclavabili) per la posa delle corone.

Nessun rischio di apertura inopportuna. Per aprire basta una semplice pressione. Attacchi adatti a ogni forma e superficie. La vite di regolazione micrometrica consente di gestire la pressione esercitata dagli attacchi sull'oggetto trasportato. Dispositivo brevettato.

Sicurezza e semplicità

Apertura e chiusura si ottengono senza il minimo sforzo. Sono finiti i tempi in cui il dentista si angosciava perché il paziente aveva ingoiato una corona!

Risparmio di tempo

1. Una perfetta presa della corona consente di applicare un isolante (es. vaselina, ...) sulle facce mesiale e distale per impedire che il cemento vi aderisca. Il cemento in eccesso si toglie istantaneamente.
2. Afferrato l'oggetto con le Geko, l'assistente ha le mani libere per altre operazioni.



33 16110 Pinzetta Geko
Kit completo
1 pinzetta
1 siringa di pasta Geko da 5 ml
20 attacchi Geko in silicone.

€ 190,00



33 16111 Attacchi Geko in silicone
morbidissimo, autoclavabili.
Garantiscono una tenuta perfettamente salda della maggior parte delle corone. Conf. 20 pz.

€ 35,00



Attacchi Geko in silicone morbidissimo. Garantiscono una tenuta perfettamente salda della maggior parte delle corone.



Pasta adesiva per la manipolazione delle corone complesse (profilo sfuggente) o di restauri indiretti (es. inlay o onlay).



Filmati clinici sul nostro sito

www.wamkey.com
www.ilicdental.com



33 16112 Pasta adesiva Geko, 5 ml
Per la manipolazione delle capsule complesse (profilo sfuggente, corone basse, ...) o dei restauri indiretti (di tipo onlay o inlay).

€ 35,00