

Ricerca e Selezione
Qualità & Tecnologia
per voi!

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE

GEMINI
Ultradent

GEMINI[®]

810 + 980 DIODE LASER

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



LUNGHEZZA D'ONDA DUALE.
UNICO NEL SUO GENERE.

IVAN ILIC' srl - Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano - T (+39) 02 36512990 - F (+39) 02 55016646 - ilic@ilicdental.com


www.ilicdental.com

UNICO NEL SUO GENERE

GEMINI 810 + 980 è il primo laser a diodi per tessuti molli, progettato negli Stati Uniti, disponibile con una lunghezza d'onda duale e con una potenza di picco di 20 watt. Il design elegante ed innovativo del display elettroluminescente e la semplice interfaccia utente contribuiscono ad identificarlo come l'ultima generazione dei laser a diodi.

■ TAGLIO PIÙ AGEVOLE E VELOCE

La potenza super pulsata con il picco di 20 watt e la breve durata degli impulsi permettono ai tessuti molli di raffreddarsi velocemente durante la procedura, evitando carbonizzazioni e stress termici (per un maggior comfort del paziente), garantendo allo stesso tempo velocità ed efficacia del taglio e permettendo una guarigione dei tessuti più rapida.

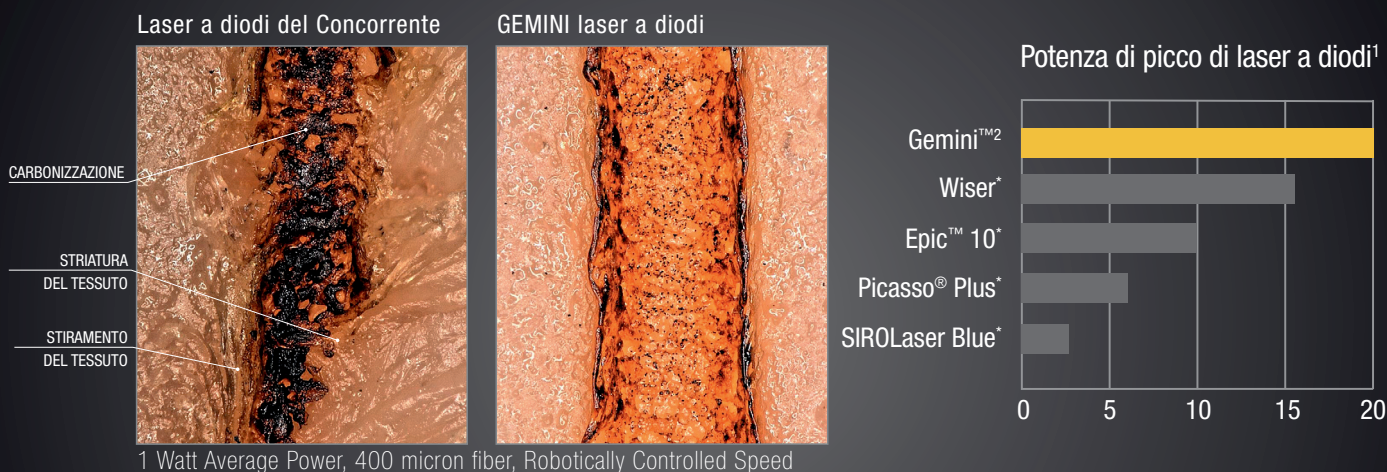

■ MAGGIORE VERSATILITÀ CLINICA

La lunghezza d'onda duale combina l'assorbimento ottimale della melanina alla lunghezza d'onda di 810 nm con l'assorbimento ottimale dell'acqua alla lunghezza d'onda di 980 nm. Il laser a diodi GEMINI può essere utilizzato anche selezionando singolarmente le lunghezze d'onda 810 nm o 980 nm.

■ DISPLAY TRASPARENTE ED ELETTROLUMINESCENTE

Il display trasparente ed elettroluminescente conferisce al GEMINI un design elegante ed innovativo che, unitamente alla semplice interfaccia utente, rendono questo laser a diodi unico nel suo genere. Inoltre, il comodo comando a pedale senza fili ed il funzionamento a batteria del laser, consentono un pratico spostamento da un riunito all'altro.

¹ Dati pubblicati dal fabbricante

* Wiser è un marchio commerciale di Lambda Spa - Mod. Funz.: CW, Pulsed, Super Pulsed; EPIC™ 10 è un marchio commerciale di Biolase Inc. - Mod. Funz.: CW, Pulse Modulation;

Picasso® Plus è un marchio commerciale di AMD Laser - Mod. Funz.: Customizable Continuous/Pulsed Modes; SIROLaser Blue è un marchio commerciale di Sirona Dental - Mod. Funz.: CW, Chopped Mode.

² Potenza di picco in modalità di lunghezza d'onda duale - Mod. Funz.: Super pulse.

■ COMODO E FACILE DA UTILIZZARE

PROCEDURE PRE-IMPOSTATE

19 procedure pre-impostate per le quali automaticamente il laser fornisce l'ottimale impostazione di potenza e impulsi. I parametri delle procedure pre-impostate possono essere personalizzati dall'utente.

FACILE STERILIZZAZIONE

Il manipolo è autoclavabile e le punte sono monouso.

ILLUMINAZIONE DELLA PUNTA

Il manipolo è dotato della illuminazione della punta che garantisce una migliore visibilità del sito chirurgico.



DISPONIBILITA' DI PUNTE MONOUSO

Sono disponibili punte attivate da 5 mm, come pure punte non attivate da 7 mm. Entrambe le tipologie sono monouso e sono curvabili per un migliore accesso al sito chirurgico.

SUPPORTO DA REMOTO

E' disponibile un servizio di assistenza da remoto per l'aggiornamento del software e per un primo livello di diagnosi del laser, riducendo tempi e costi di assistenza.

GENGIVECTOMIA

Casi a cura del Dr. Bob Miller in Park City, UT (USA)



Pre-intervento



Immediatamente post-intervento



30 giorni post-intervento

FRENULECTOMIA



Pre-intervento



Immediatamente post-intervento



30 giorni post-intervento

Guarda i video dei casi clinici



GEMINI®

810 + 980 DIODE LASER



8990 Kit Laser GEMINI
 1 alimentatore
 1 comando a pedale
 1 manipo
 10 punte da 5 mm
 3 set di occhiali di sicurezza

8991 Alimentatore GEMINI
 1 alimentatore

8992 Comando a pedale GEMINI
 1 comando a pedale

8993 Punta GEMINI 5 mm attivate
 25 punte da 5 mm

8994 Punta GEMINI 7 mm non attivate
 25 punte da 7 mm

8995 Occhiali di sicurezza GEMINI
 1 paio

8996 Involucro per manipo
 1 involucro per manipo

“Per anni ho cercato un laser che fosse non solo accessibile economicamente ma anche straordinariamente efficace nel taglio dei tessuti molli. Con il laser a diodi GEMINI 810+ 980, ho trovato quello che stavo cercando! Ultradent può finalmente offrire un laser a diodi unico nel suo genere, che coniuga un design elegante ed innovativo con la maggiore versatilità clinica della lunghezza d’onda duale e la potenza di picco di 20 watt super pulsata per un taglio veloce, facile ed efficace ad un costo accessibile a tutti.”

Dr. Dan Fischer - CEO Ultradent Products, Inc.