

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!

ilic SINCE 1949
QUALITY & VALUE

Woodpecker
ENDO 3



ENDO 3

Smart & funzionale: irrigazione più efficiente che mai

ENDO 3

~~€ 472,00~~

€ 330,00

Codice prodotto

59 213EN3



Tre livelli di potenza



Quattro settaggi
di tempo
10s, 15s, 2s, 10min



Manipolo wireless




Schermo LCD
trasparente



Controllo intelligente

Il circuito di oscillazione, facendo risuonare la punta ad alta frequenza e garantendo una bassa ampiezza nella vibrazione, assicura efficienza e stabilità delle performance all'interno del canale radicolare.

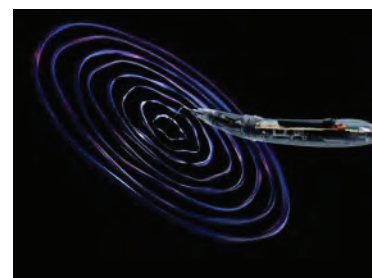

Prestazioni stabili Tracciamento intelligente

Sistema di monitoraggio della frequenza completamente automatico. Endo 3 cerca automaticamente il miglior status di lavoro.



Smart

Funzionamento cordless e ricarica a contatto magnetico. Compatto, leggero ed ergonomico.



Funzionamento chiaro e semplice

Schermo LCD per avere sempre sotto controllo tempistiche e potenza settati dall'utente. Pulsante di azionamento ad anello per un controllo immediato della macchina in qualsiasi posizione e angolazione.



Dimensioni	174x 26 x 36 mm
Frequenza di oscillazione degli inserti	40 Khz +/- 10Khz
Batteria al litio ricaricabile	750mAh - 3.6 V
Alimentazione	100-240V, 50/60 Hz.
Peso	78 g
Inserti in dotazione	2 acciaio, 2 titanio, 20 puntali in polimero