

Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!



Veracia SA ANTERIOR & POSTERIOR



Estetica eccellente
Notevole risparmio di tempo




Un'idea diventa realtà

Protesi funzionali, adeguate all'età del paziente, con un elevato comfort

Con lo sviluppo dei denti anteriori e posteriori semianatomici Veracia SA per la prima volta si è presa in considerazione l'usura dei denti naturali.

Si è partiti dalla linea di denti completamente anatomici Veracia. Si sono mantenute le caratteristiche funzionali dei denti Veracia e in settori esattamente predefiniti sono state inserite delle zone di abrasione.

Il risultato è una migliore efficacia masticatoria, un maggiore comfort della protesi stabilizzata e una minore sollecitazione dell'articolazione mandibolare.

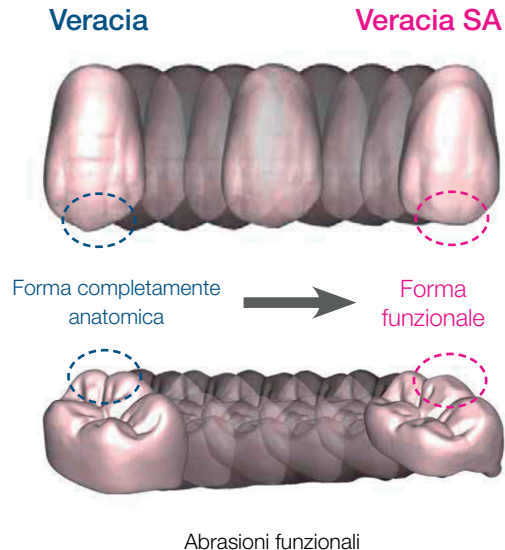

Montaggio per tutti i comuni concetti occlusali

Con Veracia SA non si è vincolati a nessun concetto di occlusione. I denti posteriori possono essere montati con gli antagonisti in modo semplice e preciso grazie alla ben delineata struttura occlusale, all'effettiva occlusione centrale e alle aree appositamente abrase.

- Occlusione bilanciata
- Occlusione lingualizzata
- Occlusione dente a dente
- Occlusione un dente a due denti




Design particolare delle superfici occlusali con spazi liberi fisiologici


Sulle superfici occlusali dei denti posteriori Veracia SA sono state appositamente inserite aree concave in corrispondenza dei movimenti funzionali della mandibola. Si sono mantenuti gli stop centrati dei denti posteriori completamente anatomici e si sono integrati gli spazi liberi corrispondenti.

Questa particolarità è la situazione di partenza ideale per un'occlusione bilanciata o lingualizzata cosicché dopo il montaggio non sono necessarie correzioni con il molaggio.

Questi spazi liberi aiutano inoltre i pazienti a trovare l'occlusione statica e riducono al minimo le forze di taglio laterali.

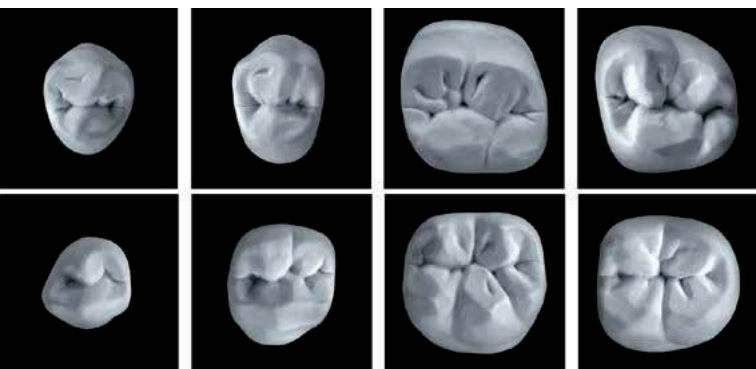


Solchi occlusali profondi, combinati con faccette d'usura per movimenti specifici, forniscono un allineamento semplice durante il montaggio ed una più efficace forza masticatoria della protesi.

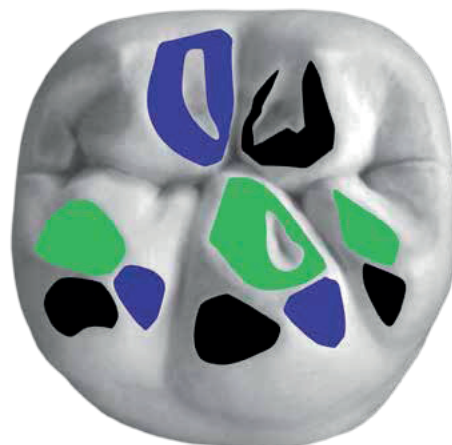

- Laterotrusione
- Mediotrusione
- Protrusione

Denti che si integrano tra loro perfettamente


La linea di denti Veracia SA migliora l'efficienza del lavoro quotidiano nella realizzazione di protesi. Grazie al particolare "design funzionale" il montaggio dei denti posteriori è praticamente immediato.

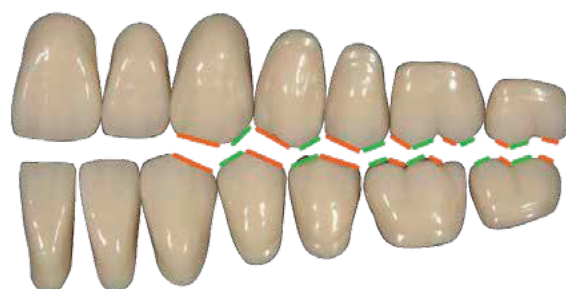

Uno, due, Q³ Pack ... fatto!

Estetica e funzione eccellenti con un notevole risparmio di tempo


Il design fisiologico dei denti posteriori Veracia SA ha permesso lo sviluppo di un particolare supporto della fila di denti privo di cera con un ausilio integrato per il montaggio: Q³ Pack. Si ottiene così per la prima volta un montaggio semplice dei denti posteriori con un'eccellente funzione sempre costante e sicurezza d'utilizzo, indipendentemente dal sistema d'articolatore usato.

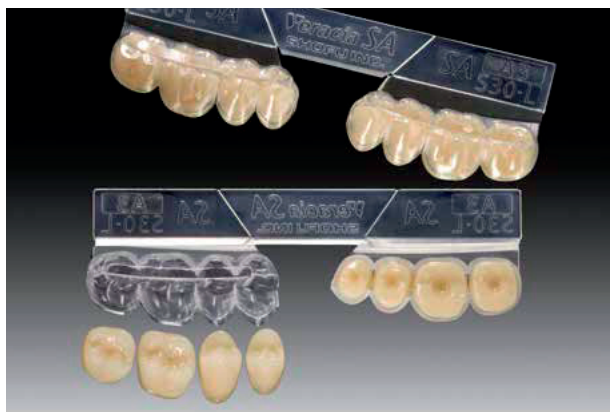

Q³ Pack riduce a pochi minuti il tempo di montaggio di otto denti posteriori Veracia SA. Non sono necessari lunghi tempi di preparazione o attrezzature complesse.

Q³ Pack è preciso ed assicura le corrette relazioni di contatto dei denti posteriori Veracia SA. Correzioni funzionali e molaggi sono ridotti al minimo.

Q³ Pack contiene singoli denti posteriori, che possono essere adattati individualmente nella loro posizione.

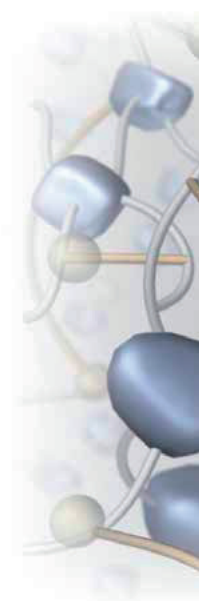

Solo 3 passaggi per un montaggio funzionale



1
Montare i denti anteriori e preparare i valli in cera secondo il metodo standard. Posizionare la cavità mesiale di Q³ Pack sul canino ed allinearla distalmente rispetto alla linea alveolare.



2
Controllare la corretta posizione dei supporti nell'allineamento orizzontale rispetto al piano occlusale e fissare i denti con la cera.



3
Esercitando una leggera pressione sul supporto si libera il montaggio.




Fatto
Chiedere gli spazi interdentali con un po' di cera ... fatto!



Eccellenti caratteristiche fisiche con la tecnologia del composito MF-H

I denti Veracia SA sono realizzati in composito ibrido microriempito (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), rinforzato con uno strato vetroso, proprio come i denti completamente anatomici della linea Veracia ormai consolidati. Questa struttura omogenea garantisce eccellenti caratteristiche fisiche ed una resistenza straordinaria.

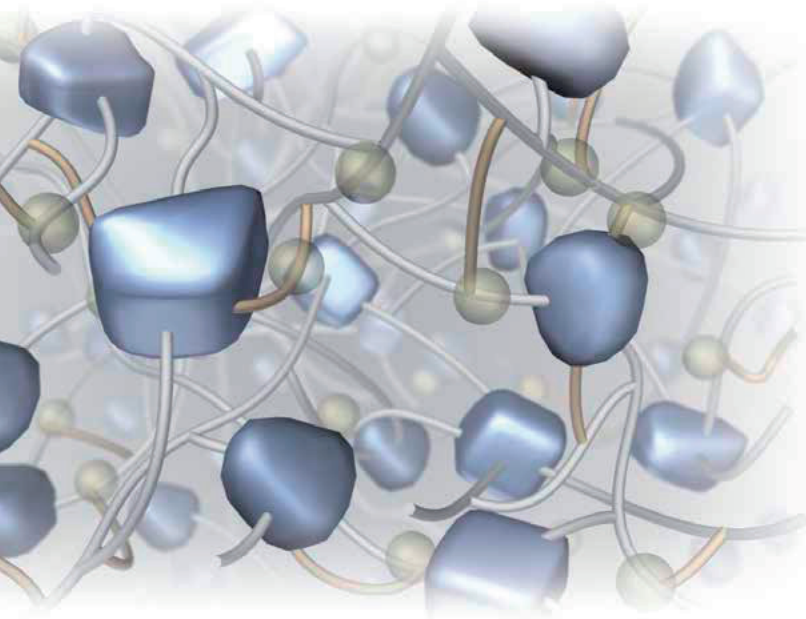

Perchè Veracia SA?

- Forme di denti in base all'età e alla funzione
- Nessun vincolo ad un determinato concetto d'occlusione
- Risparmio di tempo nel montaggio
- Occlusione bilanciata solo grazie al montaggio
- Elevata sicurezza d'utilizzo
- Realizzazione efficace nel laboratorio odontotecnico
- Qualità costante delle protesi realizzate

SEMPLICE

Nessuna attrezzatura complessa

EFFICACE

Fila di denti senza cera =
Supporto di montaggio

VELOCE

Nessuna perdita di tempo per
preparativi

PRECISO

Relazioni di contatti sempre corretti

INDIPENDENTE

Utilizzabile con tutti i tipi di articolatori

Il nuovo modo di montare i denti con **Q³ Pack** permette di risparmiare molto tempo.



Veracia SA Anterior

Moderni processi di produzione computerizzati garantiscono una simmetria sempre costante dei denti anteriori e posteriori di destra e di sinistra ed un corretto rapporto dimensionale.



Quadrato

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	
S7	51,2 11,0 9,4	



Rettangolare

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	
ST7	51,8 11,4 9,5	




Ovale

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	
O7	51,8 12,4 9,5	



Più abraso

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	
MA8	40,9 11,9 5,9	

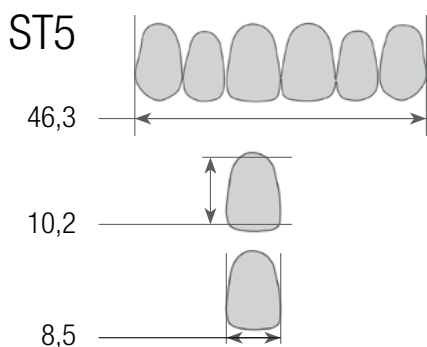

I denti anteriori e posteriori sono disponibili nei colori VITA* Classical A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 e nel colore SHOFU Whitening W1.


Q³ Pack è disponibile nei colori A2, A3, A3,5, B2, C2 e D2

Veracia SA Posterior & Q³ Pack


I denti posteriori Veracia SA sono disponibili come fila di denti su una stecca oppure come Q³ Pack senza cera.



S28	28,0 8,7		Veracia SA Posterior e Q ³ Pack
	30,0 8,9		
S30	30,0 9,4		Veracia SA Posterior e Q ³ Pack
	32,5 9,5		
S32	32,0 10,0		Veracia SA Posterior e Q ³ Pack
	34,5 9,9		
S34	34,0 10,6		Veracia SA Posterior e Q ³ Pack
	36,0 10,7		
S36	36,0 11,2		Veracia SA Posterior
	38,0 11,3		

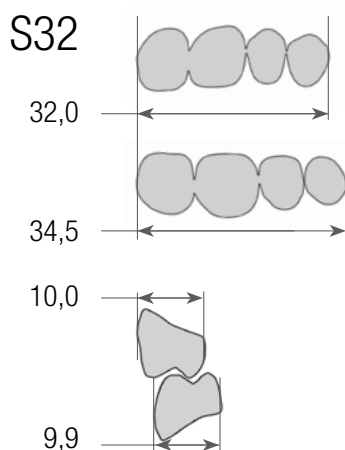

Consigli per denti anteriori SUP. / INF.

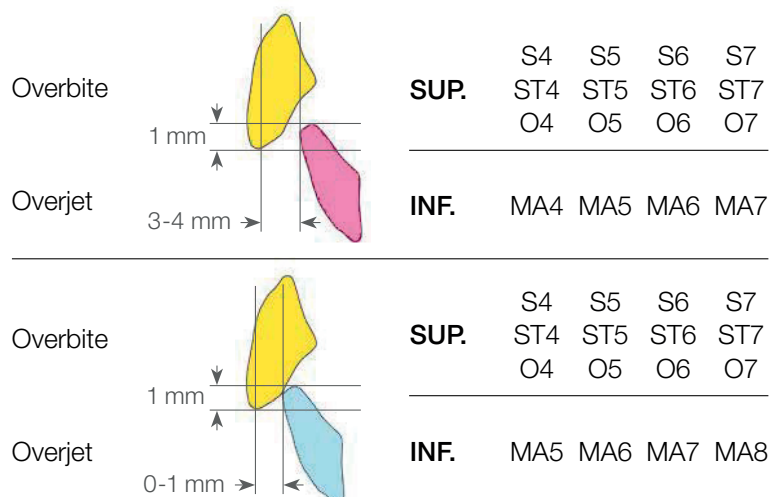

Tutte le misure sono espresse in mm

Veracia SA - Anterior

3 forme di denti SUP. nelle misure 4, 5, 6, 7

- S (quadrato)
- ST (rettangolare)
- O (ovale)

1 forma di dente INF. nelle misure 4, 5, 6, 7, 8

- MA (più abraso)



Veracia SA - 28 Teeth Set A2 / A3

1 fila di denti anteriori SUP. (ST6)

1 fila di denti anteriori INF. (MA6)

1 fila di denti posteriori **Q³ Pack** ciascuna
(SUP. / INF. misura 32)

PN A2ST66 / A3ST66

Veracia SA - Campionario forme

17 file di denti anteriori

(12 SUP. / 5 INF.)

8 file di denti posteriori

(S30, S32, S34, S36: 4 SUP. / 4 INF.)

disponibile in 4 colori

PN: LMSAXLA1, LMSAXLA2, LMSAXLA3,
LMSAXLA35

* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.

190204 - 09/2020



IVAN ILIC' srl
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646
ilic@ilicdental.com

 ilicdental.com