

NEODRYS®


Comprese con un lato assorbente
ed uno impermeabile.



Per il controllo definitivo della salivazione parotidea

**NeoDrys batte
la concorrenza per**

- Design,
- Confort e
- Valore

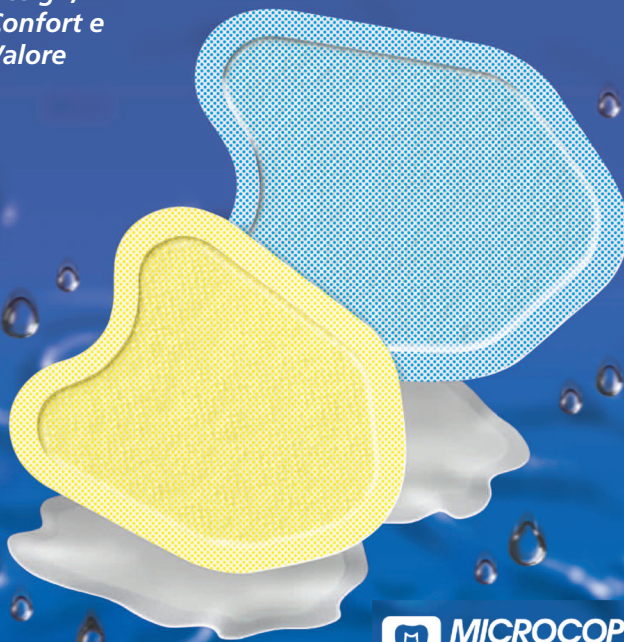

MICROCOPY
INNOVATIONS FOR DENTISTRY

- Forniscono una copertura completa dei dotti parotidei per almeno 15 minuti.
- Resistono all'umidità e proteggono la guancia.
- La capacità di assorbimento e la retrazione/protezione vestibolare li rendono unici e versatili.
- Il foglio vestibolare agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.




NeoDrys massimizzano l'efficienza e l'efficacia delle procedure attraverso il controllo del rischio di contaminazione da saliva parotidea, fornendo al contempo una protezione delle guance senza pari.

"Quando insegno ai possessori di CEREC suggerisco sempre i NeoDrys per un isolamento facile e rapido".

*Kevin Barrett, DDS
(DentalHighTech.com)*

NeoDrys batte la concorrenza

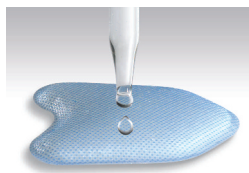


NeoDrys, grazie al nucleo interno blocca rapidamente l'umidità per fornire un campo asciutto superiore. Nessuno spandimento, nemmeno con il nucleo completamente saturato. Il rivestimento a prova d'umidità protegge le guance dall'abrasione e riflette la luce nell'area di lavoro. Con il nuovo bordo COMFORT EDGE® non c'è materiale rigido abrasivo che possa causare disagio al paziente. Assorbimento, protezione e confort rendono NeoDrys superiori ad ogni altro prodotto sul mercato.

Vantaggi di NeoDrys

- Nucleo super assorbente - dura molto più dei rulli di cotone e di altri tamponi e compresse assorbenti
- Fornisce copertura completa dell'orifizio parotideo e dell'intera mucosa vestibolare con una barriera poly film non tagliente
- Facilita il lavoro nelle aree più distali della cavità orale
- Il rivestimento vestibolare agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.
- Il modello con rivestimento vestibolare a specchio riflette la luce sull'area di lavoro
- Assenza di fibre lasche o altri residui nella bocca
- Efficace sostituto per la diga di gomma, che richiede tempo, per molte procedure
- Design flessibile e conicizzato per accomodare il movimento delle guance e renderli confortevoli per operatore e paziente
- Morbidi angoli COMFORT EDGE® per il massimo confort dei pazienti.
- Inizia ad aderire entro pochi secondi e resta in sede finché non viene rilasciato con abbondante spray d'acqua sul lato vestibolare.



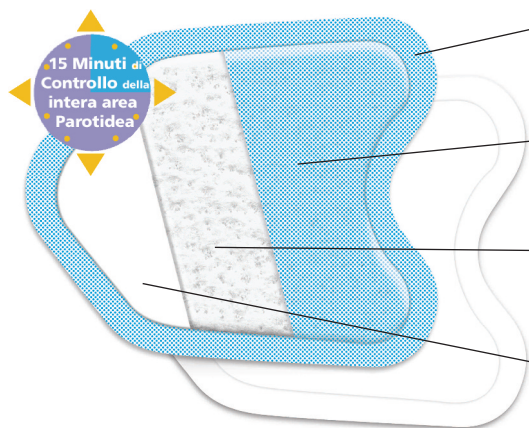

Comfort Edge - Senza "Ahi!"

Bordo tecnologicamente innovativo, morbido e flessibile mantenendo l'integrità del prodotto

Delicato sulla mucosa vestibolare

La maglia di grado medico aderisce delicatamente al tessuto.

Nucleo super assorbente

Quando a contatto con la saliva il polimero acrilato mantiene l'umidità, come un gel.

Irrigidente per il nucleo

L'inserto stabilizzante poly fornisce la rigidità ottimale per la retrazione delle guance.

NOVITÀ

Scelta Rivestimento Posteriore

Ora disponibile con nuova finitura a specchio, che migliora l'illuminazione oppure con la finitura bianca originale.



Rivestimento protettivo posteriore

Scelta del rivestimento barriera poly contro l'umidità tra il nuovo tipo a specchio che riflette la luce e l'originale bianco.

US Patent n. 7425664

Brevetto Europeo n. 1676552

Metodo di applicazione

Scegliere la misura di NeoDrys in grado di coprire adeguatamente la mucosa vestibolare. Inserire come illustrato, con il lato colorato contro la guancia e con la punta verso il fondo della bocca. In pochi secondi NeoDrys inizia ad aderire al tessuto e rimane in posizione.


Importante: per togliere senza irritare il tessuto, irrigare con abbondante spray d'acqua sul lato vestibolare del NeoDrys.

Misure codificate a colori

NeoDrys sono codificati a colori per facilitarne l'identificazione. Disponibili in due misure: Large (blu) e Small (giallo). Confezionati in pacchetti comodi e maneggevoli da 50 pezzi.




APPLICAZIONE NeoDrys

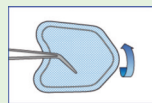

Lato colorato contro la guancia



Freccia verso il fondo della bocca

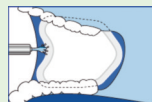

Rilascio con spray d'acqua

NeoDrys riflettenti

53 39411 Small Giallo/Specchio 50 pz.

53 39412 Large Blu/Specchio 50 pz.

NeoDrys normali

53 39401 Small Giallo/Bianco 50 pz.

53 39402 Large Blu/Bianco 50 pz.



Risparmiate tempo e danaro rendendo questi trattamenti più facili ed efficaci.

SIGILLATURE

Le sigillature non sono mai state così facili! Il rischio di contaminazione da umidità viene tenuto sotto controllo senza ricorrere alla diga.

COMPOSITI

Ottimizzate l'asciuttezza necessaria per l'adesione dei compositi ed il sigillo marginale senza utilizzare la diga.

CEMENTAZIONI

Mantenete efficacemente il campo asciutto necessario per procedure di cementazione.

IMPRONTE

Migliorate l'accuratezza dei materiali d'impronta attraverso il controllo della contaminazione salivare.

AGGIUSTAMENTI OCCLUSALI

Evitano l'alterazione da umidità delle marcature ottenute con le carte per articolazione.

RICOSTRUZIONE DI MONCONI

Il corretto isolamento ed un campo asciutto sono essenziali per l'applicazione degli adesivi e dei materiali ricostruttivi.

PREPARAZIONI CAD/CAM

Ottimi per preparazioni CAD/CAM! Tengono sotto controllo l'umidità e retraggono la guancia durante l'applicazione della polvere o la ripresa delle immagini.

PREPARAZIONI DENTARIE

Il controllo dell'umidità e l'efficace retrazione e protezione della guancia ottimizzano queste procedure.

LASER

La maggior parte delle procedure laser richiede un campo asciutto e attenzione al confort del paziente, particolarmente a causa dell'eliminazione dell'anestesia.

APPLICAZIONI DI FLUORO

Le applicazioni di fluoro vengono rese più efficaci perchè si previene la diluizione del gel da parte delle ghiandole salivari.

ORTODONZIA

Quando l'intera area parotidea viene mantenuta asciutta le procedure di adesione sono più facili e rapide, sia per l'arcata superiore che per quella inferiore.



DYDL 1003

Importatore esclusivo e distributore



Italia Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646
Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48
Croazia 52223 Rasa Ulica N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454
www.ilic.it e-mail ilic@ilic.it

Azienda Certificata ISO 9001:2000

SOLO PER ORDINI

