


Dental Boutique



ESTETICA SENZA LIMITI

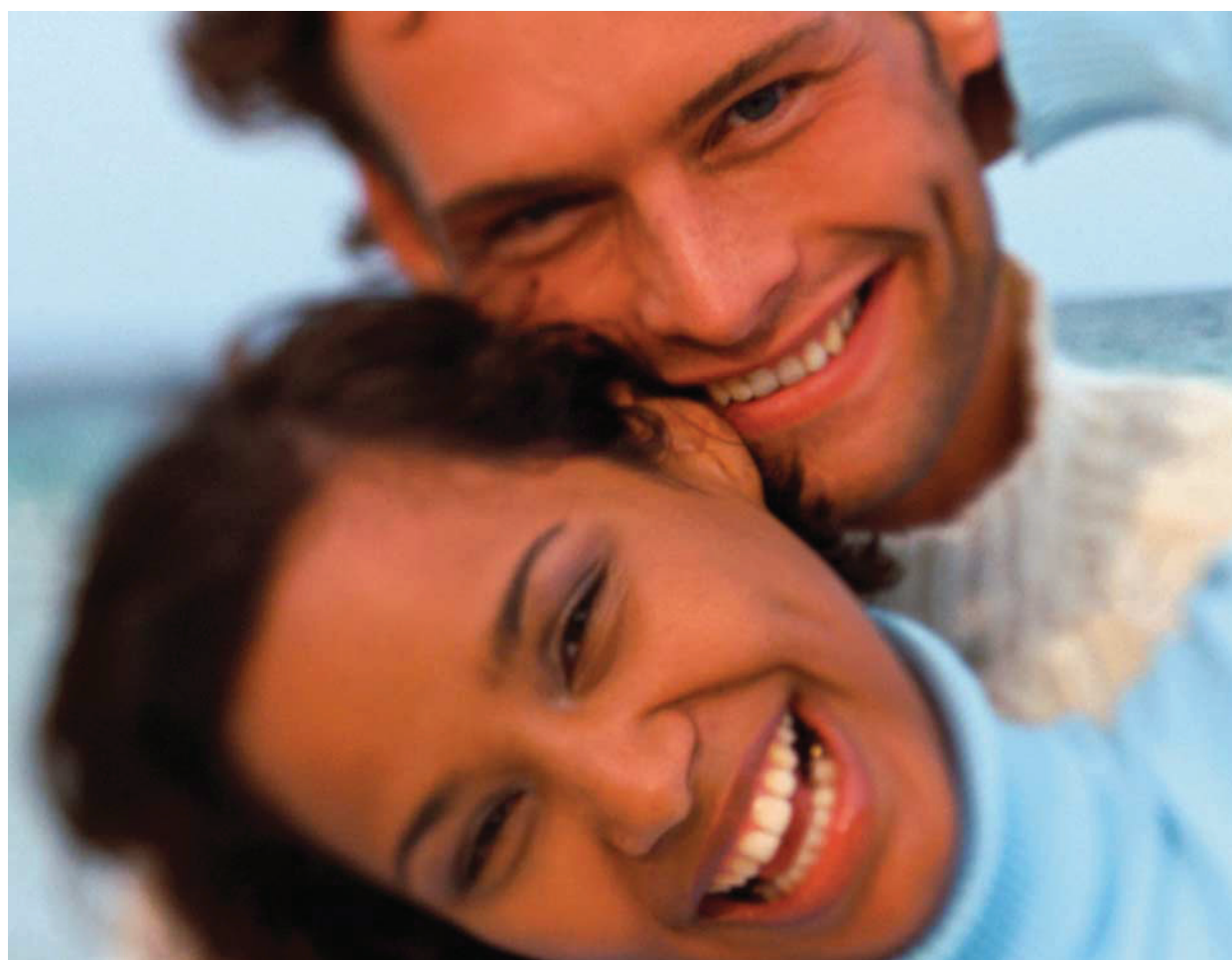

LE RICOSTRUZIONI PRIVE DI METALLO REALIZZATE
SU ARMATURE ULTRA-RESISTENTI IN OSSIDO DI ZIRCONIO
SONO SEMPRE PIÙ DIFFUSE

www.ilicdental.com

ESTETICA NATURALE PERSONALIZZATA P IN OSSIDO DI ZIRCONIO PRODOTTE AL CO

Le protesi estetiche prive di metallo realizzate su armature ultra-resistenti in ossido di zirconio sono sempre più diffuse.



VINTAGE ZR è stato sviluppato appositamente per questo tipo di armature, sfruttando le più recenti ricerche nel campo della tecnologia della ceramica.

L'associazione di questi materiali ceramici offre illimitate possibilità per la produzione di corone e ponti dall'aspetto naturale e gradevole.

La struttura particolarmente fine e omogenea delle masse ceramiche **VINTAGE ZR**, assicura una riproduzione naturale del colore, anche nel caso di strati molto sottili.

Adesione perfetta




Gli Opaque Liners appositamente sviluppati, assicurano una perfetta adesione alla struttura in ossido di zirconio e permettono una colorazione personalizzata per ogni paziente. E' così possibile ottenere una perfetta corrispondenza del colore con strati sottili.



PER STRUTTURE COMPUTER

Naturalizza espressiva

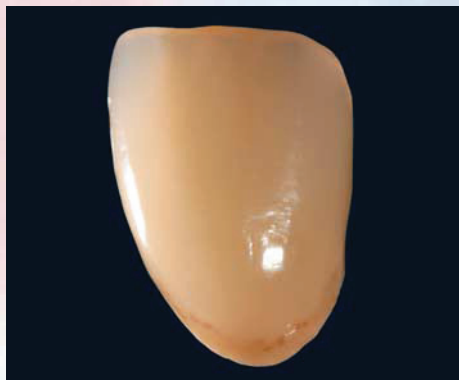

Grazie alla struttura microfine delle masse Incisali opalescenti e Translucenti **VINTAGE ZR** ha proprietà ottiche simili a quelle dei denti naturali.

Grazie a questa caratteristica esse possono modificare il proprio aspetto al variare delle condizioni di luce e apparire sempre espressive e naturali.

VINTAGE ZR offre i vantaggi della sua versatilità:

- Eccellente corrispondenza cromatica con i denti naturali
- Ampie possibilità di applicazione per tutti i tipi di armature per ponti e corone in ossido di zirconio
- Cottura economica grazie alla costante stabilità del coefficiente di espansione termica
- Ottime proprietà adesive grazie agli Opaque Liners ad alta fusione pronti all'uso
- Tecnica VINTAGE a due strati, semplice ed economica
- Ampia gamma di masse Translucenti, Incisali ed Effetti
- Masse Cervicali e Marginali con intensa fluorescenza
- Campioni colore realizzate con masse ceramiche originali cotte
- Colori corrispondenti al sistema colore VITA* Classic

* VITA è un marchio commerciale registrato di VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

Si ringrazia German Bär, ZTM, St. Augustin, Germania, per la gentile collaborazione e per aver fornito il materiale fotografico.

VINTAGE ZR System - Assortimenti

VINTAGE ZR AB Set

Cofanetto introduttivo alla tecnica VINTAGE ZR; questo assortimento economico comprende i colori dei gruppi A e B

VINTAGE ZR CD Set

Assortimento masse a completamento dell'assortimento VINTAGE ZR AB

VINTAGE ZR Enamel Effect Set

Per effetti individuali nell'area incisale grazie all'uso di masse opalescenti e itranslucenti per Effetti Incisali

VINTAGE ZR Color Effect Set

Effetti naturali per caratterizzare le masse Dentina e Cervicali

VINTAGE ZR Margin Porcelain Set

Margini ben aderenti e dall'ottimo aspetto estetico

VINTAGE ZR Whitening Set

Set colori "sbiancati" per gradazioni più brillanti rispetto a quelle "classiche"



Panoramica delle caratteristiche tecniche

(In base alla normativa EN ISO 9693/2000)

Anche dopo numerose cotture VINTAGE ZR si espande in modo omogeneo e mantiene una perfetta adesione alle armature in ossido di zirconio.

		Coefficiente di espansione termica (25 ~ 500 °C)	Punto di trasformazione del vetro
Opaque Liner	2. / 4. Cottura	$9,3 \times 10^{-6} K^{-1}$	620 °C
Margin	2. / 4. Cottura	$9,3 \times 10^{-6} K^{-1}$	635 °C
Body	2. / 4. Cottura	$9,4 \times 10^{-6} K^{-1}$	605 °C
Cervical Trans.	2. / 4. Cottura	$9,4 \times 10^{-6} K^{-1}$	595 °C
Correction	2. / 4. Cottura	$9,4 \times 10^{-6} K^{-1}$	585 °C