

Dental Boutique



VINTAGE PRO

Pure Inspiration



www.ilicdental.com

Professionale estetica


Risparmio di tempo

Ottimizzazione delle caratteristiche

Basata sui sistemi ceramici Vintage ad elevato punto di fusione, la nuova metalloceramica Vintage PRO si contraddistingue per una maggiore efficacia ed estetica. Le eccellenti caratteristiche delle metalloceramiche SHOFU già apprezzate sono state ulteriormente sviluppate e si è combinata la ceramica con nuovi materiali, per garantire risparmio di tempo, maggiore sicurezza, stabilità nel processo di cottura ed un effetto cromatico naturale ed opalescente.

Maggiore sicurezza

- Compatibile con le leghe per ceramica convenzionali e CAD/CAM con un CET di 13,5 - 14,8 x 10⁻⁶ K⁻¹ (25 - 500 °C)
- Eccellente fedeltà cromatica e stabilità della forma in cottura - anche dopo parecchie cotture
- Valori d'adesione superiori alla media con tutte le leghe per ceramica con l'uso di Base Opaque di colore arancione

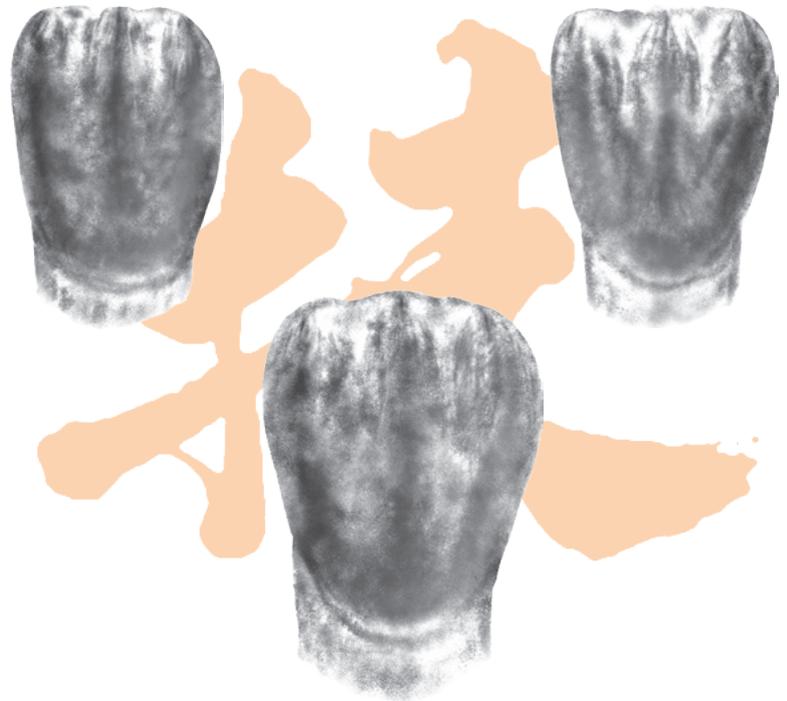

Maggiore efficacia

- Estetica professionale e lavorazione semplice con la tecnica a due strati modificata
- Nuovi opachi in polvere ultra-fini con straordinarie caratteristiche di lavorazione ed elevata forza coprente
- Ottimali caratteristiche di lavorazione

Maggiore versatilità

- Ampia gamma di masse effetto opalescenti e fluorescenti
- Sistema cromatico naturale in grado di riprodurre tutti i colori della scala colori VITA[®] Classical
- Colori Bleaching per completare il sistema (colori Whitening)




*„Ritornare a concetti semplici!
Secondo me, Vintage PRO
combina la semplicità di un
concetto ceramico con tutte le
possibilità estetiche. Ciò garantisce
una maggiore libertà creativa nel
mio lavoro quotidiano.“*

*Yoshimi Nishimura, C.D.T.,
Osaka, Giappone*

Per principianti e ceramisti esperti


Il sistema Vintage PRO è caratterizzato da un utilizzo semplice che esclude la possibilità di errori. Tutte le singole masse sono tra loro accordate in modo sistematico. Vintage PRO permette di realizzare restauri estetici già con una tecnica a due strati modificata, paragonabile alla struttura di dentina e smalto dei denti naturali.

Stratificazione standard con masse opalescenti

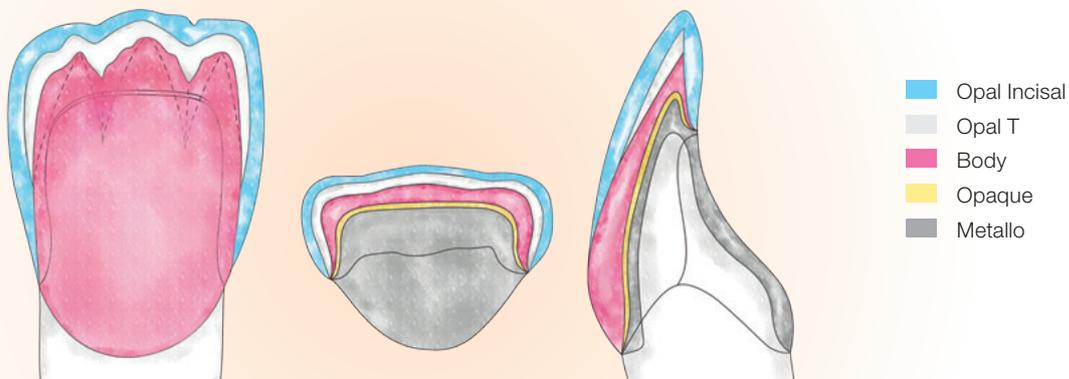

Lasciatevi ispirare

Oltre alle masse per la stratificazione standard, il sistema Vintage PRO comprende una vasta gamma di masse individuali, altamente fluorescenti per spalle e aree cervicali, masse effetto opalescenti e traslucenti per una configurazione personalizzata delle zone incisali. Con questa gamma di colori si riescono a realizzare tutte le caratterizzazioni e richieste estetiche.

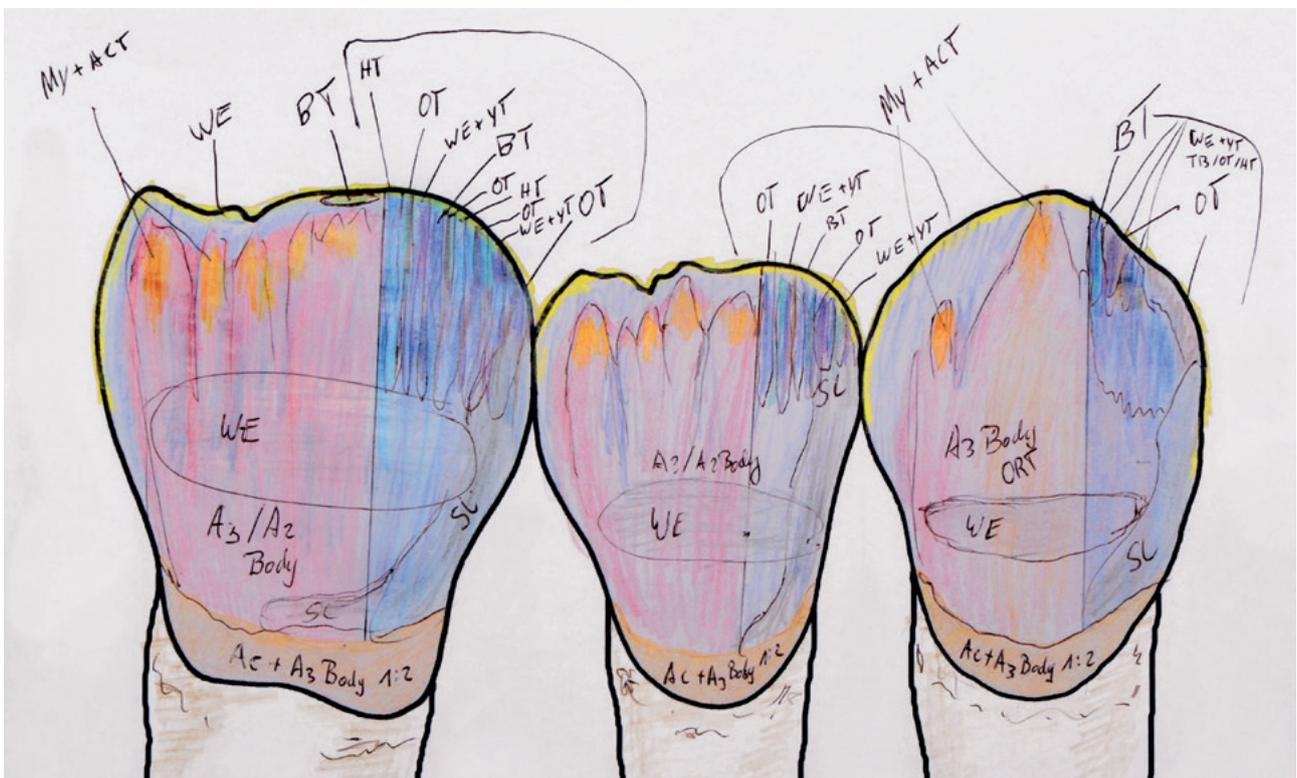

Maggior estetica – minor impegno

Le caratteristiche ottiche dei denti naturali vengono riprodotte in modo semplice e preciso con le masse opalescenti incisali e masse traslucenti, con un impegno minimo.



Disegno e restauro realizzati da MDT German Bär, St. Augustin, Germania

Maggiore varietà di leghe

Vintage PRO, con una temperatura di cottura di circa 900 °C, è particolarmente indicata per il rivestimento di strutture in leghe non preziose, ma può anche essere usata per rivestire in modo semplice ed estetico leghe ad alto e basso contenuto aureo o a base di palladio. Il sistema è adatto anche per l'uso su strutture in metallo realizzate con CAD/CAM o con processo di sinterizzazione.

Vintage PRO	CET [$\times 10^{-6}K^{-1}$] (25-500 °C) 2 ^a cottura	CET [$\times 10^{-6}K^{-1}$] (25-500 °C) 4 ^a cottura	TG Temperatura di transizione vetrosa (°C)
Base Opaque Polvere	11,5	11,5	598
Shade Opaque Polvere	12,4	12,4	594
Base Opaque Pasta	11,5	11,5	598
Shade Opaque Pasta	12,4	12,4	594
Margin	13,0	13,0	594
Cervical, Body, Opaque Dentin, Opal, Incisal, Opal Effect, Enamel Effect, Color Effect, Translucent, Gum	13,0	13,0	580
Correction	11,0	11,0	585

Vintage PRO soddisfa le norme ISO 6872:2015 (Tipo I, Classe 1 ceramica) e ISO 9693-1:2012. Vintage PRO soddisfa i requisiti degli standard: resistenza alla flessione ≥ 50 MPa, solubilità chimica $< 100 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ e adesione /resistenza alla formazione di crepe ≥ 25 MPa.

Massima semplificazione

Il sistema ceramico Vintage PRO, semplificato al massimo, contiene tutti i componenti per la riproduzione dei 16 colori VITA* Classical, 4 colori Whitening SHOFU e diverse masse fotodinamiche opalescenti, traslucenti, masse effetto e marginali.

Colore	W0	W1	W2	W3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
Base Opaque	BASE																				
Shade Opaque	W0O	W1O	W2O	W3O	A1O	A2O	A3O	A3,5O	A4O	B1O	B2O	B3O	B4O	C1O	C2O	C3O	C4O	D2O	D3O	D4O	
Cervical					A3B:2 AC:1				A3,5B:1 AC:1	A4B:1 AC:1	B3B:1 BC:1			BC	C2B:2 CC:1		C3B:1 CC:1	CC	D2B:1 DC:1	D3B:1 DC:1	BC:1 DC:2
Margin	W0M	W0M:2 NM:1	W0M:1 NM:2	W3M	A1M	A2M	A3M	A3,5M	A4M	NM:1 B2M:1	B2M	B2M:1 B4M:1	B4M	NM:1 C2M:1	C2M	C2M:1 C4M:1	C4M	NM:1 D3M:1	D3M	D3M:1 D4M:1	
Opaque Dentin	OD-W0	OD-W0:2 OD-N:1	OD-W0:1 OD-N:2	OD-N	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3,5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4	
Body	W0B	W1B	W2B	W3B	A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B	
Opal	OPAL55	OPAL56	OPAL56:2 OPAL57:1	OPAL56:1 OPAL57:2	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL59	OPAL60	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL60	OPAL58	OPAL58	OPAL59	OPAL60	OPAL58	OPAL59	OPAL60	
Incisal	58 58 59 59 60 57 58 59 60 58 58 59 60 58 58 59 60 58 59 60																				
Enamel Effect	T																				
Opal	OPAL55	OPAL56	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL60	Opal Effect														
Incisal	57	58	59	60	Enamel Effect																
Margin Effect	CLM	LPM	DPM	OrM	BrM	MLM	MDM	Color Effect													
Cervical	AC	BC	CC	DC	Opaque Modifier																
Gum	Gum-LP	Gum-DP	Gum-V	Gum-Or	Gum-R	Gum-P	Correction														

Vintage PRO è il risultato di una collaborazione mondiale di odontotecnici nazionali ed internazionali.



„Grazie all'elevata stabilità cromatica, la ceramica Vintage PRO mi permette di realizzare restauri in modo veloce e sicuro in base alla scala colori VITA* Classical. Essendo inoltre un materiale estremamente omogeneo, non si hanno più problemi di crepe e bolle.

L'utilizzo dei nuovi opachi in polvere migliora ulteriormente l'adesione con i metalli non preziosi. Nel mio laboratorio sono già state rivestite senza problemi più di 500 strutture in metalli non preziosi realizzate con CAD/CAM. Vintage PRO è quindi un partner sicuro per il mio laboratorio.“

Martin Gesele, MDT & Aesthetician, Aschaffenburg, Germania



„Da sempre la più grande sfida per un ceramista è la riproduzione dell'aspetto naturale del dente al variare della luce. Opalescenza, fluorescenza e colori naturali dei denti sono caratteristiche fondamentali, ottenibili con le ceramiche di SHOFU già a partire dagli anni '80.

Ora SHOFU, avvalendosi del continuo dialogo con gli odontotecnici, ha sviluppato una metalloceramica innovativa, capace di soddisfare esattamente tutte le loro esigenze: Vintage PRO è la ceramica della prossima generazione – dagli odontotecnici per gli odontotecnici.“

Nikolaos Mekias, MDT, Atene, Grecia

* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania

Informazioni per gli ordini



Basic Build Up Set

Per la realizzazione di restauri metalloceramici nei colori da A1 a A4, B2, B3 e D3
(Nel set non sono compresi opachi in polvere o in pasta).

PN P0501



Basic Powder Opaque Set

Opaco in polvere micro-fine per mascherare le strutture in metallo nei colori da A1 a A4, B2, B3 e D3

PN P0502



Basic Paste Opaque Set

Opaco in pasta pronto all'uso per mascherare le strutture in metallo nei colori da A1 a A4, B2, B3 e D3

PN P0503



Starter Set A2/A3 Paste Opaque

Contiene tutti i componenti per la realizzazione di restauri nei colori A2 e A3

PN P0504



Enamel Effect Set

Masse incisali e traslucenti per una diffusione della luce individuale e naturale nell'area incisale

PN P0507



Color Effect Set

Per caratterizzazioni nella dentina e nell'area cervicale

PN P0508



Margin Set

Masse spalla altamente fluorescenti nei colori da W0 a D4 e diverse masse effetto

PN P0509