


**ENDODONZIA**

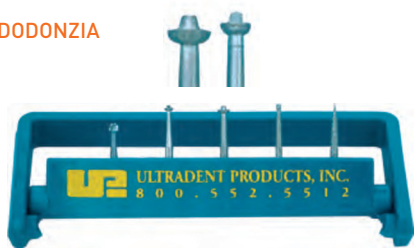

**RIITANO ACCESS**  
Frese di Accesso

Contenuto: 1 Fresa car-buro tonda, 4 Diamantate: Bottone, Acorn S, Acorn L, Conica per rettifica, 1 Portafrese autoclavabile

29 1K562 Riitano Kit, 5 pz.  
€ 110,10 ad esa. € 29,00

Accesso iniziale con fresa al carburo a pallina n. 6.	Allargamento alla camera pulpare con i lati della diamantata conica a punta non tagliente.	Rimozione tetto camera pulpare in uscita, con diamantate Acorn.	Rettificazione con la diamantata per l'accesso in linea retta.

**ENDODONZIA**



**NaviTip ULTRADENT** Cannule per detersione e applicazione

Gli ultimi 5 mm sono morbidi e flessibili ed il bordo è arrotondato per guidare NaviTip lungo i canali curvi senza schiacciarsi.

46 141351 NaviTip 30 gauge. Kit assortito, 20 pz. (5 x tipo)  
€ 43,40 ad esa. € 20,00

**ENDODONZIA**




**Endo-Eze ULTRADENT** Cannule flessibili per endodonzia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabile anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer Vacuum (46 1230).

46 14552 Endo-Eze 1,9 cm - 20 pz. kit assortito ad esa  
5x 18 ga/1,25mm 19ga/1,06mm 20ga/0,90mm 22ga/0,70mm  
€ 15,50 ad esa. € 5,00

Attacco Luer

**ENDO-PARODONTOLOGIA**

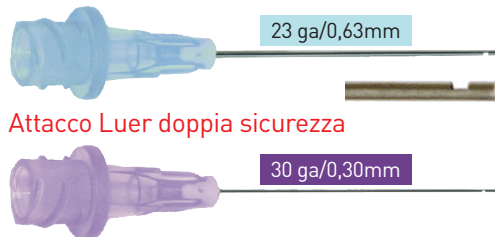


**Vista-Probe Irrigation Sec-Lock VISTA DENTAL**

Ago pieghevole per irrigazioni automatiche di siti chirurgici subgingivali e solchi. Ago 2,54 cm ad estremità chiusa e con sbocco laterale. Ideale anche per l'uso in prossimità dell'apice canalare.

23ga/0,63mm	30ga/0,30mm	80pz € 138,00 ad esa € 35,00
46 724623	46 724630	

**ENDODONZIA**

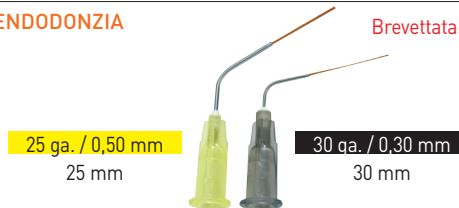

**FLEXI-GLIDE VISTA**

• Per irrigare, applicare e micro-aspirare • Piegabile per facilitare l'accesso.

Flexi-Glide	20 pz. € 57,00 € 35,00	50 pz. € 95,80 € 75,00
FLG 2,5 cm	46 746520	
FLG 3,0 cm	46 746320	46 746350

**TRATTAMENTO DEI TESSUTI**




**SOL-U-FLO™ VISTA**

• Pre-piegata (19 ga / ø 1,06 mm) • Punta curvata per un accesso ottimale nel trattamento dei tessuti • Estremità in morbide fibre di nylon per la distribuzione delle soluzioni viscosi evitando il contatto della cannula metallica con i tessuti molli.

46 722202 Sol-u-Flo 19 ga, 20 pz € 23,50 ad esa. € 5,00


**IMPRONTA**

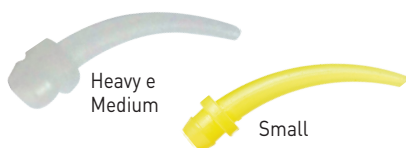

**Puntali terminali intraorali**

46 452091 Terminali per puntali miscelatori Heavy e Medium, trasp. 48 pz.  
€ 26,50 ad esa. € 9,00  
46 053090 Terminali per puntali miscelatori Small, gialli 100 pz.  
€ 23,60 ad esa. € 9,00

**ORTODONZIA**

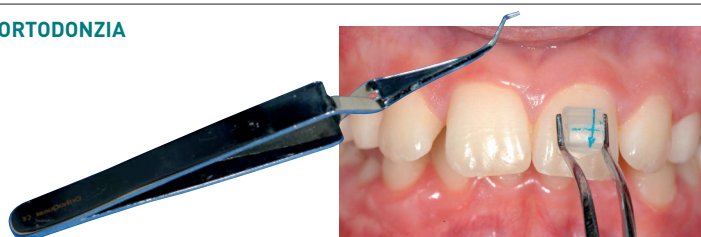

**PINZETTA VL Azione Inversa**

**PERIODENT**

Premendo le punte si aprono, rilasciando le punte si chiudono.

• Per l'agevole posizionamento degli attacchi e dei tubi vestibolari.

58 055345R Pinzette VL € 29,50 ad esa. € 12,50



## MODELLATORI CARVERS

PERIODENT Hi-Tech



**Per ordinare: [ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) - tel +39 02 36 512 990**

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna				
P.IVA	C.Fisc.		e-mail	

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

**Giorni di apertura:** **Mattino L M M G V S** **Pomeriggio L M M G V S** +iva a norma di legge

**Contributo spese spedizione:** Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese  
 Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50

**PAGAMENTO:** Ordini inf. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  
 Ordini sup. a € 140,00 (i.e.):  Bonifico anticipato  Carta di credito o POS  R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

**IBAN Ivan Illic' srl: IT50N0569601625000003415X03**

**IBAN Cliente:**

Carta di credito o POS  Visa  Mastercard Numero

Scadenza

DATA

TIMBRO E FIRMA