

20 Aprile - 15 Settembre 2026


ref. 6PE1



dal 1949
al servizio della
Comunità
Odontoiatrica

ABBIAMO SELEZIONATO DA:

- Sbiancamento
- Postura e Arredamento
- Ingrandimento e Gestione delle immagini
- Trattamento dei tessuti
- Impronta
- Anestesia
- Diga & Isolamento
- Conservativa
- Endodonzia
- Fibre di rinforzo
- Protesi • Articolazione
- Strumentario a mano
- Strumenti rotanti
- Apparecchiature
- Gestione Strumentario & Materiali
- Barriere e monouso
- Controllo delle infezioni
- Igiene e Profilassi

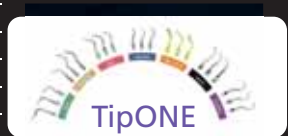

ILIC' dal 1949 al servizio della Comunità Odontoiatrica, ricerca e seleziona Qualità & Soluzioni per voi!



ilicdental.com



INDICE

ARREDAMENTO 3

• Seggiolino a sella Bambach.

INGRANDIMENTO E GESTIONE IMMAGINI 3-6, 60, 67

Bite Cushion X-Ray (60) • Eye-Special C-V (3) • **Keeler**: Galileiani, Hi-Res, Prismatici (6) • Peel'N'Stick (67) • Specchi e specchietti (5) • Transilluminazione (3) • Visor Loop (4).

Sbiancamento 7

Meodontal Natural+ • **Ultradent** GO, Opalescence Boost.

IGIENE e PROFILASSI 7-12

Beautisealant, sigillante (11) • Drappi PerioSafe (10) • Enamelast, vernice al fluoro (11) • **Lucidatura**: Quartz, Reciproxy, Coppette montate (12) • **Meodontal** Sbiancanti Natural+ (7) • Opalescence GO, Boost (7) • **Periodont**: Punte ultrasuoni TipOne (8-9) • PerioProx Scovolini (10) • Pink Petal (19) • SE-Cushion (19) • SuperSeal (2) • **Ultradent**: Dentifrici Opalescence (10) • UltraDEX (10)

EMOSTASI e RETRAZIONE, IMPRONTA 11-12

Emostatici: Alustat, GingiTrax, TCA Dent (13) • **Fili di retrazione**: Best Cord Nano, Easy Cord, (13) • GingiRex (13) • **Alginati**: Idrogum, Image (14) • PVS: Mach 2, Blu Mousse (14) **Portaimpronte** Blue (14).

ANESTESIA 15-16

• **Milestone**, **STA** • **Chech-Film** PERIODENT, Siringhe • **Ronvig** Calaject.

DIGA E ISOLAMENTO 17-20

• Cannule per siringa aria acqua (20) • **Diga**: Periodam, Kit, Insti-Dam (17) • Diga chimica (18) • Lingua Fix (19) • NeoDrys (20) • **OraSeal** Ultradent (19) • Pink Petal (19) • Puntali aspiranti Safe Tip (20) • Rulli salivari (20) • SE-Cushion (19) • Uncini **Ivory** outlet (18).

CONSERVATIVA e ADESIONE 21-28, 29, 67

A-Dapt (27) • Blu Etch (24) • **CompoSculp** Periodent (27) • DiaGlaze (28) • **Dura Green** e Dura White Outlet (29) • **Elsodent**, compositi BIO, PureShade, Healbond, PreFill (21) • Fender Wedge (23) • HALO Matrici sezionali (23) • Logi Bloc (24) • Portamatrici **Brenner** (24) • Shofu (24, 25, 28, 29): Compositi Beautifill, Adesivo Beauty Bond Xtreme, One Gloss Super-Snap • **Separatori** Elliot e Ivory **Periodent** (23) • Super Brush (27) • Vittra Unique FGM (25) • Manipoli contrangoli PERIODENT (67).

ENDODONZIA 29-40

• **Access Cavity** (35) • Ai-Pex (35) • **Avalon** (42): NeoSealer, NeoPutty, NeoMTA2 • **B&L Biotech**: Alpha, Beta ((40, 42), Retrattori Kim (42) • **Blue di metilene** Canal Detector (31) • Chloraxid, irriganti • Endo Aspirator (39) • Digitest (31) • EDTA (37) • Frac Finder • Iodoform, pasta iodoformica (38) • Irriganti (35-37) • **Neolix** EDMAX (32) • **Nic X+** File (34) • Orange Guttane (36) • **Outlet** Endo (30) • Perni in fibra (39)

• Pulp Spray (31) • **QV ENDO** (32-33) • Stropko (38) • TipOne **Periodent**: Inserti Ultrasuoni (41) • **Woodpecker** AiPex (35, 38, 41) • Endo3 (38), DU 600 (41).

PUNTALI, Aghi, APPLICATORI, SIRINGHI 43, 67

Aghi per irrigazione (35-37) • **Denbur** (41) • Intra Oral Syringe (41) • Stick Placer (41).

FIBRE DI RINFORZO 44

• **Ribbond**, Fiber Wetting Resin.

PROTESI 26-28 • 44-51

DentoPrep (44) • **Dust-X** (49) • Elsodent Bio, Core D, Innocem, SealTemp, Phoenix (22) • **Hoffman** (51) • J-Temp (51) • Prosper: F.A.P. (45, 46) • Richwil (49) • **Shofu** (46-48, 50, 51) • StarDust (49) • **Periodent** Wynman (49) • Ultra Glaze Temp (46) • **WAM**: MD-guide, WamKey (53).

ARTICOLAZIONE e GNATOLOGIA 51-53

Arti-BruX • **Aqualizer** • Leaf Gauge • Spot-IT.

IMPLANTOLOGIA e RIGENERATIVA 53

• MD Guide.

STRUMENTARIO A MANO 27, 40, 47, 49, 54-56.

B&L: S-Kondenser (40) • **CompoSculp** PERIODENT (27) • Codificatori Ez-Tape e Ring (58) • **Chu** Aesthetic Set (47) • Opera (49) • Strumentario e Outlet (47-49) • **Swann-Morton** Lame chirurgiche (56).

STRUMENTARIO ROTANTE e LUCIDANTI 28-24, 27-28

• Compo Master (23) • Dura Green/White (24, 28) • DiaGlaze (28) • OneGloss (28) • Shofu (28,29, 46-48) • Super-Snap (28) • **Ultra Glaze** (43).

APPARECCHIATURE 3, 15, 16, 26, 31, 35, 41-49, 66, 68

• **Anestesia** (19,20): CalJect, STA (5, 164) • D600 (39) • **Endodonzia**, Ai-Pex (35), Digitest (31), **Otturazione canalare** (40) • **Manipoli**: Contrangoli e Turbine (66, 68) • **Fotografia**, EyeSpecial (3) • **Sabbatrice** intra-orale (42) • **Transilluminatore** (3) • **Polimerizzazione** WL90+ (26).

Gestione strumentario e materiali 57-59, 62

Contenitore per apparecchi (62) • **Periodont**: Cassette in acciaio e dispenser (57) • Protect Plus (22), Syringe Organizer (22) • **Zirc**: cassette E-z Jett , Oranizer, Tub (57-59).

BARRIERE e MONOUSO 19, 53-58

Aspirazione (19, 20) • Blocchetti per miscelazione (65) • Cuffie Safewear Medicom (63) • Drappi Perio Comfort (10) • Guaine e Barriere (61) • Guanti SafeTouch, Nitrile (64) • Mascherine SafeMask (63) • Peel'Stick (67) • Schermi protettivi (64) • Tappeti e pellicole decontaminanti (65) • Tovaglioli, Tray Eco, Vassoi (62).

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi. Sono IVA esclusa e possono, a fronte di situazioni straordinarie, subire variazioni senza preavviso. Validi salvo errori e/o omissioni di stampa. **Grazie ai QR Code dei cataloghi i nostri clienti sono sempre aggiornati!**

I prezzi di listino qui indicati sono validi sino al 15 Settembre 2026 ed annullano e sostituiscono ogni proposta precedente.

Legenda Prezzi. Il prezzo indicato è sempre quello unitario. **Garanzia – Resi – Sostituzioni.** Qualora la qualità non corrisponda agli standard dei fabbricanti, o per errato invio, è necessario: avvisare l'ufficio assistenza clienti **entro 8 giorni** dal ricevimento della merce; effettuare il reso nell'imballo originale integro; allegare il documento di trasporto in originale e la causale del reso con le motivazioni e/o i problemi riscontrati.

Ordini: ilic@ilicdental.com - tel +39 02 55 016 500 - +39 02 512 990 Validità: 13 Aprile - 15 Settembre 2026

Cliente				
Indirizzo				
Città	CAP	Prov.	Tel.	Cell.
Ind. consegna	Codice SDI			
P.IVA	C.Fisc.	e-mail		

CODICE	RIF.	PRODOTTO/DESCRIZIONE	PREZZO cad.	Q.TÀ	OFFERTA

+iva a norma di legge

Giorni di apertura: Mattino L M M G V S

Pomeriggio L M M G V S

Contributo spese spedizione: Ordini superiori a € 140,00 (IVA esc.) nessun contributo spese

Ordine fino a € 140,00 (i.e.) + € 14,00 - inferiori a € 75,00 (i.e.) + € 15,50

PAGAMENTO: Ordini inf. a € 140,00 (i.e.): Bonifico anticipato Carta di credito o POS

Ordini sup. a € 140,00 (i.e.): Bonifico anticipato Carta di credito o POS R.B. 30 gg. d.f. + € 5,50

IBAN IVAN ILIC' S.r.l.: IT05T0538701627000049514382

IBAN Cliente:

Carta di credito o POS Visa Mastercard Numero

Scadenza

DATA

TIMBRO e FIRMA

Al sensi della legge 196/03 le rammentiamo l'esistenza dei diritti che la legge stessa riserva ai titolari dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e di richiederne la cancellazione. Con la compilazione della presente cartolina, Lei acconsente alla raccolta dei dati forniti e alla loro comunicazione ai nostri partner commerciali al fine di poter ricevere informazioni e offerte commerciali. In caso di dissenso barri la casella qui a fianco.

Desensibilizzante "sensitive solution" Dr. Charlie Cox


"Gli ingredienti attivi sono sali di fluoro e di potassio altamente purificati, di grado medicale, preparati in acqua deionizzata di altissima purezza con un processo brevettato che richiede energia per formare una soluzione soprassatura, a cui si deve la rapidità d'azione, fatto che rende SuperSeal differente e unico, diverso e più efficace di qualunque altro".

Automordenzante agisce in pochi secondi. **Sicuro** perché privo di Glutaraldeide, Hema, Alcool, Benzalconio Cloruro, Clorexidina. **Pratico** perché pronto all'uso non si deve miscelare, non si sciacqua, non si Mordenza. **Eccezionale** perché non macchia ed è superiore a qualunque altro desensibilizzante.

50 58108 SSeal S.Solution 8 ml € 119,10 € 98,00 + omaggio 1 flacone 1 ml (€ 13,60)



SEM: Lamella incisivo dopo pulizia e lucidatura, sono visibili batteri e detriti.

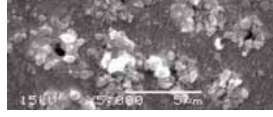

Pavimento cavitario e interfaccia dentinale di dente umano trattato per 5 sec con Super Seal: visibili i nano cristalli CaOx chelati all'HAP.

Seggiolino ergonomico originale a sella di cavallo

Dentisti, ascoltate la vostra schiena. Ogni ora di lavoro in posizione scorretta è una curva in più da correggere. La postura non è un optional: è ciò che vi permetterà di continuare ad amare il vostro mestiere, senza dolori e senza danni.

Bambach è l'unico vero seggiolino a sella di cavallo, design originale e brevettato, studiato per mantenere davvero le curve naturali della colonna, evitando compressioni e posizioni scorrette. **ILIC'** lo ha selezionato da oltre 25 anni tra varie alternative, ma non uguali e i dettagli fanno la vera qualità. **Bambach è Unico!**

Prova per 10 giorni con un piccolo contributo spese di 35€ che sarà rimborsato in caso d'acquisto. **Nessun contributo** per studi in Milano e provincia. Scrivici ora per prenotare la tua prova gratuita e scoprire il seggiolino che lavora con te.

Altezza operatore	Pompa	Codice	
<160 cm.	Bassa (470-590 mm.)	60 3111	€ 970,00
160-190 cm.	Media (560-730 mm.)	60 3112	€ 860,00
>190 cm.	Alta (600-860 mm.)	60 3113	2 € 790,00 cad.



Transilluminazione PERIODENT

Indispensabile per una diagnosi e indagine approfondita e professionale per tanti interventi terapeutici o chirurgici. LED ad altissima luminosità fino a 30.000 lux.

Utile per: • Rilevazione di carie, tartaro, fratture e orifizi del canale radicolare • Valutare le discromie dello smalto (profondità, opacità) • Ridurre la necessità di esposizione a raggi X con risparmio di costi e tempo e maggior sicurezza per i pazienti.

- 16 37331 Transill.LMDX 3 con guida luminosa a fibra ottica € 292,00 € 256,00
- 16 37342 Specchietti 140x73x125 mm, 50 pz € 146,00 € 110,00
- 16 37332 Guida luminosa f.o. LMDX3 3mm € 136,00 € 125,00
- 16 37333 Guaine per LMDX3, 100 pz € 21,00 € 19,00



La transilluminazione palatale e vestibolare degli elementi anteriori è un fondamentale presidio diagnostico di questo settore. A fianco dell'esame obiettivo, rappresenta il gold standard delle infezioni delle pareti prossimali, dove rende immensamente più agevole l'evidenziazione di lesioni cariose fin dagli stadi iniziali. *Dott. Giovanni Sammarco*



Verdere attraverso i denti è utilissimo per noi e fantastico per aiutare il paziente a capire quello che gli stiamo proponendo, la uso tutte le visite. La transilluminazione è fondamentale per poter fare diagnosi, è facile e davvero per tutti. Non potrei farne a meno. *Dott. Giuseppe Chiodera*

- 16 373551 EndoLux 5,5 mm >1 mm. con guida/adattore e 10 fibre mono € 95,00 € 78,00
- 16 373501 EndoLux fibre 1 mm. 40 pz. € 66,00 € 54,00
- 16 373555 EndoLux 5,5 mm >0,5 mm. con guida/adattore e 10 fibre mono € 128,00 € 105,00
- 16 373505 EndoLux fibre 0,5 mm. 40 pz. € 78,00 € 63,00

Fotocamera dentale automatica Shofu

La quinta generazione della fotocamera **EYESPECIAL**, ora ancora più compatta e leggera, è dotata della nuova funzione **WI-FI** che permette di salvare i dati direttamente sul PC. Anche la funzione video è stata ampliata e ora controlla la nitidezza delle registrazioni con **AUTOFOCUS CONTINUO**.

• Design compatto e si avvale della più moderna tecnologia digitale • Intuitiva, di facile utilizzo • Nove modalità di scatto • Video con autofocus continuo • Nuova funzione Wi-Fi per il trasferimento delle immagini • Filtro polarizzatore da applicare (optional).

Speciale Offerta per vendita diretta: EYE SPECIAL C-V con Transilluminatore LMDX 3 (pag. 6) € 2.850,00 + iva (€ 3.228,00)



EYESPECIAL

SUPERSEAL



Dr. Charles F. COX, DMD, PhD



"Il migliore realizzato per voi!"



1. Goccia nel dappen e impregnare un pennellino.
2. Applicare e lasciare per 10 sec.
3. Soffiare delicatamente da 10 cm. per 10 sec.
4. se neccesario ripetere.

articoli a richiesta



BAMBACH



Base in all. lucidato ø 60 cm




LMDX3



Verdere attraverso i denti è utilissimo per noi e fantastico per aiutare il paziente a capire quello che gli stiamo proponendo, la uso tutte le visite. La transilluminazione è fondamentale per poter fare diagnosi, è facile e davvero per tutti. Non potrei farne a meno. *Dott. Giuseppe Chiodera*

Dott. Giuseppe Chiodera

NEW

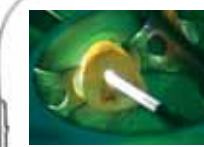


Mascherine gengivali

GUMY SET

Mascherine gengivali per il rilievo del colore

I denti della scala colori, posizionati nel Gummy consentono l'armonizzazione ottimale col colore gengivale

92 549040 Gummy Set 3 pz. (chiaro, medio, scuro) € 18,90 € 17,50

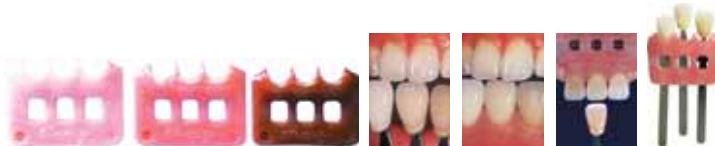

Schermi per fotografia Photo Shield AL rigidi

• Per fotografia tradizionale ed digitale • Alluminio anodizzato • Il modello superiore è perfetto per i profili perché consente di nascondere labbro, naso e baffi.

16 003212 Photo Shield Set Superiori: Ampio 8,50 cm. Stretto 7,25 cm. 2 pz.

€ 62,50 -15% € 53,12

16 003222 Photo Shield Set Palatali: Ampio 6,75 cm. Stretto 5,75 cm. 2 pz.

€ 58,00 -15% € 49,30



PERIODENT



Schermi per fotografia Photo Shield palatali

Piegabili in silicone

• Piegabili per essere adattati • Molto confortevoli • Decontaminabili con qualunque procedura • Per foto tradizionale e digitale.

16 003206	Silicone Contrastor - Upper Small 7,5 cm.	€ 47,00 € 41,00
16 003207	Silicone Contrastor - Upper Large 8,5 cm.	€ 47,00 € 41,00
16 003213	Double Ended Silicone Contrastors - Palatal Double L&S	€ 59,50 € 51,00
16 003214	Double Ended Silicone Contrastors - Upper Double L&S	€ 59,50 € 51,00



PERIODENT




Specchi per Fotografia Hi-Tech Premium

Finalmente lo specchio più luminoso e più nitido al mondo. Le immagini sono di nitidezza e contrasto perfetti, senza alcuna distorsione fino al minimo dettaglio. Grazie alla combinazione di luminosità e brillantezza del riflesso nei colori naturali, si ottengono immagini intraorali di grande potere esplicativo.

Unico, è costituito da multistrati riflettenti con la risultante di immagini cristalline e luminose superiori, mai disponibili prima. Specchi per la fotografia intraorale rivestiti di prima superficie.

-15% Offerta valida per tutti gli specchi per fotografia

ULTRA BRIGHT FS

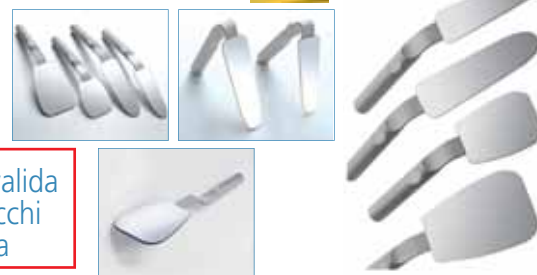

	mm	Rhodium FS doppi senza manico € 146,00	Rhodium FS manico angolato € 185,00	UL.BR. FS manico angolato € 225,00	Rhodium FS manico V € 185,00	ULT.BR. FS manico V € 225,00	Rhodium FS manico dritto € 205,00	ULT.BR. FS manico dritto € 245,00
1	58 x 76	16 701301	16 701531	16 70671			16 701551	16 70661
2	66 x 95	16 701305	16 701535	16 70675			16 701555	16 70665
3	74 x 106	16 701302	16 701532	16 70672			16 701552	16 70662
4	42 x 128	16 701303	16 701533	16 70673	16 701543	16 70643		
5	36 x 120		16 70153K	16 7067K	16 701543K	16 7063K		

Ingranditori VISOR-LOUPES

Pratici e leggeri è bello averli sempre a portata di mano!

Ottimo compromesso di qualità, pratico e leggero, è facile da indossare e togliere, anche con gli occhiali. Disponibili con lenti da 2,5x, 4x, 6x

16 1VL25 Ingranditori Lactona Visor Loupes 2,5x € 89,00

16 1VL40 Ingranditori Lactona Visor Loupes 4,0x € 89,00

2 a scelta € 79,00 cad.



Crystal Soft Grip HD Doppio

Specchietti super brillanti doppi NEW

Con due lenti riflettenti Crystal HD® consente di mantenere la visibilità senza dover capovolgere o riposizionare lo strumento; ciò favorisce un flusso di lavoro più fluido e una concentrazione ininterrotta durante esami e procedure. • Struttura monoblocco, non metallica, elimina la formazione di corrosione e gli shock galvanici. • Impugnatura leggera ed ergonomica con rivestimento morbido garantisce una presa comoda e stabile.

SOFT GRIP doppio! Conf. 12 specc. montati € 195,00 € 165,00		
Colore Grigio/nero	Colori ass. Neon (N-S)	Colori singoli (N-S)
33 390D384I	33 390D384ANE	33 390D384 (N-S)

★★★★★ Crystal Ultra Bright Front Surface gambo SIMPLE STEM - EU							★★★★ Rodiati SS	
000 10 mm	0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	6 26 mm	8 30 mm
33 0975230	33 097520		33 79523	33 79524	33 79525	33 097526	33 79726	33 79728
6 pz. € 111,11	6 pz. € 51,30		12 pz. € 65,21			6 pz. € 77,76	12 pz. € 57,00	12 pz. € 72,00

★★★★★ Crystal Ultra Bright Front Surface gambo CONE SOCKET - US							★★★★ Rodiati CS	
	0 14 mm	2 18 mm	3 20 mm	4 22 mm	5 24 mm	6 26 mm	6 26 mm	8 30 mm
	33 097510		33 79513	33 79514	33 79515	33 097516	33 79716	33 79718
	6 pz. € 64,53		12 pz. € 55,00			6 pz. € 116,78	12 pz. € 59,80	12 pz. € 75,00

Nuovi Ultra Bright n. 6, n. 8 - 2 cf stesso tipo -10% • 4 -15% • 6 -20%



Manici ergonomici per specchietti intraorali

- 33 097101 Manico inox cavo EGL C.Socket N. 101 Ø8 mm € 16,00
- 33 091812 Manico conico C.Socket N. 24 Ø10-4 mm € 17,00
- 33 091811 Manico ottag. C.Socket N. 11 SC/MM Ø6 mm € 8,90
- 33 097102 Manico inox cavo EGL S.Stem N. 102 Ø8 mm € 16,00
- 33 091821 Manico Xlight S.Stem N. 2 Inox 18/8 Ø8 mm € 6,90
- 33 79851 Manico autoclavabile S.Stem HTBE1 € 25,25
- 33 79852 Manico autoclavabile C.Socket HTBE2 € 25,25



3 stesso tipo -10% • 6 -15% • 9 -20%

Specchietti Intraorali ZIRC

Specchietti **Crystal HD SOFT GRIP** con manico colorato - Cf. 12 pz.

VIBRANT 12 Specchietti, 2 per colore: N, O, P, Q, R, S.

33 390363-ANE Soft Grip N. 4 € 133,00

33 390364-ANE Soft Grip N. 5 € 133,00


JEWEL 12 Specchietti, 2 per colore: E, J, T, I, M, U.

33 390363-AJW Jewel N. 4 € 133,00

33 390364-AJW Jewel N. 5 € 133,00



CRYSTAL

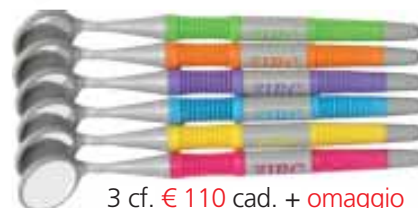

3 cf. € 110 cad. + omaggio Mega Mirror (pag. 4)

Antiappannante ZIRC

Previene l'appannamento degli specchietti e offre all'operatore un metodo veloce per rimuovere i detriti durante le procedure. Consente anche la rimozione dei detriti dalla superficie degli specchietti nel corso delle procedure grazie ai **Swipe Pads** che aderiscono al guanto o al tovagliolo per un'azione rapida.

Finalmente vedi chiaro e pulito!
45 minuti di tempo di lavoro senza appannamento



54 37100 Trial Kit 2 Fl. da 6 ml, 24 Tamponi 1 € 39,00 € 36,00 • 2 € 33,00 cad.

Specchietti Micro per chirurgia endodontica



MICRO ULTRA BRIGHT

Ultra Black è la linea di specchietti più luminosi e nitidi al mondo. Il nuovo design unico degli strati superficiali dello specchio fornisce immagini luminose superiori e chiarezza cristallina precedentemente non ottenibili.



SPECCHIETTI MICRO BLACK SURFACE ULTRABRIGHT attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952U3	€ 126,00 € 119,50
5 mm	33 7952U5	€ 126,00 € 119,50
3x6 mm	33 7952U3X6	€ 136,00 € 129,50
3x6 mm goccia	33 7952U3X6G	€ 136,00 € 129,50




SPECCHIETTI MICRO BLACK FLEX ULTRABRIGHT attacco Simple Stem EU

3 mm	33 7952F3	€ 136,00 € 125,50
5 mm	33 7952F5	€ 136,00 € 125,50
3x6 mm	33 7952F3X6	€ 146,00 € 135,50
3x6 mm goccia	33 7952F3X6G	€ 146,00 € 135,50



UltraBlack Rodiato

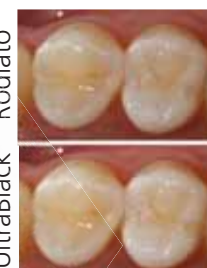

UltraFlex piegabili



33 79851 Manico Ergo-black autoclavabile Simple-Stem HTBE1 € 25,00
33 79852 Manico Ergo-black autoclavabile Cone Socket HTBE2 € 25,00

3 -10% • 6 -15% • 9 -20%

Sistema di illuminazione coassiale LED

Luce per 8 ore!

Sistema coassiale, con intensità regolabile. Area di illuminazione omogenea

- Potente Lampada LED 3 W • Battery pack al litio
- Attacco specifico per Keeler

16 388007 K-LED II Double. Lampada LED, cavo, base e carica batterie, 2 battery pack al litio (8h) € 1.803,00 € 1.440,00

16 388016 K-LED II Singolo. Lampada LED, cavo, carica batterie portatile, 1 battery pack al litio € 1.226,00 € 980,00

16 388007



KEELER K-LED



16 388112



Ingrandenti ad alta risoluzione Keeler

L'unico sistema al mondo che comprende i vantaggi dei galileiani e dei prismatici

- Leggeri • Massima brillantezza • Maggiore campo visivo • Perfettamente nitidi anche ai bordi • Astuccio rigido con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia.

Keeler Hi-Res con montatura Sport completa

€ 1.775,00 € 1.390,00

16 3HM3034 3,0X x 34 cm.

16 3HM3042 3,0X x 42 cm.

Keeler Hi-Res con caschetto € 1.875,00 € 1.490,00

16 3HC3034 3,0X x 34 cm.

16 3HC3042 3,0X x 42 cm.

Montatura con acc. e struttura per lenti graduate € 375,00 € 298,00

16 33500 NERO

16 33519 BLU

16 33527 ROSSO



16 33500



16 33519



16 33527

HI-RES

Ingrandenti Galileiani Keeler

Alta brillantezza, forniscono la visione dell'intera bocca. Forniti nell'astuccio speciale rigido, con 2 cappucci protettivi sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 panno per pulizia. • Leggeri • Lenti multi strato, smontabili e lavabili • Ampia visione e profondità di campo. Sistemi Galileiani Keeler SuperVU con Montatura Sport Design.

Galileiani Keeler SuperVu

con montatura e supporto per lenti correttive € 1.395,00 € 995,00

2,5X x 34 cm.

2,5X x 42 cm.

3,0X x 34 cm.

3,0X x 42 cm.

16 31M2534

16 31M2542

16 31M3034

16 31M3042

Galileiani SuperVu con caschetto € 1.495,00 € 1.095,00

2,5X x 34 cm.

2,5X x 42 cm.

3,0X x 34 cm.

3,0X x 42 cm.

16 31C2534

16 31C2542

16 31C3034

16 31C3042



Caschetto Comfort (16 33100) € 460,00 € 400,00



Cappucci protettivi autoclavabili

XL ADVANCE

Ingrandenti Prismatici Keeler

Indicati per gli ingrandimenti necessari per procedure chirurgiche e odontoiatriche avanzate sono prodotti con vetro multistrato della massima qualità, allineati al laser e trattati con rivestimento antiriflesso allo scopo di offrire un'immagine brillante e nitida. Leggeri, 67 g, sono estremamente luminosi.

Forniti in un astuccio rigido comprendono: 2 cappucci protettori sterilizzabili, 1 levetta sollevamento sterilizzabile, 1 panno per la pulizia.

Prismatici

con Montatura

con Caschetto

4,5X / 34 cm

16 32M4534

16 32C4534

4,5X / 42 cm

16 32M4542

16 32C4542

€ 1.895,00 € 1.395,00

€ 1.995,00 € 1.495,00



Sbiancamento Domiciliare Professionale H₂O₂ HP 6%

NATURAL+

Unico a base di perossido di idrogeno stabilizzato al 100%

Veloce rilascio • Alta viscosità • Applicazioni più brevi 60-90 min

Sbianca, rinforza e desensibilizza grazie all'**esclusiva formulazione** priva di metalli di transizione (creati solitamente dalla reazione per la produzione del H₂O₂) e quindi **diversa da tutti**.

La stabilizzazione rende H₂O₂ non volatile e la scissione dell'ossigeno è progressiva fino a 48 ore ed è maggiormente penetrante grazie alle dimensioni ridotte della molecola stessa.

Contiene: calcio (previene demineralizzazione), nitrato di potassio (previene sensibilità), fluoruro di sodio (rinforzo e azione cariostatica), acqua (previene sensibilità e consente una maggiore penetrazione).

La esclusiva siringa autobloccante, consente di erogare 1 goccia di gel per dente!

50 71160/1 Natural+ Home Kit: 1 sir. N+ 10ml., 2 SofTray per mascherine
1 astuccio, 1 spazzolino N+, 1 dentifricio Power Prep 30ml., 1 balsamo 5ml.

1 filo interdentale tascabile con specchietto, 1 scala colori

1+1 omaggio 2 Kit € 69,00 (€ 34,50 cad.) massimo due promozioni per Cliente

NATURAL+™



Sbiancamento alla Poltrona H₂O₂ HP 35%

Unico a base di perossido di idrogeno stabilizzato al 100%

Natural+35% alla poltrona è stato formulato in modo da prevenire sensibilità e velocizzare la procedura e per questo è stato necessario progettare la speciale lampada LED 800 che grazie alle due lunghezze d'onda 430 e 670nm. consente di fissare ai prismi dello smalto i sali minerali che agiranno per 24-48 ore che è il tempo di continua azione di Natural+.

Procedura: • Power Prep (10 min.) • Gel Barriera • Natural+ • Lampada 30-40 min.
• Rimozione Natural+ Gel • Lucidatura • Balm.

50 7620 Natural+35% 6 Patients Econ. Kits (Kit 1 + Kit 2)

€ 570,00 € 490,00

Costo per procedura, tutto compreso, per singolo paziente €76,60

59 72800 Lampada LED 800* con telecomando e accessori

€ 1.650,00 € 1.350,00

*30 giorni in uso gratuito acquistando 1 Kit 6 patient N+



NATURAL+ CHIARSIDE



Sbiancamento "Fai da te" in mascherine HP 6%

Sistema economico e pronto all'uso per mantenimento dopo lo sbiancamento alla poltrona, per richiami e motivazione dopo l'igiene professionale. L'agente attivo in gel H₂O₂ è contenuto nella confortevole e invisibile mascherina interna universale UltraFit che rimane adesa all'arcata da molare a molare. Tempo di azione necessario: 60-90 min.

Ripetere l'applicazione per 5-10 giorni.

Il singolo kit è un blister doppio con due porta mascherine con all'interno quelle col gel; è bello anche da dare al Paziente. La confezione contiene 10 Kit.

Opalescence GO Patient Kit: 10 Blister (sup+inf) € 83,90 € 79,00 + omaggio PerioSmile

50 14634 (menta) 2 € 76,00 cad. + omaggio 4 blister (sup+inf)

U2

OPALESCENCE GO



Sbiancamento alla poltrona Ultradent

• PH Neutro • 2 applicazioni da 20 minuti • Rosso l'applicazione precisa • Sempre fresco da attivare • Contiene agenti desensibilizzanti: Nitrato di Potassio e Fluoro • Formula che non necessita di lampade!

50 1550 OPALESCENCE BOOST PF **Intro Kit.** 4 siringhe da 1,2ml O.B. attivatore, 2 da 1,2ml barriera OpalDam Green, 2 blocca lingua IsoBlock, 2 scale colori, 2 adattatori Luer per aspiratore, 2 cannule SurgiTip, 20 Black Mini Tip

€ 248,20 € 198,00 + omaggio Qartz (pag. 11) 200 coppette (€ 49,50)

50 1551 OPALESCENCE BOOST **Patient Kit.** 2 siringhe da 1,2ml O.B. attivatore, 1 sir. da 1,2ml OpalDam Green, 1 blocca lingua IsoBlock, 1 scala colori, 1 adattatore Luer per aspiratore, 1 cannule SurgiTip, 20 Black Mini Tip.

€ 135,90 € 115,00 + omaggio 1 specchietto Crystal (pag.5) (€ 13,00)

OPALESCENCE BOOST



PERIODENT TIPONE Hi-Tech USonic Steel

TIPONE offre un sistema di gestione della qualità (QMS) completo. I prodotti finiti rispettano i principi ISO 9001 e ISO13485 e le disposizioni CE; per la massima soddisfazione dei clienti e dei requisiti legali e con un rapporto qualità prezzo eccezionale. La qualità offerta è sicura e testata, ma è pur sempre un punto di partenza per un miglioramento continuo dei processi di produzione "SGQ" che sono monitorati annualmente e quindi implementati.



TIPONE SELECTION *Ems® Style

a scelta 2 -10% • 4 -15% • 6 -20%

Universale. Per rimuovere accuratamente tartaro duro sotto gengivale in ogni quadrante.

59 X24EA € 33,00

PerioSlim. PS, veloce e minimamente invasivo, è ideale per la rimozione del tartaro in tasche parodontali profonde su tutti i quadranti.

59 X24EPS € 33,00

Perio. Adatto per la rimozione precisa di tartaro duro subgengivale e sopragengivale in tutti i quadranti.

59 X24EP € 33,00

2025
Quality Choice
★★★★★





eICPS EMS style
59 X24EICPS eICP set EMS Style € 76,00 -20%
(inserto + chiave ICP WREN)

ICP 59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,50 € 7,50
(per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)

ICPpeek EMS style
59 X24ICP ICPpeek EMS Style € 99,00 € 80
10 ICP Peek


CHIAVI DINAMOMETRICHE € 23,00 -20%
59 X24TUN Chiavetta dinamometrica universale compatibile per EMS Satelec NSK. *Punte ultrasuoni e chiavi dinamometriche disponibili per tutte le principali marche*

ICP 59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,50 € 7,50
(per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)

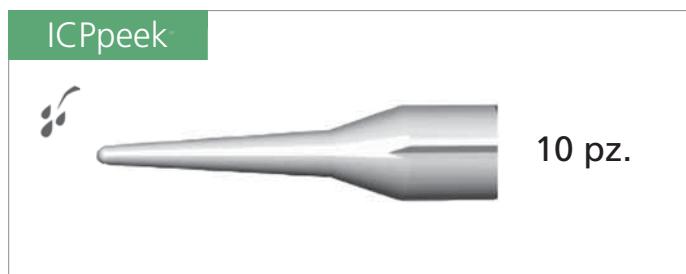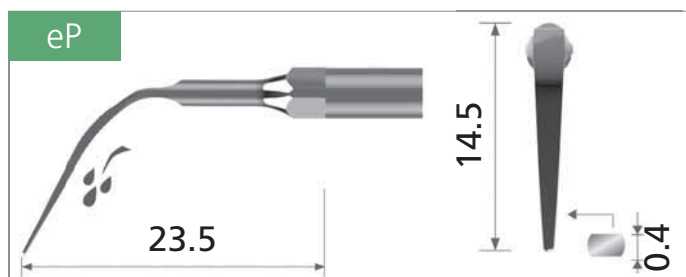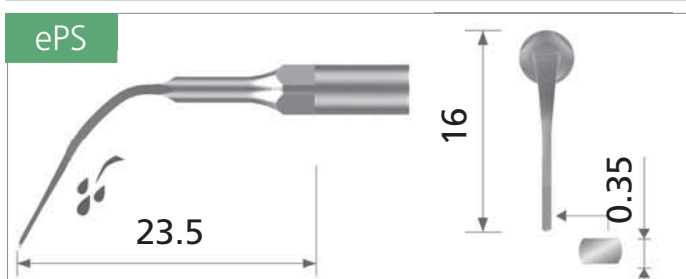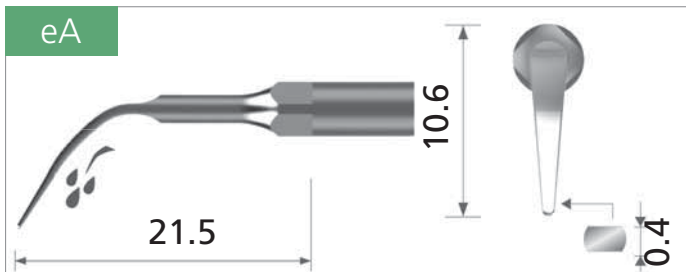


CHIAVI DINAMOMETRICHE € 23,00 -20%	
59 X24TUN Chiavetta dinamometrica universale compatibile per EMS Satelec NSK.	<i>Punte ultrasuoni e chiavi dinamometriche disponibili per tutte le principali marche</i>
ICP 59 X24ICPW Chiavetta ICP WREN € 9,50 € 7,50 (per tutte le punte ICP utilizzare la chiavetta ICP WREN)	

Inserti Ems® STYLE

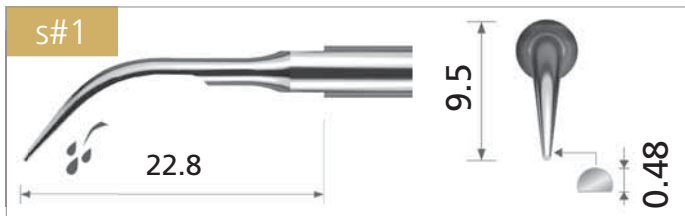

Universale. Semplice trattamento sopragengivale con rimozione del tartaro senza danni allo smalto.

59 X24S1 € 33,00

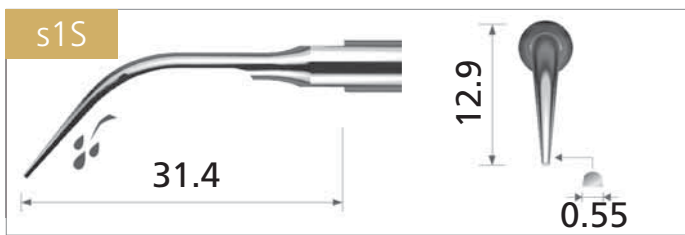

Sottile. Sopra gengivale e sotto subgengivale. Particolarmente efficace negli spazi interprossimali.

59 X24S1S € 33,00



PerioSlim. Lo strumento sPS è veloce e minimamente invasivo, ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

59 X24SPS € 33,00




Pulizia d'impianto. PEEK per il TRATTAMENTO in sicurezza e delicatezza di RESTAURI su impianti. sICP contiene 1 chiave ICP, 1 kICP e 2 peek ps.

59 X24SICP € 76,00 -20%




Ricambi PEEK - confezione da 10.

59 X24ICP € 99,00 € 80,00

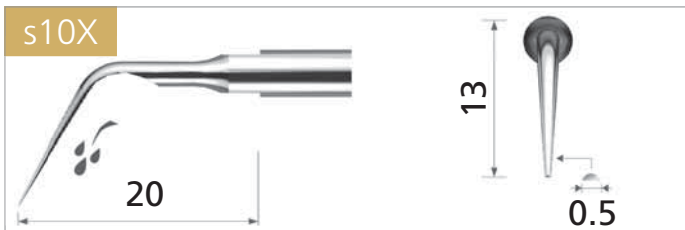


Interprossimale. La sua parte piatta lo rende adatto negli gli spazi interprossimali e nel trattamento sopragengivale. Il suo design anatomico consente un utilizzo rapido ed efficiente.

59 X24S10X € 39,50

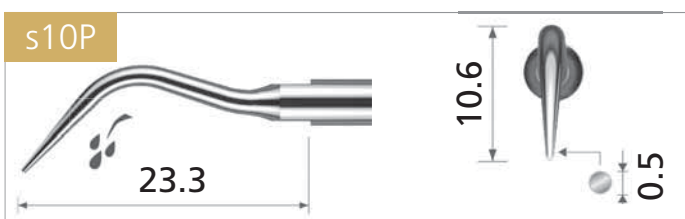


Shallow. Strumento tondo sottile adatto per il trattamento nelle tasche poco profonde inferiori a 2-3 mm.

59 X24S10P € 39,50

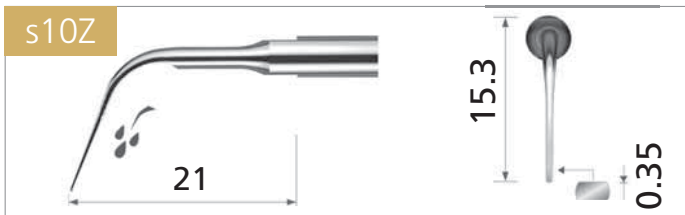

Sub-gengivale. Tasche medie (<4mm). La rimozione di biofilm e di depositi così, consente l'osservazione della profondità della tasca usando la scala 3mm.

59 X24S10Z € 39,50

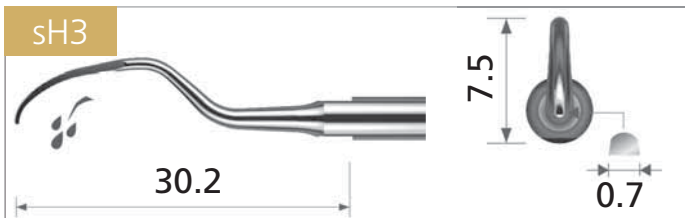

Periodonics anteriori. Consente il trattamento del blocco incisivo-canino. Il bordo guida è orientato parallelamente alla tasca. Agevola il lavoro nella tasca parodontale senza ledere il legamento.

59 X24SH3 € 39,50

Drappi antispruzzo molto apprezzati da igieniste e pazienti perchè rappresentano una soluzione pratica ed efficace per proteggere il paziente evitando di "avvolgerlo" in tovaglioli di carta. La retina della metà superiore cattura lo spray mentre il tovagliolo spugnoso della metà inferiore assorbe lo spray d'acqua. Disponibile nei tipi lavabile e monopaziente.

- Proteggono il viso da lucidatura con bicarbonato e ablazione a ultrasuoni.



PerioComfort lavabile			
12 pz. € 128,00 2 -10% • 3 -15%			
GIALLO	VERDE	BLU	BIANCO
53 74120Y	53 74120G	53 74120B	53 74120W

PerioComfort monouso
50 pz. € 119,00 2 -10% • 3 -15%
BIANCO
53 74110W

Scovolini interdentali PERIODENT

Chi li prova scopre la superiorità di questi scovolini interdentali.

- Anima rivestita in plastica per prevenire graffi e sensibilità
- Manico zigrinato per una presa sicura dotato di cappuccio protettivo.

51 310100 PerioProx Plus cf. assortita da 100 pz. € 110,00

51 310106, 101, 102, 103, 104, 105 PerioProx Plus 100 pz. € 98,00

3 -10% • 5 -15% • 10 -20%



FARMACIE: Grazie! Segnalateci quelle più vicina a voi, le contatteremo per offrire PerioProx Plus nelle convenienti nuove Eco scatole da 6 che i Pazienti potranno acquistare direttamente.

Dentifrici schiarenti Ultradent RDA 90

Enzimatico per la rimozione efficace di macchie e patina. Il Basso indice di abrasività RDA 78 lo rende assolutamente sicuro per l'uso quotidiano.

- PH Neutro • Privo di Triclosan • Senza glutine • Ottimo aroma menta.

51 150876 Whitening 100 ml. 12 tubi € 99,90 + 1 PerioSmile

51 150470 Sensitivity Whitening 100 ml. 12 tubi € 104,90 + 1 PerioSmile

a scelta: 2 -10% + omaggio 2 blister (4 PerioSmile)

3 -15% + omaggio 5 blister (10 PerioSmile)



Aderisce a tutte le superfici lisce con ventosa



OPALESCENCE

Copri spazzolini in polipropilene antibatterico

PerioSmile

OMAGGIO



Linea antialitosi con CloSYS

Alitosi? È finito il tempo di mascherarla. Oggi è possibile avere sempre la certezza di un alito fresco! Offrite ai vostri pazienti un trattamento garantito per vincere l'alitosi di origine orale.

La maggior parte delle persone prima o poi ha avuto problemi d'alito cattivo e nel 90% dei casi la causa è orale. È un problema, sgradevole per gli altri ed imbarazzante per chi ce l'ha. La ricerca evidenzia che l'alitosi può essere un segnale di problemi parodontali quali gengivite o parodontite. I prodotti ultraDEX sono la risposta concreta al problema: riportano il pH della bocca a neutro e uccidono i batteri dannosi all'origine di placca e carie!

Sciacquo ultraDEX

51 764251 250 ml 1 pz. € 11,90 € 10,65 • 2 € 9,00 cad.

51 764256 250 ml 6 pz. € 55,00 € 51,50 • 2 € 43,00 cad.

51 74101 Oolitt € 8,50 € 7,50 • 2 € 5,00 cad.


Offerta: ogni 2 Ultradex € 18,00
1 OOLITT omaggio




Oolitt




CloSYS II®: formula antibatterica sicura ed efficace nel combattere la placca che, integrata in un programma quotidiano d'igiene orale, aiuta a mantenere la bocca sana e pulita.

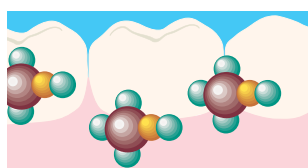


I composti volatili solforati (VSC), causa principale dell'alitosi vengono prodotti costantemente dalla naturale degradazione di batteri e cellule.

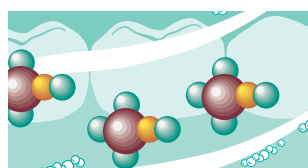

Gli sciacqui convenzionali coprono solo gli odori con un aromatizzante, ma i VSC sono ancora presenti e causano l'alitosi.

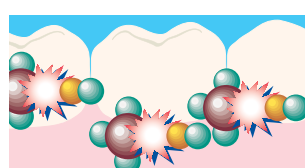

CloSys II® formula brevettata presente nella linea UltraDEX spezza i legami molecolari dei VSC in modo da distruggerli completamente.

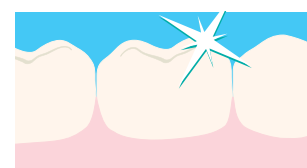

Con l'uso regolare di UltraDEX nell'igiene orale quotidiana i denti saranno più puliti, la bocca più sana e l'alito più fresco.

Sigillante occlusale per solchi e fossette



BEAUTISEALANT

Automordenzante con rilascio e ricarica di fluoro grazie ai riempitivi brevettati **S-PRG** (Surface Pre-Reacted glass), caricato al 40% in peso.

- Maneggevolezza e viscosità ideali; elimina i vuoti con una consistenza senza bolle
- Radiopaco come la dentina: 0,92 mm Al
- Unica cariostaticità grazie ai riempitivi S-PRG
- Elevata adesione senza necessità di mordenzatura con acido ortofosforico o risciacquo.
- Quattro passaggi facili, totale **30 secondi!**

22 56798 BeautiSealant Set: Primer 3 ml, 1,2 g BS, 15 cannule
50 Micro Brush fini, 25 vaschette. € 68,20 € 65,00
+ omaggio specchio Crystal (€ 15,00)

51 57674 Pasta senza fluoro Pressage € 16,00 € 14,90

Consigliato



omaggio



CRYSTAL Ultra Bright

Vernice al fluoro Ultradent

ENAMELAST

MOLTO PIU' DI UN OTTIMO GUSTO!

- Vernice al Fluoro (Fluoruro di Sodio al 5% dolcificato con Xilitolo)
- La sua composizione esclusiva grazie ad un sistema brevettato che promuove l'adesione, ottenendo sia una migliore ritenzione che un eccellente rilascio e assorbimento del Fluoro
- Consistenza liscia
- Invisibile
- Senza noci e senza glutine



Enamelast™ è il prodotto ideale per:

- Ipersensibilità dentinale
- Prima o dopo un trattamento sbiancante
- Le vernici al Fluoro sono raccomandate come ausilio preventivo al fine di ridurre il rischio carie.

VERNICE AL FLUORO

Enamelast™



2-4 pazienti per siringa



1 Enamelast™ Kit in siringa

2 siringhe da 1,2ml cad
+ 4 puntali
Cod. 50 18521

8,90 €
(10,40 €)

VERNICE AL FLUORO

Enamelast™

1 Enamelast™ Monodose

50 monodosi da 0,4 ml

SCEGLI IL GUSTO :



Insapore
50 18188



Cool Mint
50 18353



Caramel
50 18819



Orange Cream
50 18344



Bubble Gum
50 18363



Walterberry
50 18518



85,00 €
(96,70 €)

Gel desensibilizzante

ULTRA EZ

ULTRA EZ Gel desensibilizzante a rilascio prolungato

Formula contenente Nitrato di Potassio 3% e Fluoruro di sodio 0,25%. Applicazione mediante siringa nella mascherina individuale o in mascherine standardizzate.

- Risultati immediati
- Disponibile in siringhe o mascherine UltraFit pronte all'uso.

Elimina rapidamente la sensibilità dentinale causata da spazzolamento non adeguato, fenomeni termici e chimici, sbiancamento, aree cervicali esposte, ecc.

Ultra EZ Siringhe con punte pre montate

50 18008 2 siringhe x 1,2 ml con punte premontate € 36,30
2 cf. -10% + omaggio 2 cf. SafeMask.

50 18007 UltraEZ Econo Refill: 20 sir x1,2 ml con punte premontate € 127,20 + omaggio 4 cf. 50 mascherine IIR SafeMask.

Ultra EZ in Mascherine Combo

50 18721 Combo 10 blister (1 sup+1 sup) € 81,60 2 cf. -10%
+ omaggio 2 cf. SafeMask.

Siringa con punte premontate



Mascherine pronte all'uso



omaggio

1 cf=50 mascherine IIR SafeMask Medicom

Paste per profilassi superiori anti-spruzzo!

- Miscela unica di agenti pulenti e lucidanti • Massimizza la rimozione mirata delle macchie salvaguardando l'integrità dello smalto • Aiuta a mantenere un livello di fluoro efficace rinforzando lo smalto e prevenendo la carie • Pasta realmente antispruzzo grazie alla consistenza ideale • Si sciacqua facilmente e in modo predicibile • Senza glutine • Senza parabeni • Made in USA
- Contiene xilitolo, ideale per la prevenzione della carie • **lone fluoro 1,23%**
- Disponibile anche **senza fluoro** • Disponibile in quattro grane: Fine, Media, Grossa ed Extra Grossa (a richiesta) • Disponibile in ottimi gusti: Bubble gum, Ciliegia, Menta, Lampone, Arancia, Uva e **gusti assortiti** • Disponibile in vasetti o coppette.

Priva di glutine • Grane disponibili RDA: F 55; M 75; C 85; X-C 95.
Scheda tecnica disponibile a richiesta

La consistenza ideale la rende "antispruzzo" e facile da utilizzare e da sciacquare. • Priva di glutine • Made in USA • con Xilitolo • lone Fluoro 1,23% • Disponibile anche senza Fluoro • **Grane RDA: F 55, M 75, C 85, XC 95.**

Qartz 200x2g coppette, *aromi assortiti*, con anello € 49,50 € 39,50
 51 97162MAS (Grana Media aromi ass.ti) • 51 97162FBG (Grana Fine, Bubble Gum)

Anelli Monouso

- Per procedure di igiene, endodonzia, ecc. • Per risparmiare tempo ed evitare contaminazioni crociate.

51 P969AM Anelli Monouso, 200 pz. € 23,63 € 18,00



QARTZ



2025
 Quality Choice
 ★★★★★

Presto anche la nuova Qartz Vida, con fluoro, fosfato tricalcico e idrossiapatite (Buono sconto 25% comunicheremo ai clienti diretti quando sarà disponibile). Anche la nuova Qartz Basic, insapore, senza fluoro e senza coloranti. Progettata per gli ortodontisti, non lascia residui oleosi dovuti al sapore o al colore.

Contrangolo reciprocante per profilassi. Latex Free!

Movimento reciprocante di 60° che consente il **contatto continuo**, prevenendo così il riscaldamento e velocizzando di molto la procedura in sicurezza. Grazie anche al design interno della coppetta a turbina, non ci saranno più schizzi di pasta, saliva e sangue.

Materiale delicato sui tessuti offre un piacevole **massaggio gengivale**; indicato anche per l'applicazione di medicamenti.

- **Massimo comfort!**

51 P77101 ReciProxy+ Soft, 100 pz. € 72,00 € 66,00
 40 P10041 Riduttore Nose Cone 4:1 € 189,00 € 155,00

Nose Cone si collega a tutti i micromotori elettrici

Nose Cone + 100 Reciproxy € 261,00 € 165,00 PR NC+RP



RECIPROXY+

Spazzolini in Nylon per profilassi, montati per C/A

Montati su mandrino Inox Hi-Tech per C/A 15 mm. - Max 10.000 g/min.

51 P7415R Regular • 51 P7415S (Soft) • 51 P7415XS (X-Soft)
 Spazzolini a Coppette Propy+, C/A, 100 pz. € 59,70 € 49,00 2 € 45,00 cad.

51 P74TR Spazzolini Tapered Propy+ Reg. C/A 100 pz. € 43,50 € 38,00 2 € 34,00 cad.

30 091092 SuperBrush, 50 pz. € 75,00 € 66,00

Vedi pag. 25
 Spazzolini intracoronali SuperBrush



PROPHY+



Coppette per profilassi, montate per C/A Latex Free!

Materiale di grado medicale estremamente confortevole. Lo speciale profilo interno a "turbina" prende meglio la pasta e previene gli schizzi.


Sono montate su mandrini Inox Hi-tech per C/A. Lunghezza 15 mm.

Confezione da 100 colori assortiti - Max 10.000 g/min.

51 P721S Coppette Propy+ montate per C/A Soft 100 pz.
 € 39,00 2 € 29,00 cad.



PROPHY+ TURBO

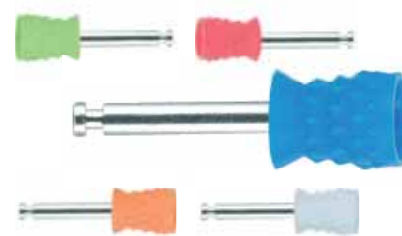

Fili retrattori concatenati non impregnati

Il filo retrattore che segue perfettamente il contorno della preparazione senza uscire dal solco!

- 30% Maggiore assorbenza • Non si sfilaccia e non scivola • Non si attorciglia alla fresa
- **330 cm 100%** • **Cotone di altissima qualità Premium+**.

Ulteriore vantaggio è dato dall'**ergonomico dispenser con la taglierina** in acciaio inox integrata nel coperchio dotato anche di **scala di misurazione millimetrica**; il filo viene tagliato quando si chiude il coperchio, restando bloccato e non può scivolare indietro nel dispenser.

05 02311,12,13,14,15,16 **Easy Cord** cm 330: fili di retrazione a maglie concatenate.

000	00	0	1	2	3
05 02311	05 02312	05 02313	05 02314	05 02315	05 02316

a scelta **2-10%** • **4-15%** • **6-20%**

Explorer ultra sottile, ideale anche per rimuovere senza ledere il filo retrattore dal solco gengivale.



33 005125 EX "Smart" Periodent €37,00 €19,00

Fili retrattori pieni, compatti e lisci, impregnati con AlCl₃

Best Cord Nano è in filato misto di poliestere e poliammide intrecciato e impregnato con cloruro di alluminio esaidrato (AlClO₃•6H₂O), formula più stabile e facilmente solubile in acqua. La particolare tessitura compatta evita impigliamenti, migliora la maneggevolezza e favorisce l'assorbimento.

La retrazione gengivale che si ottiene, migliora di gran lunga la qualità delle impronte (analogiche e digitali) e controlla il sanguinamento e i fluidi sulculari durante le procedure restaurative e protesiche. L'azione vasocostrittiva ed emostatica non causa decolorazioni dei denti.

05 52BC0000	05 52BC000	05 52BC00	05 52BC0	05 52BC1	05 52BC2
N. 000.0	N. 000	N. 00	N. 0	N. 1	N. 2

cm 254 in dispenser con taglierina di precisione €24,90 a scelta 3 €15,50 cad.

Emostatici Alustat: liquido, gel, foam

ALUSTAT Emostatico cloruro di alluminio tamponato

L'uso previsto è lo stesso per tutte le varianti.

05 53ALL10	Liquido al 25% AlClO ₃ 10 g.	€14,30 €11,50
------------	---	---------------

Alustat, **liquido** e **gel** utilizzati per arrestare l'emorragia. Tempo di contatto raccomandato per l'azione specifica è **5** minuti.

Alustat **Foam**, può essere utilizzato sia per arrestare l'emorragia che per retrarre i tessuti, agisce più rapidamente: **2** minuti.

05 53ALG5	GEL 25% AlClO ₃ Siringa 5 ml	€26,00	2 €24,00 cad.
05 53ALG10	GEL 25% AlClO ₃ Siringa 10 ml	€42,90 €34,50	2 €29,00 cad.
05 53ALF08	FOAM 20% AlClO ₃ 0,8 g	€20,00 €12,90	
05 53ALF408	FOAM 20% AlClO ₃ 4 Sir. x 0,8 g Mega	€63,60 €47,00	

Emostatico per la cauterizzazione locale

TCA Dent soluzione al 35% di acido tricloroacetico con aroma. Utilizzata in odontoiatria per la cauterizzazione locale delle mucose orali. La sua azione si basa sulla coagulazione chimica dei tessuti patologici, favorendo la guarigione delle lesioni granulanti e arrestando piccoli sanguinamenti.

Modalità d'uso: **1.** Asciugare e isolare completamente l'area da trattare. **2.** Immergere l'applicatore monouso nella soluzione e rimuovere l'eccesso. **3.** Applicare sulla zona interessata fino a quando il tessuto diventa bianco. **4.** Risciacquare con acqua. • Se la lesione persiste, ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane fino alla risoluzione. È importante utilizzare un nuovo applicatore per ogni applicazione per evitare infezioni. • Non utilizzare in pazienti con ipersensibilità ai componenti. • Controindicato nei bambini. • Un risciacquo inadeguato può compromettere l'adesione di eventuali impronte dentali.

05 53TCA10 Flacone 10 ml €34,80 €25,60

Emostatico e agente di retrazione per impronta

Emostasi e Retrazione contemporaneamente.

• Pratico confezionamento in siringhe con punte incluse • Applicazione rapida e agevole • L'agente emostatico della formulazione assorbe ogni sanguinamento o liquido sulcular • Utilizzato prima del rilievo di impronte protesiche e implantoprotetiche, cementazioni, preparazioni cavitare e in odontoiatria conservativa.

05 015102 Intro Kit: 2 sir. da 2 g cad + 12 puntali €54,50 -10% • 2-15%

05 015106 Kit: 6 siringhe da 2 g cad + 36 puntali €135,50 -10% • 2-15%



Grazie Prof. Loris Prosper



EASYCORD

100% Premium Cotton

cm 330



000 €23,90
00 €21,20
0 €21,20
1 €21,20
2 €21,20
3 €21,20



BEST CORD NANO



cm 254

000.0 €24,90
000 €24,90
00 €24,90
0 €24,90
1 €15,50
2 €15,50



ALUSTAT



TCA DENT



GINGITRAX PERIODENT

Retrattore gengivale PERIODENT



GINGIREX

Consentono di scostare la gengiva marginale senza danneggiarla e proteggendola nel corso della preparazione dentaria. Realizzati in acciaio inox, sono **modellabili ed orientabili**. Facilmente inseribili nell'apposito manico, progettato per poter montare anche l'insero orientabile portalame. Tutti i componenti sono sterilizzabili.

- 33 077GTRK GingiRex Kit 2 Small, 2 Long, 1 Manico € 285,00 € 245,00
 33 077GTRS Retrattore small GingiRex € 35,50 • 2 € 31,50 cad.
 33 077GTRL Retrattore large GingiRex € 35,50 • 2 € 31,50 cad.

Grazie
Prof. Loris Prosper



33 077GTRH € 155,00 € 145,00

Portaimpronte in materiale rigido PERIODENT



BLUE TECH

- Per risparmiare tempo e costose spese di laboratorio
- Robusta struttura in plastica rigida e priva di distorsioni progettate anatomicamente con bordi lisci per il comfort del paziente
- Eccellente ritenzione per il materiale da impronta pur fornendo un'eccellente pressione per rilevare con precisione tutti i dettagli.

Blu-Tech ARCATE COMPLETE conf. 10 pz € 10,00		
Misura	SUPERIORI	INFERIORI
Small	07 P58U55	07 P58LS6
Medium	07 P58UM3	07 P58LM4
Large	07 P58UL1	07 P58LL2

Blu-Tech ANTERIORI conf. 10 pz € 10,00	
Misura	INFERIORI
Anteriore	07 P58UA9
Superiore	07 P58LA10

Blu-Tech QUADRANTI conf. 10 pz € 10,00	
Misura	INFERIORI
N. 8	07 P58QD8
N. 7	07 P58QD7

07 P581K10 Set 10 pz.
€ 12,90 € 10,00



Le sezioni della base possono essere facilmente rimosse con una fresa.



lo spessore ridotto dei bordi sulla parete labiale facilita la rimozione in presenza di perni inclinati

PVS per modelli e restauri indiretti



MACH-2
BLUE MOUSSE

Per ottimi restauri indiretti. Il sistema Mach-2 consiste di due materiali in silicone speciale: **1.** Materiale liquido Mach-2; **2.** Materiale tissotropico Blu Mousse. Dopo l'indurimento i 2 materiali producono in pochi minuti un modello preciso, liscio, senza bolle e dimensionalmente stabile. **Indicato per:** • Intarsi in composito semi-diretti • Provvisori indiretti in resina • Lavori indiretti con Ribbond • Preparazione modelli per mascherine.

07 72333 MACH2 cartucce 2x50 ml. Mixing Tips: 10 Yellow, 10 gray intra oral

€ 81,00 € 69,00

07 72357 Blu-Mousse superfast 2x50 ml. 10 mixing tips € 79,40 € 68,00



2-Min Set

Hydrogum 5

Alginato cromatico a presa extra rapida

5 giorni di stabilità dimensionale.

Alginato scansionabile ad elevate performance con 10 micron di riproduzione del dettaglio e 5 giorni di stabilità dimensionale.

In quanto scansionabile, facilita l'accesso al workflow digitale e migliora la comunicazione con il laboratorio che può direttamente ottenere un modello digitale (senza passare dalla fase di colatura).

07 42170 Hydrogum 5 Long Life, 1 busta 453 g. € 15,40 € 13,90



Alginato superiore Image DustFree

• Piacevole aroma di menta • Colore verde, massimo contrasto e lettura dei dettagli • Biodegradabile al 100% • Ottimo anche per la realizzazione diretta di provvisori.

Agevole miscelazione consente la realizzazione di modelli di qualità insuperata grazie alla superficie levigatissima. Le confezioni in buste di polialumino da 500 g aumentano la conservabilità.

Alginato Image Dustfree, aroma di menta. Image 500 g.

07 321416 Fast 2 min. € 13,00 • 07 321426 Regular 3 min. € 13,00



C&B Lubricant

Isolante super sottile che contribuisce alla rimozione delle impronte in idrocolloide alginato da aree tendenzialmente soggetti a strappi. Si comporta come un sulfattante che agevola lo scorrimento dei materiali di impronta.

Consigliato per i fili Best Cord Nano.

07 39190 C&B Lubricant 60 ml. € 32,00 € 19,00



Puntali Terminali Intraorali

46 452091 Terminali per puntali miscelatori Heavy e Medium, trasp. 48 pz. € 26,60 ad esa. € 9,00

46 P5090 Termin. intraorali PERIODENT gialli 100 pz. € 23,60 € 12,50



L'anestesia più confortevole per il dentista è anche la più confortevole per il paziente

"Una scienza rivoluzionaria per una tecnica rivoluzionaria"

Dr. Mark Hockman

Il **Sistema Wand-STA** utilizza un ergonomico e leggero manipolo sterile monopaziente con ago premontato. Accoglie ogni tipo di anestetico in tubofiala ed è dotato di aghi di diversa lunghezza e diametro (gauge).


Il **Sistema Wand-STA** viene utilizzato per somministrare l'anestetico secondo le tecniche tradizionali ed in base alle innovative procedure: **STA** (singoli denti), **AMSA** (Anteriore Mediana Superiore Alveolare) e **P-ASA** (Palatale-Anteriore Superiore Alveolare).

- La **tecnologia DPS (Dynamic Pressure Sensing)** fornisce in tempo reale il feedback visivo e sonoro che guida l'operatore nella posizione ottimale dell'ago in ogni momento dell'iniezione.
- La **tecnologia DPS** consente al dentista di bloccare la penetrazione all'inizio del legamento parodontale evitando così danni biologici e dolore post-operatorio



- L'erogazione a controllo computerizzato di STA consente di somministrare l'anestetico mantenendosi sotto la soglia di dolore del paziente: una goccia ogni 2 secondi.
- Le anestesi nei singoli denti possono essere somministrate con maggiore precisione e senza stress poiché STA fornisce conferma visiva e sonora della corretta posizione ed erogazione dell'anestetico.
- STA aumenta il successo anche nel somministrare le tronculari - la tecnica reciprocante del manipolo previene la deflessione dell'ago - migliorando l'abilità nel raggiungere subito il successo.
- Con STA potrete iniziare subito a lavorare - l'anestesia è più rapida ed i pazienti possono tornare ai propri impegni senza intorpidimenti collaterali.

L'anestesia palatale viene eseguita in tre fasi:

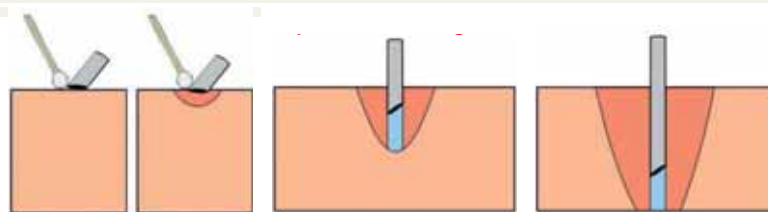

1. Contatto e attivazione del flusso

Uso topico sulla mucosa. Sul palato usare una tecnica di pre-puntura applicando pressione su ago e tessuto per 10 sec. Ruotare quindi con movimento oscillante per penetrare il tessuto.

2. Penetrazione con flusso attivo

Ruotare lentamente l'ago mentre passa attraverso il tessuto pre-anestetizzato, fino al raggiungimento del sito d'iniezione (l'anestetico precede l'ago nel percorso).

3. Erogazione

Continuare la somministrazione dell'anestetico con flusso lento per il tempo necessario in base all'anestetico utilizzato.

01 381300	STA Sistema completo anestesia indolore richiedi offerta del momento e dilazioni	€ 3.250,00
-----------	---	------------

Manipoli STA cf. 50 pz. € 195,00 • 2 cf. € 185,00 cad.		
1/2" 30ga	1" 30ga	1 1/4" 24ga
01 381311	01 381312	01 381313

Vista apertura dall'alto



Monouso e resistenti alla perforazione.



Contenitori rifiuti speciali e Aghi usati PSSA

Agevolazione nello smaltimento e nella rimozione degli aghi.
• Alette antideflusso • Meccanismo di sgancio • Indicazione riempimento massimo • Disponibilità di supporti vari • Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento.

PSSA 06 cap. 600 ml - 10x10x14,5 cm	PSSA 15 cap. 1,5 l - 14x14x16,5 cm	PSSA 20 cap. 2,0 l - 14x14x21 cm
53 052211 6 pz € 6,90	53 952213 6 pz € 9,90	53 952214 6 pz € 11,90
53 052211E 100 pz. € 86,00	53 952213E 100 pz. € 123,00	53 952214E 100 pz. € 110,00



Sistema Erogatore di anestetico locale computerizzato

L'anestesia intraligamentare diventerà la prassi rendendo un'eccezione l'infiltrazione e la tronculare, comunque con Calaject più facili e precise. Uno dei segreti per l'anestesia indolore è la somministrazione lenta e controllata dell'anestetico (1 goccia ogni secondo). Diventano possibili anestesi profonde dei singoli denti e palatali, indolori e senza successivi intorpidimenti di guance, labbra e lingua. **Flessibilità d'installazione.** Funziona anche con la pedaliera del riunito. • **Confort per il paziente** - aiuta a rafforzare la fiducia dei pazienti e li fidelizza • **Facile per l'operatore** - Flusso automatico senza pressione. Tre regolazioni programmate per: anelgesie locale del legamento parodontale (PDL), infiltrazione, tronculare • **Economico** - nessun costo aggiuntivo per consumabili - terminale porta tubo fiala autoclavabile - utilizza aghi convenzionali e tubofiale standard. **Unità di controllo:** • Pannello touch screen, liscio e igienico; facilissima operatività "one touch"; ottima visibilità del programma selezionato • 3 programmi automatici preimpostati • Indicatore digitale a colonne per visualizzare la resistenza che l'ago incontra alla sua estremità durante l'anestesia • Batteria ricaricabile agli ioni di litio, non serve l'alimentazione a rete (solo per la ricarica) • Segnale acustico della velocità d'iniezione. **Manipolo e Supporto:** • Ergonomico e perfettamente bilanciato • Completamente esente da suoni e vibrazioni fastidiose • Visibilità diretta della tubofiale durante l'intera procedura • Aspirazione automatica (passiva) • Utilizzo di aghi dentali standard • Supporto con dispositivo di sicurezza per il reincappucciamento dell'ago usato (contaminato) • Cilindri trasparenti autoclavabili e riutilizzabili.



01 781300 Calaject sist.completo € 3.500,00 € 2.900,00

Siringa per anestesia Ronvig, garanzia 5 anni!

La siringa a cartuccia **ASPIJECT® Active Compact** offre numerosi vantaggi: **Manico e impugnatura ergonomici.** • La breve distanza tra l'anello per il pollice e il supporto per le dita assicura una presa sicura per tutte le dimensioni di mano • Il manico nero della siringa è sagomato per una presa confortevole, riducendo l'affaticamento della mano e migliorando la precisione • L'impugnatura ergonomica consente un maggiore controllo della siringa durante l'aspirazione e l'iniezione • Il design ergonomico minimizza lo sforzo della mano, permettendo di concentrarsi sulla tecnica di iniezione piuttosto che sulla presa della siringa. **Aspirazione semplificata.** Poiché le siringhe a cartucce sono utilizzate con una sola mano, eseguire il movimento attivo di trazione per l'aspirazione può essere impegnativo senza perdere il controllo. La **ASPIJECT® Active Compact** risolve questa sfida: • La breve distanza dell'asta del pistone consente un controllo completo durante il movimento di trazione del pistone • La punta con arpione si aggancia facilmente al pistone di gomma della cartuccia. **Somministrazione fluida.** • Il movimento senza attrito del pistone consente una somministrazione fluida e costante dell'anestetico, migliorando il controllo tattile e il comfort del paziente.

01 7340 Siringa Aspiject Active Compact € 188,00 € 155,00

ASPIJECT ACTIVE COMPACT



Siringa intraligamentare Ronvig, garanzia 5 anni!

Siringa a forma di penna in acciaio inox sterilizzabile in autoclave e utilizzata con cartucce standard ed aghi universali. Il dosaggio è controllato e l'iniezione è lenta e atraumatica. • Compatta, utilizzo semplice • Leva di dosaggio automatico dell'anestetico • Cilindro intorno alla cartuccia completamente chiuso, protegge in caso di rottura della tubofiale • Sterilizzabile con ogni sistema • Garanzia 5 anni. **Anestesia intraligamentare PDLA.** La tecnica intraligamentare facilita i trattamenti di routine e fa risparmiare tempo • Azione immediata • Anestesia profonda di un singolo dente • Denti in più di un quadrante possono essere trattati nella stessa seduta • Controllo del dolore delicato • Assenza d'intorpidimento dei tessuti molli • Sostituisce la maggior parte delle iniezioni palatali • Riduce sostanzialmente il rischio di ematoma.

01 7373 Sir. intraligamentare Paroject € 339,00 € 289,00
Ricambi Siringhe Ronvig sempre disponibili



PAROJECT



Prof. Dr. Peter Sykes
BDS, LDS, RCS.
Clinical review,
Dental Practice.



Siringa aspirante a inserimento laterale

In acciaio tedesco Hi-Tech Stainless Steel.
Sterilizzabili in autoclave a 134°C.

01 031218 PerioJet siringa aspirante attacco metrico 1,8 ml € 38,50 € 31,00 • 2 € 27,00 cad.



PERIOJET

Siringa intraligamentare PERIODENT

Dispensa con precisione 0,2 ml di anestetico grazie al sistema a pressione perfettamente calibrato • Azione a ghiera per una pressione positiva rispetto ai vecchi sistemi a molla, non può perdere la calibrazione • Erega pressione costante e controllata, riducendo così i rischi di frattura della tubofiale.

01 037PNT Con due proteggi cartridge € 135,00 € 115,00 • 2 € 105,00 cad.



PERIO-N-TRALIG



Diga Latex e Latex Free *PERIODENT*

First class Hi-Tech Pure Latex Ipoallergenico. Sicura e massima resistenza allo strappo

Garanzia di qualità e freschezza. Sempre!

- Il processo di produzione consente la massima riduzione delle proteine allergeniche del lattice naturale
- Fogli separati ad uno ad uno da carta
- Facile presa e maggior controllo dell'igiene
- Massima qualità nella scelta della materia prima, nei sistemi di produzione, nella selezione e nel confezionamento del prodotto finito.

HI-TECH LATEX MEDIA € 16,90	
Verde	Blu
12 073121	12 073124
7 € 14,50 cad. • 15 € 13,50 cad.	

HI-TECH PREMIUM LATEX HEAVY € 17,90	
Verde	Blu
12 073131	12 073134
3 € 15,50 cad.	

LATEX FREE MEDIA € 36,50	
Verde	Blu
12 075321	12 075324
15 x 15 cm, conf. 20 fogli • 2 € 35,00 cad.	



PERIODAM PLUS



Latex-Free sottovuoto durata pressoché illimitata

Kit Diga *PERIODENT* e componenti


Kit completo per la tecnica della diga di gomma. Ogni componente è acquistabile anche separatamente.

Contiene: Pinza per uncini *PERIODENT* Perio Clamp • Pinza fora-diga *PERIODENT* Ivory Style • 3 Archetti tipo young (S,M,L) • 10 Uncini con alette tranne il W8A: 00, 3, 4, 12A, 13A, 27, 29, 210, 212, W8A • 1 Piastra Inox organizer per 10 uncini • 1 Cassetta Inox "Rubber Dam Complete System" • 36 Fogli diga *PERIODAM* blu media (15x15 cm),



12 017KDD Kit Diga Deluxe	€ 410,00	€ 320,00
12 05730 Foradiga <i>PERIODENT</i> Ivory Style	€ 78,30	€ 68,00
12 057140 Allarga uncini <i>PERIODENT</i> Ivory Style	€ 56,70	€ 48,00
12 05150* Allarga uncini <i>PERIODENT</i> UniPalm	€ 81,40	€ 69,00
12 0970IA* Archetto Ivory Style Adult	€ 40,20	€ 31,00
12 0970IC* Archetto Ivory Style Child	€ 40,20	€ 31,00

Archetto Young Stainless Steel 1 pz. € 19,50 • 2 € 13,00 cad.		
12 09101	12 0970M	12 09102
Piccolo 8 x 8,5 cm	Medio 10 x 9,5 cm	Grande 12,5 x 12,5 cm

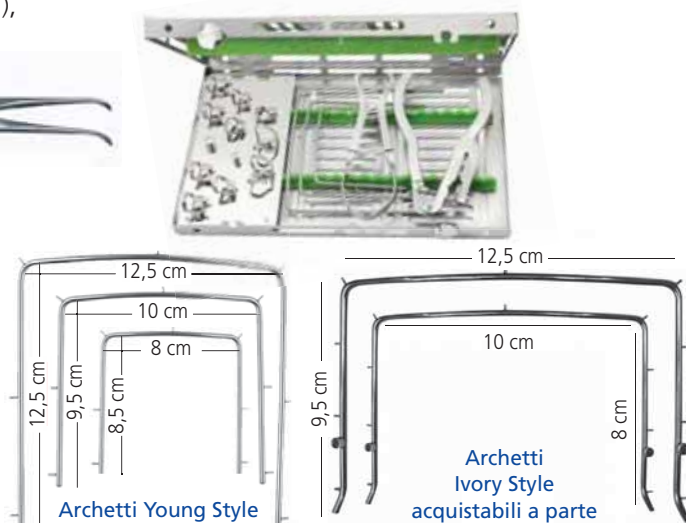

Diga con archetto montato ZIRC Latex Free

Diga di gomma innovativa e pratica con archetto flessibile incorporato


Ideale per l'isolamento nei settori anteriori

- Molto confortevole perché si adatta all'esterno della bocca
- L'archetto flessibile è parte della diga che ha un foro decentrato (1,27 cm dal centro) che riduce la possibilità di strappare la diga (possono essere fatti ulteriori fori)
- Disponibile in lattice naturale o latex free. Translucente, molto estensibile, resistente agli strappi fornisce ottima visibilità
- Radiografie senza togliere Insti-Dam ma piegandola a lato
- Minima trazione sull'uncino, Monouso.

12 57019	Original, 20 pz.	€ 112,00	2 € 98,00 cad.	• 4 € 89,50
12 57037	Relaxed Fit, 20 pz.	€ 114,00	2 € 96,95 cad.	• 4 € 91,00



INSTI-DAM LATEX FREE

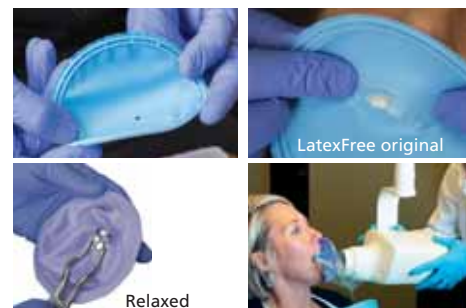

Fili elastici Latex Free per diga

Speciale cordoncino elastico progettato proprio per stabilizzare efficacemente la diga di gomma nella cavità orale durante procedure odontoiatriche. Facilita l'isolamento del campo operatorio, migliorando la visibilità e l'efficienza clinica. **Caratteristiche principali.** • Funzione: stabilizza la diga di gomma posizionandosi negli spazi interdentali tra i denti esposti e quelli coperti dalla diga. • Materiale: **Senza Lattice**, cordoncino elastico, disponibile in tre spessori per adattarsi a diverse esigenze cliniche: Fine (blu) • Medio (verde) • Grosso (rosa) • Confezione: dispenser contenente 1,2 metri di cordoncino, facilitando il dosaggio e la conservazione.

Modalità d'uso. **1.** Tagliare circa 4 cm di cordoncino dal dispenser. **2.** Applicare un lubrificante idrosolubile per facilitare l'inserimento. **3.** Inserire il cordoncino nello spazio interdentale tra il dente esposto e quello coperto dalla diga. **4.** Regolare la lunghezza, se necessario, tagliando l'eccesso con forbici.

Nota: L'uso di un lubrificante idrosolubile facilita l'inserimento del cordoncino negli spazi interdentali. **Precauzioni.** • Conservare nella confezione originale, al di sotto dei 25°C, lontano dalla luce solare diretta. • Tenere fuori dalla portata dei bambini.

12 3951F	BLU fine	12 3951M	VERDE medio	12 3951L	ROSA grosso	€ 24,60	€ 20,90	2 a scelta € 19,00 cad.
----------	----------	----------	-------------	----------	-------------	---------	---------	-------------------------



RUBBER-DAM CORD





UNCINI IVORY OUTLET

Uncini originali **IVORY** (W = senza alette consigliati per posteriori)

codice 12 42... seguito dal numero dell'uncino

1A 26,60 13,90 anteriori e premolari	W4 26,60 5,50 mol. sup. picc.	W5 26,60 5,50 molari sup. larghi	W7 26,60 5,50 molari inf. quadrati	7B e W7B ad esa 16,50 5,50 molari inf. extra larghi	10 26,60 9,50 W10 ad esa 9,50 molari piccoli dx
10A e W10A ad esa 19,90 5,50 molari dx	11 26,60 W11 ad esa 5,50 molari piccoli sx	11A e W11A ad esa 19,90 5,50 anteriori inf. piccoli	12 e W12 ad esa 18,90 5,50 molari inf. dx	13 ad esa 16,50 5,50 molari inf. sx	W13 ad esa 16,50 3,00 mol. inf. sx
W14 ad esa 22,90 8,50 gen. tondi parz. rotti	14A 18,90 5,50 W14A 18,90 9,50 come 14 + largo	14AD ad esa 16,50 5,50	15 ad esa 16,50 5,50 labiale incisivi inf.	17 ad esa 16,50 3,00	18 ad esa 16,50 3,00 mol. inf.
18N ad esa 16,50 5,50	20 ad esa 17,90 5,50 premolari inf. sx	22 e W22 ad esa 26,60 12,00 molari sup. dx	22A e W22A ad esa 26,60 3,00 molari dx	23 e W23 ad esa 16,50 3,00 molari sup. sx	23A e W23A ad esa 16,50 3,00 molari sx
24N ad esa 26,60 14,90 molari festonato largo	25N ad esa 26,60 9,50 molari festonato largo	W27 ad esa 19,90 5,50 molari cavità distali	28N 26,60 11,50 molari	30N ad esa 16,50 3,00	31N ad esa 16,50 3,00 molari sup. festonato
W56 23,90 11,50 mol. grandi inf.	21 ad esa 17,90 2,50 rulli cotone molari	21A ad esa 17,90 2,50 rulli cotone molari	31 ad esa 16,50 2,50 rulli cotone	27 S.S. White 14,50 2,50 molari decidui	

RUBBER-DAM LIQUID

Diga chimica fotopolimerizzabile progettata per proteggere le gengive durante trattamenti odontoiatrici come sbiancamento, mordenatura, microabrasione e sabbatura. • **Blu**, per migliore visibilità • **Ottima adesione** gengivale • **Facile** da applicare e rimuovere. Grazie anche alla sua consistenza e prodotto consigliato anche per la tecnica "stamp technique": impronta dell'anatomia occlusale prima della preparazione della cavità, in modo da utilizzarla dopo le preparazioni per modellare l'ultimo strato di composito non polimerizzato, per ottenere una ricostruzione fedele alla morfologia originale del dente. Grande risparmio di tempo per ritocchi e lucidatura post-operatoria.



12 393RDL1 Sir. 1,2 ml con applicatori € 20,15 € 14,50
12 393RDL4 4 Sir. x1,2 ml e applicatori € 63,30 € 47,70

CRYSTAL TRIAL SET per te! NEW

Ecco il conveniente Set da 4 specchietti Crystal Viola che non lascerai più perché più brillanti e resistant, legger in mano e piacevoli al contatto con le mucosa orali. Estremamente durevoli, hanno il riflettente perfettamente sigillato alla struttura del manico, ciò rende assolutamente più sicuro ed efficace il trattamento di decantaminazione e sterilizzazione.



33 362R Specc. Crystal Soft Grip HD n. 5 viola € 51,15 € 42,00

Sigillante idrofilo per diga e di più!




ORASEAL

OraSeal aderisce persino sotto acqua e saliva!

• Isolamento aggiuntivo con diga: Se la diga non sigilla bene al margine gengivale, sopra cuspidi lunghe o in presenza di connettori protesici che impediscono l'adattamento. • Riparazione perdite della diga: piccoli fori, lacune, o dove la diga si è strappata. • Protezione gengivale durante procedure chimiche (es. sbiancamento con perossido, etch con acido fluoridrico) per evitare irritazioni / danni. • "Block-out" per impronte: colmare spazi indesiderati sotto impianti, barrette, attacchi protesici, ponti o in zone con grandi embrasure gengivali, per evitare che il materiale da impronta o resine si blocchino negli undercut. • Isolamento per bonding / ortodonzia: prevenire contaminazioni da saliva, specialmente a bordo gengivale o attacco di brackets ortodontici.

12 19351 OraSeal Caulking 4 sir. x 1,2 ml € 49,40 € 44,00 • 46 12661 White Mac Tip, 20 pz. € 12,20 € 11,00

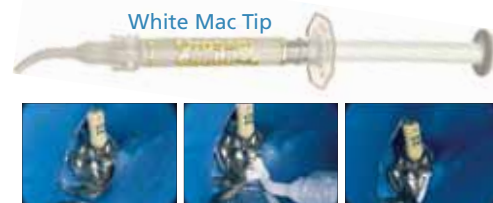

Dispositivo per aspirazione continua ZIRC

È un prezioso ausilio per l'isolamento. Facilmente si fa scorrere Pink Petal™ su un qualsiasi aspirasaliva creando un dispositivo che fornirà aspirazione continua. Questo prodotto è di grande sollievo per i pazienti che vogliono tenere loro stessi l'aspiratore e che non vogliono deglutire durante una procedura.

Ideale per scaling e levigatura radicolare, detartrasi con ultrasuoni, sigillature. Mantiene stabile e fermo l'aspirasaliva. Protegge e ritrae la guancia. Il paziente può chiudere facilmente con l'aspirasaliva. Scorre facilmente sull'aspirasaliva. Materiale morbido e confortevole. Uso singolo. Privo di lattice.

32 36976 Pink Petal 100 pz. € 81,50 € 77,00 • 2 € 71,00 cad.

Questo petalo rosa ha cambiato la qualità della mia vita alla poltrona: basta rulli di cotone, basta mucose aspirate o paziente che deglutisce! Inserisci l'aspirasaliva col petalo e te ne puoi dimenticare, e il paziente ne apprezzerà il comfort.
Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone



PINK PETAL



Aspirasaliva tienilingua

Offre un'area di lavoro asciutta. Tiene la lingua in una posizione stabile per proteggerla da lesioni. Funzionamento semplice, facile da posizionare e rimuovere. Comodo, senza spigoli vivi o angoli.

La grande superficie di aspirazione evita il blocco ed è più confortevole. Riduce la sedimentazione di materiali di fresatura nelle tubazioni e filtri. Uso singolo. Fornito premontato.

32 32010 10 pz. € 26,50 • 2 € 23,00 cad.

32 32050 50 pz. € 90,00 • 2 € 80,00 cad.



LINGUA-FIX



Spugnette confortevoli per aspirasaliva

Confortevoli spugnette da utilizzare inserite nell'aspirasaliva.

- Previene il risucchio delle mucose con la conseguente irritazione delle stesse
- Aumenta il comfort del paziente
- Migliora l'aspirazione
- Riduce il rumore dell'aspirazione
- Monouso.

32 329970 Se-Cushion 100 pz. € 41,50 • 2 € 38,00 cad. • 4 € 35,00



SE-CUSHION



Aspirasaliva modellabili in PVC non tossico

Modellabili con anima metallica incorporata nella cannula senza colle, Sistema innovativo brevettato. Cappuccio d'aspirazione rimovibile inserito in modo totalmente sicuro: evita il distacco durante l'uso.

Confezioni igieniche in buste sigillate da 100 pz.

a scelta 2 -10% • 5 -15%

13 cm	100 Pz € 3,80	10x100 pz. € 35,90	15 cm	100 pz. € 3,80	10x100 pz. € 35,90
ARANCIONE	32 0241361	32 0241311	ARANCIONE	32 0241561	32 0241511
AZZURRO	32 0241362	32 0241312	AZZURRO	32 0241562	32 0241512
BLU	32 0241363	32 0241313	BLU	32 0241563	32 0241513
GIALLO	32 0241364	32 0241314	GIALLO	32 0241564	32 0241514
ROSSO	32 0241365	32 0241315	ROSSO	32 0241565	32 0241515
TRASP.	32 0241366	32 0241316	TRASP.	32 0241566	32 0241516
VERDE	32 0241367	32 0241317	VERDE	32 0241567	32 0241517



PERIODENT



Compresse assorbenti confortevoli

Normali o con superficie riflettente

NeoDrys possono in casi selezionati, sostituire la diga per procedure di sigillatura e con i compositi, prevengono la diluizione del gel per la fluoro-profilassi, migliorano l'accuratezza dei materiali di impronta e proteggono le marcature occlusali. NeoDrys facilitano inoltre il lavoro con i laser, le preparazioni per amalgama, l'ortodonzia e le procedure di cementazione più lunghe.

Utilizzo facile: inserire con la freccia verso il fondo della bocca ed il lato colorato contro la guancia. Inizia ad aderire entro pochi secondi e resta in sede finché non viene rilasciato con abbondante spray d'acqua sul lato vestibolare. Confortevole per operatore e paziente: grazie al design flessibile e conicizzato ed ai morbidi angoli "comfort edge". Il vantaggio aggiuntivo del lato riflettente la luce è molto apprezzato, il foglio riflettente agisce anche da protezione delle guance durante l'uso dei manipoli.

53 39401 S Giallo/Bianco 50 pz	€ 24,00 • 2 € 20,90 cad. • 4 € 19,00
53 39402 L Blu/Bianco 50 pz	€ 24,00 • 2 € 20,90 cad. • 4 € 19,00
53 39411 Riflettente S Giallo 50 pz	€ 26,50 • 2 € 23,00 cad. • 4 € 21,50
53 39412 Riflettente L Blu 50 pz	€ 26,50 • 2 € 23,00 cad. • 4 € 21,50



Applicare



Lato contro guancia



Spray per rimuovere



Rulli colorati in cotone Premium Quality

Il rivestimento speciale anti-adesione, le fibre compatte e la speciale levigatura, consentono di proteggere le mucose anche durante la rimozione.

Rulli PerioRolls - Lunghezza 36 mm € 14,60			
n. 1 ø 8 mm - 500 pz. 250 g	Colore	n. 2 ø 10 mm - 400 pz. 310 g	
53 09301B	BLU	53 09302B	a scelta
53 09301G	VERDE	53 09302G	2 -10%
53 09301V	VIOLA	53 09302V	4 -15%
53 09301P	ROSA	53 09302P	6 -20%
53 09301Y	GIALLO	53 09302Y	

Ad esa nr. 1 cf. 750 pz.: verde (53 093312) € 13,50



PERIOROLLS

Premium Quality:
Coloranti naturali, sicuri
Non lasciano pelucchi!



100% Purissimo Cotone

Puntali aspiranti per siringhe aria/acqua

Puntali Monouso per siringhe aria/acqua (short Euro type*)

Garantiscono un getto d'aria potente e asciutto, aria e acqua sono tenute separate dallo speciale design • Design unico "quad air core" per garantire aria secca • Bordi arrotondati per il massimo comfort del paziente.


32 P21628S S-T Short EU, col.ass.spectrum 250 pz. € 39,50 € 33,00

32 P21628W S-T Short EU, bianco 250 pz. € 39,50 € 33,00

* Disponibili anche per siringhe attacco americano.



SAFE-TIP

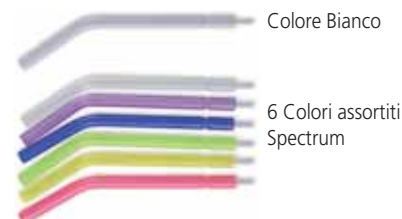

Colore Bianco

6 Colori assortiti Spectrum

Cannule d'aspirazione con bordo morbido

Cannule d'aspirazione usa e getta straordinariamente confortevoli

- Il bordo morbido di Soft Touch elimina il rischio di lacerazione del tessuto orale • Il Tubo è sufficientemente rigido e resistente per la retrazione della guancia • Ventilato per ridurre l'aspirazione dei tessuti non necessaria e aumentare l'area di aspirazione
- Superficie accuratamente lucidata per un funzionamento regolare e silenzioso
- Adatto a aspiratori standard da 11 mm • Colore: bianco (con punta Blu Lavanda).

32 P2STCB punta colore blu 50 pz. € 7,20 € 5,90

32 P2STCL punta colore lavanda 50 pz. € 7,20 € 5,90



SOFT TOUCH



NEW

Punta morbida

Tubo rigido


Cannule d'aspirazione HVE angolate

Design specifico per l'aspirazione di grandi volumi durante gli interventi chirurgici. Progetto pensato sia al professionista, che al comfort del paziente. • Compatibili con tubi di aspirazione standard europei da 16 mm • Ergonomico e robusto, ideale per la retrazione delle guance durante le procedure • Superficie interna e bordi completamente lucidati per un funzionamento silenzioso e massimo comfort per il paziente • **Autoclavabili prima dell'uso, fino a 134 °C** • Monouso, senza lattice e senza ftalati.

32 P1335L Adulto Large • 32 P1335M Adulto Medio • 32 P1335P Pedo (cf da 10 pz.) colori ass.: lavanda, azzurro, verde chiaro, lime e giallo € 16,90 € 14,90



HVE

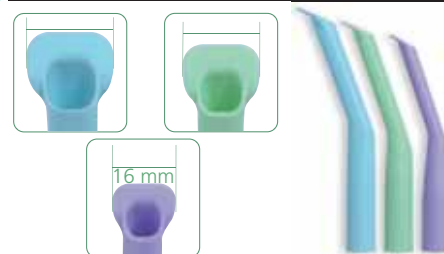

16 mm

ELSODENT Made in France! Supportata da test universitari, la gamma privilegia i monomeri non idrolizzabili sviluppati attraverso la ricerca e sviluppo interna, offre prodotti universali (multi-substrato, multi-modalità, multi-indicazione) e semplifica i flussi di lavoro alla poltrona grazie a una maggiore compatibilità (Smart Concept, Touch Cure) per protocolli più rapidi, semplificati e prevedibili.



Formule prive di interferenti endocrini o resine degradabili potenzialmente tossiche, la gamma BIO+ è priva di BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA e HEMA aggiunto.

La gamma BIO+ di Elsodent comprende compositi, adesivi, cementi e resine provvisorie progettati per ridurre i rischi associati al rilascio di monomeri idrolizzabili, offrendo al contempo elevate prestazioni cliniche ed estetiche.



Composito universale mimetico nano ibrido



PURESHADE

PURESHADE. Solo 3 colori, per semplificare il protocollo e la gestione dell'inventario senza compromettere le qualità cliniche ed estetiche dei restauri.

- Selezione del colore semplificata
- Consistenza ideale
- Anteriori-posteriori

Mimetismo perfetto. Un'innovativa combinazione di pigmenti e riempitivi specifici di diverse dimensioni e forme consente alla luce di trasmettere il colore del dente al composito utilizzato. Per un'estetica perfetta e un risultato naturale con un'unica tonalità Pureshade per il restauro di più denti di diverse tonalità VITA. BIO+ privo di: BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, senza HEMA aggiunto.

PURE SHADE Composito mimetico universale

ogni 2 siringhe in omaggio
1 cf = 50 mascherine
IIR SafeMask Medicom



PURE SHADE Sir 4 g € 85,00 € 68,00			
Tonalità	1	2	3
Codice	22 E72PS41	22 E72PS42	22 E72PS43

PURE SHADE Unidose 20x0,3 g € 116,00 € 89,00			
Tonalità	1	2	3
Codice	22 E72PS01	22 E72PS02	22 E72PS03

Guida equivalente alle tonalità VITA	
Tonalità 1	A1 - B1 - B2 - C1 - D2
Tonalità 2	A2 - A3 - C2 - D3 - D4
Tonalità 3	A3.5 - A4 - B3 - B4 - C3 - C4

1. Dopo applicazione dell'adesivo HEALBOND Universal
2. Risultato finale dopo la modellazione della superficie occlusale



Adesivo universale fotopolimerizzabile



HEALBOND

HEALBOND Universal

Multi-supporto. La molecola adesiva 10-MDP favorisce una complessazione più stabile e duratura con l'idrossiapatite, garantendo un'adesione forte e affidabile su tutte le superfici: strutture dentali, composito, ceramica, metallo e zirconia.

Multi-modalità. Adesivo universale di ottava generazione <=> valori di adesione equivalenti in modalità automordenzante, con mordenzatura selettiva o totale!

Multi-indicazione: Restauri diretti e indiretti

Concetto intelligente. Compatibilità con la gamma di prodotti ELSODENT. Nessun attivatore necessario per la modalità duale

BIO+: privo di: BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, senza HEMA aggiunto.

22 E41BMP-5 HEALBOND UNIVERSAL Bonding - 5ml € 121,00 € 96,00

22 E41BU5 xxxxxxxx xxxxx € 106,00 € 85,00



più economico:
250 gocce al posto di 170!
e in omaggio
1 cf da 30 Zeroflox



Composito fluido nano-ibrido



PUREFILL

PUREFILL Flow & Light Flow

Nano-ibrido, 2 viscosità. La fluidità è l'unica differenza significativa; le proprietà meccaniche ed estetiche sono identiche. **PUREFILL Light Flow:** il più fluido, ideale per cavità o piccoli restauri. **PUREFILL Flow:** elevata viscosità. Rimane in posizione senza colare. Può essere utilizzato senza matrice. **BIO+:** privo di BPA, BisGMA, BisEMA, senza TEGDMA, senza HEMA aggiunto

+ omaggio 1 cf = 50 mascherine
IIR SafeMask Medicom



Purefill Flow
Alta viscosità

Purefill Light Flow
Bassa viscosità



PureFill Flow & PureFill Light Flow 2x 1,2ml (2g)+10 tip rosa € 121,00 € 89,00					
Tonalità	A1/B1	A2	A3	A3,5	B2
Cod. Flow	22 E71PFHA1/B1	22 E71PFHA2	22 E71PFHA3	22 E71PFHA3,5	22 E71PFHB2
Cod. Light Flow	22 E71PFLA1/B1	22 E71PFLA2	22 E71PFLA3	22 E71PFLA3,5	22 E71PFLB2

Materiale Dual Core per ricostruzione



CORE D

CORE D

- Elevata resistenza alla flessione = 135 MPa
- Durezza equivalente alla dentina
- Per sigillare i perni canalari
- Elevata tissotropia: non richiede matrice

Smart Concept: doppia adesione a contatto con la resina, senza attivatore BIO+, senza: BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, senza HEMA aggiunto.

22 E55CDD CORE D Dentina + 20 tip gialli + 20 tip intraorali € 284,00 € 228,00



Tissotropico non scorre

Cemento Provvisorio



SEALTEMP

Cemento provvisorio autoindurente a base di resina BIO+

SEALTEMP S + Universale + Ritensione standard per ponti e corone provvisori su monconi normali e impianti.

SEALTEMP S Trasparente + Estetico + Traslucido, per caratteristiche estetiche eccezionali. Ideale per inlay, onlay e faccette.

SEALTEMP + Ritensione + Alta ritensione per ponti e corone provvisori su monconi bassi. Cementazione definitiva di corone su impianto.



STD-16	22 E51STD16	SEALTEMP 2x syringes 5ml + 20 brown mixing tips	€ 129,00 € 103,00
STDS-16	22 E51STDS16	SEALTEMP S 2x syringes 5ml + 20 brown mixing tips	€ 129,00 € 103,00
STDSC-8	22 E51STDSC8	SEALTEMP S Clear - 1x 5ml automix syringe + 10 mixing tips	€ 69,50 € 56,00

Cemento definitivo Duale



INNOCEM

INNOCEM

Cemento resinoso adesivo, automordenzante e a doppia polimerizzazione

Utilizzare in modalità **SOLO** o **DUO** con l'adesivo HEALBOND Universal

Multisuperficie: smalto, metallo, zirconia, ceramica preparata. Tempo di lavorazione confortevole - Facile rimozione del materiale in eccesso - Potere coprente estetico (colori opachi)

MODALITÀ SOLO: solo 1 passaggio - Protocollo semplice e riproducibile. Veloce e facile da usare. Non è necessario pretrattare il dente. Per inlay, onlay, corone e ponti.

MODALITÀ DUO con HEALBOND Universal, per rafforzare il potere adesivo. Per ponti Maryland, faccette in ceramica o composito, perni canalari.

Concetto intelligente: l'adesione diventa duale a contatto con la resina, senza attivatore. Tecnologia IPC = Effetto di polimerizzazione al tatto.

BIO+, senza BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, senza HEMA aggiunto.

IC-10-TA2	22 E51ICTA2	Innocem Translucent A2 + 10 tips (mix + i.o.)	€ 174,00 € 139,50
IC-10-OA2	22 E51ICOA2	Innocem Opaco A2 + 10 tips (mix + i.o.)	
IC-10-OA3	22 E51ICOA3	Innocem Opaco A3 + 10 tips (mix + i.o.)	



Per ogni codice in omaggio
1 cf = 50 mascherine
IIR SafeMask Medicom



Materiale provvisorio composito a lungo termine



PHOENIX MD

Materiale molto speciale, un "Composito" micro ibrido caricato.

• Contenuto di riempitivo: Contiene un'alta percentuale di cariche inorganiche che lo rendono molto più simile a un materiale definitivo che a uno provvisorio • Resistenza: ha una resistenza alla flessione e all'abrasione enormemente superiore. Questo lo rende ideale per provvisori a lungo termine (mesi o addirittura un anno) senza che si buchino o si consumino.

2. Estetica e Lucidabilità. Il costo riflette la resa estetica. Permette di ottenere: • Lucentezza duratura: Non diventa opaco dopo pochi giorni a causa della placca o dei lavaggi • Stabilità cromatica: Essendo un composito denso, non assorbe pigmenti (caffè, vino, fumo) come farebbe una resina porosa. **3. Biocompatibilità (Senza MMA).** Molte resine economiche contengono metilmetacrilato (MMA), che può essere irritante per la polpa e la gengiva, oltre ad avere un odore pungente. Privo di monomero libero residuo tossico, il che favorisce una guarigione gengivale molto più rapida e sana intorno ai monconi. **4. Precisione e "Riparabilità".** Essendo un composito, se si deve modificare il margine o aggiungere un punto di contatto, puoi usare un normale composito fluido da restauro. Lega chimicamente in modo perfetto, cosa che con le resine tradizionali è sempre un terno al lotto.

Ossivora Anatomica made in Germany Phoenix C&B cartuccia 50 ml + 10 tip gialli

A1	25 E11PHMA1	A2	25 E11PHMA2	A3	25 E11PHMA3
€ 172,00 € 137,50					



Per ogni codice in omaggio
1 cf = 50 mascherine
IIR SafeMask Medicom



Localizzatore di carie

Il colorante rosso penetra selettivamente nei tessuti cariati, evidenziandoli e facilitando così la rimozione completa e preservando i tessuti sani.

22 327RD2 Red Detector localizzatore di carie 2 ml € 25,35 € 19,00



RED DETECTOR



Matrici sezionali Ultradent



HALO



Nuovo, per ottenere restauri anatomicamente naturali, riducendo il tempo per la modellazione e rifinitura. **Halo** assicura dei punti di contatto stretti a garanzia della longevità del restauro. La massima separazione tra i denti ottenuta grazie alla forza dell'anello in Nitinol e alla forza attiva del cuneo **Halo**. Questo sistema ideale di separazione consente facilmente di restaurare singoli denti o restauri back-to-back. Il design unico della punta e del profilo dell'anello **Halo** permette alla matrice di adattarsi completamente alla preparazione dal margine gengivale alla cresta marginale e aiuta a mantenere la forma anche in preparazioni estese, garantendo sempre dei restauri che si adattano all'anatomia naturale del dente.

	HALO Original 0038 mm	HALO Firm 0038 mm
mm	50 pz € 49,50	50 pz € 59,50
3,5	23 123448 (5448)	23 123049 (5049)
4,5	23 123450 (5450)	23 123051 (5051)
5,5	23 123452 (5452)	23 123053 (5053)
6,5	23 123454 (5454)	23 123055 (5055)
7,5	23 123456 (5456)	23 123057 (5057)



HALO Cunei 100 pz € 38,00	
S	23 181042 (5042)
M	23 181043 (5043)
L	23 181044 (5044)

HALO Anelli Universali	
1 pz € 109,00	2 pz € 199,00
23 122008 (5008)	23 122009 (5009)

23 123835 (4835) **Kit HALO Mini Original**. Contiene: 2 x anelli universali, 5 x matrici di ciascuna dimensione: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm, 5 x cunei di ciascuna dimensione S, M, L, 1 x organizer Halo. € 210,00

KIT Halo Mini original + Pinza UNP PR MHOK+P € 220,00 (€ 278,00)



Quando i restauri presentano perfetti punti di contatti e una curvatura anatomica il tempo della loro modellazione e rifinitura si riduce. **HALO GARANTISCE CIÒ PER OGNI SINGOLO RESTAURO.**



UNP
12 05750



Porta matrici asimmetrico PERIODENT



BRENNER

Il taglio asimmetrico consente la conicità che garantisce il contatto gengivale più stretto per una sigillatura intima in tutti i restauri • Perfettamente stabili • Spessore ideale anche per spazi stretti • Profilo snello senza ingombri per ottenere sempre bombature adeguate.

23 011K1 Kit 2 Portamatrici: 1 dx/sup.-sx/inf. 2 dx/inf.-sx/sup. + 5 A + 5 B Matr. Brenner € 210,00 € 169,00

23 01242 Brenner A diritte 114 pz. ca. € 179,00 2 € 147,00 cad. • 23 01243 Brenner B curve 108 pz. ca. € 179,00 2 € 147,00 cad.



nr. 1

nr. 2

23 01242 Matrici Brenner A

23 01243 Matrici Brenner B

Separatori PERIODENT



**ELLIOT
IVORY 14**

Ivory utilissimo anche per la cementazione contemporanea di due faccette, situazione in cui i punti di contatto creano problemi. Si procede con la prova di faccetta alla volta; poi se ne cementa 1 e, dopo aver rimosso il cemento eccedente, si posiziona l'altra con il separatore in sede.

33 071902 Elliot • 33 071914 IVORY 14 € 68,00 • 2 a scelta € 56,00 cad.

Grazie Prof. Loris Prosper



Ivory 14

Elliot

Cunei e matrice interdentale di sicurezza

FENDERWEDGE PREP

By Dr. Domenico Massironi
Per ogni Preparazione è necessario iniziare con la **Fase di Separazione**

Preparazione con FenderWedge Prep

Abbastanza difficile

23 334249 Fender Wedge Prep KIT, 36 pz.
€ 74,40 € 59,00



PIUTTOSTO FACILE



Apribocca intelligente


Apribocca intelligente grazie al design unico agevole da inserire e confortevole per il paziente.

Stabilizza e sostiene in modo confortevole permettendovi di mantenere la visuale senza impedimenti sul campo operativo e l'accesso all'area di lavoro riducendo l'affaticamento. Esente da lattice.

XS	Pedo	Standard	Large	€ 62,00 a scelta
33 37710	33 37711	33 37712	33 37713	2 € 55,00 cad. • 4 € 50,00



LOGI BLOC

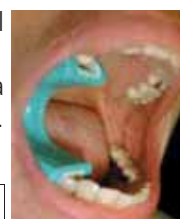

Made in USA



BLU ETCH

Mordenzante ortofosforico 36%

- Viscosità ideale: penetra nelle più piccole irregolarità e non cola sulle superfici verticali
- Ottima solubilità in acqua per un risciacquo rapido e completo • Blu per facilitare il controllo durante l'applicazione.

Indicato per creare superfici ritentive ideali per l'adesione. Utilizzabile anche come decontaminante di superfici di composito o ceramica prima dell'adesione.

Per ogni codice **omaggio** 1 cf. 20 Inspiral Brush Ultradent



Inspiral Brush



22 31BE02	Siringa 2 ml	€ 6,00 € 5,00	22 31BE10	Siringa 10 ml	€ 17,00 € 15,00
22 31BE102	Siringa 2 ml cf. 10 pz.	€ 6,00 € 34,00 • 2 € 29,00 cad.	22 31BE50	Siringa 50 ml	€ 51,00 € 42,00

Adesivo universale monocomponente Universale

Adesivo automordenzante monocomponente di ultima generazione con nuovo Silano ARS (Acid-Resistant-Silane) indicato per ricostruzioni estetiche in composito, riparazioni di restauri, cementazione definitiva di restauri indiretti (comprese faccette) e ricostruzione di monconi. Grazie al nuovo Silano ARS, BeautiBond Xtreme aderisce a smalto, dentina e ad un'ampia gamma di materiali per restauri indiretti (composito, leghe in metalli preziosi e non preziosi, vetroceramica, allumina e ossido di zirconio). Non è necessario un primer aggiuntivo.

22 542449 BeautiBond XTreme, 5ml € 76,65 € 65,00
 22 542447 BeautiBond XTreme vale pack 3x5 ml € 189,00 € 159,00 (ad esa)
 22 542448 BeautiBond XTreme set + acc. 3x5 ml € 101,85 € 85,50

Semplice applicazione. Si inizia la ricostruzione in meno di 30 secondi, senza aspettare!

1. Applicare l'adesivo sulla superficie d'adesione (frizionare per 20 sec. direttamente e dopo la mordenzatura con acido fosforico). Nessun tempo di attesa.
2. Asciugare prima con un getto d'aria delicato per 3 sec. poi con un getto d'aria forte.
3. Fotopolimerizzare (LED 5 sec./ ALOGENA 10 sec.).


Se dopo l'asciugatura ad aria l'adesivo non presenta una superficie lucida ed uniforme, ripetere i passaggi 1 e 2.

Composito fluido ibrido Brevetto PRG SHOFU

F00 Sir. 2,2 g + 5 puntali € 33,55		F03 Sir. 2,2 g + 5 puntali € 33,55	
Colore	Cod	Colore	Cod
A1	22 572301	A1	22 572321
A2	22 572302	A2	22 572322
A3	22 572303	A3	22 572323
A3,5	22 572304	A3,5	22 572324
A4	22 572305	A4	22 572325
B1	22 572306	B1	22 572326
B2	22 572307	B2	22 572327
C2	22 572308	C2	22 572328
D2	22 572309	D2	22 572329
SA0,5	22 572300	SA0,5	22 572320
SA0,50 (opaco A0,5)	22 572310		
A10 (opaco A1)	22 572311	A20 (opaco A2)	22 572332
A20 (opaco A2)	22 572312	A30 (opaco A3)	22 572333
Inc (Incisal)	22 572314	Inc (Incisal)	22 572334
BW (Bleaching White)	22 572315	BW (Bleaching White)	22 572335
		MI (Milky)	22 572336
		CV (Cervical)	22 572337



Per ricostruzioni estetiche nei settori anteriori e posteriori
SuperOfferta: 3 Siringhe a scelta € 78,00 (€ 26,00 cad.)

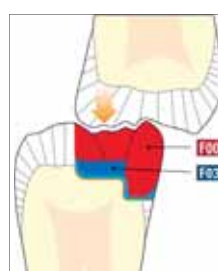

- Restauri dalla I alla V classe, comprese le superfici occlusali
- Eccellente lavorabilità e ottima lucidabilità
- Protezione duratura della salute dentale con la tecnologia PRG
- Straordinarie caratteristiche fisiche
- Compatibile con tutti i sistemi adesivi convenzionali
- Estetica naturale grazie all'effetto camaleontico

Novità! BEAUTIFIL Flow Plus X F00 Gingiva:

22 572+340 (G-Brown) 341 (G-Dark Pink) 342 (G-L Light Pink) 343 (G Orange) 344 (G Violet) offerta 1 sir € 33,55 2 sir € 62,00



BEAUTIBOND EXTREME



Video



NEW

Film 5µm

- Migliori proprietà grazie alla tecnologia dei monomeri quadrifunzionali
- Forte legame adesivo
- Facile utilizzo
- Minimo spessore della pellicola per la massima estetica.



Privo di HEMA



BEAUTIFIL FLOW PLUS X

Composito Flow PlusX F00 Gingiva

Questa nuova linea unisce le caratteristiche e le proprietà del composito Flow F00, inclusa la facilità di lavorazione, con i 5 colori dei compositi Beautiful II Gingiva e permette la realizzazione di restauri estetici in presenza di recessioni gengivali e cavità di V classe.

Beautiful Flow PlusX F00 Gingiva - Siringa da 2,2 g				
G-DP Dark Pink	G-LP Light Pink	G-Or Orange	G-Br Brown	G-V Violet
22 57341	22 57342	22 57343	22 57340	22 57344
€ 33,55 • 2 € 31,00 cad.				



FLOW X GINGIVA



Composito universale micro ibrido SHOFU

RILASCIO E RICARICA DI FLUORO a bassissima contrazione, ideale per restauri estetici nei settori anteriori e posteriori. Radiopaco.



Infiltrazione marginale
Pigmentazione dell'area marginale
Carie secondaria
Crepa



BEAUTIFIL II LS



Sir. € 57,75

Tip € 75,90

CONTRAZIONE <1%

VANTAGGI: • La più bassa contrazione (< 1%) e tensione da contrazione • Eccellente lucidabilità e lucentezza duratura • Elevata resistenza all'abrasione e durezza superficiale duratura • Trasmissione e diffusione naturale della luce • Cariostatico: rilascia Ioni Fluoruro e si ricarica di Fluoro • Cromaticamente stabile prima e dopo la polimerizzazione

A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	A20	A30	Inc	BW
Sir. YE2270	YE2271	YE2272	YE2273	YE2274	YE2275	YE2276	YE2277	YE2278	YE2279	YE2280	YE2281	YE2282	YE2283
Tip YE2284	YE2285	YE2286	YE2287	YE2288	YE2289	YE2290	YE2291	YE2292	YE2293	YE2294	YE2295	YE2296	YE2297

22 57270-283 Siringa 4 g. € 57,75 • 2 a scelta € 43,50 cad.

22 57284-297 Beautiful II LS TIPS da 0,25 g. 20 pz. € 75,90 • 2 a scelta € 57,00 cad.

Composito fluido/pasta: Smalto e Gingiva



BEAUTIFIL ENAMEL E GINGIVA

Enamel Masse Smalto indicate per restauri estetici diretti sia anteriori che posteriori incluse superfici oclusali. Restauri diretti nel settore anteriore. • Restauri policromatici grazie all'effetto camaleonte • Alternativa alle faccette in ceramica • Realizzazione di restauri altamente estetici stratificando e miscelando i colori • Analogo al concetto cromatico della ceramica – semplice corrispondenza cromatica.

Beautiful II Enamel - Siringa da 2,5 g € 51,95			
Translucent	High-Value Transluc.	Low-Value Transluc.	Amber
22 57250	22 57251	22 57252	22 57253



Caso clinico, prima e dopo il restauro con BEAUTIFIL II Enamel



Gingiva • Indicato per recessioni, abutment e bordi di corone esposti, erosioni radicolari, papille assenti • Colori stratificabili e miscelabili per soluzioni estetiche senza chirurgia • Perfetto per restauri di V classe.

Beautiful II Gingiva - Siringa da 2,5 g € 51,95				
Dark Pink	Light Pink	Orange	Brown	Violet
22 57257	22 57256	22 57260	22 57259	22 57258



Caso clinico, prima e dopo il restauro con BEAUTIFIL II Gingiva Light Pink



Enamel/Gingiva € 51,95 € 49,50 • 2 a scelta Enamel/Gingiva € 48,00 cad.

Composito a Cromo Universale

Un composito per tutte le tonalità. Le proprietà ottiche di Vittra APS Unique sono evidenti dopo la polimerizzazione. Per raggiungere il miglior risultato è fondamentale una buona interfaccia di contatto fra la struttura restante del dente ed il composito.

ALTA ESTETICA CON SEMPLICITÀ.

SEMPLICEMENTE TUTTO QUELLO CHE SERVE • Da A1 a D4 in un unico composito.

22 F75212 Vittra APS Unique 4 g. € 62,90 € 42,00



VITTRA UNIQUE



Polimerizzazione: Gel barriera all'ossigeno



INOX

Gel per prevenire la formazione dello strato di inibizione dell'ossigeno sulla superficie del materiale che altrimenti può compromettere durezza, resistenza e durata del restauro. Applicare sempre per una polimerizzazione ottimale e per rendere più facile la lucidatura. Facile da rimuovere con lo spray aria/acqua.

22 328OB2 INOX Gel Sir. 2 ml con puntale € 12,00 € 9,50

22 328OB42 INOX 4 Sir, 2 ml € 37,00 € 29,00



22 328OB42


Lampada ad ampio spettro e rilevatore placca e carie

LDX WL 90++

LDX™
DENTAL CURING LIGHT

LED a banda larga 390-480 nm - 8 modalità specifiche

Low Ramp Standard High FastOrtho Turbo PlaqueInsp CariesInsp

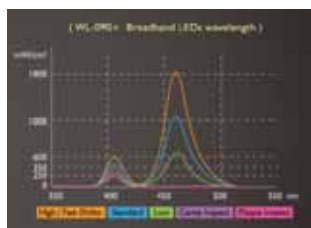

Multi Led per garantire l'attivazione di qualunque fotoattivatore presente nei materiali odontoiatrici 390-480 nm.

Frutto della ricerca e selezione per garantire ai dentisti la **miglior lampada** per polimerizzare. È in grado di agire su tutti i foto-attivatori, la lunghezza d'onda della luce infatti è compresa tra **390-480 nm**. L'intensità può raggiungere i **2490mW/cm²**. Può polimerizzare in **3 secondi** lo strato di composito di oltre **2 mm**. Queste caratteristiche consentono di agire efficacemente con tutti i foto iniziatori, Fenilpropanedione (PPD) e il Lucirine TPO.

- La **guida luminosa turbo** è realizzata in vera fibra ottica e acrilico non inferiore che ottimizzano la conduzione della luce riducendo al minimo la dispersione della stessa dalla sorgente alla punta; è così assicurata la massima intensità possibile di luce alla punta della guida luminosa
- Il cestello dissipatore di calore ad alta efficienza è progettato insieme al sistema di protezione per prevenire le alte temperature. Anche il circuito di protezione termica è progettato con una modalità di sicurezza per proteggere la lampada dal surriscaldamento
- La memorizzazione automatica dell'ultima operazione è un'altra caratteristica unica di questa lampada
- Il sistema comprende il radiometro in display incorporato e il sistema di interruzione automatica per il risparmio energetico della batteria.



Con il filtro fluorescente Find sarà facile identificare placca e carie; con lo specchio Find il paziente può visualizzare anch'egli senza il riflesso della luce.

59 033291 Sistema completo Lampada LDX WL090+ • Batteria ricaricabile Hi-Tech 3,7V/2500mAh • Supporto per ricarica e display • Alimentatore • 1 Guida luminosa a fibre ottiche Ø 11-8mm • 1 Filtro arancione • 2 puntali protettivi antiriflesso • 1 filtro ottico Find • 1 Specchio Find • 10 Guaine per fotopolimerizzatore • 20 Guaine per guide.

OMAGGIO 1 Guida luminosa fibre ottiche Ø 11-5mm

€ 790
595



PR LD+LM € 760

59 033291 Lampada LDX WL090+ (come sopra)

+

16 37331 Transilluminatore LMDX3 con fibra ottica.

€ 1.082
750



Lampada ad ampio spettro con rilevatore di placca e carie

FULL LIGHT SPECTRUM C



PERIODENT F.L.S. Special C

- Costruzione in alluminio fresato di alta qualità
- 8 modalità e tempi, leggibili nel display
- Rilevamento della carie
- Fino a 3000 mW/cm² fascio collimato
- Universale: ampio Spettro 385nm-515nm con doppia lunghezza d'onda che copre sia la luce ultravioletta che quella visibile (blu)
- Design sottile e leggero
- Tutto incluso! Comprende 4 punte per lenti micropolimerizzanti

€ 750
€ 550
set completo

59 P31FS340 **Lampada F.L.S.**, Set completo comprende:

59 P31FS342 Filtro protettivo FSC2

59 P31FS343 Adattatore USB-C

59 P31FS344 Batteria FSC4

59 P31FS345A Lente Endo Guide

59 P31FS345B Lente Microcure Ball 3,0 mm.

59 P31FS345C Lente Microcure Ball 2,2 mm.

59 P31FS345D Lente Microcure

59 P31FS346 Basetta per lenti magnetiche

NEW

Simply the best



Filtro protettivo FSC2

Adattatore USB-C

Batteria FSC4

Strumenti per la modellazione dei compositi

Strumenti di precisione per compositi con punte sostituibili. Set di strumenti base necessari per l'applicazione adeguata e la modellazione morfologicamente corretta dei compositi.

- Punte intercambiabili sottoposte ad uno speciale trattamento termico e lucidate a specchio
- Codifica cromatica dei manici, in plastica speciale, per l'immediato riconoscimento degli strumenti.

33 085PCS5 Set 5 Str. € 215,00 € 179,00
 CompoSculp sing. Str. € 49,50 2 € 43,50 cad.
 (codice vedi immagine a fianco)



rif. PR CPS+CT5 € 189,00
 CompoSculp set
 + E-Z cassette

PERIODENT COMPOSCULP



Con punte/inserti sostituibili disponibili anche singoli € 23 € 21
 Manici con socket € 19 • 2 € 16

Multiuso, per tante situazioni!

"La spatolina Periodent Hi-Tech 330212551C grazie alla ridotta sezione ed al minimo spessore risulta particolarmente utile in situazioni cliniche come il rabbocco della diga, la modellazione della cresta marginale di una seconda classe, alcune fasi di stratificazione, masse in IV classe e l'inserimento dei fili di retrazione a livello subgingivale." Dr. Riccardo Becciani

33 0212551C Spatola Compo 551C PERIODENT € 39,00 € 33,00



SPATOLA 551C

Strumenti per la modellazione dei compositi

Per la modellazione dei compositi con manico inox ErgoClean

- Manico autoclavabile ergonomico con anima in acciaio Inox

33 021KD5 CompoSculp PERIODENT Set 5 Strumenti doppi € 189,00 € 165,00
 33 021D12,34,56,78,90 CompoSculp strumento doppio € 42,00 2 € 37,00 cad.



COMPOSCULP SET



Spazzolino intracoronale

Per la pulizia intracoronale ed extracoronale prima di restauri diretti, inlay, onlay e corone. Per rimuovere i residui di cemento provvisorio. Per accedere agevolmente alle preparazioni di classe I, II, III, IV, V e agli imbocchi endodontici.

30 091092 50 pz. € 75,00	30 091093 100 pz. € 139,00
€ 66,00	€ 99,00



- Pulizia delle preparazioni.
- Pulizia del perimetro dei bracket ortodontici.
- Pulizia prima dell'applicazione del sigillante



SUPERBRUSH



Per la pulizia sottogengivale di preparazione di faccette o corone.

Punte in silicone

Punte in silicone per applicare e modellare i restauri in composito

Strumento progettato per adattare, modellare e conformare restauri in composito o vetroionomero; costituito da manico in acciaioINOX e inserti avvitabili in silicone resistente e autoclavabili.


Puntali testati per minimo 100 cicli di sterilizzazione

33 722AD10 A-DAPT Complete Set: 2 manici + 2+2 inserti € 184,00 € 165,00
 33 722AD40 A-DAPT Manico dritto con 2 inserti a pennello € 92,00 € 81,00
 33 722AD45 A-DAPT Manico angolato con 2 inserti conici € 92,00 € 81,00
 33 722AD20 A-DAPT inserti in silicone a pennello, 2 pz. € 74,00 • 2 € 66,50 cad.
 33 722AD15 A-DAPT inserti in silicone conici, 2 pz. € 74,00 • 2 € 66,50 cad.

! **Come pulire:** dopo l'utilizzo rimuovere i residui con alcool • passaggio nella vasca di lavaggio e disinfezione, programma universale • **Sterilizzazione:** fornito non sterile va sterilizzato sia manico che inserti in autoclave a 134°C per almeno 3 minuti.




A-DAPT

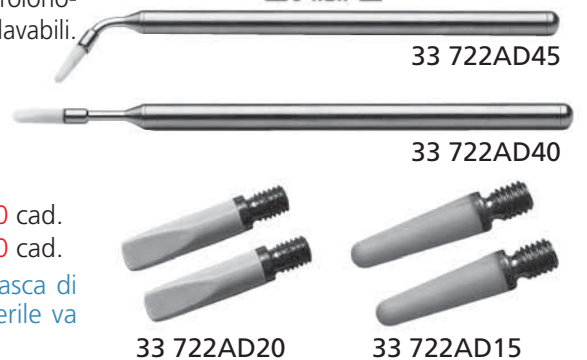

Coperchi protettivi anti UV

Servono per prolungare il tempo di lavoro dei materiali compositi • Materiale solido antiurto • Materiale resistente • Sterilizzare solo a freddo. Dimensioni: Small 10x7,5x3 cm - Medio 15x10x3 cm

53 P510S Cop.UV small € 28,50 € 20,00
 53 P510M Cop. UV medium € 34,00 € 24,00

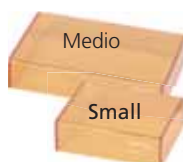

Organizer per siringhe

- Ergonomici, Design flessibile
- Materiale durevole, trasparente per una facile identificazione del contenuto per compositi, adesivi, microapplicatori, ecc.

Mini: 19,5x14,5x9,5 cm - **Std:** 29x14,5x9,5 cm
 55 P81SODM1 Syr.DeL.mini x 12 sir. € 89,60 € 65,00
 55 P81SODS1 Syr.DeL.Standard x 18 siringhe € 105,00 € 79,00




Finitura e lucidatura compositi

Gommini monopassaggio autoclavabili in silicone e ossido di alluminio per la rifinitura e lucidatura di compositi e smalto dentale.

* Gambo CA - N 12 Pezzi per confezione

1 cf. € 23,90 • 3 cf. a scelta € 59,90 (€ 19,96 cad.)

* Numero di giri consigliato da 3.000 min-1 a 10.000 min-1 spruzzando acqua a intermittenza, non superare la velocità massima consentita di 15.000 min-1

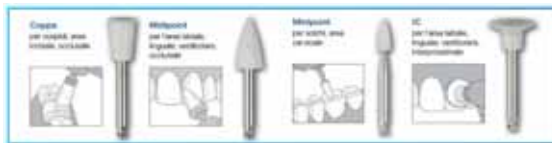

187 188 186 189

Paste diamantate a granulometria differenziata

Grazie alla tecnologia avanzata del trattamento del diamante naturale Diaglaze è il sistema di lucidatura unico contenente particelle di diamante naturale ultrafini e in 3 granulometrie di calibratura supercontrollata. Con il suo gradevole sapore di menta consente di ottenere in pochi minuti in modo efficiente la massima lucidatura intra- ed extra-orale delle superfici di porcellana, metalli e restauri in composito.

89 7507	89 7506	89 7505
Diaglaze 0-2 µm	Diaglaze 0-1 µm	Diaglaze 0-0,5 µm
€ 31,50 € 25,50 2 a scelta € 23,50 cad.		

89 7504 Diaglaze set assortito 3 Siringhe da 2 g € 83,00 € 66,50

Dischi per lucidatura compositi

- Senza anello centrale - Lavoro rapido in totale sicurezza
- Base in silicone morbido - Sicuro
- Montaggio diretto sul mandrino - Rapido e agevole
- Dischi ultrasottili estremamente flessibili, sotto pressione si piegano senza rompersi permettendo così un facile accesso alle aree interdentali.

30 5514 **Super-Snap Disk Kit** € 68,00 180 dischi (100 standard, 80 Mini), 2 Mandrini CA, 2 Dura White pietre (1 CN1, 1 FL2), 1 Composite Fine Midi Point, gambo CA

30 5512 **Super-Snap Mini Kit** € 23,00 48 dischi (32 standard, 16 Mini), 1 Mandrino CA /, 2 Dura White pietre (1 CN1, 1 FL2), 1 Composite Fine Midi Point, gambo CA

30 5M439 Mandrini CA metallo 6 pz. € 20,35

30 5M440 Mandrini CA plastica 100 pz. € 35,85

30 5M438 Mandrini FG metallo 6 pz. € 20,35

Super Snap refill € 18,50

30 55506-5521 ricambi cf 50 pz.

2 cf. € 16,95 cad.

Dischi per lucidatura compositi

La superficie in velluto sintetico trattiene la pasta lucidante con minima dispersione o spreco, garantendo una azione efficace di detersione e lucidatura. • Uso leggero e rapido: con un tocco lieve si ottiene una brillantezza intensa su porcellana, composito o metalli. La flessibilità si adatta perfettamente ai contorni dentali. • Non ha il centro in metallo: si evita così graffi o scolorimento dei materiali restaurativi, aumentando la sicurezza del trattamento.

• Mandrini tipo Pop-On: il foro centrale del dischetto si incastra sul mandrino, senza viti o blocchi. Da abbinare alle paste lucidanti come DirectDia e paste diamantate.

SUPER SNAP BUFF DISK, C/A, 25 pz.+mandrino € 25,70 2 cf. € 22,50 cad.

30 56523 Buff Disk L523 ø 12mm. • 30 56524 BUFF MINI-DISK .L524 ø8mm

Pre lucidatura e lucidatura compositi

Gommini diamantati indicati per la pre-lucidatura (Compo Master Coarse) e lucidatura (Compo Master) dei compositi Ceramage e Ceramage UP.


CompoMaster cf. 3 pz. € 39,40 2 cf. € 36,90 cad.								
CA: contrangolo	Forma	Proiettile	Lenticolare	Coppetta	Punta Mini	KN7	WH6	Disco nm
HP: manipolo	n. ISO	040	090	065	030	125	120	220
CompoMasterCoarse	CA	30 55111C	30 55112C	30 55113C	30 55114C			
	HP	30 55116C			30 55119C	30 55117C	30 55118C	30 55131C
CompoMaster	CA	30 55111	30 55112	30 55113	30 55114			
	HP	30 55116			30 55119	30 55117	30 55118	
Gommini lucidanti: min.cons. 5.000-15.000/max 20.000/PU 0,5 N Disco nm: min.cons. 5.000-15.000/max 15.000/PU 0,5 N								



ONEGLOSS M



DIAGLAZE

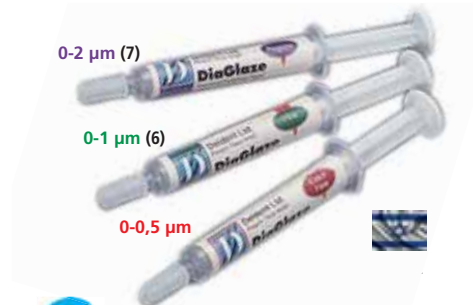

SUPER SNAP



SUPER SNAP Buff Disk



COMPOMASTER



La caratteristica ineguagliata delle pietre Shofu DuraGreen e DuraWhite è che, oltre a durare a lungo, mano a mano che si consumano gli strati sottostanti mantengono la stessa efficacia abrasiva iniziale sino alla completa usura.



Legenda colore/offerta:

Bianco € 23,00 • 3 € 60,00

Rosso € 4

Giallo € 9

Blu € 16,50

Verde € 20

DURA-WHITE SHOFU Confezione 12 pz.

In ossido di alluminio a legante ceramico a granulometria extrafine ideali per la rifinitura di precisione sia in Studio che in Laboratorio. Di otturazioni in composito, o cemento vetroionomerico, ceramica, sostanza dura del dente (ex. Levigatura di monconi dopo le diamantate).

giri/min. cons. 5.000-20.000/max 30.000/PU 2N

Forma	CN1	CY1	CY2	FL1
HP 12 pz	30 51201			30 51202
CA 12 pz	30 51221			30 51222
FG 12 pz	30 51241	30 51242	30 51243	30 51240

Forma	FL2	FL3	IC2	IC4	KN1	KN3	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4	WH1	WH4
HP 12 pz	30 51203	30 51204		30 51205		30 51206	30 51207	30 51208	30 51209	30 51210	30 51211		30 51212
CA 12 pz	30 51223	30 51224		30 51225		30 51226	30 51227	30 51228	30 51229	30 51230	30 51231		30 51232
FG 12 pz	30 51244		30 51245		30 51246		30 51247	30 51248		30 51249		30 51250	

DURA-GREEN SHOFU Confezione 12 pz.

Punte abrasive al carburo di silicio al legante ceramico per sgrossare e rifinire ceramica, composito e leghe preziose.

giri/min. cons. 5.000-20.000/max 30.000/PU 3-5N

DURA GREEN SHOFU 12 pz. Offerte straordinarie ILIC' per "riduzione dello stock"

(* = ad esa)													
Forma	BA1	CN2	CN3	CY1	CY2	CY3	CY4	FL1	FL2	FL4	FL5	IC1	IC2
HP 12 pz	30 51001	30 51003	30 51004	30 51005	30 51006	30 51007	30 51008	30 51009		30 51012	30 51013	30 51014	30 51015
CA 12 pz	30 51051	30 51053	30 51054	30 51055	30 51056	30 51057	30 51058	30 51059	30 51060	30 51062	30 51063	30 51064	30 51065
FG 12 pz				30 51102	30 51103				30 51104				30 51105

(* = ad esa)											
Forma	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	KN1	KN2	KN3	KN4
HP 12 pz	30 51016	30 51017	30 51018	30 51019	30 51020	30 51021	30 51022	30 51023	30 51024	30 51025	30 51026
CA 12 pz	30 51066	30 51067	30 51068	30 51069	30 51070	30 51071	30 51072	30 51073	30 51074	30 51075	30 51076
FG 12 pz								30 51106			

(* = ad esa)											
Forma	KN5	KN6	KN7	PC1	PC2	RD1	RD2	RD3	RD4	RE1	RE2
HP 12 pz	30 51027	30 51028	30 51029	30 51030	30 51031	30 51032	30 51033	30 51034	30 51035	30 51036	30 51037
CA 12 pz	30 51077	30 51078	30 51079	30 51080	30 51081	30 51082	30 51083	30 51084	30 51085	30 51086	30 51087
FG 12 pz						30 51107	30 51108				

(* = ad esa)											
Forma	RE3	TC1	TC2	TC3	WH1	WH2	WH3	WH4	WH5	WH6	
HP 12 pz	30 51038	30 51039	30 51040	30 51041	30 51043	30 51044	30 51045	30 51046	30 51047	30 51048	30 51048F
CA 12 pz	30 51088	30 51089	30 51090	30 51091	30 51093	30 51094	30 51095	30 51096	30 51097	30 51098	
FG 12 pz		30 51109			30 51110						

Contenuto: 1 Fresa carburo tonda, 4 Diamantate: Bottone, Acorn S, Acorn L, Conica per rettifica, 1 Portafrese autoclavabile

29 1K562 Riitano Kit, 5 pz. € 110,10 ad esa. € 29,00



Accesso iniziale con fresa al carburo a pallina n. 6.



Allargamento alla camera pulpare con i lati della diamantata conica a punta non tagliente.



Rimozione tetto camera pulpare in uscita, con diamantate Acorn.



Rettificazione con la diamantata per l'accesso in linea retta.

ACCESS KIT



NAVITIP



Cannule flessibili per irrigazione canalare

Gli ultimi 5 mm sono morbidi e flessibili ed il bordo è arrotondato per guidare NaviTip lungo i canali curvi senza schiacciarsi.

46 141351 NaviTip 30 gauge. Kit assortito, 20 pz. (5 x tipo)

€ 43,40 ad esa. € 20,00

Cannule flessibili per endonzia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabile anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer Vacuum (46 1230).

46 14552 Endo-Eze 1,9 cm - 20 pz. kit assortito ad esa

5x **18 ga/1,25mm** **19ga/1,06mm** **20ga/0,90mm** **22ga/0,70mm**

€ 15,50 ad esa. € 5,00



ENDO-EZE



Ago pieghevole per irrigazioni sugengivali e endo

Ago pieghevole per irrigazioni automatiche di siti chirurgici subgengivali e solchi. Ago 2,54 cm ad estremità chiusa e con sbocco laterale. Ideale anche per l'uso in prossimità dell'apice canalare.

46 724623 23ga/0,63mm 80 pz. € 138,00 € 59,00 ad esa.



Attacco Luer

Puntali per irrigazione, applicazione e micro aspirazione

• Per irrigare, applicare e micro-aspirare • Piegabile per facilitare l'accesso.

Flexi-Glide	20 pz. € 57,00 € 25,00 ad esa.	50 pz. € 95,80 € 40,00 ad esa.
FLG 2,5 cm	46 746520	
FLG 3,0 cm	46 746320	46 746350



VISTA SEC-LOCK



Attacco Luer doppia sicurezza

Puntale pre-piegato per applicazione emostatici nel solco

• Pre-piegata (19 ga / ø 1,06 mm) • Punta curvata per un accesso ottimale nel trattamento dei tessuti • Estremità in morbide fibre di nylon per la distribuzione delle soluzioni viscosse evitando il contatto della cannula metallica con i tessuti molli.

Per strofinare agenti emostatici come: solfato ferrico e cloruro di alluminio.

46 722202 Sol-u-Flo 19 ga, 20 pz € 23,50 ad esa. € 5,00



VISTA FLEXI-GLIDE



Brevettata

Cappucci per chiudere siringhe con attacco Luer

• Cappucci per siringhe realizzati in plastica bianca rigida • Adatti a ogni siringa con attacco Luer Lock standard.

46 12205 Cappucci per siringhe Luer 20 pz. € 13,20 2cf € 9,00 • 3 € 6,00 cad.



LUER-CAP



Misuratori Endo: Block • Ruler

Misuratore per file con scala millimetrata, per posizionamento di stopper in gomma. Misura strumenti diritti e curvati.

Solo 50 g. L 100 x P 24 x h 32 mm

Autoclavabile fino a 134°C.

36 P91EMBP Endo Block P € 26,50 € 18,50



In alluminio per strumenti manuali e rotanti. Autoclavabile fino a 134°C. Gauges da 1 a 30 mm. Per destrorsi e mancini.

36 P91ERA Endo Ruler All. € 13,50 € 9,50



BLOCK • RULER



Test elettronico di vitalità pulpare

parkell Made in USA **DIGITEST 3**

Precisione e comfort per il paziente, ergonomia e affidabilità

• Impulso oscillante e non corrente costante = Nessun fastidio. Il paziente percepisce un delicato stimolo pulsante, mai fastidioso. • Dispositivo digitale = Accuratezza e leggibilità.

Contiene: 4 Sonde autoclavabili: standard 1 corta (denti anteriori), 1 lunga (denti posteriori); 2 sonde di precisione, labiale e linguale; 1 clip di terra

59 51130 Digitest III Kit € 730,00 € 490,00

offerta soggetta a modifiche, chiedici direttamente la miglior offerta del momento!



Test vitalità con stimolo freddo

Aerosol refrigerante utilizzato per il test della vitalità pulpare tramite stimolo freddo.

Composizione. propanobutano (gas refrigerante), alcol, aroma mentolato o agrumato.

Scopo terapeutico. • Ideale per il test di lettura pulpare: applicato sul dente, provoca una stimolazione fredda, rapido fino a -50 °C. Se il paziente avverte dolore o formicolio, la polpa è vitale; assenza di reazione suggerisce necrosi. • Economico e preciso con l'uso della sonda applicatrice che consente dosaggio controllato e mirato

Modalità d'uso. **1.** Spruzzare la zona selezionata da una distanza di 2-5 cm per 1-3 secondi. **2.** In alternativa, imbibire un cotton fioc con prodotto e appoggiarlo sul dente e dintorni. **3.** Attenzione: il contatto diretto con il liquido può causare ustioni da freddo alla mucosa orale o pelle.



PULP SPRAY



37 34PSO200

37 34PSM200

PULP SPRAY Flacone 200 ml con tappo spray e applicatore € 13,65 € 9,50

37 34PSO200 Arancia

37 34PSM200 Menta

Pellet di cotone PERIODENT

Ideali per asciugare cavità e per medicazioni.

• Massima assorbenza • Soffici e confortevoli • Indefornabili • Sbiancati senza cloro • 4 misure per tutte le necessità • Ottima uniformità grazie al cotone della massima qualità e alle tecnologie di produzione.

Pellet PCP PERIODENT, 1 conf. = 6 scatolette da 18 g - 15%

53 093221	53 093222	53 093223	53 093224
L n.1 ø 7 mm, 630 pellet ca.	M n.2 ø 5,5 mm, 1200 pellet ca.	S n.3 ø 4 mm, 2700 pellet ca.	XS n.4 ø 3 mm, 5400 pellet ca.
€ 12,20	€ 12,20	€ 17,70	€ 23,80



PREMIUM QUALITY

Rilevature incrinature fratture cuspidali

FracFinder viene posto sul dente con le cuspidi di cui si sospetta l'incrinatura ed il paziente viene istruito a chiudere delicatamente. In tal modo FracFinder esercita forza sul dente e la cuspidi incrinata viene localizzata in modo agevole, rapido e preciso.

• Per localizzare rapidamente e con precisione incrinature e fratture cuspidali • Il secondo lato: inserimento di protesi e test di percussione • Materiale confortevole che fornisce forza chiudendo delicatamente sulla zigrinatura posta all'estremità • Autoclavabile.

Applicazione di FracFinder sulla cuspidi sospetta.




33 9059401 FracFinder Originale Denbur 1 pz. € 24,00
33 9059402 FracFinder Originale Denbur 2 pz. € 39,38 -15%

100%
Made in USA



FRACFINDER

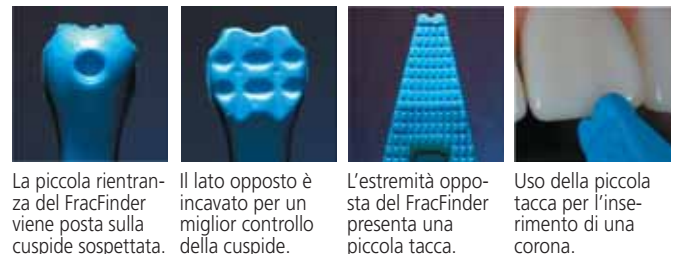

La piccola rientranza del FracFinder viene posta sulla cuspidi sospettata.

Il lato opposto è incavato per un miglior controllo della cuspidi.

L'estremità opposta del FracFinder presenta una piccola tacca.

Uso della piccola tacca per l'inserimento di una corona.

Rilevatore orifizi del canale radicolare – Blu di metilene

Indicazione sull'uso:

1. Prima del trattamento immergere l'applicatore allegato in alcool etilico e poi montarlo sulla siringa. **2.** Rimuovere la dentina dove si pensa ci siano gli orifizi del canale. **3.** Inserire 1/3 gocce nella parte inferiore della cavità pulpare e attendere 5-10 sec. **4.** Risciacquare a asciugare la cavità pulpare. **5.** I punti intensi colorati in blu indicano gli orifizi del canale radicolare. **6.** Dopo l'uso retrainare lo stantuffo della siringa per evitare che il preparato trabocchi, rimuovere il puntale e richiudere la siringa col cappuccio.

37 34BM2 Canal Detector 2 ml con punte applicative € 23,00 € 14,90 2 € 13,00 cad.



CANAL DETECTOR



Il colorante blu contenuto nel Canal Detector penetra negli orifizi del canale radicolare e li tinge di blu, facilitando così l'individuazione del canale principale e delle fratture radicolari.



Single Niti rotary file made in France by



L'innovativo ed esclusivo processo EDM consente di produrre questo nuovissimo file NiTi che garantisce un comportamento unico e superiore. Il file è generalmente **più flessibile** sebbene la sua superficie sia **particolarmente dura** e **naturalmente ruvida**. Grazie a questa combinazione esclusiva di caratteristiche e alla sua sezione rettangolare, NEONITI presenta bordi con un taglio superiore, una superficie abrasiva incorporata ed una flessibilità progressiva, la risultante è una impareggiabile



EFFICACIA DI TAGLIO e RESISTENZA ALLA FRATTURA

Placchette da 4 strumenti € 79,00 2 -10% • 4 -15%

	EDM Assortimento #1 - 4 pz. € 79,00 Opener 20/.04, Glide Path 15/.03, Shaper 20/.10-25/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS121
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS125
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS131
	EDM Assortimento #3 - 4 pz. € 79,00 Shaper 20/.06 - 25/.06 - 30/.04 - 40/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS321
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS325
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS331

	EDM Assortimento #2 - 4 pz. € 79,00 Opener 20/.10, Glide Path 15/.03, Shaper 20/.06-25/.06	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS221
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS225
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS231
	EDM Assortimento #4 - 4 pz. € 79,00 Finisher 20/.04 - 25/.04 - 30/.04 - 40/.04	
	Lunghezza: L21 mm.	36 52EASS421
	Lunghezza: L25 mm.	36 52EASS425
	Lunghezza: L31 mm.	36 52EASS431

EdMax OPENER



Diametro no. 20 – Taper .10 - Lunghezza 15mm.
Utilizzo raccomandato: Rotazione continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.
36 52EO201015 4 FileOp., 4 pz. € 79,00 • 2 -10%

EdMax GLIDE PATH



4 File Glide Path € 79,00 • 2 -10%
Diameter no. 15 – Taper .03 - Length 21/25/31mm.
Utilizzo raccomandato: Rotazione continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.
36 52EG150321 GP Ø 15 • Taper .03 L21 mm.
36 52EG150325 GP Ø 15 • Taper .03 L25 mm.
36 52EG150331 GP Ø 15 • Taper .03 L31 mm.

EdMax SHAPER • 2 -10%

Misure: 20 e 25 - Taper: .04 o .06 L21/L25/L31 mm.
Utilizzo raccomandato: Rotazione continua - 300 a 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm. 4 Shaper € 79,00
36 52ES200421 S#20 Taper .04 L 21
36 52ES200425 S#20 Taper .04 L 25
36 52ES200431 S#20 Taper .04 L 31
36 52ES200621 S#20 Taper .06 L 21
36 52ES200625 S#20 Taper .06 L 25
36 52ES200631 S#20 Taper .06 L 31
36 52ES250421 S#25 Taper .04 L 21
36 52ES250425 S#25 Taper .04 L 25
36 52ES250431 S#25 Taper .04 L 31
36 52ES250621 S#25 Taper .06 L 21
36 52ES250625 S#25 Taper .06 L 25
36 52ES250631 S#25 Taper .06 L 31



EdMax FINISHER

4 File Finisher € 79,00 • 2 -10%
Misure no. 30 / no. 40 – Taper: .04.
Lunghezze : L21/L25/L31mm
Utilizzo raccomandato: Rotazione Continua - 500 rpm – Torque limite 1.5 N cm.
36 52EF300421 F#30 Taper .04 L 21 mm.
36 52EF300425 F#30 Taper .04 L 25 mm.
36 52EF300431 F#30 Taper .04 L 31 mm.
36 52EF400421 F#40 Taper .04 L 21 mm.
36 52EF400425 F#40 Taper .04 L 25 mm.
36 52EF400431 F#40 Taper .04 L 31 mm.



36 74EASS Punta di carta, cf. ass.* ,100 pz. € 10
36 75EASS Coni di gutta, cf. ass.* , 60 pz. € 10

* #: 20,25,30,40 - Taper .04,.06,

K-F • H-F • Gates • Largo • File C • Tiranervi • Lentulo • F-US



QV-ENDO

Mis. ISO	K-Files S.Steel - 6 pz. QV30 € 7,80 3+1 omaggio	
	21 mm	25 mm
06	36 P1KS2106	36 P1KS2506
08	36 P1KS2108	36 P1KS2508
10	36 P1KS2110	36 P1KS2510
15	36 P1KS2115	36 P1KS2515
20	36 P1KS2120	36 P1KS2520
25	36 P1KS2125	36 P1KS2525
30	36 P1KS2130	36 P1KS2530
35	36 P1KS2135	36 P1KS2535
40	36 P1KS2140	36 P1KS2540
45	36 P1KS2145	36 P1KS2545
50	36 P1KS2150	36 P1KS2550
55	36 P1KS2155	36 P1KS2555
60	36 P1KS2160	36 P1KS2560
70	36 P1KS2170	36 P1KS2570
80	36 P1KS2180	36 P1KS2580
Ass. 15-40 € 9,20	36 P1KS21A1	36 P1KS25AS1
Ass. 45-80 € 9,20	36 P1KS21A2	36 P1KS25AS2

Mis. ISO	K-Files NiTi - 6 pz. QV32 € 11,40 3+1 omaggio	
	21 mm	25 mm
08	36 P1KN2108	36 P1KN2508
10	36 P1KN2110	36 P1KN2510
15	36 P1KN2115	36 P1KN2515
20	36 P1KN2120	36 P1KN2520
25	36 P1KN2125	36 P1KN2525
30	36 P1KN2130	36 P1KN2530
35	36 P1KN2135	36 P1KN2535
40	36 P1KN2140	36 P1KN2540
45	36 P1KN2145	36 P1KN2545
50	36 P1KN2150	36 P1KN2550
55	36 P1KN2155	36 P1KN2555
60	36 P1KN2160	36 P1KN2560
70	36 P1KN2170	36 P1KN2570
80	36 P1KN2180	36 P1KN2580
Ass. 15-40 € 12,60	36 P1KN21AS1	36 P1KN25AS1
Ass. 45-80 € 12,60	36 P1KN21AS2	36 P1KN25AS2

H-Files S.Steel - 6 pz. QV34 € 7,80 4+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
08	36 P1HS2108	36 P1HS2508
10	36 P1HS2110	36 P1HS2510
15	36 P1HS2115	36 P1HS2515
20	36 P1HS2120	36 P1HS2520
25	36 P1HS2125	36 P1HS2525
30	36 P1HS2130	36 P1HS2530
35	36 P1HS2135	36 P1HS2535
40	36 P1HS2140	36 P1HS2540
45	36 P1HS2145	36 P1HS2545
50	36 P1HS2150	36 P1HS2550
55	36 P1HS2155	36 P1HS2555
60	36 P1HS2160	36 P1HS2560
70	36 P1HS2170	36 P1HS2570
80	36 P1HS2180	36 P1HS2580
Ass. 15-40 € 9,20	36 P1HS21AS1	36 P1HS25AS1
Ass. 45-80 € 9,20	36 P1HS21AS2	36 P1HS25AS2

H-Files NiTi - 6 pz. QV34 € 11,40 4+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
08	36 P1HN2108	36 P1HN2508
10	36 P1HN2110	36 P1HN2510
15	36 P1HN2115	36 P1HN2515
20	36 P1HN2120	36 P1HN2520
25	36 P1HN2125	36 P1HN2525
30	36 P1HN2130	36 P1HN2530
35	36 P1HN2135	36 P1HN2535
40	36 P1HN2140	36 P1HN2540
45	36 P1HN2145	36 P1HN2545
50	36 P1HN2150	36 P1HN2550
55	36 P1HN2155	36 P1HN2555
60	36 P1HN2160	36 P1HN2560
70	36 P1HN2170	36 P1HN2570
80	36 P1HN2180	36 P1HN2580
Ass. 15-40 € 12,60	36 P1HN21AS1	36 P1HN25AS1
Ass. 45-80 € 12,60	36 P1HN21AS2	36 P1HN25AS2

Gates S.Steel N. 1 - 6 pz. QV12+ € 16,90 3+1 omaggio			
Mis. ISO	ø mm	28 mm	32 mm
1	0.5	36 P80G281	36 P80G321
2	0.7	36 P80G282	36 P80G322
3	0.9	36 P80G283	36 P80G323
4	1.1	36 P80G284	36 P80G324
5	1.3	36 P80G285	36 P80G325
6	1.5	36 P80G286	36 P80G326
Assortiti € 17,90		36 P80G28A	36 P80G32A

• Elevata efficienza di taglio • Velocità consigliata 800-1.200 giri/min.

Largo (Peso) S.Steel N. 1 - 6 pz. QV15+ € 16,90 3+1 omaggio			
Mis. ISO	ø mm	28 mm	32 mm
1	0.7	36 P81P281	36 P81P321
2	0.9	36 P81P282	36 P81P322
3	1.1	36 P81P283	36 P81P323
4	1.3	36 P81P284	36 P81P324
5	1.5	36 P81P285	36 P81P325
6	1.7	36 P81P286	36 P81P326
Assortiti € 17,90		36 P81P28A	36 P81P32A

• Alta efficienza di taglio • Velocità raccomandata 800-1200 r.p.m.

File C+Canali Calcificati S.Steel - 6 pz. QV48C+ € 9,90 4+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
06	36 P1C2106	36 P1C2506
08	36 P1C2108	36 P1C2508
10	36 P1C2110	36 P1C2510
12.5	36 P1C2112	36 P1C2512
15	36 P1C2115	36 P1C2515
Assortiti € 11,50	36 P1C21A	36 P1C25A

• Per canali radicolari calcificati, con punta molto rigida da 3 mm
• Consigliato solo per uso singolo

File Ultrasuoni NiTi 33 - 10 pz. QV04 € 9,90 4+1 omaggio		
Mis. ISO	33 mm	
15	59 P16U15	
20	59 P16U20	
25	59 P16U25	
30	59 P16U30	
35	59 P16U35	
40	59 P16U40	
Assortiti € 11,50	59 P16UA	

• Da utilizzare con ablatore ad ultrasuoni • Ottima resistenza
• Lunghezza: 33 mm

Tiranervi BARBED S.Steel - 10 pz. QV38 € 8,60 3+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	
0	36 P6B210	
1	36 P6B211	
2	36 P6B212	
3	36 P6B213	
4	36 P6B214	
5	36 P6B215	
6	36 P6B216	

• Buona flessibilità • Altamente resistente alla frattura

Spingi pasta (Lentulo) S.Steel - 4 pz. QV48C+ € 11,30 3+1 omaggio		
Mis. ISO	21 mm	25 mm
25	36 P7S2125	36 P7S2525
30	36 P7S2130	36 P7S2530
35	36 P7S2135	36 P7S2535
40	36 P7S2140	36 P7S2540
Assortiti € 12,50	36 P17S21A	36 P7S25A

**Massima qualità
al miglior prezzo!**



“Grazie a questi nuovi strumenti rotanti in Nichel Titanio con trattamento termico (lega “gold”) possiamo dire addio alle sequenze lunghe, estenuanti e soprattutto pericolose degli strumenti 10 - 15 - 20 in acciaio, con tutti i rischi che comportano: gradini, intasamenti, perforazioni...”

Grazie ai nuovi PathGlider, dopo aver eseguito l’iniziale sondaggio del canale con una lima manuale in acciaio precurvata (.08) per accertarsi della percorribilità e della pervietà del canale stesso, si può eseguire l’allargamento preliminare dell’esistente glide path o sentiero di percorribilità fino al calibro 20 in totale serenità e sicurezza, per poi sagomare i canali con qualsiasi sistema di strumenti rotanti o reciprocanti, senza correre il rischio di fare danni alle pareti dentinali o, peggio ancora, di fratturare lo strumento che sta sagomando il canale. Grazie ai PathGlider l’Endodonzia non è mai stata così facile e alla portata di tutti”.

Dr. Arnaldo Castellucci




PathGlider blister 6 pz. € 55,00 € 48,00 • 3 cf. € 39,00 cad.		
Mis	PTG 21 mm	PTG 25 mm
13	36 N2PG1321	36 N2PG1325
16	36 N2PG1621	36 N2PG1625
19	36 N2PG1921	36 N2PG1925
Ass. 2x (13,16,19)	36 N2PGA21	36 N2PGA25

X+File





Le lime X+File hanno una sezione quadrilatera eccentrica che ruota in modo asimmetrico attorno all’asse centrale, riproducendo così il movimento usato e insegnato da Schilder chiamato “envelop of motion”.

1. Rettificare l’accesso all’orifizio canalare
2. Esplorare il canale con un piccolo file manuale (#10)
3. Allargare l’accesso all’orifizio con Opener (SX)
4. Procedere con path file (X+File)
5. Modellare il canale con X1 “spazzolando” con 3-4 passaggi fino a raggiungere la lunghezza di lavoro
6. Continuare la modellazione con X2 fino al raggiungimento della lunghezza di lavoro.

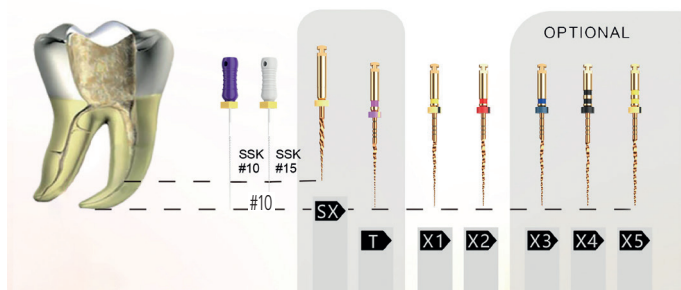

€ 55,00 € 48,00 • 3 a scelta € 39,00 cad.	
SX: 019/.04 3.0 6 pz. 36 N2SX1904	T+: 017/.02 - 21,25,31 mm - 6 pz. 36 N2T170221,25,31

X+ File 6 pz. € 55,00 € 48,00 • 3 cf. € 39,00 cad.			
Mis.	X+ 21 mm	X+ 25 mm	X+ 31 mm
● X1	36 N2X121	36 N2X125	36 N2X131
● X2	36 N2X221	36 N2X225	36 N2X231
● X3	36 N2X321	36 N2X325	36 N2X331
● X4	36 N2X421	36 N2X425	36 N2X431
● X5	36 N2X521	36 N2X525	36 N2X531
Ass. 2x(X1,X2,X3)	36 N2X21A1	36 N2X25A1	36 N2X31A1

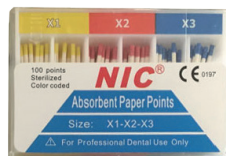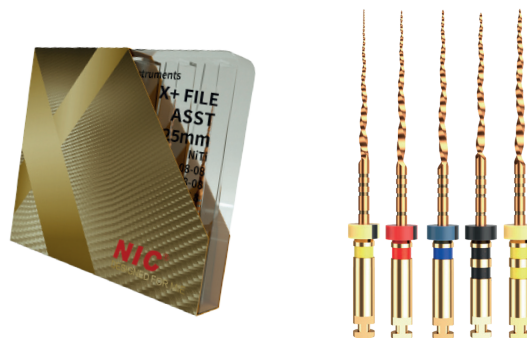

Punte di carta calibrate PTC 100 pz. € 21,00 € 19,00 • 3 € 17,00 cad	
Mis.	Cod.
● X1	36 N4X290X1
● X2	36 N4X290X2
● X3	36 N4X290X3
● X4	36 N4X290X4
● X5	36 N4X290X5
Ass. 20x(X1,X2,X3)	36 N4X29A1



Coni di Gutta calibrati PTG 60 pz. € 25,00 € 22,00 • 3 € 19,00 cad	
Mis.	Cod.
● X1	36 N5X290X1
● X2	36 N5X290X2
● X3	36 N5X290X3
● X4	36 N5X290X4
● X5	36 N5X290X5
Ass. 20x(X1,X2,X3)	36 N5X29A1

ENDO DEBRIDER 1 pz. € 34,50 € 27,50	
#20/.02 33 N11D2002	#30/.02 33 N11D3002

ENDO OPENER 1 pz. € 34,50 € 27,50		
#10/.04 33 N11O1004	#15/.04 33 N11O1504	#15/.06 33 N11O1006

Localizzatore apicale

Questo moderno localizzatore incorpora la tecnologia sviluppata dal Dr. Spironelli: all'eccezionale stabilità della lettura in canali umidi sono stati integrati l'auto-calibrazione all'avvio e il tester elettrico per vitalità pulpale. È molto apprezzato anche per la pratica base magnetica e lo schermo grande.

Sempre garantite informazioni accurate e misurazioni precise.

59 410AIPX AI-PEX con test vitalità € 570,00 € 420,00

Maggiore autonomia	
Autonomia	5h e 20 min.
Consumo	<0,5W
Tempo di ricarica	circa 3h
Batteria ricaricabile	3,7V/2000mAh
Schermo	LCD da 3.8 pollici



AI-PEX MASTER



Dr. Arnaldo Castellucci



Motore endodontico

Automatic Torque Reverse mode: Oltre ad un nuovo motore più performante. Include la modalità ATR per un maggior controllo delle operazioni intracanalari.

Micro Testina per massima visibilità: Rispetto al micromotore precedente, Endo Radar PRO introduce una micro testina che garantisce più ergonomia e maneggevolezza.

49 21ERPRO ENDO RADAR PRO Micromotore endodontico € 1.400,00 € 890,00



ENDO RADAR PRO



Catalogo



Inseri ultrasuoni per l'accesso

Totale controllo e massima precisione nella pratica clinica quotidiana

Il Cavity Access Kit è l'ideale per gli endodontisti alla ricerca di inserti nati a garantire il successo e la predicibilità del trattamento. Ideato per la rifinitura della cavità di accesso, nonché la localizzazione dei canali, il kit è costituito da 6 inserti ultrasonici con parte attiva micro-fresata (intagli) per garantire eccellente resistenza alla rottura ed al contempo evitare le classiche problematiche derivanti dall'uso della diamantatura all'interno della camera. NB lo scouter per apertura dei canali è fornito in quantità doppia.

Ogni punta è progettata con uno scopo ben definito: • Rifinitura delle pareti della cavità di accesso • Sonda di esplorazione del secondo canale medio vestibolare • Esplorazione ingresso dei canali (utile inoltre per rimozione di calcificazioni e perni in fibra) • Rimozione di perni metallici • Pulizia e rivestimento dell'anatomia naturale del pavimento della camera pulpale. **6 Inserti ultrasonici e "taxi" holder autoclavabile**

59 216ACKSAT Access Cavity Kit Compatibile SAT • 59 216ACKEMS Access Cavity Kit Compatibile EMS € 400,00 € 320,00



ACCESS CAVITY KIT



Endo Dispenser AP

ENDO DISPENSER PLASTIC

Per detersione e sterilizzazione dei file.
Contiene 18 file manuali o rotanti.
Sterilizzabile fino a 134°C.

55 P6EDP EDP € 29,80 € 25,00



Endo Dispenser AI

ENDO FILE HOLDER ALLUMINIUM

18 files manuali o rotanti. Scala millimetrata.
Coperchio con stop per conteggio dei cicli di sterilizzazione.

55 361EHA Endo Holder € 49,00 € 41,00



Gauge&Cutter

Sistema 2-in-1 per misurazione e taglio netto dei coni di GP.

• In grado di misurare il diametro del cono GP e tagliarlo alle dimensioni ISO come desiderato • Corregge le dimensioni imprecise dei coni in GP in commercio che possono causare errori • Taglia i coni GP in modo netto e senza irregolarità • Contribuisce alla sigillatura apicale utilizzando il cono master del diametro esatto.

36 391GPGC € 95,00 € 88,00



Endo Ring

ENDO RING TRIANGOLARE

Sterilizzabile fino a 134°C con spugne monouso.

55 P66ECH Endo Ring, 2 anelli L e S

€ 12,50 € 10,00

55 P66TECH Spugnette triangolari, 50 pz

€ 33,00 € 28,00



Disinfettante a largo spettro di azione

Dispositivo medico di classe IIb (Direttiva 93/42/CEE e s.m.l.)

Il principio attivo di BIOAKT è composto da ioni d'argento stabilizzati in acido citrico.

I microbi riconoscono come alimento gli ioni di argento in acido citrico e una volta penetrati all'interno i cationi di argento reagiscono rapidamente con i gruppi di carica negativa, causando danni irreversibili sia alle proteine che al DNA e al RNA dei batteri bloccandone le funzioni metaboliche e riproduttive, determinandone infine la morte.

Doppia efficacia senza precedenti: • totale atossicità ed elevata efficacia • tempi di abbattimento della carica batterica e virale di circa 60 secondi con protezione residua oltre le 18 ore

54 22B05L BIO AKT QUOTIDIANO 5L € 86,60 • 2 € 77,00 cad.

54 22B100 BIO AKT QUOTIDIANO 1L € 19,50 • 3 € 15,00 cad.

BioAkt Endo Irrigante canalare ad azione chelante e disinfettante • 100% Certificato non tossico • Migliora la penetrazione del sigillante all'interno dei tubuli dentinali • Migliore azione chelante rispetto all'EDTA 17% • Biocompatibile, completamente non tossico. La tecnologia di BioAkt permette la rimozione dello Smear Layer e di raggiungere livelli di disinfezione paragonabili agli irriganti contenenti ipoclorito di sodio.

54 23BEND BioAkt Endo confezione in blister, 10 fiale x 5 ml cad. € 19,90 € 18,50



Endo



Soluzione Irrigante Acido Citrico 40%



CITRIC ACID 40%

Soluzione irrigante utilizzata in endodonzia per la pulizia e la preparazione chimico-meccanica dei canali radicolari. La sua azione principale consiste nella rimozione dello strato di smear layer (strato di detriti) formatosi durante la strumentazione canalare, favorendo l'esposizione dei tubuli dentinali e migliorando l'efficacia dei sigillanti canalari.

Composizione Acido citrico al 40% in soluzione acquosa. **Indicazioni d'uso.** • Rimozione dello smear layer: elimina lo strato di detriti dalle pareti del canale radicolare, esponendo i tubuli dentinali. • Pulizia profonda: facilita la rimozione dei residui di polpa e detriti organici. • Preparazione del canale: migliora la penetrazione dei sigillanti nei tubuli dentinali, ottimizzando la sigillatura canalare.

37 31AC200 Flacone 200 g con attacco Luer per prelievo con siringa € 13,60 € 9,80
37 31AC400 Flacone 400 g con attacco Luer per prelievo con siringa € 24,25 € 17,50



Disinfettante sgrassante multiuso Alcol Isopropilico



ISOPROPYL ALCOOL

A base di 2-propanolo puro p.a. Soluzione per l'uso professionale in ambito odontoiatrico, in particolare nei trattamenti endodontici. Grazie alle sue proprietà disinfettanti, sgrassanti e solventi, è ideale per la pulizia e la preparazione dei canali radicolari.

Composizione. Principio attivo: 2-propanolo puro p.a. (alcol isopropilico). **Indicazioni d'uso.** • Irrigazione dei canali radicolari: utilizzato durante i trattamenti endodontici per risciacquare i canali radicolari, favorendo la rimozione di detriti e residui. • Asciugatura dei canali: accelera l'asciugatura dei canali radicolari prima dell'otturazione. • Rimozione di otturazioni provvisorie: aiuta a rimuovere materiali di otturazione temporanea contenenti iodoformio. • Riduzione della tensione superficiale: in uso alternato con ipoclorito di sodio, riduce la tensione superficiale, migliorando la penetrazione dell'ipoclorito anche nei canali di piccolo diametro.

54 731AI2 Alcol Isopropilico Flacone da 200 g. € 16,50 € 12,90
Con adattatore con tappo a vite per facilitare l'aspirazione del liquido con siringhe standard Luer e con siringa dosatrice.



Otturazioni provvisorie di cavità I e II



CAVIPACK

• Pronto all'uso • Senza Eugenolo • Indurisce in ambiente umido in 20-30 min.
• Radiopaco • Facile da rimuovere con manipolo o scaler quindi risciacquare • Aroma gradevole di rosa.
1. Spray acqua nella cavità 2. Applicare e comprimere delicatamente contro le pareti 3. Modellare. Evitare di mordere per 2-3 ore.

22 351CV310 Cavipack ott. Provvisorie 3x10g € 19,50 € 16,50



Idrossido di calcio biocompatibile



CALCIPAST

A base di idrossido di calcio. Biocompatibile promuovere la rigenerazione dei tessuti.

Materiale di medicazione per canali radicolari, per la sua capacità di neutralizzare l'acidità e favorire la guarigione dei tessuti periapicali • Proprietà antibatteriche • Facilità di applicazione • Biocompatibilità: è generalmente ben tollerato dai tessuti dentali e non provoca reazioni avverse significative, rendendolo adatto per l'uso in dentatura permanente e decidua • Proprietà di mineralizzazione: stimola la formazione di un nuovo tessuto dentale minerale, contribuendo alla riparazione delle lesioni

22 351CP21 Idrossido di calcio per medicazioni canalari provvisorie 2,1 g € 27,50 € 16,50
22 351CP421 Calcipast Mega Pack 4 x 2,1 g € 85,00 € 58,90



Solvente naturale



EUCALYPTOL

Solvente naturale a base di olio di eucalipto puro al 100%, specificamente formulato per la rimozione della guttaperca durante i ritocchi endodontici. Grazie alle sue proprietà antisettiche e alla sua efficacia, rappresenta una scelta estremamente sicura e affidabile.

Composizione. Olio di eucalipto 100%. Eucalyptol è indicato per: • Rimozione della guttaperca dai canali radicolari durante i trattamenti endodontici ripetuti. **Caratteristiche principali.** • **Efficacia nel dissolvere la guttaperca:** facilita la rimozione del materiale otturante dai canali radicolari. • **Proprietà antibatteriche:** efficace contro batteri come Vibrio, Staphylococcus e Streptococcus, inclusi ceppi resistenti agli antibiotici. • **Aroma gradevole:** liquido incolore o giallastro con un profumo fresco e caratteristico di cineolo. • **Alternativa sicura:** rispetto ad altri solventi, presenta un minor rischio di effetti indesiderati.

37 38EUC10 Eucalyptol Flac. 10 ml. + 3 pipette € 12,35 € 11,50 • 46 32PIP5 Pipette trasp., 5 pz. € 5,50 • 2 € 4,50 cad.



Solvente naturale



ORANGE GUTTAN

Solvente naturale a base di olio essenziale di arancia al 100%, progettato per la rimozione efficace della guttaperca durante i trattamenti endodontici ripetuti. Grazie alla sua composizione completamente naturale, offre un'alternativa sicura e biocompatibile ai solventi tradizionali, facilitando la pulizia dei canali radicolari senza compromettere la salute dei tessuti circostanti.

Composizione. Olio essenziale di arancia 100%. **Indicazioni d'uso.** • Rimozione della guttaperca dai canali radicolari durante i ritocchi endodontici. **Caratteristiche principali.** • **Solvente naturale e non tossico:** offre un'alternativa sicura ai solventi chimici tradizionali. • **Efficacia elevata:** dissolve rapidamente la guttaperca, facilitandone la rimozione. • **Facilità di risciacquo:** consente una pulizia efficace del canale radicolare. • **Biocompatibilità:** riduce il rischio di reazioni avverse nei tessuti periapicali. • **Aroma gradevole:** l'olio essenziale di arancia conferisce un profumo piacevole durante l'uso.

37 38OG10 Orange Gutt. Fl. 10 ml. + Set 3 pipette € 29,80 € 26,00 • 46 32PIP5 Pipette trasp., 5 pz. € 5,50 • 2 € 4,50 cad.



Irrigante canale ipoclorito di sodio NaClO 5,25%



CHLORAXID

Soluzione a base di ipoclorito di sodio utilizzata per il risciacquo dei canali radicolari.

È disponibile nelle concentrazioni **5,25%** e il **2%** e in flacone da **200 g** o **400 g**.

- Chloraxid 5,25%: ipoclorito di sodio (5,25% di cloro attivo), acqua purificata conforme alla Farmacopea Europea.
- Chloraxid 2%: ipoclorito di sodio (2% di cloro attivo), acqua purificata conforme alla Farmacopea Europea.

Il prodotto è disponibile in flaconi da 400 g e 200 g, con adattatore con tappo richiudibile, compatibile con la maggior parte delle siringhe standard. Siringa dosatrice per un'applicazione precisa. **Indicazioni d'uso.** • Rimozione dei residui di polpa necrotica durante la preparazione meccanica del canale radicolare. • Pulizia del canale e rimozione del "smear layer" per esporre gli orifizi dei tubuli dentinali prima dell'otturazione finale.



Flacone da 200 o 400 g con adattatore a tappo a vite e dispenser	
Chloraxid 5,25% 200 g	Chloraxid 5,25% 400 g
37 3155200 € 7,50 • 2 € 6,95 cad.	37 3155400 € 12,50 • 2 € 10,50 cad.

Irrigante canale Digluconato 2%



CHLORAXID

Soluzione irrigante a base di clorexidina digluconato al 2%, utilizzata per la disinfezione e l'irrigazione dei canali radicolari.

Composizione. • Principio attivo: Clorexidina digluconato al 2%. • Eccipienti: Acqua purificata conforme alla Farmacopea Europea. Il prodotto è disponibile in flaconi da 400 g, con adattatore con tappo richiudibile, compatibile con la maggior parte delle siringhe standard. Siringa dosatrice per un'applicazione precisa.

Indicazioni d'uso. • Irrigazione dei canali radicolari durante i trattamenti endodontici, in particolare in presenza di polpa infiammata. • Disinfezione del canale radicolare, grazie alle proprietà antimicrobiche della clorexidina. • Pulizia del canale, rimuovendo detriti e residui organici. • Esposizione dei tubuli dentinali, facilitando l'adesione dei materiali di otturazione.



37 315CD22 Chloraxid Digluconate 2% 200 g	37 315CD24 Chloraxid Digluconate 2% 400 g
€ 17,00 • 2 a € 15,00 cad.	€ 26,50 • 2 a € 24,00 cad.

EDTA Disodico 17% - Liquido



ENDO SOLUTION LIQUID

EndoPrep è a base di 17% EDTA indicato per una preparazione endodontica efficiente e sicura. Facilita l'uso degli strumenti, rimuove lo smear layer, e può essere utilizzato anche nello sbiancamento. Se usato correttamente (applicazione, risciacquo, protezioni), offre ottimi risultati; richiede però attenzione nelle controindicazioni e nell'uso tra le sedute.

Ingredienti. • EDTA disodico 17%: agente chelante, ammorbidisce la dentina rimuovendo ioni calcio e magnesio. • Base in gel più eccipienti lubrificanti. **Indicazioni d'uso.** • Preparazione chemomeccanica dei canali. • Ottima per formazione, modellamento e rimozione dello smear layer. • Il gel garantisce una fluida introduzione degli strumenti e minore rischio di frattura. • Utile anche nello sbiancamento interno del canale in combinazione con NaOCl.

Flacone completo di accessori 200 ml 37 321ES200 € 27,80 € 25,00



EDTA Disodico 17% - Gel



ENDO SOLUTION GEL

EndoPrep Gel è indicato per una preparazione endodontica efficiente e sicura. Facilita l'uso degli strumenti, rimuove lo smear layer, e può essere utilizzato anche nello sbiancamento. Se usato correttamente (applicazione, risciacquo, protezioni), offre ottimi risultati; richiede però attenzione nelle controindicazioni e nell'uso tra le sedute.

Ingredienti. • EDTA disodico 17%: agente chelante, ammorbidisce la dentina rimuovendo ioni calcio e magnesio. • Gel più eccipienti lubrificanti. **Indicazioni d'uso.** • Preparazione chemomeccanica dei canali. • Ottima per formazione, modellamento e rimozione dello smear layer. • Il gel garantisce una fluida introduzione degli strumenti e minore rischio di frattura. • Utile anche nello sbiancamento interno del canale in combinazione con NaOCl.

37 32EPG5 Endo-Prep Gel 5 ml. + tips € 18,90 € 15,50 • 37 32EPG10 Endo-Prep Gel 10 ml. + tips € 28,60 € 25,50



EDTA Disodico 15% • Urea 10% • Eccipienti - Cream



ENDO SOLUTION CREAM

EndoPrep Cream è un preparato chemomeccanico a base di EDTA e urea perossido, studiato per ammorbidire la dentina e favorire la pulizia, il modellamento e la rimozione dello smear layer nei canali radicolari. Utilizzato con un applicatore monouso e risciacquo contemporaneo con ipoclorito e acqua, richiede cautele per poter supportare un'adesione ottimale e prevenire danni alla dentina.

Indicazioni d'uso. • Preparazione chemo-meccanica del canale radicolare • EDTA ammorbidisce la dentina superficiale eliminando ioni calcio e magnesio, facilitando la rimozione del smear layer • L'effervescenza derivante da urea perossido + NaOCl aiuta a rimuovere detriti e frammenti dentinali • Eccipienti lubrificanti riducono il rischio di frattura dello strumento. - Siringhe da 2 mL, 5 mL o 10 mL + 2 applicatori monouso • - Mega pack: 3 siringhe da 10 mL + 4 applicatori

Avvertenze: Evitare l'uso immediato prima o dopo il risciacquo con clorexidina digluconato per prevenire la formazione di un residuo lattiginoso bianco.

Siringa 2 ml. + tips	Siringa 5 ml + tips	Siringa 10 ml + tips	Mega Pack 3x10 ml + tips
37 32EPC2 € 15,50 € 13,70	37 32EPC5 € 29,00 € 28,00	37 32EPC10 € 49,00 € 41,00	37 32EPC310 € 124,00 € 110,00



Solvente organico

Solvente organico altamente efficace, utilizzato in endodonzia per la rimozione della gutta-perca e di materiali come l'Endomethasone durante i ritrattamenti canalari. Grazie alla sua capacità di dissoluzione rapida, facilita la pulizia dei canali radicolari, rendendo il processo più efficiente rispetto ad altri solventi tradizionali.

37 38CHM10 Methylene Chloride Fl.da 10 ml. Con pinzetta appl € 16,75 € 15,00

METHYLENE CHLORIDE



IODOFORM

Pasta iodoformica per medicazioni intermedie dei canali

Agente chimico essiccante in polvere utilizzato in endodonzia, principalmente come componente nelle paste per otturazioni canalari temporanee. La sua formulazione è pensata per offrire proprietà terapeutiche durante i trattamenti canalari. • Radiopaca • Azione antibatterica di aiuto nel trattamento delle necrosi pulpari, granulomi e infezioni periapicali • Capacità di essere riassorbita dall'organismo in caso di fuoriuscita.

37 38J30 Pasta Iodoformica 30 g. (Accessori inclusi: cucchiaino dosatore per facilitare l'applicazione.) € 35,95 € 32,00



Irrigatore multiuso

Questo irrigatore è utilizzato per il controllo preciso dell'aria e/o dell'acqua in qualsiasi procedura dentale (ponti e corone, restauri, endodonzia, parodontologia, chirurgia, impianti, ecc.) che richiede irrigazione e/o asciugatura durante il procedimento. L'irrigatore Stropko è particolarmente utile quando si eseguono procedure con il microscopio operativo chirurgico (SOM), quando è essenziale il controllo di precisione dell'irrigazione. Da utilizzare in ogni procedura dentale per garantire un flusso d'acqua e/o aria delicato ed efficace per una pulizia o un'asciugatura superiore ed efficiente di qualsiasi superficie o area di lavoro.

Vantaggi: • Getto d'aria preciso e fine per risciacquare e asciugare in sicurezza • Elimina gli schizzi e riduce al minimo gli aerosol • Fornisce una pressione dell'aria regolata e delicata • Accoglie tutti gli inserti Luer-Lock • migliora la microadesione • Indispensabile per l'uso al microscopio.


32 351260 Standard Pack: STD. 5 cm + 5 Blue Flo Tips

32 351265 Standard Pack: XL 8,9 cm + 5 Blue Flo Tips

Contenuto: 1 Stropko Irrigator™ (lung.indicata) e 5 puntali Blu-Flo™ € 185,00 € 149,00

46 746202 Blue-FLO Tip 23 ga. 20 pz. € 25,00 2-15% • 46 746222 Blue-FLO Tip 23 ga. 100 pz. € 89,00 2-15%

STROPKO PRECISION IRRIGATOR

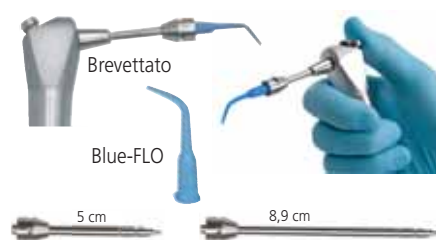

Disponibile anche Kit: 1 Standard Pack (lunghezza da spec.), 1 Siringa Aria/Acqua regolabile, 1 Tubo da 178 cm.

Attivatore ad ultrasuoni per irrigazione canalare

• Controllo automatico delle frequenze • Circuito che garantisce alta frequenza a bassa ampiezza delle vibrazioni per efficienza e stabilità dell'azione all'interno del canale • Operatività desiderata settabile: **Potenze:** E, E2, E3. **Tempi di lavoro 10s, 15s, 20s, 10min** • **Cordless** e ricarica a contatto magnetico • Schermo LCD per controllo tempistiche e potenza • Attivazione ad anello per attivazione in qualsiasi posizione e angolazione

59 213EN3 Attivatore irriganti ENDO 3. Dotazione completa di inserti: E96x2, E99x2, E70x2, E71x10, E72x10 € 472,00 € 330,00



ENDO 3



Cannula flessibile

Cannula per irrigazione canalare in propilene morbido di alta qualità. Grazie alla flessibilità segue perfettamente l'anatomia di qualsiasi canale radicolare fino all'apice. L'irrigazione laterale è garantita e sicura grazie alle aperture laterali contrapposte a ridosso della punta chiusa. Irrigazione e detersione superiori e in sicurezza.

Taper 04 - Punta (0,3) - Lunghezza 25 mm - Tacche a 22, 20, 19, 18 mm. - Punta chiusa con aperture laterali • **Polipropilene di alta qualità. Flessibile 30 gauge 25 mm. Confezionate in buste singole. Sterilizzabili a 134°C.**

• Confezionate singolarmente in camera bianca • Compatibile con tutte le siringhe dentali standard.

46 P4GF20 Glide Flow 30 g (ø0,4) 25 mm. 20 pz. € 39,90 € 21,50



GLIDEFLOW




Aghi per irrigazione canalare

• Pieghevoli, 2,54 cm, per irrigazioni canalari, di siti chirurgici subgingivali e solchi • Estremità smussa e apertura laterale per l'irrigazione • Per l'uso in prossimità dell'apice • Modelli AVIR con classico attacco Luer.



APPLI-VAC

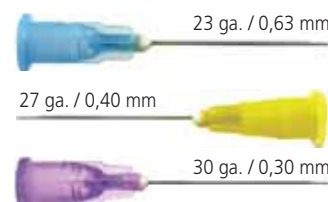

APPLI-VAC Luer	23 ga BLU	27 ga GIALLI	30 ga VIOLA	
20 pz. € 25,00	46 745023	46 745027	46 745030	2-10%
100 pz. € 85,00	46 745523	46 745527	46 745530	3-15%

Punta per applicazione materiali viscosi

L'ideale per ottenere il massimo vantaggio con i materiali viscosi. Visco-Tip è una punta pieghevole flessibile da 25 ga che migliora il flusso e il posizionamento dei materiali viscosi come i sigillanti bioceramici e l'idrossido di calcio. • Riduce lo spreco di materiali • Migliora il flusso per una erogazione facile e prevedibile • Design anti-intasamento.

46 722302 Visco-Tip 25 ga. 50 pz. € 48,00 € 39,00



VISCOTIP

Video



Siringa 6cc con ago 30ga premontato

L'unica siringa al mondo dotata di tecnologia antigoccia, riduce notevolmente il rischio di macchie di candeggina e danni alla pelle, agli occhi e alla mucosa orale. Non costa più di una siringa di irrigazione standard! Dotata di uno stantuffo codificato a colori unico per identificare rapidamente NaOCl e un anello codificato a colori per una migliore visibilità nei campi ingranditi.

• Destinato alla conservazione a breve termine di NaOCl • Tecnologia antigoccia aspira automaticamente le gocce • Riduce notevolmente il rischio di macchie e danni alla pelle

46 715060/20 Dripless con 20 aghi irrigazione da 30ga, apertura laterale, cf. 20 pz.

€ 34,50 + omaggio 1 cf 50 mascherine IIR Medicom SafeMask • 2 cf. € 32,00 cad. + omaggio 2 cf. SafeMask



DRIPLESS



Aspirazione dei liquidi dal canale radicolare-monouso

È particolarmente utile per rimuovere soluzioni irriganti e asciugare i canali, riducendo significativamente l'uso di punte di carta.

Caratteristiche principali. • **Monouso:** progettato per un singolo utilizzo, garantendo igiene e prevenzione della contaminazione crociata • **Compatibilità:** si collega facilmente a qualsiasi dispositivo di aspirazione standard tramite un adattatore • **Punta ultrasottile:** con un diametro di 0,29 mm, consente l'accesso anche ai canali radicolari più stretti • **Applicatore morbido:** assicurando una buona penetrazione e un'asciugatura accurata del canale radicolare • **Efficienza:** riduce i tempi di lavoro fino a 10 volte e l'utilizzo di punte di carta fino all'80%. **Modalità d'uso.** 1. Collegamento: connettere l'Endo Aspirator al dispositivo di aspirazione utilizzando l'adattatore fornito. 2. Aspirazione: introdurre delicatamente l'applicatore nel canale radicolare e attivare il sistema di aspirazione per rimuovere i liquidi presenti. 3. Ripetizione: ripetere la procedura dopo ogni irrigazione per garantire un'asciugatura ottimale. 4. Smaltimento: dopo l'uso, smaltire l'aspiratore secondo le normative vigenti per i dispositivi monouso.

Confezione include: • 5 aspiratori monouso • 5 punte • 1 adattatore per il collegamento al sistema di aspirazione

46 34EA1 Endo-Aspirator € 7,20 € 6,00 46 34EA5 Endo-Aspirator Set 5 pz. € 24,50 € 22,40



ENDO-ASPIRATOR



Perni endocanalari traslucidi in fibra di vetro

L'Eccellenza nella Ricostruzione Post-Endodontica.

Proponiamo questo sistema integrato progettato per rispettare l'anatomia canale e massimizzare la longevità del restauro.

Caratteristiche: 1. **Profilo con Conicità 2%: Rispetto dell'Anatomia.** Design conico a bassa angolazione. La scelta ideale per rispecchiare fedelmente la preparazione endodontica standard, garantendo un fitting preciso, senza sacrificare dentina preziosa. **Vantaggio Clinico:** consente una preparazione conservativa dell'area apicale → Meno asportazione di tessuto significa minor rischio di fratture radicolari e una distribuzione degli stress più uniforme lungo tutta la radice.

2. **Codifica a Colori: Efficienza e Sicurezza.** Risparmio di tempo e precisione.

3. **Fibra di Vetro Traslucida: Estetica e Biomeccanica.** Il materiale è il cuore del prodotto. La fibra di vetro traslucida di Selezione PERIODENT offre prestazioni superiori rispetto ai vecchi perni in metallo o carbonio. **Caratteristiche:** Modulo di elasticità vicino a quello della dentina e alta traslucenza. **Vantaggi: Effetto Ammortizzatore** → Distribuisce le forze masticatorie in modo biomimetico. **Estetica Superiore:** La traslucenza permette il passaggio della luce, evitando ombre scure antiestetiche a livello gengivale, fondamentale nei settori anteriori. **Cementazione Duale:** Favorisce il passaggio luce della lampada fotopolimerizzante anche nelle zone più profonde del canale.

4. **Frese Calibrate in acciaio chirurgico:** Precisione chirurgica e durata. Caratteristica: Acciaio chirurgico di altissima qualità con calibrazione micrometrica. Vantaggi: Taglio netto e senza vibrazioni. → Massima efficacia di taglio con produzione minima di calore. Durata estrema: Resistenza all'usura e ai cicli di sterilizzazione mantenendo l'affilatura nel tempo.

ENDOCORE by AVANT

Perni ENDOCORE cf 10 perni € 66,00 2 cf. € 55,00 cad. • 4 cf. € 50,00			
0,8 Bianco	0,10 Giallo	0,12 Rosso	0,14 Blu
36 23TC208	36 23TC210	36 23TC212	36 23TC214

Frese calibrate ENDOCORE cf 1 pz. € 33,00 € 27,00 3 a scelta € 24,00 cad. + omaggio 3 cf. mascherine IIR SafeMask Medicom (fino ad esa)			
Fresa 0,8	Fresa 0,10	Fresa 0,12	Fresa 0,14
36 24TC08	36 24TC10	36 24TC12	36 24TC14



EndoCore by Avant



Compattatore a caldo DOWNPACK B&L

Cordless leggero ed ergonomico per la compattazione verticale a caldo 3D "DownPack"
 • Massima praticità Design Ergonomic • Bilanciamento Facilita l'utilizzo • Cordless Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso • 6 Tacche di posizionamento esagonali per il fissaggio sicuro degli inserti nella posizione desiderata.

Specifiche tecniche

Base di ricarica: misure (mm) 81x137x36 - peso 207 g

Manipolatore Riscaldatore: misure (mm) 12,5x150,5x21,5 - peso 63 g

59 312ASKB SuperEndo **Alpha 2** Set: Unità termica, base di ricarica, batteria Li-ion 1620 mAh, trasformatore e cavo, 3 Plugger 55(06, 08, 10)

€ 1.890,00 € 1.390,00 + garanzia Ilic' • Test termico 59 312HTT € 241,00 € 195,00



ALPHA 2



SUPERENDO ALPHA

Plugger BAEK Alpha2

Plugger Hi-Tech, altamente flessibili, calibrati per Alpha2 cordless

- In acciaio inox temperato molto flessibile, seguono il profilo di canali con curvature marcate
- Raggiungono la temperatura in pochi secondi
- Fissaggio sicuro, 360° di rotazione.



Plugger Baek SuperEndo Alpha2, € 188,00 • 2 € 168,00 cad.				
		40/04	45/04	50/04
		59 312P4004	59 312P4504	59 312P5004
55/06	55/08	55/08L	55/10	60/12
59 312P5506	59 312P5508	59 312P5508L	59 312P5510	59 312P6012

La qualità è all'interno: Costituiti da due metalli conduttori di forma cilindrico/conica, uno dentro l'altro e tra loro c'è un isolante, tranne in punta, dove c'è una resistenza che al passare della corrente genera calore riscaldante all'estremità del plugger perfettamente corrispondente alla temperatura del display.

Dispositivo per otturazione a caldo BackFill B&L BIOTECH

Beta Mini cordless, maneggevole è lo stato dell'arte per la migliore tecnica Backfill.

Affidabile perché tecnologicamente superiore!

Cordless e compatto risulta di facile manipolazione

- Maneggevole per un'erogazione senza sforzo • Eroga rapidamente e con facilità il materiale di otturazione caldo per il riempimento dei canali radicolari • Massima praticità • Ergonomico e con aghi ruotabili a 360° • Bilanciato, l'ottima distribuzione dei pesi facilita l'utilizzo • Nessuna limitazione d'uso, minor affaticamento di mano e polso • Doppia sicurezza contro bruciature accidentali • Protettore termico in materiale termoresistente speciale • Lunga durata della batteria 4 ore con 1 ricarica: 1 settimana di trattamenti!

59 312EKB SuperendoEndo Beta Mini Set: Pistola unità termica, base di ricarica € 1.890,00

€ 1.390,00 + garanzia Ilic' (cod. 59 312EKW Beta Mini Bianco)

AGHI SUPERENDO BETA in argento, blister 4 pz. € 71,50 • 2 cf. a scelta € 69,00 cad.

(20ga: 22, 24, 28mm • 23ga: 21, 24, 28mm • 25 ga 22, 24, 26mm.)

AGHI SUPERENDO Multibanding, blister 4 pz. € 79,00 • 2 cf. a scelta € 71,00 cad.

(24mm: 25ga, 23ga, 20 ga)

GUTTAPERCA Hi-Tech B&L in pellet (59 312GPS, R, H), 100 pz. € 48,90 • 2 cf. a scelta € 44,00 cad.



BETA MINI

Nuova guaina in silicone autoclavabile




Le temperature selezionabili in sequenza (150 > 180 > 200 e 230 °C) per l'agevole il controllo del flusso di guttaperca o Resilon®.

Condensatori NiTi/Inox B&L Biotech

Strumenti doppi con punte intercambiabili in Nichel Titanio superflessibile e acciaio inox rigido

Reg. 20 mm € 95,00 € 85,00	BL-B Kondenser Strumento doppio XChange
33 513X35	Verde 35 (A0.35±0.02) / 70 (A0.70±0.02)
33 513X40	Nero 40 (A0.40±0.02) / 80 (A0.80±0.02)
33 513X50	Oro 50 (A0.50±0.02) / 100 (A1.00±0.02)
33 513X60	Azzurro 60/120

Long 25 mm € 99,00 € 89,00	BL-B Kondenser Strumento doppio XChange
33 513X35L	Verde 35 (A0.35±0.02) / 70 (A0.70±0.02)
33 513X40L	Nero 40 (A0.40±0.02) / 80 (A0.80±0.02)
33 513X50L	Oro 50 (A0.50±0.02) / 100 (A1.00±0.02)
33 513X60L	Azzurro 60/120

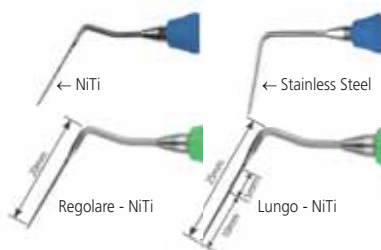

33 513XSET
BL-B-Kondenser Regular 20 mm Set (35/70, 40/80, 50/100, 60/120)
€ 297,00 € 250,00

33 513XSETL
BL-B-Kondenser Long 25 mm Set (35L/70, 40L/80, 50L/100, 60L/120)
€ 327,00 € 275,00



BL-B-KONDENSER





D600 • U600 € 990,00
 59 224D600 € 450,00
 59 224U600

D600 LED • U600 LED € 1.150,00
 59 224D600L € 550,00
 59 224U600L

Massima potenza, controllo e precisione in un unico dispositivo

Tecnologia per l'endodonzia. Il dispositivo piezolettrico a ultrasuoni **D600** è stato specificatamente migliorato per le applicazioni in campo endodontico. Questo lo rende uno dei macchinari più scelti da parte degli specialisti dell'endodonzia.



Massimo comfort per il paziente. Lo scaler **D600** presenta delle ottime funzioni per un trattamento indolore al paziente, mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza, e per la ricostruzione canalare minimamente invasiva.

Accessori in dotazione				
Manipolo D600	Compatibile SATELEC®		HD-8H x 1	
Manipolo D600 LED	Compatibile SATELEC®		HD-8L x 1	
Manipolo U600	Compatibile EMS®			
Manipolo U600 LED	Compatibile EMS®			
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)	E (endo)	
Tipologia di inserti	GD5x1	PD7x1	PD12Dx1	ED12Dx1
	ED3Dx1	ED6x1	ED15x1	ED60x1
Erogazione dell'acqua	Integrata	Rete idrica		
Frequenza di vibrazione	28 kHz + 3 kHz			

Inserti Ultrasuoni per Endodonzia



TIPONE

2 -15% • 4 -20%


Rimozione calcificazioni / otturazioni canalari	E3D Diamantata	Rimozione ostruzioni e strumenti fratturati	E4D Diamantata	ET40D
E3 € 35,00	E3D € 48,00	E4 € 35,00	E4D € 48,00	ET40D € 48,00
A: 59 X16E3A	A: 59 X16ED3A	A: 59 X16E4A	A: 59 X16E4DA	A: 59 X1640D
E: 59 X16E3E	E: 59 X16ED3E	E: 59 X16E4E	E: 59 X16E4DE	

Attacco: **A:** SAT style **E:** EMS style



TipOne ROGP • ROGP-90
Punte ultrasuoni

Le innovative punte ROGP e ROGP-90 vengono utilizzate per accedere ad aree non raggiungibili da altre punte. Particolarmente efficaci per i ritrattamenti specialmente nei canali ovali lunghi, dove la maggior parte delle altre punte non si adatterebbero. Ideali anche per la rimozione della Gutta Percha.

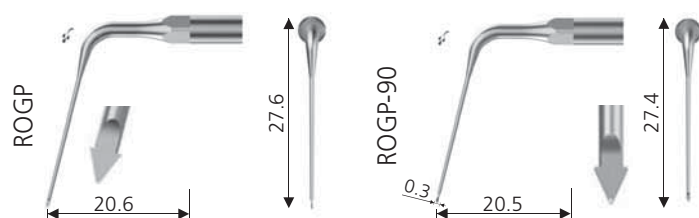


€ 59,00 ROGP	A: 59 X16ROGPA	E: 59 X16ROGPE	€ 59,00 ROGP-90	A: 59 X16ROGP90A	E: 59 X16ROGP90E	2 -15% • 4 -20%
---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Cannula flessibile in polipropilene per irrigazione endo



btrPen

Strumento endodontico innovativo progettato per l'estrazione sicura e precisa di strumenti canalari separati all'interno dei canali radicolari. Questo dispositivo consente di affrontare efficacemente una delle sfide più complesse in endodonzia, migliorando i risultati clinici e riducendo la necessità di interventi chirurgici.

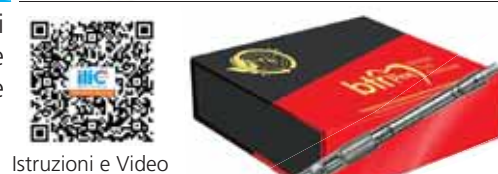

Istruzioni e Video

Modalità d'uso.

1. Preparazione: sterilizzare la punta in autoclave (senza cappuccio protettivo) e montarla sull'impugnatura. **2.** Formazione del loop: utilizzare il calibratore per modellare il loop di nitinol alla dimensione desiderata. **3.** Accesso al frammento: inserire delicatamente la punta nel canale per agganciarsi al frammento separato. **4.** Rimozione: estrarre il frammento con movimenti controllati, evitando danni ai tessuti circostanti.

36 392BTR BTR Pen Kit, contiene: 1 impugnatura in acciaio inox, 1 calibratore in acciaio inox, 5 punte monouso con loop in nitinol (Ø 0,3 mm), 2 molle intercambiabili (morbida e dura), 3 O-ring in silicone. **€ 790,00 € 690,00 + omaggio 4 cf 50 mascherine IIR** Medicom SafeMask (pag 63)



omaggio

4 cf. 50 Safe Mask Medicom

36 392BTR03	BTR Aghi Ø0,3 mm.	€ 60,75 € 47,00
36 392BTR04	BTR Aghi Ø0,4 mm.	€ 76,50 € 59,00
36 393BTR05	BTR Aghi Ø0,5 mm.	€ 87,75 € 68,00

Le punte intercambiabili sono disponibili separatamente, in confezione da 5 pz.



Bioceramici attivi Avalon per terapie endodontiche



Carolyn Primus, PhD

NeoSealer Flo. Cemento canalare bioceramico attivo con % di bioattivo superiore a tutti per promuovere una maggiore formazione di HA per attivare un più veloce foto scatola con siringa e dente processo di guarigione. • Ottimizzato per otturazioni sia verticali a caldo che a cono singolo. • Privo di resina • Non scolorisce • Confezione speciale antiumidità.

Tempo di lavoro 40 min • Indur. 11 h.+1

37 534NS22 NeoSealer Flo Kit 2,2g + 20 Flex Flo Tip 25ga. € 214,15 € 115,00

37 534NSR22 NeoSealer Flo Kit 2,2g + Refill € 171,32 € 99,00

46 54220 FLEX FLO 20 aghi € 37,90 • 46 54240 FLEX FLO 40 aghi € 68,00

NeoPutty Starter Kit. Sigillante canalare premiscelato. Manipolazione e posizionamento più efficienti. Compatto e non appiccicoso, resiste al risciacquo, l'ideale per 11 delle procedure più importanti. Elevato PH • Bioattività su base MTA. Tempo di lavoro 1 h • Indur. 4 h

37 534NP05 NeoPutty Starter Kit 0,50g € 118,81 € 69,00 • 37 534NP12 NeoPutty Starter Kit 1,2g € 237,79 € 138,00

NeoMTA2. Bioceramico attivo facile e veloce da miscelare. Manipolazione e posizionamento più efficienti. Compatto e non appiccicoso, resiste al risciacquo • Elevato PH • Per 13 delle procedure più importanti • Bioattività su base MTA Tempo di lavoro e presa 14 min.

37 534010 MTA2 (10 applicazioni) € 169,74 € 98,40

Tempo di lavoro e di presa 14 min. (miscelato come putty) • Tempo di lavoro 21 min. presa 70 min (miscelato come sigillante)

37 534025 MTA2 (25 applicazioni) € 193,31 € 170,00

NEOSEALER, NEOPUTTY, NEOMTA2



Siringhe per prelievo e applicazione MTA


- Disponibile in 3 misure • Portano l'MTA direttamente all'apice del canale radicolare
- Utilizzabili per tutte le applicazioni cliniche dell'MTA.

€ 115,00 5 Siringhe • 2-10% • 3-15%

Ass.ti. 1 viola, 2 verdi, 2 arancioni € 110,00	Viola 5 pz. 0,80 mm.	Arancione 5 pz. 0,99 mm.	Verde 5 pz. 1,60 mm.
36 394019	36 394017	36 394016	36 394015



DOVGAN STYLE

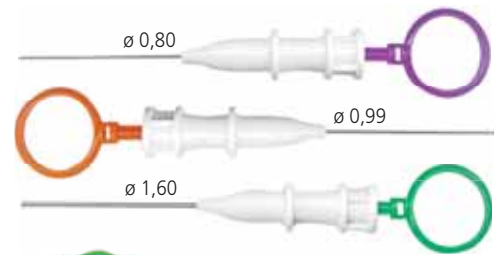

Blocchetto per dosaggio preciso MTA

Fornisce porzioni precise di MTA+ pronte per l'applicazione precisa in cavità dentali o canali radicolari. Scanalature con diametri variabili da 0,7 mm a 1,0 mm. Pulizia dopo l'utilizzo con alcol. Blocchetto dosatore progettato per formare porzioni precise di materiale MTA+ (Mineral Trioxide Aggregate) pronte per l'applicazione in cavità dentali o canali radicolari. Dispositivo essenziale per ottenere precisione e efficienza nella preparazione e applicazione del materiale MTA+, migliorando la qualità dei trattamenti endodontici. Questo strumento è particolarmente utile per garantire un dosaggio accurato e facilitare l'inserimento del materiale durante i trattamenti endodontici.

36 794MM Blocchetto Matrix MTA+ € 49,00 € 34,00



MATRIX+ MTA



Retrattori chirurgici piegabili

Disponibili in due tipologie: "Ni-Ti" e acciaio Inox "SUS".

I modelli Ni-Ti, dopo essere stati piegati, possono tornare alla forma originale alla temperatura di 60° o più. Bordi Seghettati. Si blocca stabilmente alla placca ossea corticale indipendentemente dalla forma, grazie ai bordi arrotondati seghettati dell'estremità del KimTrac. Varie Angolazioni. Consiste di tre angolazioni che consentono il contatto con la placca ossea. Aderisce bene sia nei siti anteriori che posteriori regolando l'angolazione sinistra-destra. KimTrac Alette. Le Alette sterilizzabili KimTrac consentono una facile retrazione del lembo e migliorano notevolmente visibilità e accessibilità.


Solo il modello KimTrac n. 1 è disponibile già montato nel suo manico e con gli accessori.

Gli altri terminali retrattori ed ulteriori manici sono disponibili separatamente.

33 375NNS Retrattore KimTrac Ni-Ti n. 1 completo € 255,00 ⇒ comprende * -20%

33 375NSS Retrattore KimTrac SUS n. 1 completo € 240,00 ⇒ comprende *

-15%

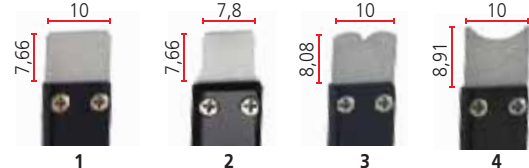

Nitinol € 39,50	33 375KTN1N*	33 375KTN2N	33 375KTN3N	33 375KTN4N
SUS € 39,50	33 375KTN1S*	33 375KTN2S	33 375KTN3S	33 375KTN4S

*Per i modelli fino al 2020.

- 33 375KTNNH KimTrac manico € 248,00 **
- 33 375KBJ KimTrac strumento per la piegatura € 13,50 **
- 33 375LTNWT KimTrac aletta universale stretta € 16,50 **
- 33 375KTW1 KimTrac Aletta larga KTW-1* € 24,30 -15%
- 33 375KTW2 KimTrac Aletta lunga KTW-2* € 24,30
- 33 375LTNSS KimTrac Guscio autoclavabile € 16,50 **



B&L BIOTECH

KIM TRAC



Alette KimTrac (KTW1/KTW2)

Per gli attuali modelli serve solo l'aletta universale LTNWT.



Applicatori Premium Quality Made in USA 100%

Materiali e i processi produttivi esclusivi, fanno di Denbur il micro applicatore superiore. Oltre al modello con la punta più sottile ed il pennello più consistente, la possibilità di piega grazie al design corrugato, facilita le applicazioni anche di piccole quantità di materiale in aree impervie.

Consigliati per adesivi, emostatici, dispensabili anche in quantità ridotte (1/8 di goccia)
 • Pennellino monouso economico e versatile • Per la rapida applicazione di piccole quantità di materiale in aree impervie • Ideale per agenti adesivi, emostatici e soluzioni rivelatrici, dispensabili in quantità ridotte (fino ad 1/8 di goccia).

Multi-Brush Color - Applicatori e Dispenser Easy-Shake

150 Applicatori in 1 Dispenser € 17,50 a scelta 2-10% • 3-15%

VERDE S	ARANCIO S	ROSA S	VIOLA S	GIALLO S	NERO XS
46 539151	46 539152	46 539153	46 539154	46 539155	46 539158

600 Applicatori in 4 Dispenser € 51,75 a scelta 2-10% • 3-15%

46 539601	46 539602	46 539603	46 539604	46 539605	46 539608
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Master-Brush. Pennello per applicazione con 2 lunghezze di setole:
Lungo (bianco), corto (nero).

Master-Brush con dispenser Easy-Shake 125 pezzi € 26,50 2-10% • 3-15%

Setola corta (nera)	Setola lunga (bianca)
46 533121	46 533122

Nano-Brush Endo. La conicità si basa sulla preparazione del canale ISO.
2 diametri, 2 lunghezze (10, 15 mm)

Nano-Brush con dispenser Easy-Shake 120 pezzi € 43,90 2-10% • 3-15%

Corto (30-35)	Lungo (30-35)	Corto (40-45)	Lungo (40-45)
46 534120	46 534121	46 534122	46 534123

Applicatori adesivi per prendere e posizionare

Piegabili ad ogni angolazione per posizionare Veneers Inlays, Onlays, faccette, corone, ecc.

• Forte adesivo per più applicazioni • Lunghezza 110 mm • Colore bianco

46 P9183 Stick Value Placer 50 pz. € 31,50 € 29,50

Siringa intraorale angolabile

46 41505 Siringa intra orale angolabile, doppia e con miscelatore per VPS, 20 pz

€ 57,20 50,00

nell'immagine Intra-Oral-Syringe con montata cannula 46 14347 (€ 13,00)

Cannule flessibili per endodonzia

In metallo morbido e flessibile; per il risciacquo, l'aspirazione, l'asciugatura e l'otturazione di canali radicolari. Utilizzabili anche come cannule di aspirazione con l'adattatore per l'aspiratore Luer. Si piegano facilmente.

Endo-Eze 1,9 cm	Diametro	20 pz. € 13,00	100 pz. € 56,00
Endo-Eze VERDE	18 ga. / 1,25 mm	46 14345	46 14428
Endo-Eze GIALLO	19 ga. / 1,06 mm	46 14346	46 14429
Endo-Eze LILLA	20 ga. / 0,90 mm	46 14347	46 14430
Endo-Eze CELESTE	22 ga. / 0,70 mm	46 14348	46 14431

Cannule per detersione

PUNTE APPLICATIVE

Mordenzanti	46 P2127	Light Blue 23 ga. 100 pz
MTA, comp. fluidi, Diga chim.	46 P2085	Tips Black 20 ga. 100 pz.
Universale	46 P2027	Tips Pink 18 ga. 100 pz.
2 cf. a scelta € 28,50 € 22,00		



DENBUR



Testina ø 1 mm
Multi Brush Color



Testina ø 0,5 mm
Multi Brush Nero XS



Applicatori adesivi per prendere e posizionare



STICK VALUE PLACER



INTRA-ORAL SYRINGE



ENDO-EZE



Attacco Luer



ENDO-EZE






Lo scopo del rinforzare le resine composite dentali non è quello di incrementare la loro resistenza alla flessione, ma piuttosto di aggiungere la qualità di resistenza alla frattura. La resistenza alla flessione è una misura della rigidità mentre la tenacità alla frattura è una misura della capacità di un materiale di resistere alla rapida propagazione di una frattura.
Dr. David Rudo

Fallo in modo che non si rompa con Ribbond!
Le fibre Ribbond consentono di realizzare protesi super resistenti e durevoli alla poltrona in una seduta.



Ribbond "Wall Papering Technique" Dr. Simone Deliperi

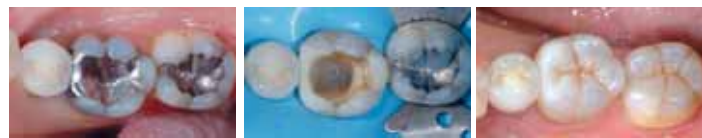

Ribbond non ha scadenza, e quindi ha un effetto positivo sulla riduzione di sprechi e costi



A differenza delle fibre di vetro, fragili e soggette a fratture, Ribbond è realizzato con le stesse fibre di polietilene ad altissimo peso molecolare, super resistenti, utilizzate per realizzare i giubbotti antiproiettile. Il vantaggio dell'utilizzo di fibre così resistenti è che è molto improbabile che Ribbond si possa fratturare durante l'uso clinico. Lo svantaggio è che le normali forbici non lo tagliano facilmente. Le speciali forbici Ribbond sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità. Il bordo di una lama è seghettato per impedire a Ribbond di scivolare lungo il filo, consentendo alle forbici di tagliarlo con precisione. Un taglio netto, senza fibre libere, facilita il posizionamento di Ribbond.

RIBBOND Ricambi Ultra spessore 0,12 mm - iva 4%

	Ortho 1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
68 cm	26 32501	26 32502	26 32503	26 32504
22 cm	26 32511	26 32512	26 32513	26 32514
	€ 421,00 68 cm a scelta 2 € 385,00 cad. • 3 € 379,00 cad.			
	€ 187,00 22 cm a scelta 2 € 171,00 cad. • 3 € 168,00 cad.			

Le fibre di rinforzo Gold "Standard" dal 1991

Il migliore e più facile da usare: Ribbond non ha memoria e ciò rende il posizionamento estremamente facile



Minimo spessore di adesione:
- massimo effetto ed efficacia del laminato
- maneggevolezza superiore
- massimo confort del paziente



RIBBOND Nastro di Rinforzo Multifunzionale.
In polietilene, applicabile con le Tecniche Adesive



Trattamento al plasma a garanzia dell'adesione chimica



Tessitura brevettata Ribbond, fornisce una rete di fibre intrecciate tessute che ferma la propagazione delle incrinature grazie al trasferimento multidirezionale delle forze

Resistenza alla frattura superiore le stesse fibre Ribbond sono utilizzate per creare i giubbotti antiproiettile

Prova Ribbond Ultra! Ribbond-Original diviene il "Gold Standard" nelle fibre di rinforzo dentali dal 1991. Da allora Ribbond ha apportato numerosi miglioramenti. Le fibre Ribbond Ultra, introdotte nel 2013, è il più sottile degli altri prodotti Ribbond e intuitivamente ha maggiori qualità di resistenza. Ribbond Ultra è più facile da usare, le protesi sono più sottili e confortevoli per i pazienti e sicuramente garantirà risultati clinici duraturi.

26 32500 Ribbond Ultra, Kit Assortito, 3 Nastri da 22 cm: 2, 3, 4 mm + Manuale € 421,00 € 389,00 + iva 4%
+ omaggio Fiber Wetting Resin (€ 43,00)
+ Forbici Ribbond € 93,00 € 83,00 + iva 22% PR 6R+FW+FR

RIBBOND FORBICI Indispensabili per tagliare le fibre
• Inox di altissima qualità esclusive • Autoclavabili.

26 3903 Forbici Hi-Tech Stainless Steel € 93,00 € 83,00
22 063017 Fiber Wetting Resin € 43,00 € 34,00

Microsabbiatrica per applicazioni sia intraorali che extraorali



DENTO-PREP

Per una forza di adesione ottimale. Microblaster per applicazioni sia intraorali che extraorali. Dento-Prep è uno strumento molto utile per molte procedure comuni in odontoiatria. È possibile utilizzare la sabbatura microfine per pulire e irruvidire le superfici di metalli, ceramica e materiali compositi prima della cementazione al fine di ottenere un'efficace ritenzione meccanica e una migliore forza di adesione.

Viene utilizzato con polvere di ossido di alluminio ed è applicabile sia per procedure extra che intraorali. DENTO-PREP presenta un design compatto ed è realizzato in acciaio inossidabile di qualità premium. Disponibili adattatori per turbine specifiche.

98 765DP Micro sabbiatrica € 405,00 € 359,00 (esclusa basetta)
Contiene anche barattolo con polvere.

98 765950 Base di appoggio (non compresa) € 52,00 € 45,00

- Facile utilizzo con le dita tramite il pulsante della valvola.
- Facile installazione tramite attacchi rapidi a turbina.
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e può essere autoclavato con qualsiasi metodo.
- Da utilizzare con polvere di ossido di alluminio e silicio (dimensione delle particelle 20-80 µm).
- Sterilizzabile in autoclave. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli.
- Applicabile con DUST-CABINET per la pulizia e la sabbatura, ad esempio, di restauri indiretti.

MADE IN DENMARK by Ronvig #1





"Non esiste una sola preparazione che possa andar bene per tutte le corone protesiche, soprattutto per le corone "Metal Free". Nella stessa preparazione spesso necessita differenziarne la geometria. Clinicamente la geometria della preparazione dipende dal tipo di materiale protesico che verrà utilizzato, oltre al morfotipo gengivale. È molto importante seguire le indicazioni delle case produttrici, soprattutto nel rispetto degli spessori, in base alla durezza del materiale da utilizzare, a seconda che si tratti di un solo elemento o che si tratti di ponti a più elementi.

Prof. Loris Prosper



49 LFAPU Mod. sup. F.A.P. € 165 € 130 • 49 25E02N/PR Mod. F.A.P. con 14 denti in Ivorine da preparare € 140 € 115

F.A.P. con preparazioni e F.A.P con 14 denti da preparare e sostituibili € 245

Denti ric. Ivorine: **49 25E02N** seguito dal numero del dente € 3,50 € 2,90

Indicazioni Cliniche seguendo il Protocollo F.A.P.= Funzione-Anatomia-Protocollo. by Prof. Loris Prosper

- 11** Faccetta con interessamento interprossimale - 3/4.
Indicazioni protesiche:

 - Ceramica Feldspatica
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio
 - Composito

12 Preparazione a finire con coulisse* palatale.
Indicazioni protesiche:

 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio

13 Preparazione Verticalizzata differenziata, chamfert vestibolare, spalla palatale + coulisse palatale* (dente devitalizzato con perno moncone in Oro o perno in Zirconio)
Indicazioni protesiche:

 - Metallo Ceramica
 - Metallo Composito
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio

14 Preparazione Faccetta vestibolare con 2 stop.
Indicazioni protesiche:

 - Ceramica Feldspatica
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio
 - Composito

15 Preparazione intarsio Overlay
Indicazioni protesiche:

 - Ceramica in Disilicato pitturato (monolitica)
 - Ceramica in Zirconio Pitturato (monolitica)
 - Composito


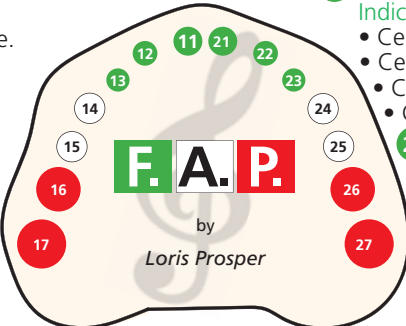
16 Preparazione differenziata a finire vestibolare-chamfer palatale + coulisse palatale* + pozzetto occlusale** (dente devitalizzato)
Indicazioni protesiche:

 - Metallo ceramica
 - Ceramica in Disilicato Pitturata (monolitica)
 - Ceramica in Zirconio Pitturata (monolitica)

17 Preparazione differenziata a finire mesialmente-chamfer palatale-distale-vestibolare + pozzetto occlusale** (dente devitalizzato)
Indicazioni protesiche:

 - Overlay in Disilicato Pitturato (monolitica)
 - Overlay in Zirconio Pitturato (monolitica)
 - Composito

21 Preparazione differenziata a chamfert vestibolare-spalla palatale
Indicazioni protesiche:

22 Preparazione faccetta a Window con 2 stop
Indicazioni protesiche:

 - Ceramica feldspatica
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio
 - Composito

23 Preparazione Verticalizzata e differenziata a chamfert vestibolare-spalla palatale + coulisse palatale* (dente devitalizzato con perno moncone in Oro o perno in Zirconio)
Indicazioni protesiche:

 - Metallo Ceramica
 - Metallo Composito
 - Ceramica in Disilicato

24 Preparazione differenziata a finire vestibolare e mesiale-spalla palatale e distale da 0,5
Indicazioni protesiche:

 - Metallo Ceramica
 - Metallo Composito
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica In Zirconio

25 Preparazione differenziata chamfert vestibolare da 0,2 mesiale-palatale-distale da 0,4
Indicazioni protesiche:

 - Metallo Ceramica
 - Metallo Composito
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio

26 Preparazione a spalla arrotondata a 360° con Slice circonferenziale+pozzetto occlusale** (dente devitalizzato)
Indicazioni protesiche:

 - Corona in Oro
 - Metallo Ceramica
 - Metallo Composito
 - Ceramica in Disilicato
 - Ceramica in Zirconio

27 Preparazione a spalla a 90° con pozzetto da mesiale a distale
Indicazioni protesiche:

 - Overlay in Oro
 - Overlay in Disilicato pitturato (monolitico)
 - Overlay in Composito
 - Overlay in Zirconio pitturato (monolitico)

* La funzione di una coulisse serve a ridurre la rotazione delle corone, oltre che ad aumentare un pochino la stabilità.

** Il pozzetto occlusale è possibile farlo solo nei denti devitalizzati. Ha due funzioni 1) riduce lo spessore del cemento evitando eventuali rialzi occlusali. 2) nel caso di monconi bassi è possibile replicare la sua profondità ottenendo più ritenzione delle corone, soprattutto per la metallo ceramica.

Un metodo logico e razionale nelle preparazioni protesiche

Selezione razionale che prevede l'utilizzo di due frese con una geometria innovativa, specifica per la riduzione della porzione occlusale. La fresa a "mongolfiera", è indicata per la riduzione dell'area palatale/linguale di incisivi e canini superiori ed inferiori: la sua forma convessa permette una rapida ed omogenea asportazione di tessuto dentale, ricreando la forma anatomica originale. La fresa tronco-conica viene invece utilizzata nella riduzione della porzione occlusale degli elementi diatorici: variando l'inclinazione e la direzione della fresa risulterà più facile riprodurre i versanti interni delle cuspidi vestibolari e linguali/palatali degli elementi posteriori.

Il kit comprende anche tre frese siliconiche specifiche di granulometria differente per la lucidatura finale del moncone, utile per eliminare minime imperfezioni, ma soprattutto per favorire lo scorrimento ideale del materiale da impronta, nonché nella fase di cementazione adesiva del manufatto protesico ultimato.

29 01XKPP5 KIT Prisma LP 2025 Protesi - 15 strumenti rotanti 1x € 185,00 € 165,00

Prof. Loris Prosper



Diamantate lunghe:
Velocità massima 12.000 g/min.



Diamantata progettata con speciale profilo con la funzione di arrotondare tutti gli spigoli di ogni preparazione, a maggior ragione per le corone integrali!
29 51889V Diamantata Robot Pagoda Robot
6 pz. € 29,50



29 71LPX1/5 Dia. Mongolfiera	29 71LPX2/5 Dia. Tr. Con.	29 012561 Perio Speed Pallina 014	29 K1210 ZR Oliva B/B	29 012P716C Perio Speed	29 012C6016F Perio Speed	29 51833 Dia. Robot Chamfer	29 51833V Dia. Robot Chamfer VF	29 51889V Dia. Robot Pagoda	29 51682C TPE 1,2 mm Coarse	29 51682F TPE 1,2 mm Fine	29 012541A Perio Speed Spillo	30 54253B Ceramide S Punta Midi	30 54256B Ceramide U Punta Midi	30 54259B Ceramide U2 Punta Midi
5 pz. € 49,50	5 pz. € 55,50	6 pz. € 34,75	5 pz. € 98,25	6 pz. € 34,75	6 pz. € 34,75	6 pz. € 30,40	6 pz. € 30,40	6 pz. € 30,40	6 pz. € 53	6 pz. € 53	6 pz. € 34,75	12 pz. € 24,60	12 pz. € 24,60	12 pz. € 24,60

Selezione Porcelain Veneer "L. Prosper"



PORCELAIN VENEER KIT

Dura White FL2, Dura White RE1, Ceramiste ultra lente, Dia Robot: 896, 897, 889V, SF833V, SF833, 835F, 850X, ZRBI/RO, ZR PALLINA, 2 SuperSnap viola, 2 nero, 2 mandrini, 1 Silver AI Block

29 01XKFP4 Porcelain Veneer Kit, CA/FG € 159,00 € 139,00

1 SuperSnap nero
1 Viola, 2 mandrini,
1 Bur Block FG/CA blu




DWFL2/CA 30 51223	RE1 30 51229	CLU1 30 54255	MP1 29 51896	MP2 29 51897	PAV 29 51889V	CPT 29 51833	CPT 29 51833V	CPTF 29 51835F	CP 29 51850	OLBROBI 29 K1GTFZ14	PBLBI 29 012561	30 55506	30 55528
€ 23,75	€ 23,75	€ 24,60	€ 30,45	€ 30,45	€ 30,45	€ 30,45	€ 30,45	€ 30,45	€ 30,45	€ 18,80	€ 18,80	50 € 18,05	50 € 18,05
12 pz.	12 pz.	12 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	1 pz.	1 pz.	30 5M439	6 pz. € 20,25

Selezione Preparazione subgingivale



TPE KIT

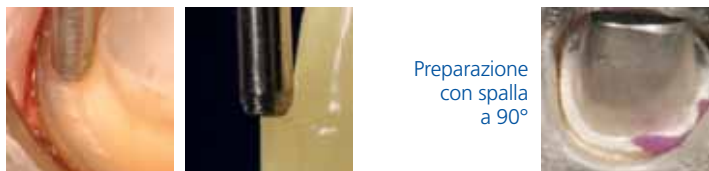

Preparazione con spalla a 90°

TPE Tissue Protecting End cutting

Consigliate per la rapida preparazione dei margini a spalla subgingivali. La bisellatura a livello della superficie di taglio evita lacerazioni sul tessuto adiacente e la creazione di sottosquadri sulla parte assiale della spalla.

- TPE grana grossa anello verde per la rapida riduzione del margine
- TPE a grana fine per levigare il margine a spalla e rifinire sottogengiva
- TPE a gambo corto consigliata quando l'accessibilità sia limitata

29 51K688 TPE Kit 9 diamantate, 1 per tipo, ø 1,0 - 1,2 - 1,4 mm € 68,50 € 59,50

Protezione tessuti, taglio in testa



EZ-CAL Calibro per frese



34 0521
€ 8,50 € 5,50

Ultra Glaze Temp LC Sigillante fotopolimerizzabile per provvisori

• Migliora l'estetica e i tempi nella finitura finale di ponti e corone provvisorie, denti artificiali, materiali in PMMA, Ceramica ibrica, CAD/CAM, compositi indiretti, ecc. • Con Ultra Glaze non è piu un problema trattare anche le aree occlusali e le zone interproximali delle restaurazioni indirette in composito • Ultra Glaze garantisce ottimi risultati per un livello estetico di lucidatura superiore rispetto alle lunghe e mediocri procedure meccaniche.

22 01391 Ultra Glaze Temp LC 30 ml € 67,00 € 44,00



Diamantate speciali al platino/rodio PERIOSPEED Ceramica X

7 forme Unica granulometria: mix Grana Fine 40 micron e grana extra grossa 200 micron.

Costruite con un mix di grana fine 200 micron (prima diamantatura) e poi una seconda diamantatura in grana ultragrossa 40 micron; il doppio grano di diamante garantisce una prestazione in durata molto efficiente ed inoltre evita che l'elemento entri in contatto con il legante al rodo così da evitare macchie su eventuali elementi circostanti.

29 012CEK CERAM-X-ZER KIT, 7 dia € 76,00 € 69,00

19 mm - Ø 020	19 mm - Ø 018	19 mm - Ø 025	20 mm - Ø 025	21 mm - Ø 016	22 mm - Ø 016	24 mm - Ø 018
001	197	277	257	141	198	199
29 012CE3X	29 012CE4X	29 012CE7X	29 012CE7AX	29 012CE12X	29 012CE16X	29 012CE17X

L'ottimale mix di diamante in grane differenti. Il legante al Rodio-Platino consente una elevata durata e una grande asportazione sui materiali molto duri come la Zirconia (ZrO2)



Rifinitura Zirconio-Ceramica-Disilicato di Litio



DURA-GREEN DIA

Punte abrasive diamantate per sgrossare e rifinire: ossido di zirconio, disilicato di litio, ossido di alluminio, zirconio integrale, ceramica da pressare e stratificare e superfici in metallo

€ 37,90 € 36,00 2 cf. a scelta € 33,00 cad.									
Forma	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6
ISO-N.	056	031	070	125	024	035	025	040	125
HP	30 51156	30 5115B	30 51162	30 51154		30 51159	30 51161	30 51155	30 51157
CA		30 51163				30 51164	30 51165		
FG		30 51168			30 51167				

Min¹ Max. 30.000 HP: manopolo • CA: contrangolo * N. 3 PZ PER CONFEZIONE ** N. 2 PZ PER CONFEZIONE FG: turbina

31 53504 Shofu Adjuster, pietra per pulire e modificare la forma delle pietre Dura Green Dia 1 pz. € 68,00 € 59,00



CY5 regolazione superficie: eccellente performance di taglio per un'agevole ed efficiente riduzione dei materiali.



KN7 regolazione armature: delicata nelle zone interdentali o ai margini. Regolazione degli spessori delle pareti.



TC4 finitura dettagliata: crea efficacemente i dettagli della superficie e le regolazioni occlusali.



Shofu Adjuster: pulizia e sagomatura Dura Green Dia che viene premuta con un movimento di molatura.

DIAMANTATE FG per chamfer



GINGICURETTAGE

Diamantate FG per preparazioni a chamfer di corone ponti e monconi. Diamantate dorate con granulometria standard. Creano i presupposti ottimali per la presa delle impronte precisa. Conicità delle pareti assiali di 3°, estremità angolata a 45° e raggio di 1,52 gradi in punta. • Finitura a chamfer dei margini • Profilo preciso = impronte accurate • Realizzate con diamanti di **grana 170** e dorate.

29 51K200 Gingi Curretage Kit set 6 forme più diffuse: C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1, C103-1. € 56,00 € 49,00

29 510--- (codici in tabella) Gingi Curretage Conf. 6 pz. € 52,50 1 € 47,00 • 2 € 45,00 cad.

Conf. 6 pz											
Codice	29 51061	29 51062	29 51063	29 51081	29 51082	29 51083	29 51084	29 51085	29 51101	29 51102	29 51103
n. ISO	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
Testa (mm)	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0
Giri/min.	<300.000	<300.000	<400.000	<300.000	<300.000	<300.000	<300.000	<300.000	<160.000	<160.000	<160.000

CHU AESTHETIC SET

Per la standardizzazione che ottimizza le procedure per i restauri estetici

33 H81100 Chu Aesthetic Set.: manico SAT: 2+2 calibri (T-Bar + Inline), 2+2 calibri all. Core, 1 calibro sonda, 1 cassetta Inox € 335,00 € 289,00





ClearForm X A65

INJECTION TECHNIQUE

Il silicone trasparente per una semplice tecnica ad iniezione



CLEARFORM X A65

€ 59,00

(IVA ESCLUSA)

**2 CARTUCCE da 50 ML
ciascuna + 6 PUNTALI
cod. 25 552CFX**

- Durezza Shore A65 ben bilanciata
- Applicazione semplice e pulita grazie al sistema a cartuccia
- Elevata tissotropia per un'applicazione precisa che esclude uno scorrimento incontrollato del materiale con la muffola
- Dimensioni stabili e forma inalterata nel tempo
- Versatile nell'uso
- Lavorazione più rapida rispetto al classico sistema con la muffola
- Riproduzione accurata dei dettagli anche nelle strutture più sottili



CERAMAGEUP



BEAUTIFIL Flow Plus

L'ideale composito fluido tissotropico Beautifil Flow X00 o per laboratorio CERAMAGE UP

Resin Glaze sigillante resina/composito

RESIN GLAZE Sigillante per provvisori

Materiale fotopolimerizzabile per la sigillatura provvisoria di restauri protesici. L'adesione del materiale (Liquid) può essere aumentata con l'utilizzo del primer dedicato.

Indicazioni. Per la sigillatura provvisoria di denti protesici in resina, materiali acrilici per basi di protesi, materiali in PMMA e in ceramica ibrida per CAD/CAM, compositi indiretti e materiali provvisori

COLORAZIONE SUPERFICIALE



**IRRUVIDIRE LA SUPERFICIE
CON FRESA DURA GREEN
e/o SABBIARE 50 μ m 1-2 bar**




**APPLICARE
RESIN GLAZE PRIMER
LASCIARE AGIRE 10"**



22 54003 Resin Glaze Primer 6 ml

**Resin Glaze
Primer**

€ 47

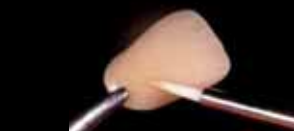

**APPLICARE STRATO
SOTTILE
RESIN GLAZE LIQUID
FOTOPOLIMERIZZARE 3'**



22 54004 Resin Glaze Liquid 6 ml

**Resin Glaze
Liquid**

€ 35,50



PS: NON VAPORIZZARE

Lucidanti • Oxy-Barriere



**DURA POLISH
DURA POLISH DIA**

DURA POLISH Shofu Lucidante ceroso impregnato di particelle di Al₂O₃, usato per pre-lucidare e lucidare compositi da laboratorio quali Ceramage, resine per basi protesiche e metalli.

DURA POLISH DIA Lucidante ceroso impregnato di diamante, utilizzato per la lucidatura finale di compositi da laboratorio, ceramica e porcellana.

Vengono usati con spazzolini o feltrini montati. L'uso intraorale NON è consentito.

89 5552 **Dura Polish, barattolo 20 g € 51,00**

89 5554 **Dura Polish Dia, barattolo 5 g € 82,00**

Dura Polish



Dura Polish Dia



OXY-BARRIER UNIVERSAL Shofu
Gel barriera per l'ossigeno a base di glicerina

- Impedisce la formazione dello strato di inibizione di ossigeno favorendo una più completa polimerizzazione
- Conserva i più sottili dettagli delle superfici; essenziale anche sul margine del restauro
- Facilita e velocizza il lavoro di lucidatura. Si elimina facilmente con uno spray acqua/aria.

94 512403 **Oxy-Barrier Universal, 10 gr. € 28,50**



Cabina raccolta polveri

Compatta, per tutte le sabbiatrici cliniche e per le rifiniture protesiche in Studio

Silenzioso ed efficiente che fa depositare l'abrasivo esausto alla base inferiore sotto la grata forata in metallo.

Altezza 23 cm. - Peso 2,1 kg - Diametro base 31 cm. - Alimentazione 12V/trasf. 600Ma

98 56600 € 422,00 € 350,00



STARDUST



Sacchetto raccogli polveri riutilizzabile. Patent Pending

Finalmente è possibile eliminare le polveri dall'ambiente e velocizzare alla poltrona le Procedure per le protesi totali, riparazioni, ecc.

Usò alla poltrona = Risparmio di tempo

98 3601 Dust X alla poltrona, 20 sacchetti riutilizzabili più volte € 69,00 € 59,00



DUST-X



Toglicorone sicuri e facili

Blocchetti di resina atossica idrosolubile per la rimozione di intarsi, corone, ponte, senza il rischio di danneggiarle.

Il blocchetto scaldato in acqua aderisce alla struttura dentaria, alla ceramica, ai metalli, alla resina; la rimozione avviene con la forza esercitata dal paziente.

33 59901 Richwil 50 pz in bustine da 2 pz. € 64,50 2 cf. € 58,50 cad.



Grazie Prof. L. Prosper: Semplice rimozione di un ponte in ceramica integrale



RICHWIL

Pinza toglicorone e ponti provvisori

Per afferrare i provvisori e rimuoverli senza problemi di accessibilità o scivolamento.

- Con inserti in carburo di tungsteno

33 04131 Pinza Periodent Wynman TC € 195,00 € 129,00



WYNMAN TC

Pinza multiuso di utilità



OPERA Pinza multiuso di utilità

PERIODENT

"Tienila in vista sul servomobile, prova per un giorno... non nel cassetto!

Per mettere e sfilare un cuneo. Per sfilare una matrice
Per passare le strisce abrasive, ecc. Dr. Giuseppe Chiodera

34 031230 Pinza Opera € 153,50 € 129,00

Grazie Dr. Giuseppe Chiodera (BS)



OPERA



Cemento resinoso ad elevata stabilità cromatica per restauri estetici

BEAUTICEM VENEER può essere fotopolimerizzato in qualsiasi momento per un facile risultato eccezionale. Veneers, intarsi e onlay possono essere appoggiati e posizionati senza doversi precipitare, senza alcun limite di tempo. Oltre la pratica dimensione della siringa, la consistenza liscia e la buona scorrevolezza della pasta, agevolano l'applicazione precisa e mirata.


Il piccolo diametro della punta della siringa riduce al minimo il cemento in eccesso rendendo facile l'asportazione. Il filler bioattivo S-PRG di questo materiale Giomer aiuta a proteggere il dente contro la carie, contribuendo alla salute orale sostenibile.

BeautiCem Veneer è disponibile in cinque tonalità: • L-Value, M-Value e H-Value sono adatte per le preparazioni sotto gengivali; si differenziano nel valore ma non nel colore o croma • Ivory-L e Ivory-D sono indicati per i casi in cui i margini sono sopra gengivali e per intarsi fino a 2 mm di spessore.

La pasta **Try-in** dedicata al BeautiCem è solubile in acqua, facilmente rimovibile e facilita la selezione corretta della tonalità del BeautiCem Veneer prima della cementazione definitiva del restauro.

	B.Cem Veneer 2 gr. € 42,00	B.Cem TRY-In 1,2 gr. € 24,75
L-value	22 55004	22 55009
M-value	22 55005	22 55010
H-value	22 55006	22 55011
Ivory-L	22 55007	22 55012
Ivory-D	22 55008	22 55013
22 55002 Set completo 10 sir. € 189,00		

BEAUTICEM VENEER

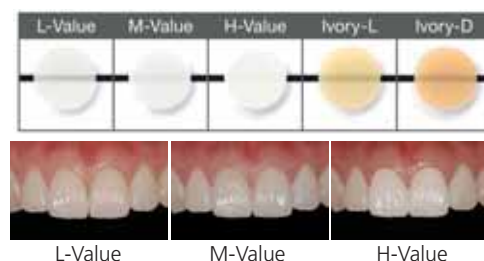

L-Value M-Value H-Value



Riparazione di scheggiature in ceramica, composito

Per tutte le riparazioni di chipping per i rivestimenti in ceramica o composito.

CRB unisce in sicurezza compositi o resine a metallo, resine, compositi o ceramica, evita l'uso dell'acido fluoridrico in bocca.

VANTAGGI procedura semplice e rapida, brevi tempi di lavorazione • Strato adesivo sottile trasparente (non adesivo, applicato in strato sottile uniforme) • Nessuna linea di demarcazione dell'adesivo, fondamentale per lavori di estetica elevata • Forte adesione tra resina e metallo, previene infiltrazione marginale, erosione e macchie • Elevata forza adesiva e lunga durata.

22 54741 1 Bond n.1 6 ml, 1 Bond n.2 5 ml, 50 pennellini, 5 vaschette € 193,20 € 183,50



CRB-CERARESIN BOND



Irruvidire con diamantate. Applicare CRB1 e lasciare 10 sec., CRB2 10 sec., fotopolimerizzare con alogena 20 sec.

Mordenzante per ceramica e Silano

YELLOW PORCELAIN ETCH è gel a base di acido fluoridrico al 9,5% per mordenzatura di ceramica: faccette, corone, inlay e onlay, prima della cementazione.

• Riparazione intraorale di protesi in ceramica fratturate.

Facile controllo e non macchia compresi compositi e resine

22 31PE2 Yellow Porcelain Etch Sir 2 ml. con puntali € 30,50 € 28,00

SILAN, agente Silano metacrilato con solvente organico; si applica su superfici in porcellana. Mordenzata per aumentare l'adesione tra resina composita e ceramica.

22 31PS02 Silan 2 siringhe x 2 ml. con puntali € 29,50 € 27,00

Acquistando Yellow Porcelain Etch e Silan

in omaggio 1 cf da 20 Ultradent Ipsiral Brush 46 12710 (ad esa.)



YELLOW PORCELAIN • SILAN



Mordenzatura di una ceramica integrale. Protocollo su www.ilic.it Prof L. Prosper

Cemento composito duale universale

• **Universale** • **Autoadesivo** • **Doppia polimerizzazione** • **Per ceramica integrale, composito e metallo.**

La viscosità ideale rende facile la manipolazione. La formula innovativa fornisce adesione. Forte, stabile e affidabile a smalto, dentina, metalli, ceramiche, disilicato di litio, ZR, e resine composite indirette con minima sensibilità alla tecnica e senza necessità di pretrattamento! Per migliorare l'adesione di restauri indiretti con superfici a bassa ritenzione al dente, BeautiBond Xtreme può essere applicato come pretrattamento insieme a BeautiLink SA.

VANTAGGI • Adesione Universale • Colore opaco per una elevata capacità coprente • Non richiede Primer

• Applicazione rapida e semplice • Spessore X sottile 14µm • Elevata radiopacità (1,9 mm Al) • Facile rimozione in un pezzo di consistenza gommosa del materiale in eccesso • **Conservazione a temperatura ambiente.**

Sir. da 5 ml (8.6 g) • 1 € 95,00 • 2 a scelta € 84,50	
22 555203	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Clear 1 pz.
22 555204	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Ivory 1 pz.
22 555205	BL SA Automix syr. 5ml(8.6g) Opaque 1 pz.



0,3 mm 0,5 mm 1 mm 0,3 mm 0,5 mm 1 mm 0,3 mm 0,5 mm 1 mm

Richiedi offerta esclusiva del momento


Resina provvisoria



J-TEMP

La resina provvisoria **J-TEMP™** è premiscelata per una maggiore facilità d'uso. Ha una viscosità ideale che permette al prodotto di rimanere in sede, ma è anche abbastanza fluida da essere autolivellante¹ e facile da manipolare. Si consiglia l'uso con il puntale Black Mini™ Tip per un posizionamento semplice e preciso. Inoltre, il colore viola chiaro di J-Temp™ consente una facile identificazione e rimozione.

22 155897 (4897) J-Temp Kit 4 siringhe J-Temp, 20 puntali Black Mini Tips
 € 48,40 € 42,00 omaggio 1 cf 50 mascherine Safe Mask Medicom (pag 63)

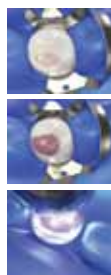

1. Applicare J-Temp per ripristinare la struttura mancante del dente.
2. Applicare la resina provvisoria J-Temp in strati di 2-3 mm.
3. Fopolimerizzare dopo ogni strato.



Dr. Jaleena Fischer Jessop



J-Temp nata dal bisogno di creare qualcosa che non esisteva

4 in 1



Bite ramps e rialzi occlusali



Barriera per irriganti



Restauri provvisori



Splintaggio implantare



OMAGGIO

Cemento vetroionomerico con rilascio e ricarica di fluoro



GLASIONOMER CX-PLUS

Cemento vetroionomerico ad alte prestazioni, estremamente sottile (12µm), per una adattamento estremamente preciso del manufatto protesico.

- Lungo tempo di lavorazione con **RILASCIO E RICARICA DI FLUORO** • Radiopaco.
- Tecnologia Shofu per garantire resistenza all'erosione acida nel tempo, riducendo il rischio di microinfiltrazioni • Elevato potere di prevenire la sensibilità post-operatoria.

INDICAZIONI: Perni, Corone e ponti in metallo-ceramica, Corone e ponti in zirconio, Ponti estesi, Restauri in ceramica integrale, Inlay, Bracket ortodontici.

Set: polv. 35 g, liq. 17 ml, misurino, spatola, blocco miscelaz. € 67,00

Codice	PN SH	Descrizione
22 55166	(1166)	Glasionomer CX-PLUS Set



Cemento definitivo all'ossifosfato di zinco

Cemento definitivo a base di fosfato di zinco, per fissaggio definitivo di corone, ponti, inlay, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione di viti e perni monconi, ricostruzioni di monconi, sottofondo per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

Hoffmann Zinc Phosphate Cement - Confezionamenti

Disponibili in 15 colori su richiesta. Normalmente fornito 03 Avorio

22 95511	Polvere Regular Avorio 100 g	€ 31,00
22 95512	Polvere Fast Avorio 100 g	€ 26,50
22 95523	Liquido Regular 40 ml	€ 20,50
22 95513	Liquido Fast 40 ml	€ 17,50

Proprietà fisiche - Presa Normale
 Tempo di miscelazione: 90 sec.
 Tempo di lav.: 1,5 min. § - 3 min.*

Proprietà fisiche - Presa Rapida
 Tempo di miscelazione: 90 sec.
 Tempo di lavorazione: 2,5 min.*

*Per fissaggi definitivi §Per sottofondi

HOFFMANN'S CEMENT

Formula chimica originale del precedente Harvard.



Registrazione occlusale

"Quando i millimetri contano Andra Gauge è l'unica scelta"

- Verticale • Lato a Lato
- Antero/Posteriore



La possibilità di inserire e fissare in sede le posizioni antero-posteriore e verticale fornendo allo stesso tempo in posizionamento preciso del movimento sagittale rende **Andra Gauge** il mezzo ideale per eseguire la miglior **registrazione occlusale**, precisa, accurata e riproducibile.

Caratteristiche e Vantaggi. • Misurazioni Sagittale, Verticale, Antero/Posteriore. • Meno tempo alla poltrona. • Elimina i costi ed i tempi di pulizia. • Funziona con la maggior parte delle Filosofie e Modalità. • Sicuro per la Radiologia. • Monouso. • Realizzato in durevole policarbonato. • Resistente agli impatti, ed al calore. • Ottima visibilità e contrasto.

Ideale per la realizzazione di: • Dispositivi per l'apnea notturna. • Splint/Bite per l'ATM. • Splint/Bite per Bruxisti. • Apparecchi ortodontici funzionali.

Andra Gauge viene utilizzato congiuntamente a polivinilsilossani per registrazioni occlusali (es. **Blu Mousse**).

Dispositivo mono-paziente imbustato igienicamente

19 76101 Andra Gauge, 1 pz. € 49,00 € 44,00
 19 76103 Andra Gauge Mini Kit, 3 pz. € 124,50 € 105,00
 19 76110 Andra Gauge Econopack, 10 pz. € 370,00 € 296,00

ANDRA GAUGE



Allineare la linea mediana.



Inserire le posizioni desiderate.



Applicare il materiale per la registrazione



Far chiudere nella posizione stabilita.



Perfetta registrazione occlusale.

Nominato nella Top Ten Most Wanted Lab Products del 2012, questo strumento unico nel suo genere garantisce i risultati estetici e funzionali migliori possibili con la creazione di uno schema preciso tra paziente, dentista e laboratorio.

Bite idraulico per l'equilibrio muscolare

Bite idraulico che sfrutta il principio dei vasi comunicanti per l'equilibrio muscolare. Ideale per la rilevazione centrica muscolare.

Versione più recente progettata per aumentare il comfort e la protezione delle gengive. Modello più grande con cuscinetti d'acqua più grandi. Anche l'area di chiusura occlusale è più ampia e quindi consente la più vasta gamma di piani di dislocazione occlusale. Le dimensioni abbastanza grandi consentono di essere indossato su bite e allineatori. Utilizzato per bocche di dimensioni medie. Di forma più sottile si adatta bene all'arcata dentale con meno contatto linguale ed è adatto a pazienti più sensibili. Si adatta a tutte le dimensioni delle mascelle normali. È il modello più piccolo. La lunghezza dell'arcata è più corta e i cuscinetti per l'acqua sono la metà della larghezza e dello spessore di Ultra.

Utilizzato per adolescenti e bocche piccole.

Cf. a scelta 10 pz. € 325,00 € 295,00 Sing. € 39,50 € 32	ULTRA L.116 H. 30X13	SLIM L.116 H. 30X10	MINI L.110 H. 26X12
Ass.: 2B, 6M, 2A	19 37110	19 37310	19 37210
Bassi	19 37111	19 37311	19 37211
Medi	19 37112	19 37312	19 37212
Alti	19 37113	19 37313	19 37213
• 2 cf. € 279,00 cad. + Andra Gauge € 19,00 (€ 49,00)			



**AQUALIZER®
ULTRA, SLIM, MINI**



Selezione del modello Aqualizer®

Disponibili in 3 diversi spessori: **basso, medio, alto**. Lo spessore è determinato dalla quantità di fluido nell'Aqualizer. **Medio**, utilizzato per la maggior parte dei pazienti. **Basso**, adatto a pazienti con apertura limitata o sensibilità a qualsiasi cosa in bocca. **Alto**, adatto per i pazienti con spazio libero posteriore più ampio (morso profondo) o che necessitano di apertura del morso.

Spessori:

Ultra e Slim: Basso 1 mm • Medio 2 mm • Alto 3 mm
Mini: Basso 0.75 mm • Medio 1.75 mm • Alto 2 mm

Film universale per articolazione, 21 µm

Super sottile, per maggiore precisione • Non innescherà riflessi mandibolari che potrebbero spostare il morso • Sempre segni nitidi di facile interpretazione • Non crea false marcature • Si allunga ma non si spezza per la superiore resistenza alla deformazione.

Segna su qualunque superficie anche umida!

a scelta 2 **-10%** • 4 **-15%**

Check Film Il rivestito su 1 lato , 280 strisce 90 x 22 mm € 33,50	19 C5015 Rosso	
Check Film Il rivestito su 2 lati , 280 strisce 90 x 22 mm € 33,50	19 C5018 Nero/Nero	19 C5021 Rosso/Rosso
Check Film Il rivestito su 2 lati , 250 strisce in blocchetti (5 x 50) 90 x 22 mm € 38,50	19 C5017 Rosso/Nero	
	19 C5053 Rosso/Nero	



Check-Film



**2025
Quality Choice**
★★★★★

"The Original
Articulating Film"

#1 Leading Articulating Film
for Dental Clinics and Laboratories"



Lacca per contatti occlusali Bausch

Lacca rossa per: • controllo dell'occlusione statica e dinamica su impianti restaurativi, protesi e placca occlusale • controllo dell'occlusione breve (max. 24 ore)

Arti-Brux® è una lacca rossa che viene applicata con un pennello allegato (monouso) sulle superfici occlusali da controllare. Dopo essersi asciugato crea una pellicola sottile e regolare di lacca, resistente alla saliva.

Per la diagnosi di parafunzioni (specialmente di bruxismo) si applica Arti-Brux® sulla placca occlusale rigida.

Le superfici di contatto sono chiaramente visibili tramite l'abrasione del colore.

19 3589 Arti-Brux Set 15 ml BK9 € 62,00 € 59,50

19 3588 Arti-Brux Quick Rosso monopaziente 15 ml BK8 € 11,90 € 10,40

Arti-Brux Monopaziente



ARTI-BRUX



Calibro per misurazioni

Strisce sterilizzabili e disinfettabili (NO alcool o glutaraldeide) e riutilizzabili. Molto utile per equilibrare occlusale e coronoplastiche, dove viene utilizzato in modo incrementale; quale deprogrammatore anteriore nella presa delle registrazioni di centrica; per il mantenimento della dimensione verticale nelle registrazioni interocclusali e per la diagnosi iniziale delle prematurità nei disturbi dell'ATM.

19 95H20 Calibro Leaf Gauge € 68,00 € 53,00 2 € 49,00 cad.



LEAF GAUGE

NEW



Autoclavabile 121°

Calibri di preparazione

Ideali per la valutazione degli spazi e per la preparazione dei provvisori precedente l'intervento odontoiatrico. Prodotti con uno speciale caucciù al silicone. Sterilizzabile fino a 200°C.

€ 29,00 2 cf. € 26,00 cad. • 3 € 23,00

FLEXIMETER STRIPS



rosa		verde		blu	
19 35250 Fleximeter 1,0 mm 15 pz.		19 35251 Fleximeter 1,5 mm 15 pz.		19 35252 Fleximeter 2,0 mm 15 pz.	

Rilevatori di contatti per protesi fissa

Identificare i punti di contatto interprossimali non è mai stato così facile!

4 Ragioni per utilizzare Spottt.

1. Indicazioni esatte. 2. Accesso ottimale grazie al design, dritto o angolato. 3. Uso agevole, non serve assistenza. Accurato e fa risparmiare tempo. 4. Nessun pasticcio, indicazioni chiare, non lascia segni oltre l'area di contatto.

Spot-It 18 pz. (assortimento 9+9) € 42,00 € 38,00		
Assortimento 9+9	Dritto 18 pz.	Angolato 18 pz.
19 95312	19 95313	19 95311
2 cf. a scelta € 35,00 cad.		

SPOT-IT



Spottt angolato



Spottt dritto



1. Inserire la corona o il ponte.
2. Spingere Spottt attraverso il contatto per marcarlo.
3. Indicazione esatta dell'area dove è necessario il ritocco.
4. Marcatura sul dente adiacente dopo la rimozione.

Per la rimozione di qualsiasi corona o ponte cementati

La rimozione di manufatti protesici cementati con qualsiasi materiale è **semplice, delicata** per il paziente che senza anestesia, avverte solo la sensazione di masticare un alimento duro; **rapida ed economica** (1-2 minuti), senza dover tagliare l'intero manufatto (risparmio di frese, salvaguardia per i rotori); **preserva le corone** che non subiscono danni nelle aree cervicali, occlusali e punti di contatto e potranno così con una semplice otturazione essere riutilizzate come protesi provvisorie o permanenti.

È **LOGICO**: l'utilizzo di un **levacorone classico** sottopone il legamento a stress e **movimenti di bascula molto rischiosi** per la preparazione e la radice. Le estremità cervicali della corona possono anche danneggiarsi. Con **WAMkey®** la corona sceglie liberamente la propria traiettoria di disinserimento.

Inoltre non vi è alcuna tensione per il legamento e, pertanto, le forze necessarie alla rimozione sono minime, i **rischi di frattura inesistenti** ed il confort per il paziente è massimo.

33 14510 Levacorone WAMKEY KIT 3 chiavi ass.WAM
€ 375,00 € 330,00




- 1 Posizione
- 2 Foro
- 3 Tunnel
- 4 WAMKey
- 5 Rotazione
- 6 Distacco

WAMKEY



Testine WAMKey nelle tre diverse misure

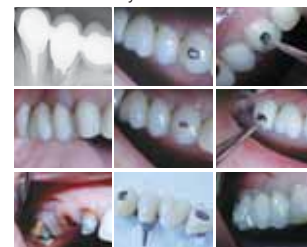

Rimozione di un ponte con corona Richmond Dr. William MULLER

Sistema di frese pilota

Sistema di frese pilota per non rischiare il malposizionamento di qualunque impianto

Non cambia nulla nella procedura e nel sistema implantare utilizzato: • Perfetto allineamento mesio-distale degli impianti • Funziona con impianti singoli o multipli • 2 in 1: fresa pilota e guida chirurgica, tutto in uno! • Risparmio: evita il ricorso a dime protesiche o chirurgiche. Un millimetro può fare la differenza

56 12GK1 MD GUIDE KIT 5 guide foranti ass., 5 analoghi - 1 cassetta chirurgica
€ 695,00 € 595,00



MD GUIDE



Tutto autoclavabile

KIT PRIMA VISITA 1 Selezione di qualità ed estetica

33 0KPV1 (contiene gli strumenti):

33 067DPC2 Pinzetta Colloge € 11,30

33 79725/1 Specchietto rodiato TopVu n. 5 € 3,50

33 091821 Manico ultraleggero S.Stem € 6,90

33 001105 Specillo N. 9 manico sottile satinato € 20,10

€ 41,00 3 KIT € 33,80 cad. • 6 KIT € 31,90 • 12 KIT € 29,50

33 067DPC2



33 091821



33 001105



33 79725/1

Sonde • Specilli • Escavatori • Curette e Scaler

Sonde



33 001205 Sonda PERIODENT UNC 15 € 25,50 2 € 19,50 cad.
Manico tondo 4.



33 H0252 Sonda Hu-Friedy Williams (1-10) € 29,00 ad esa € 6,00



33 H023N Sonda Hu-Friedy 3N Nabers € 32,00 ad esa € 9,00.



33 005233/4 Sonda PERIODENT 2Nab € 36,50 2 € 9,00 ad esa

Specilli



33 005124 Specillo PERIODENT 6/6 € 30,00 ad esa € 19,50



33 005125 Specillo PERIODENT 11/12 € 30,00 ad esa € 4,00



33 005109 Specillo PERIODENT 54 € 26,00 ad esa € 9,50



33 005125/3 Specillo PERIODENT 6/6 € 36,00 ad esa € 9,00



33 H01317 Specillo Hu-Friedy 17 € 22,50 ad esa € 7,00



33 H01085 Specillo Hu-Friedy 2H € 31,40 ad esa € 15,00

Escavatori



33 025281 Carver PERIODENT IVAN 1C € 21,00 ad esa € 3,00



33 02573 Carver PERIODENT Hollembach 3 € 21,00 ad esa € 3,00



33 H2WACD CCI./dis. Hu-Friedy WACD € 25,00 ad esa € 3,00



33 025106 Escavatore PERIODENT 19/19 € 34,50 ad esa € 12,00



33 H161/62 Escavatore Hu-Friedy 61/62 € 31,50 ad esa € 9,00

Escavatori



33 H163/64 Escavatore Hu-Friedy 63/64 € 35,00 ad esa € 5,00



33 H2SPR18 Escavatore Hu-Friedy SPR18 € 46,00 ad esa € 5,00



33 H20177 Tagliasmalto Hu-Friedy 28 € 40,60 ad esa € 5,00

Curette e Scaler



33 035011/4 Curette PERIOD. Gracey 1/2 € 29,00 ad esa € 5,00

manico SEX/Half satin ø10mm



33 035022/HS Curette PER. Gracey 3/4 € 38,00 ad esa € 7,00



33 H31G9/10-2 Curette H-Friedy Gracey 9/10 € 34,50 ad esa € 3,00



33 03G022/0 Curette PER. Gracey 3/4 € 29,00 ad esa € 3,00

manico HEX satin ø7mm



33 031023 Curette PER. Gracey 5/6 € 24,80 ad esa € 7,00



33 H3173 Curette Hu-Friedy Columbia 13/14 € 29,00 ad esa € 6,00



33 H35306 Curette Hu-Friedy falcetto CI 2/3 € 39,00 ad esa € 4,00



33 H31413/414 Scaler Univ. Hu-Friedy 413/414 € 39,00 ad esa € 4,00

manico lucido ø8mm



33 035014/4 Curette PERIODENT Gracey 7/8 € 25,90 ad esa € 5,00



33 H35173/0 Curette Columbia Hu-Friedy 13/14 M.O.C
€ 33,00 ad esa € 9,00



per anteriori
33 H3171/0 Curette Columbia
2R/2L M.O.C € 29,00 ad esa € 6,00



per posteriori
33 H3172/0 Curette Columbia
4R/4L M.O.C € 29,00 ad esa € 6,00

33 041910 Martello Mead
€ 42,20 € 19,00

33 049631 Pinza Ossivora Marini
€ 115,00 € 39,00

33 0715523 Scollaperiosteo Seldin 23 € 45,10 € 9,00

33 031513 Bisturi Kirkland 15K/16K Manico HEX € 40,20 € 10,00

33 0611BAC Pinzetta Backhaus 13,5 cm
€ 17,00 € 9,00

33 031529 Lima Schluger 9S/10S Manico HEX.
Per aree interprossimali. € 46,40 € 30,00

34 95060 Iwansson punte sottili
€ 24,80 € 5,00

Pinzette e pinze varie

SEGNA TASCHE PARODONTALI GOLDMAN FOX
Per eseguire una tacca esterna sulla gengiva al livello più profondo per indicare la linea iniziale da incidere.



33 061161 GF1/Dx 16 cm • 33 061162 GF2/Sin 16 cm
€ 24,50 ad esa € 3,00

ADSON World's Finest Hi-Tech S. Steel

2 pz. -20% ad esa. € 2,00

Adson Curva
33 0671145 AD16C Anatomica 16 cm
€ 25,30 2 pz. € 21,50 cad.

Adson 42
33 061143 Chirurgica 7x7 13 cm
€ 11,80 ad esa. € 3,00

PINZETTA IVAN UNI-GRIP



33 061UG Pinzetta multiuso con grip eccezionale
€ 75,00 ad esa € 35,00

Micro Friedman Pinze Hi-Tech S. Steel

• Taglio di precisione per molteplici applicazioni • Realizzate in acciaio inox tedesco della massima qualità DIN • La forma perfetta consente la massima precisione nell'uso.

Becchi delicati misura: 1,6-2,2 mm curvato a 30°

33 047622 Ossivora MF30
€ 50,50 € 29,50 Micro Friedman Becco curvato 30°



LEVACORONE CON INSERTI

Pinze per estrazione con inserti silicnici autoclavabili che rendono la presa molto potente, agevolando la rimozione di ponti e corone.



33 047507	Levacorone diritta, anteriori, CRS17	€ 97,90 € 29,00
33 047597	Ins. silicnici CPRS di ricambio 2 pz.	€ 14,50

RASCHIETTO PER OSO BSA Hi-Tech

Ergonomico Efficace Conveniente
Per il prelievo di osso autologo. Con speciale manico Trinovo e lama durevole che, grazie allo speciale acciaio e al sistema di affilatura micrometrica, garantisce fino a 30 utilizzi.

33 057920 Raschietto per osso BSA. Curvo completo di 1 lama 6,5 mm
€ 175,00 € 95,00

33 057921 Lama per raschia-osso BSA 6,5 mm € 39,00
1+1 lame omaggio € 39,00 € 78,00



Forbici: Quinby, Dean, Stanley Ross, Metzenbaum, Perio-Trim

FORBICI CHIRURGICHE World's Finest Hi-Tech S. Steel

 33 061271 Quinby 12,5 cm € 46,40 € 25,00	 33 061224 Dean Curvata 17 cm € 37,90 € 19,00 Forbici di forma e lunghezza ideali per il taglio delle suture, anche in siti chirurgici difficilmente accessibili.	 33 061265 Stanley Ross Curve 15 cm € 79,00 € 59,00	 33 0612814 Metzenbaum Curve 14,50 cm 33 069215 Curva 18 cm € 25,00 € 15,00	 33 061605 Perio-Trim Forbice multiuso € 54,50 € 39,50 • Lame sottili • Bordi zigrinati! Ideale anche per scaricare le mascherine in vinile attorno alle papille interdentali.
---	--	---	--	---

FORBICI CHIRURGICHE World's Finest Hi-Tech S. Steel



Grazie alla doppia curvatura, consente di raggiungere ogni punto del cavo orale, dall'esterno delle papille per disepitelizzarle, all'interno dei lembi per assottigliarli. Questo anche grazie ad una delle due lame zigrinate, che aiuta nel taglio dei tessuti, non facendoli scivolare.

Dr. Giorgio A.E. Santarelli

33 061254

Forbice PERIODENT Lagrange TC 11,5 cm.
€ 59,00 € 42,50



33 061234

Goldman-Fox Curve dentellate 13 cm
€ 26,00 € 18,90




33 061232

Goldman-Fox TC Curve dentellate 13 cm
€ 54,00 € 47,00



33 061243

Iris Diritte 11,5 cm
€ 19,10 € 15,00

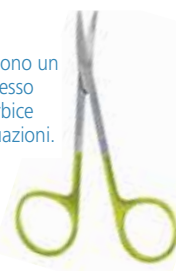

33 061242

Iris TC Curve 11,5 cm
€ 50,50 € 45,00

Le forbicine Iris sono un ottimo compromesso per avere una forbice versatile in più situazioni.

Portaghi: Castroviejo, Barrequer

PORTAGHI CASTROVIEJO TC

"Portaghi tipo Castroviejo o Barrequer consentono l'esecuzione dei punti di sutura con il massimo grado di precisione." (Abundo-Corrente: Chirurgia plastica parodontale Ed. ACME)



33 061351 Porta aghi HT

Castroviejo TC Diritti/zigrinati
14 cm € 136,00 € 125,00

33 061355 Porta aghi HT

Castroviejo TC Diritti/zigrinati
18 cm € 146,00 € 135,00



33 061352 Porta aghi HT

Castroviejo TC Curvi/zigrinati
14 cm € 136,00 € 125,00

33 061356 Porta aghi HT

Castroviejo TC Curvi/zigrinati
18 cm € 146,00 € 135,00

PORTAGHI BARRAQUER TC



33 067361 Porta aghi HT

Barraquer TC Diritti/zigrinati
14 cm € 153,50 € 135,00

33 067365 Porta aghi HT

Barraquer TC Diritti/zigrinati
18 cm € 172,00 € 145,00



33 067362 Porta aghi HT

Barraquer TC Curvi/zigrinati
14 cm € 153,50 € 135,00

33 067366 Porta aghi HT

Barraquer TC Curvi/zigrinati
18 cm € 172,00 € 145,00

Lame chirurgiche, manici

Lame chirurgiche in Special Carbon Steel, più affilate dell'acciaio inox. Scatole da 100 lame confezionate singolarmente in bustine. Lame n. da 11 a 15C per manici n. 3, 3L, 5, 7, 9, B3.

Lama sterile	n. 10	n. 11	n. 12	n. 12D	n. 15*	n. 15C*
Lame Carbon Steel Swann Morton Sterili conf. 100 pz. singoli	35 541010	35 541011	35 541012	35 541012D	35 541015	35 541015C
		€ 29,50		€ 37,00		€ 29,50

• 10 Per rifinire ribasature dirette • 11 Per incisioni in zone interprossimali, poco indicata per incisioni curvilinee • 12 (taglio interno) e 12D (taglio interno ed esterno), per zone distali o linguali poco accessibili. La 12D* Per disepitelizzare le papille, finendo a punta a taglio su due lati; anche per cunei distali. • 15 • 15 C per tutti i tipi di chirurgia

LIGHT SURGICAL "HANDLE" cavo per maggior comfort e sensibilità. Acciaio chirurgico Hi-Tech



35 047511 LSH5 tondo 15,5 cm, ø9,5mm

€ 23,50 • 1 € 19,00 • 2 € 15,00 cad.

MANICI BEAVER PER MICRO LAME

€ 89,50 ad esa. € 14,00

(attacco Collett)



35 B4550 1350 Fine, cm 13, ø 5 mm

35 B4560 1360 con 13, ø 7 mm

Bisturi sterili di sicurezza con lama retrattile



Bisturi sterili Swann-Morton 10 pz. € 39,00 € 29,50

35 545915C	15 C
35 545915	15
35 545912D	12 D

CANNULE CHIRURGICHE PERIO-MINIBLUTIP

32 P3PMBTK Perio-BluTip Kit

ø2,0 mm. 25 cannule + 25 Tip € 19,50 2 € 16,50

32 P3CSW9 Cannula std bianco, 25 pz. € 12,50 € 10,50

32 P3BTM7 Tip chirurgici MTB, 25 pz. € 8,90 2 € 7,50



CASSETTA Inox MOD. D

55 0170D07 Cassetta PERIODENT Inox, 5 str. € 72,00 € 58,00



CASSETTA Inox MOD. E

55 0170E05 Mod. E 5 strum.	€ 61,80 € 49,50	55 0170E15 Mod. E 15 strum.	€ 130,90 € 105,00
55 0170E10 Mod. E 10 strum.	€ 90,70 € 73,00	55 0170E20 Mod. E 20 strum.	€ 143,20 € 116,00



CASSETTA Inox MOD. F

55 0170F05 Mod. F 5 strum.	€ 59,80 € 48,50	55 0170F15 Mod. F 15 strum.	€ 126,70 € 104,00
55 0170F10 Mod. F 10 strum.	€ 87,60 € 72,00	55 0170F20 Mod. F 20 strum.	€ 139,10 € 114,00




Ergonomia a colori: vassoi e porta strumenti Made in USA



Cassette E-Z Jet
video color method

Sistema Vassoi "B-Lok" con coperchio Safe-Lok Tray è un esclusivo sistema brevettato che previene la contaminazione crociata e consente il trasporto sicuro verso la zona di sterilizzazione. Vantaggi:

- 1 Previene ogni contaminazione causata dalla caduta del Tray usato, durante il trasporto alla zona di sterilizzazione. Gli oggetti restano chiusi fino al processo di detersione e sterilizzazione.
- 2 La chiusura ermetica Safe-Lok mantiene tutto pulito e consente il trasporto fino alla poltrona e il coperchio viene rimosso solo quando il paziente è seduto e può avere inizio la procedura.

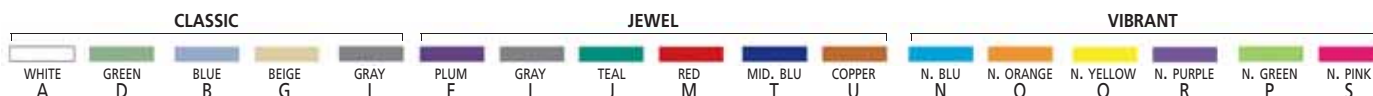

B-Size Vassoio piano o con divisori

• I bordi ampi e smussi rendono sicura la presa • Piedini antiscivolo a garanzia della stabilità • Superficie autolubrificante e molto lucida: maggiore resistenza alle macchie • Dimensioni: 33,97 x 24,45 x 2,22 cm

55 32301 (A-S) B-Size Tray liscio. Disponibili tutti i colori • 2 € 22,00 • 3 € 19,50 cad.

55 32401 (A-S) B-Lok Tray con divisori. Disponibili tutti i colori • 2 € 23,50 • 3 € 21,00 cad.



Coperchi per vassoi B-Lok serraggio Safe-Lok

• Meccanismo laterale per il serraggio sicuro del coperchio sul vassoio. • Adatto solo ai vassoi B-Lok, con e senza divisori • TRASPARENTE - NON STERILIZZARE A CALDO.

55 325345 Coperchio Safe-Lok Standard 36,24x25,1x1,91 cm • 2 € 27,00 • 3 € 24,50 cad.

55 325346 Coperchio Safe-Lok Alto 36,24x25,1x3,02 cm • 2 € 29,00 • 3 € 25,50 cad.



E-Z JETT Cassetta 5 posti (in busta da 13,34 x 30,5 cm)

• Accoglie 5 strumenti. • Comprende il sostegno per le punte per siringa (Syringe Tip Holder). • Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si richiudono facilmente. • Dimensioni 20,32 x 9,74 x 3,02 cm

55 33925 (A-S) E-Z Jett Cassette 5 posti. Disponibili tutti i colori • 1 € 44,00 • 2 € 39,50 cad.



E-Z JETT Slim Cassetta 8 posti (in busta da 18,1 x 35,1 cm)

• Accoglie 8 strumenti. • Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi. • Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente. • Si adatta allo Statim. • Impilabile in Ultrasonis. • Supporto per punta della siringa incluso. • Dimensioni 17,78 x 10,16 x 2,54 cm

55 33911 (A-S) E-Z Jett Cassette 8 posti Slim. Disponibili tutti i colori • 1 € 50,00 • 2 € 46,00 cad.



E-Z JETT Cassetta 10-12 posti (in busta da 25,4 x 38,1 cm)

• Accoglie 10-12 strumenti. • Compartimento accessorio al centro, per ospitare strumenti aggiuntivi. • Coperture collegate alla cassetta, si aprono e si ripiegano facilmente. • Dimensioni 22,16 x 17,78 x 2,85 cm

55 33930 (A-S) E-Z Jett Cassette 10 posti. Disponibili tutti i colori • 1 € 66,00 • 2 € 60,00 cad.




PERFORMANCE TOOL ORGANIZER

Più profonda e spaziosa ideata per gli strumenti speciali e più grandi. Spaziatela a piacere utilizzando i piedini removibili, disponibili anche separatamente.

• Flusso superiore di acqua a garanzia di una detersione completa • Disegno compatto • Facile da chiudere e da aprire. Ideale per leve, pinze, pinzette, forbici. Dimensioni 20,32 x 10,16 x 2,54 cm. Disponibile in tutti i colori

55 33940 (A-S) Performance Tool Organizer € 100,20 € 85,00 • 2 € 75,00 cad.

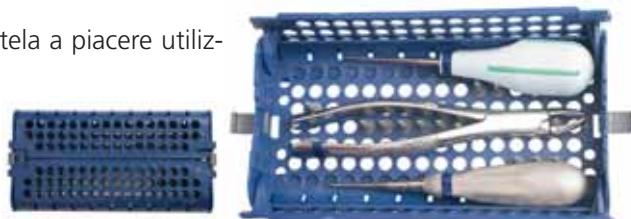

TUB completa per materiali: vasca, tappetino, 8 sezioni divisori, 1 contenitore singolo con coperchio trasparente, 1 contenitore grande con coperchio trasparente, 1 Slide tray interno trasparente con divisori, 1 Coperchio trasparente con serraggio B-Lok.

55 33555 (A-S) Dim. 32x30x10,16 cm. € 126,00 • 2 € 109,00 cad. • 3 € 99,00



TUB Vasca base: personalizzabile a piacere; il coperchio è acquistabile a parte.

55 33563 (A-S) Dim. 31,12x27,62x6,98 cm. € 36,00 • 2 € 30,00 cad. • 3 € 27,50



Coperchio SAFE-LOK

Lo speciale serraggio consente il trasporto in sicurezza. Non settilizzabile a caldo • Dimensioni 32,39x30x3,5

55 335959 Cop.Vasca, trasp.e serrante, 1 pz. € 36,00 • 2 € 30,00 cad. • 3 € 27,50



Contenitori per Tub • per pennellini, uncini, pellet, puntali, coppette profilassi, ecc. • Utilizzabili nei cassettei o sui tray, ideali per oggetti piccoli • Coperchi trasparenti sterilizzabili a freddo

55 335971 Contenitore singolo con coperchio trasparente. Dimensioni interne: (5,72 x 4,13 x 2,86 cm.) • 2 € 13,00 cad. • 3 € 12,00

55 335972 Contenitore doppio con coperchio trasparente. Dimensioni interne: (8,6 x 5,72 x 2,86 cm.) • 2 € 13,00 cad. • 3 € 12,00

55 335973 Contenitore lungo con coperchio trasparente. Dimensioni interne: (21,27 x 5,72 x 2,86 cm.) • 2 € 21,00 cad. • 3 € 19,50



Nastri codificatori

- Tape Dispenser con taglierina incorporata
- Il dispenser "roller" evita che il nastro s'intrecci.

33 399315 EZ Tape System **assortimento Jewel** € 72,00

8 nastri colori Jewel (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

33 399310 EZ Tape System **assortimento Vibrant** € 72,00

8 nastri colori Vibrant (N, O, P, Q, E, S) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm

33 399305 EZ Tape System **assortimento Classic** € 72,00

8 nastri colori Classic (A, B, D, G, I) da 91 cm Dim. 5,72x0,95 cm
€ 68,00 • 2 € 62,00 cad.

33 399300 EZ Tape Singoli disponibili in tutti i colori € 17,60

Nastri da 305 cm 1 pz. - Dim. 5,72x0,95 cm
3 € 16,00 cad. • 5 € 15,00



Anelli di identificazione codifica a colori

EZ-ID Rings Anelli innovativi per la codifica a colori

- Preconfezionati in dispenser di facile impiego • Fine degli anelli dispersi. Basta far scorrere lo strumento all'interno dell'anello e staccarlo.



ø mm: SM 3,17-6,35 LG 6,35-9,52 XL 9,52-12,7



CLASSIC ass. 200 anelli (A, B, D, G, I) € 82,70

- SM 33 3993105
- LG 33 3993205
- XL 33 3993005

JEWEL ass. 200 anelli (E, J, T, I, M, U) € 82,70

- SM 33 3993115
- LG 33 3993215
- XL 33 3993015

VIBRANT ass. 200 anelli (N, O, P, Q, R, S) € 82,70

- SM 33 3993110
- LG 33 3993210
- XL 33 3993010

SINGOLI 25 pz. Tutti i colori € 12,90

- SM 33 3993100
- LG 33 3993200
- XL 33 3993000

1 kit ass. € 74,00 • 2 € 69,00 cad.

2 singoli € 11,90 cad. • 4 € 10,00 cad.



RESTORATIVE TRAY e IMPLANT Tray per procedure ricostruttive e implantari

Restorative: la posizione dei compartimenti riproduce quella dell'arcata per Veneers, inlays e onlays, compositi. Spazi per vaschette monouso per adesivi e cementi, pennelli e materiali. Grazie al trattamento speciale, si può scrivere sopra il coperchio filtrante protettivo il numero del dente corrispondente. Dimensioni: 17,46x11,75x1,59 cm. Colore: viola neon.

Implant: veloce e facile riconoscimento dei componenti implantari. La forma dell'Organizer copia l'arcata per il riposizionamento degli impianti. I comparti separati evitano che i componenti si mischino. La plastica lubrificata consente di scrivere il numero del dente nell'area corrispondente. Il coperchio mantiene i componenti in sicurezza.

• Coperchio è uno schermo anti UV

55 38295R
Restorative Organizer
+ 25 dappen
€ 46,95
€ 39,00 2 € 36,00 cad.



55 38290B
Implant Organizer 1 pz
€ 41,40
€ 35,00 2 € 32,00 cad.



CAD/CAM Block Organizer S

• Organizzazione e conservazione moderna e salvaspazio per i blocchi da fresatura CAD/CAM • Offre una rapida panoramica e una presentazione professionale dei blocchi di fresatura • Etichette e cartellini per contrassegnare i singoli cassettei • Adatto per un massimo di 48 blocchi

Block Locker Organizer Dimensioni: 14,0 x 4,7 x 19,7 cm
55 383417 (E, J, N, Q, S, T, U) **€ 79,00 € 64,00**

NEW

Porta strumenti rotanti in alluminio

SMALL € 29,00 € 27,00 a scelta 3 € 24,00 cad.		LARGE € 48,00 € 44,00 a scelta 3 € 39,00 cad.	
SMALL SILVER	SMALL BLU	LARGE SILVER	LARGE BLU
55 P51S1S 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P51S1B 15 x FG Dim: 58 x 25 x H31	55 P51L1S 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33	55 P51L1B 32 x FG Dim: 80 x 42 x H33
55 P51S2S 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P51S2B 10 x FG + 5 x CA Dim: 58 x 25 x H31	55 P51L2S 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33	55 P51L2B 16 x FG + 16 x CA Dim: 80 x 42 x H33
55 P51S3S 6 x HP Dim: 54 x 28 x H62	55 P51S3B 6 x HP Dim: 54 x 28 x H62	55 P51L3S 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33	55 P51L3B 80 x FG Dim: 100 x 75 x H33
		55 P51L4S 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33	55 P51L4B 40 x FG + 40 x CA Dim: 100 x 75 x H33



AL-BUR-BLOCK



Porta strumenti rotanti in plastica

COLOR BUR BLOCK L36 • L42 (base in silicone, 35 fori universali)
Porta strumenti rotanti in plastica colorata autoclavabili, 36 fori con coperchio trasparente non autoclavabile. Disponibili per FG, CA o misti.

L36 8,3x5 cm base in plastica, 36 fori € 10,50 € 9,50 a scelta 3 € 9,00 cad.		
55 25LP36FG • 36 x FG	55 25LP36CA • 36 x CA	55 25LP36M • 18 x FG - 18 x CA
L42 8,3x5 cm universale (CA, FG, HP) base in silicone, 35 fori € 13 € 12		
55 25L42R	55 25L42B	55 25L42V



COLOR-BUR-BLOCK



Porta frese a scatto


Con blocco chiuso o aperto. • Autoclavabile fino a 134°C . 12 x FG • Mix 6 x FG +6 x CA

LOCK-BUR-GUARD FG e MIX Dimensioni: 75 x 35 x 10 mm.					
GIALLO FG	55 P55LFG1	BLU	55 P55LFG2	BIANCO	55 P55LFG3
GIALLO MIX	55 P55LM1	BLU MIX	55 P55LM2	BIANCO MIX	55 P55LM3
AZZURRO	55 P55LFG4	BEIGE	55 P55LFG5	VERDE	55 P55LFG6
AZZURRO MIX	55 P55LM4	BEIGE MIX	55 P55LM5	VERDE MIX	55 P55LM6
LAVANDA	55 P55LFG7				
LAVANDA MIX	55 P55LM7				

€ 9,50 a scelta 3 € 8,50 cad.



LOCK-BUR-BLOCK

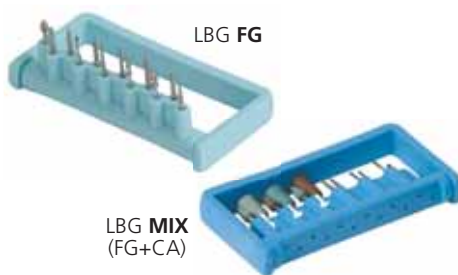

Rotoli per sterilizzazione Steridiamond Selezione PERIODENT

Richiedeteci certificato. "Medical grade" 60 a 70 gsm di qualità superiore. **Conservabilità certificata a 180 gg.**

- Universali per ogni termosaldatrice • Confezionati singolarmente in pellicola protettiva • La stampa avviene sulla linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto • Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura • La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pe-labilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni • Inchiostri certificati

ISO 11140 Rotoli da 200 mt.

2-10% • 4-15% • 8-20%



Larghezza	55 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
Codice	53 066202	53 066203	53 066204	53 066205	53 066206	53 066207	53 066208	53 066209
€	12,30	17,90	22,90	32,90	43,90	51,90	61,90	109,90

Disponibili anche con soffietto

Buste per sterilizzazione Steridiamond PERIODENT

• Dotate di bioadesivo atossico collante resistente ai cicli di sterilizzazione. **Conservabilità fino a 180 gg.**

• "Chevron" per una rapida e perfetta apertura.

Confezioni da 200 pz.

2-10% • 4-15% • 8-20%



Larghezza	60x100mm	75x250mm	90x165mm	90x250mm	130x350mm	140x260mm	190x330mm
Codice	53 066121	53 066122	53 066123	53 066124	53 066125	53 066126	53 066127
€	8,90	11,00	10,90	14,40	39,90	16,90	29,90

Mantelline a strappo con lacci

Realizzate utilizzando il 42% di plastica in meno.

Massima qualità per garantire morbidezza e confort. Eccellente protezione e impermeabilità. Dotate di strappo perfetto con comodi lacci.

Mantelline a strappo in bobina, 50 x 60 cm, 80 pz. € 14,90 € 13,90 • 2 € 12,50 cad.
53 0422EA1
Azzurro

Mantelline a strappo in bobina, 50 x 80 cm, 60 pz. € 14,90 € 13,90 • 2 € 12,50 cad.
53 0422EA2
Azzurro



Soluzione per pulizia e disinfezione

54 63020/1 GIGASEPT Instru.
AF. FL.2 LT € 84 2 € 78 cad.
54 63050 GIGASEPT Strum.
AF-TANICA 5 LT € 197
2 € 185 cad.
Soluzione speciale per la pulizia e la disinfezione rapida di strumenti e frese. Durata fino a 7 gg. Utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni. Efficace contro batteri, funghi, virus epatite B,C, AIDS e bacillo della tubercolosi. Utilizzo all'1,5%.
Dispositivo medico CE 0297.

54 63015 GIGASEPT
Pearls barattolo kg.1,5
€ 118,00 € 99,00
GIGASEPT PEARLS
cod. 189 – Acido peracetico multienzimatico-sporicida per la disinfezione manuale o in vasca ad ultrasuoni degli strumenti. Innovativa struttura in perle che ne impedisce l'inhalazione.
Dispositivo medico CE 0297
Confezione: Barattolo da 1,5 Kg

54 630F02 GIGASEPT FF new
€ 201,00 € 185,00
GIGASEPT FF NEW
cod. 213 – Disinfettante speciale per endoscopi, sonde ecografiche, accessori per anestesia. Ampio spettro d'azione, spore incluse.
Utilizzo da 1 a 6% - La soluzione diluita mantiene per 14 gg. la propria efficacia.
Dispositivo medico CE 0297
Confezione: 5 flaconi da 2 litri

X-Ray

BITE CUSHIONS X-RAY

- Staccare e incollare • Facile e veloce • Utilizzato per entrambe le buste PSP o sensori con guaine • Senza Latex&BPA



Orizzontale

Verticale

Periapicale



Semplicemente staccare e attaccare



Facile posizionamento in ogni area richiesta


Migliorano il comfort del paziente e la qualità delle immagini durante le radiografie, in particolare nelle proiezioni Bite by Wing • Morbidi e flessibili riducono il disagio durante la chiusura della bocca • Supporto stabile per il sensore e la pellicola, mantengono la posizione corretta e riducono il rischio di immagini sfocate o distorte.

16 P54XRBC X-Ray Bite Cushions, 200 pz € 15,90 € 12,90

Tutti i prezzi indicati in questa pagina verranno scontati del 20%

Guaine syringe/HVE guaine


Utilizzate per siringhe a 3 vie, aspirasaliva e valvole HVE. Apertura pretagliata per una facile applicazione. Cf. 500 pz.

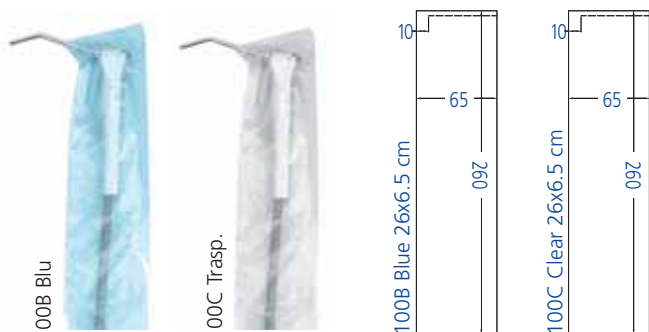

Guaina per siringa 3 vie - 500 pz.		
53 P8300B	BLU - 26x65 cm.	€ 22,60
53 P8300C	TRASPARENTE - 26x65 cm.	€ 20,90

Guaine copri poggiatesta


Crea una superficie pulita per consentire ai pazienti di appoggiare la testa con tranquillità. Cf. 500 pz.

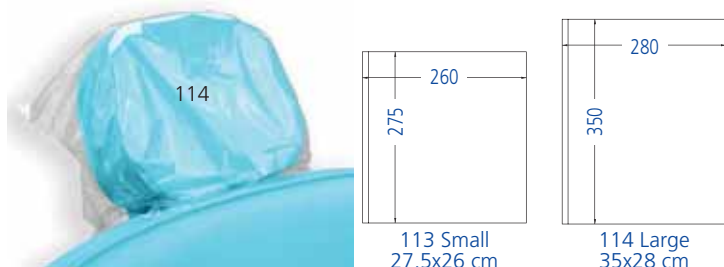

53 P83113	Copri poggiat. Small - 27,5x26 cm.	€ 56,00
53 P83114	Copri poggiat. Large - 35x28 cm.	€ 56,00

Guaine x-ray

Per coprire la testa del radiografico. Cf. 250 pz.

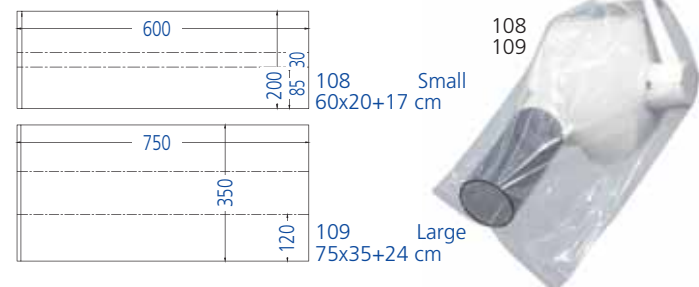

Busta per testa X-Ray - 250 pz.		
53 P83108	Small testa X-Ray 60x20x17 cm.	€ 80,40
53 P83109	Large testa X-Ray 75x35x24 cm.	€ 117,00

Guaine peel-n-stick guide luminose

La linguetta staccabile assicura che la guida luminosa possa essere completamente racchiusa e sigillata dalla guaina barriera. Cf. 200 pz.



Guaina per guide luminose - 200 pz.		
53 P83128	Small - Ø da 7-8 mm.	€ 27,90
53 P83129	Large - Ø da 9-11 mm.	€ 27,90

Guaine per tubi

Per tubi dritti e a spirale. 366 metri / rotolo.



Guaina per tubo dritto e a spirale		
53 P83118	5 cm larg. - rotolo 366 m.	€ 27,90
53 P83119	10 cm larg. - rotolo 366 m.	€ 29,90

Guaine copri poltrona


Elimina la necessità di copri poggiatesta separati. Prolunga la vita di poltrona e sgabello evitando il contatto diretto con disinfettanti e aerosol dannosi. Cf. 125 pz.



53 P83111	Copri poltrona - 180x72 cm.	€ 131,00
53 P83112	Copri mezza polt. - 100x65 cm.	€ 103,00

Guaine maniglie per lampada


Misura universale per adattarsi alla maggior parte di maniglie a "t". Cf. 500 pz.

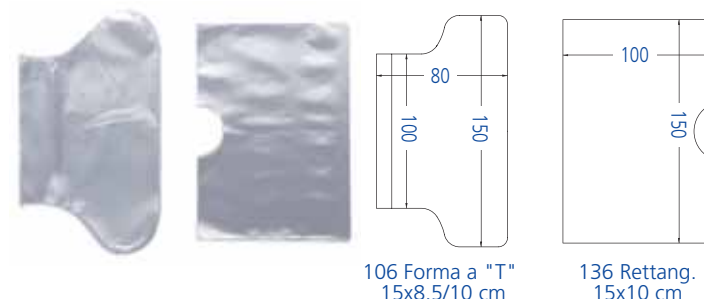

Guaina per maniglia - 500 pz.		
53 P83106	per man. a "T" - 10x15x8,5 cm.	€ 38,40
53 P83106T	per man. "rett." - 15x10x8,5 cm.	€ 31,40

Guaine siringhe per composti fluidi

Adatto anche per altri materiali fluidi che utilizzano una siringa con punta applicatrice, come mordenzanti, sigillanti e sottofondi di cavità. Cf. 200 pz.

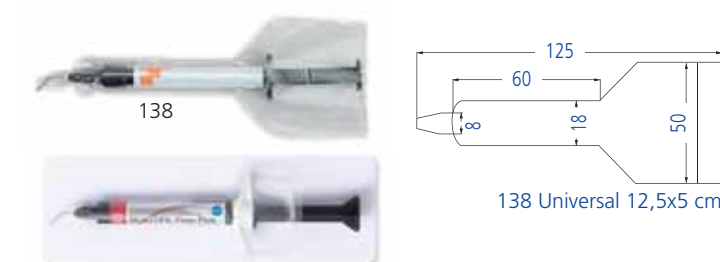

53 P83138	Guaina Universale per composti in siringa - 12,5x6x5 cm.	€ 22,60
-----------	--	---------



PERIODENT

SALVIETTE ASSORBENTI COLORNAP

Composti da pura ovatta di cellulosa uniti da un velo di politene. Alta assorbenza • Impermeabilità, superiore resistenza agli strappi. Confezionati per maggior igiene in confezione da 50 x 10 buste.
Colorazioni disponibili strati 2 (1+1): bianco, azzurro, verde, rosa, giallo, azzurro chiaro, baby, blu med, pesca.



EconoCleanPack 10 buste sigillate da 50 € 22,90 • 2 € 21,00 • 4 € 19,90 cad.		
53 042321 azzurro	53 042322 verde	53 042323 lilla
53 042324 rosa	53 042325 giallo	53 042330 verde fresh
53 042327 pesca	53 042328 arancione	53 042329 blu

BICCHIERI POLI-PRO PERIODENT

Questi bicchieri monouso sono interamente realizzati in polipropilene di alta qualità e molto resistente ed inoltre riciclabile al 100%.



- Non si rompono, nemmeno se schiacciati e presentano bordi curvi senza residui.
- Colorati per rendere l'ambiente più rilassante.

La selezione PERIODENT offre bicchieri in confezione da 1000 pezzi (20 buste chiuse da 50 pezzi) e da 3000 pezzi (30 buste chiuse da 100 pezzi).

180 cc, 1000 pz (20x50 pz) € 33,00 € 29,00									
53 25011+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO
180 cc, 3000 pz (30x100 pz) € 33,00 € 29,00									
53 25013+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VE	VM	RO

53 25011ASBicchiere monouso 180 cc, colori assortiti (arancione, rosa, lilla, azzurro, verde mela, verde), 1000 pz (20x50 pz) € ~~35,50~~ € 27,50

TRAY ECO PAPERS PERIODENT

Salviette ideali per vassoi e tutti i piani di lavoro. In speciale carta crespata monouso in cellulosa 100%. (Riciclabile, priva di cloro e diossina) Queste salviette garantiscono la massima assorbenza e resistenza e sono permeabili a vapore e gas per sopportare cicli di sterilizzazione in autoclave.



250 TrayPapers 18x28 € 6,50 • 2 cf. € 5,50 cad.			
53 247AR	Arancio	53 247AZ	Azzurro
53 247BI	Bianco	53 247VF	Verde Fresh
53 247GI	Giallo	53 247LI	Lilla
53 247RO	Rosa	53 247VE	Verde

VASSOI POLI-TRAY PERIODENT

Vassoi monouso in polistirolo. La speciale lavorazione, il design e gli spessori garantiscono l'alta resistenza.

- Bordo rinforzato per contenere in sicurezza gli strumenti e i materiali all'interno del vassoio
- Piacevoli colori oltre al bianco.



liscio con divisori, 28x18 cm, 400 pz € 43,50 € 34,80							
53 452LC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM
zigrinato con divisori, 28x18 cm, 400 pz € 43,50 € 34,80							
53 452ZC+	BI	GI	BL	AR	AZ	LI	VM

VASCHETTE MONOUSO

in plastica



Piccole 20 x 10 cm, 400 pz. € 31,00 € 28,50	
53 054201	Vaschetta piccola liscia
53 054202	Vaschetta piccola zigrinata
Grandi 20 x 15 cm, 400 pz. € 34,70 € 32,00	
53 054221	Vaschetta grande liscia
53 054222	Vaschetta grande zigrinata

Contenitori per protesi e apparecchi. Colori assortiti

Contenitore per apparecchi
51 P90600 10 pz.
€ ~~12,60~~ € 10,90

Contenitore per guide notturne
51 P90601 10 pz.
€ ~~14,60~~ € 12,50

Contenitore per tutti i bite
51 P90602 10 pz.
€ ~~14,60~~ € 12,50

Contenitore per protesi totali
51 P90603 10 pz.
€ ~~18,00~~ € 16,00



51 P90612 Box porta apparecchi con specchio, 10 pz
€ ~~33,90~~ € 28

G1

Contenitori per protesi con filtro interno, autoclavabile, in sacchetto singolo

G1.ASS

51 290G1 Contenitore G1 Dim: ø9 h8,2 - 1 pz € ~~2,20~~ € 1,85
(Disponibili nei colori: Azzurro, Blu, Fucsia, Giallo, Verde)

51 290G1.ASS Contenitore G1 Conf. ass. - 6 pz € ~~14,60~~ € 12,50



SafeMask® - Tipo IIR e tipo FFP2 sono le migliori mascherine ad uso medico che abbiamo selezionato per voi, che garantiscono una protezione affidabile senza sacrificare il comfort e la traspirabilità. Lo strato esterno in tessuto-non-tessuto SpoonBond offre la massima protezione contro la penetrazione dei fluidi grazie agli strati interno ed esterno idrorepellenti. SafeMask® SofSkin® fog-free tipo IIR prive di lattice, assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza risultando ideali per le pelli delicate. La TRASPIRABILITÀ ECCEZIONALE è unica nel settore in quanto supera i requisiti della norma EN 14683:2019.

Medicom
SafeMask®



Basta sollevare la fascetta e poggiarla sul dorso del naso.



MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR
Lenti appannate?

Le mascherine Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free Tipo IIR assicurano un impareggiabile livello di comfort e morbidezza, risultando ideali anche per le pelli delicate. Per i portatori di occhiali è prevista un'esclusiva fascetta "fog-free" posta sull'archetto nasale che previene l'appannamento di lenti e visiere.

SafeMask® SofSkin® fog-free conf. 50 pz. € 26,70 • 2 € 18,50 cad. • 10 € 15,00			
○ Bianco	53 572159	● Blu	53 572155
● Lavanda	53 572153	● Arancione	53 572162
● Rosa	53 572156	● Verde	53 572158



Basta sollevare la fascetta e poggiarla sul dorso del naso.



MASCHERINA SAFEMASK® SofSkin® fog-free IIR

SofSkin fog-free IIR con elastici, auricolari e visiera, EN 14683 Type IIR, DM, classe I, Made in France. Realizzata appositamente per le pelli sensibili, offre una protezione barriera affidabile senza irritare i visi sensibili. Lo strato interno in misto cellulosa, leggero e traspirante, è progettato per ammorbidirsi con l'uso e rimanere fresco sulla pelle. Comoda protezione 2 in 1 con mascherina facciale e schermo oculare combinati. La striscia di flusso integrata impedisce in modo affidabile l'appannamento degli occhiali e della visiera. Protezione aggiuntiva contro gli spruzzi grazie alla classificazione di tipo IIR.

53 3732155 25 pz. € 69,00 € 63,00 • 3 € 59,00 cad. • 10 € 47,00

Medicom
SafeMask®



confezionate singolarmente
TAGLIE



MASCHERINA SAFEMASK® FFP2 e IIR
La taglia giusta per tutti, sicurezza!

Questa mascherina respiratoria funge da efficace barriera contro gli aerosol solidi e liquidi per garantire una protezione affidabile dalle malattie infettive (BFE 99,9 %). Il tessuto morbido e leggero assicura massimo comfort ed eccellente respirabilità. Le due fascette elastiche incollate a ultrasuoni consentono alla mascherina di adattarsi perfettamente al viso.

SafeMask® FFP2 (colore bianco) conf. singolarmente 50 pz. € 88,00 € 78,00 a scelta • 3 € 74,00 cad.	
Ⓢ Piccola	53 5722WHS
Ⓜ Media	53 5722WHM
Ⓛ Grande	53 5722WHL

Cuffiette universali

SuperComfort per tutto il giorno!

- Realizzato con materiali traspiranti di qualità superiore
- Protezione efficace contro la contaminazione crociata
- Favorisce l'immagine professionale dello studio

Cuffie Premium Universali SafeWear™. Materiale: Viscose 40 g/m², Contenuto: 100 pz. € 47,90

Cuffie Premium Universali SafeWear™ 100 pz. € 47,90 € 36,00 • 2 € 35,00 cad.	
● 53 316960	● 53 316970

SAFWEAR PREMIUM



100% Made in Italy

Questo progetto è stato pensato per la protezione e contemporaneamente alla visione **senza appannamento** grazie al design specificamente ideato che indirizza l'aspirazione verso l'esterno.

Si applicano alla maggior parte di montature dimensione medio/grande e con struttura non sottile; in questo modo possono essere utilizzate direttamente sull'occhiale dell'operatore, oppure con un'altra montatura tipo quella presente nel Kit **MARK 1**, su cui far inserire lenti correttive. Il sistema **MARK 3** prevede uno **schermo opaco** più rigido super resistente che può essere utilizzato con maggior comfort dal personale per esempio di segreteria o reception. **Dimensioni: 150 x 155mm. ca. – Peso 16 gr.**

53 03201	MARK 1, occhiale e 6 schermi	€ 49,50	€ 22,50
53 03202	MARK 2, 6 schermi rimovibili	€ 34,50	2 cf. € 9,00
53 03203	MARK 3, occhiali c/maschera	€ 32,00	2 cf. € 9,00



Con schermo rimovibile



Con schermo fisso



Semplice da applicare: **1.** Agganciare l'aletta superiore al ponte della montatura dell'occhiale. **2.** Piegare i lembi laterali in modo da farli passare sotto le lenti dell'occhiale; in questa posizione lo schermo sarà perfettamente stabilizzato.

Montature con protezione

Protezione sicura, efficace e confortevole, degli occhi. • Montature colorate riutilizzabili e lenti con schermatura laterale • Confortevoli e leggeri per procedure lunghe - meno di 10 g • Lenti ottiche utilizzabili anche sopra gli occhiali da vista e con la mascherina chirurgica • Leggeri e riciclabili, disinfettabili o sterilizzabili a freddo • Conformi alle normative OSHA • Disponibili anche con lenti anti UV o con lenti scure per la protezione ed il rilassamento del paziente.

53 P3250 Perio LIGHTShield, trasp., 50 schermi € 32,50 • 2 € 29,50 cad.

53 037110 Perio LIGHTShield, 10 montature colorate € 5,90 € 4,90

(Colori a scelta: verde chiaro, verde abete, bianco, blu, rosa, rosso, giallo, nero, viola).

1 cf da 50 schermi € 29,50 + **OMAGGIO** 20 montature colorate sterilizzabili.

Rilassamento e protezione
53 0372LT 25 pz.
€ 36,50 € 25,00

Protezione dalla fotopolimerizzazione
53 037210 Lenti anti UV 10 pz.
€ 35,40 € 25,00

PERIO EYESHIELD



Viene usato per procedure molto lunghe.



Con mascherina chirurgica e occhiali.

U.S. Patent 5,297,298
U.S. & Int'l Patents Pending.

Guanti in Nitrile AQL 1.5

Disp. Medici a doppia conformità: sicurezza operatore e paziente

Ipoallergenici, **LATEX FREE**, Nitrile Soft Elevata sensibilità tattile e confortevoli. Elastici e sensibili donano una sensazione di estrema morbidezza alle mani **Senza polvere. Blu** – Polsino salvastrappo – **Superficie est. micro ruvida 100 pz**

• Peso taglia M **3,80 g** - Da 1 a 6 • Resistenza 4 • Sensibilità 5 • Elasticità 5 • Grip 4 • Protezione 5

XS 5-5½	S 6/6½	M 7/7½	L 8/8½	XL 9/9½
53 024130	53 024131	53 024132	53 024133	53 024134
€ 9,50 • 3 € 13,00 cad. • 10 € 12,50 cad.				

SMX SKIN BLU NITRILE

Richiedere offerta per forniture programmate



Guanti senza polvere

SAFETOUCH

Benessere per le tue mani

Guanti senza polvere con punte delle dita testurizzate e una vestibilità estremamente confortevole.

Questi guanti medicali offrono una qualità e un comfort eccezionali. Soddisfano tutte le norme di qualità europee in materia di guanti di protezione ad uso medico. L'elevata resistenza e l'eccezionale sensibilità tattile, coniugata all'affidabile protezione dei pazienti, rendono i guanti SafeTouch indispensabili nella pratica medica quotidiana. **con Lanolina e Vitamina E**

Ogni 5 cf di guanti a scelta in **omaggio** 3 cf da 50 mascherine IIR SafeMask Medicom



1 cf. 50 mascherine IIR SafeMask Medicom

Simply the best


con Lanolina e Vitamina E



Advanced Rejuvenate™ Nitrile senza polvere 100 pz.				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 521XS	53 521SS	53 521SM	53 521SL	53 521SXL
€ 19,50 • 5 € 15,60 cad. • 10 € 14,00 cad.				

Rejuvenate™ Lattice senza polvere				
6-XS	7-S	8-M	9-L	10-XL
53 520XS	53 520SS	53 520SM	53 520SL	53 520SXL
€ 19,50 • 5 € 15,60 cad. • 10 € 14,00 cad.				

EZ-FILM protettivo pre-tagliato, non lascia residui e garantisce una facile applicazione e rimozione grazie ai bordi non adesivi da entrambi i lati. Ideale per manici lampade, siringhe aria/acqua, strumenti, monitor manipoli, ecc.

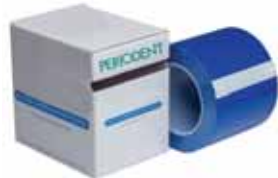

Made in Italy

53 08221 Film adesivo Blu 10x15 (1200 strappi)
 € 16,50 • 2 cf. € 13,50 cad.

SAFECLEANSTEP Made in Italy

Tappeto multistrato decontaminante batteriostatico CE



• Apertura sicura per l'estrazione del singolo blocco/tappeti, ognuno contiene 30 fogli adesivi in polietilene numerati • Bordo speciale in un solo lato per la facile rimozione • Nella massa adesiva è contenuto l'agente batteriostatico.

€ 95,00	€ 73,00	€ 99,00	€ 77,00
45x90 cm. cf. 5 blocchi (150 pz.)		45x115 cm. 5 blocchi (150pz.)	
53 082110	BLU	53 082111	BLU
53 082120	VERDE	53 082121	VERDE

PERIOICE Ghiaccio Sintetico

Freddo intenso ma non aggressivo. Dopo l'attivazione, avvolgere in un panno applicare per 20 minuti



35 092825 14x18 TNT, 24 pz. € 15,50 € 13,50

BLOCCHETTI PER MISCELAZIONE

S 35x45 mm	L 70x80 mm
53 P51220	53 P51225



cf. 3x100 pz € 16,30 € 13,00

POZZETTI PER MISCELAZIONE

Monouso ma robusti!

53 P56MW4	200 pz.	€ 36,90 € 29
53 P56MW2	500 pz.	€ 43,60 € 34



SPATOLA UNIAG

Universale per alginati e gesso. Autoclavabile fino a 134°C. Presa e flessibilità ideali. Facile da pulire. 190 mm.



53 P51SUB cf. 3 pz. € 7,50 € 6,00 • 2 cf. € 5,00 cad.

MixONE Scodelle Flessibili per alginati e gesso. Piccola ø11x8 cm. Media ø12,5x10 cm

PICCOLA cf. 3 pz. € 9,50 • € 8,50 (colori a scelta)					
80 P94MBS1	80 P94MBS2	80 P94MBS3	80 P94MBS4	80 P94MBS5	80 P94MBS6
Blu trasp.	Viola tr	Rosso tr.	Verde tr.	Giallo tr.	Blu op.
MEDIA cf. 3 pz. € 9,50 • € 8,50 (colori a scelta)					
80 P94MBM1	80 P94MBM2	80 P94MBM3	80 P94MBM4	80 P94MBM5	80 P94MBM6
Blu tras.	Viola tr.	Rosso tr.	Verde tr.	Giallo tr.	Blu opac



DAPPEN MONOUSO



53 P950 (1000 pz.)
 € 67,00 € 57,00

DAPPEN IN SILICONE LAVABILI ideali per resine



53 052600 5 ml € 3,50 (€ 4,20)
 53 052601 15 ml € 3,90 (€ 4,90)
 53 052603 25 ml € 5,00 (€ 6,60)

DAPPEN IN VETRO

Per resine e altri materiali. Sterilizzabili a freddo.



€ 4,50 € 3,50

	tra.	azz	blu	gia	ver
55 P9	51	52	53	54	55

BACCINELLA RENIFORME MONOUSO



53 254C50 (50 pz.)
 € 22,40 € 19,00

CONTENITORI PER RIFIUTI



53 256C43.1 Supporto in Alluminio € 29 € 25,00
 53 256C43 Contenitori rifiuti 1000 pz. € 122 € 105,00

DISPENSER PER SALVIETTE

55 275A7BI A7 con molla. Dimensioni: 18x13x17 cm. Colore: Bianco. € 35,40 € 25,50



A34 con apertura frontale a taglio. Dimensioni: 18x13x17 cm. € 28,60 € 24,50

Bianco	Blu trasp Blu	Fumé	Trasparente
55 275A34BI	55 275A34BLTR	55 275A34FU	55 275A34TR

Guaine peel-n-stick guide luminose

La linguetta staccabile assicura che la guida luminosa possa essere completamente racchiusa e sigillata dalla guaina barriera. Cf. 200 pz.



Guaina per guide luminose - 200 pz.	
53 P8328	Small - Ø da 7-8 mm. € 27,90 -20%
53 P8329	Large - Ø da 9-11 mm.

Guaine siringhe per composti fluidi

Adatto anche per altri materiali fluidi che utilizzano una siringa con punta applicatrice, come mordenzanti, sigillanti e sottofondi di cavità. Cf. 200 pz.



53 P83138 Guaina Universale per composti in siringa - 12,5x6x5 cm. - 200 pz. € 22,60 € 18,00

Un solo prodotto, più risparmio.

La soluzione detergente polifunzionale elimina la necessità di utilizzare più detergenti specifici, con una riduzione immediata dei costi di acquisto, gestione e stoccaggio.

L'utilizzo semplice e diretto (immersione senza smistamenti preliminari) riduce tempi operativi, errori e sprechi, abbattendo anche i costi indiretti di manodopera e migliorando l'efficienza dello studio.

L'elevata efficacia in tempi brevi accelera i cicli di pulizia e aumenta la produttività. La formulazione sicura preserva gli strumenti nel tempo, prolungandone la durata e trasformando l'acquisto in un investimento che si ripaga.

I file endodontici mantengono elasticità e resistenza, con meno fratture, meno sostituzioni e meno costi imprevisti.

La durata del prodotto è legata alla quantità di residui rimossi, non al tempo: un vantaggio competitivo concreto che riduce sprechi e sostituzioni frequenti.

d33 Detergente odontoiatrico poliattivo universale per immersione statica

- Rimuove delicatamente senza intervento manuale tutti i tipi di sporco dagli strumenti, compresi frese diamantate e frese di metallo, strumenti canalari.
- Protegge tutti i metalli, compreso alluminio.
- Mantiene le caratteristiche dei fili di taglio.
- Neutralizza eventuali inneschi di corrosione.
- La soluzione d33 non permette al suo interno la proliferazione della carica batterica.

flacone da 1.000 ml cad. • tanica da 5.000 ml



d66 Detergente poliattivo universale per ultrasuoni ottimizzato per odontoiatria (compreso l'alluminio)

- Rimuove composti organici, grassi, eugenati, cementi compresi vetroionomeri, adesivi per portaimpronte, alginati, incrostazioni, sostanze calcaree, macchie di tabacco, paste lucidanti da strumenti e oggetti metallici, diamantate, frese, strumenti canalari, manufatti protesici, plastiche, spazzolini anche di setole naturali, cotone e gommini.
- Protegge tutti i metallici.
- Rispetta resine, composite e materie plastiche.
- La soluzione d66 non permette al suo interno la proliferazione della carica batterica

flacone da 1.000 ml cad. • tanica da 5.000 ml



54 431D33F Detergente univ. D33 fl. 1000 ml € 110,00 € 94,00

54 431D33T Detergente univ. D33 Tan. 5000 ml € 345,00 € 292,00

54 431D66F Detergente univ. ultras. D66 fl. 1000 ml € 106,00 € 91,00

54 431D66T Detergente univ. ultras. D66 Tan. 5000 ml € 330,00 € 280,00

Manipoli PREMIUM Selection



PERIODENT

40 017K23L+ stainless steel

Contrangolo a fibre ottiche anello blu 1:1
€ 380,00 € 230,00



- Corpo in acciaio INOX
- Fibre ottiche ad alta trasparenza
- Singolo spray, anti ritorno
- Cuscinetto a sfere in ceramica
- Push button integrato e isolato dalla testina

40 017K25L+L+ stainless steel

Contrangolo a F.O. anello rosso 5:1
€ 640,00 € 385,00



- Silenzioso
- Corpo in acciaio Inox per ottima presa e superiore resistenza in autoclave
- Fibre ottiche ad alta trasparenza
- Sistema Anti risucchio
- Cuscinetti in ceramica
- Push button integrato

40 077A75PQK titanium

Turbina a F.O. TITANIUM Push connessione per KAVO*
€ 550,00 € 335,00



TOP DI GAMMA per resistenza potenza e torque.
Con cuscinetto a contatto obliquo NSK** e rotore in titanio.
La struttura della testa è perfetta e garantisce un funzionamento prolungato.

40 077A6QK Copper

Turbina a F.O. Push connessione per KAVO*
€ 295,00 € 175,00



Turbina Standard, potente ed elevato torque. Predisposta per connessione rapida con attacco KAVO* e compatibili

40 03791KM4 Copper/aluminum

Attacco tipo KAVO Con luce
€ 120,00 € 78,00



40 0771PM3 Copper

Turbina a F.O. Push att.4 vie
€ 120,00 € 74,00



Testina Standard con notevole potenza e Torque
Attacco 4 vie

* Kavo è un marchio registrato di KAVO Dental GmbH

** NSK marchio registrato di Nakanishi Inc.

Applicazione precisa e senza sprechi.

Solo un applicatore per infinite possibilità:

- Adesivi • Primer • Mordenzanti
- Fluoro • Desensibilizzanti
- Liner per cavità • Resine composite
- Cementi • Sigillanti



46 333091 Applicatori ZerofloX by Mixpac 100 pz.

€ 13,95 1+1 al 50% € 20,98

Offerta speciale lancio 1 + 1 al 50%





SENZA PELUCCHI

FACILE ACCESSO

RISPARMIO DI MATERIALI

1 MISURA PER TUTTO

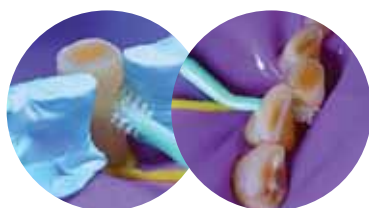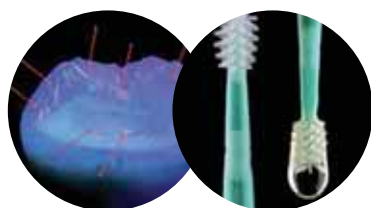


Ecco una bella sorpresa per te IGIENISTA !!!

Offerta A 2 TipOne Satelec Style: Universale e Perio 200 coppette Quartz, grana media gusti assortiti, 100 spazzolini soft montati Prophy+


€ 125,00 (€ 175,00)

Offerta B 2 TipOne EMS Style: Universale e Perio 200 coppette Quartz, grana media gusti assortiti, 100 spazzolini soft montati Prophy+


€ 125,00 (€ 175,00)

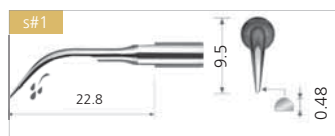


59 X24S1 € 33,00

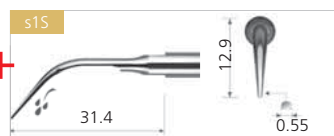

59 X24S1S € 33,00

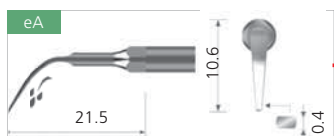

59 X24EA € 33,00

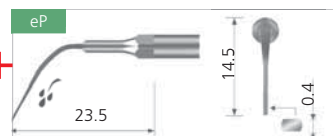

59 X24EP € 33,00



+ campioni SE Cushion

2 TipOne € 49,00



€ 125,00

Prophy+ 100 pz. € 59,70



ref. PR 6IG1S



+ campioni Pink Petal

Sostegni monouso per sensori

Questi supporti per sensori radiografici staccabili e adesivi sono progettati per tenere saldamente in posizione un sensore intraorale digitale durante l'imaging radiografico. È sufficiente staccare la pellicola adesiva, attaccare il supporto al sensore e posizionarlo nella bocca del paziente. Il supporto mantiene il sensore stabile e correttamente allineato, garantendo immagini accurate e riducendo al minimo il disagio per il paziente. confezione € 63,00 € 52,00

PEEL'N'STICK



16 P57ANTB ANTERIORE BLU



16 P57POSG POSTERIORE GIALLO



16 P57BTWR BITEWING ROSSO



16 57ENDV ENDO VERDE



16 57BTTR BITE TAB ROSSO



Compatibilità universale



Design adesivo Peel'n'stick

Perché scegliere il monouso rispetto all'autoclavabile? **1.** Nessun rischio di contaminazione crociata, il che li rende più sicuri da usare. **2.** Comodo ed efficiente da usare rispetto alle alternative autoclavabili. **3.** Risparmio di costi e risorse: nessuna usura del prodotto o tempo impiegato per la sterilizzazione in autoclave. **4.** Disponibilità: nessuna attesa per i cicli di sterilizzazione: basta prenderne uno nuovo quando necessario. **5.** Comfort e flessibilità: il design più sottile e leggero dei supporti monouso li rende meno rigidi di quelli autoclavabili, migliorando il comfort del paziente.

Turbina potente e delicata, a doppia girante



TWIN POWER

T.P. la più potente di sempre e con la precisione di un bisturi. Rotore unico a doppia girante che garantisce **taglio fluido** e **potenza costante sempre**. Il design conico della testa offre una visibilità senza pari, mentre l'avanzato sistema a 4 spruzzi garantisce il massimo raffreddamento con sicurezza superiore grazie al minimo aerosol.

I cuscinetti robusti e il sistema dimostrato di flusso dell'aria con zero ritorno (Zero-Drawback), assicurano durata e miglior controllo delle infezioni. L'impugnatura "micro-pit" offre una presa sicura anche da bagnato; il sistema di serraggio progettato con materiali resistenti, manterrà sempre la fresa salda nel tempo.

Compatibile con diversi attacchi, si adatta perfettamente a qualsiasi studio.

40 M31342M TwinPower Turbine PAR-4HG-O (accoppiamento Morita)

40 M31342K TwinPower Turbine PAR-4HG-O-KV (accoppiamento compatibile Kavo)

€ 1.395,00 Speciale lancio € 650,00

Non è solo una turbina: è potenza, raffinata.



I 3 speciali diffusori - brevetto esclusivo Morita - ed il sistema di bloccaggio rapido* evitano il classico effetto risucchio.

POTENTI MICRO TESTINE

25W	22W	20W	18W
TORQUE X	STANDARD EX	ULTRA E UEX	ULTRA M UMX
ø 12X13,2	ø 10,5X13,2,2	ø 9,0X12,7	ø 9,0X10,6

Misure reali potenza misurata con diamantata Shofu Robot Point F201R

La massima potenza con la testina più piccola.



Contrangoli PERIODENT anello rosso e blu "Premium"



PERIODENT


ANELLO ROSSO 1:5 di qualità "Premium" • Silenzioso • Corpo in acciaio inossidabile, migliore presa e superiore resistenza in autoclave • Fibre ottiche ad alta trasparenza • Anti risucchio • Cuscinetti in ceramica • Push button integrato.

Comunemente utilizzato soprattutto per procedure che richiedono un torque elevato e una velocità controllata.

1. Lucidatura e finitura: di restauri in composito o altri materiali; crea una tessitura liscia ed esteticamente gradevole.
2. Corone e ponti: utile nella preparazione e nella sagomatura controllata.
3. Endodonzia: facilita la detersione e la sagomatura del sistema canale.
4. Chirurgia orale: quando è richiesta precisione nella rimozione di tessuto o in un taglio. Manutenzione facile per mantenerlo perfettamente funzionante, seguire i tre passaggi: pulizia, lubrificazione e sterilizzazione.

40 017K25L+ Contrangolo PERIODENT a F.O. anello rosso 5:1 € 640,00 € 385,00

"The KING of Dental perfection"

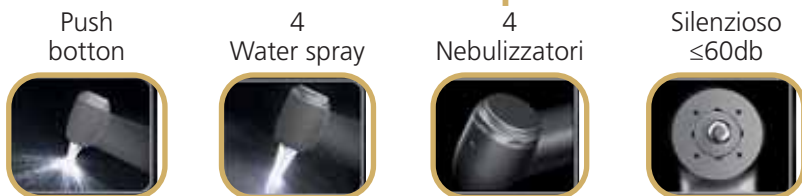

40 017K25L+ Contrangolo PERIODENT a F.O. anello rosso 1:5. € 640,00 € 385,00



ANELLO BLU 1:1 "Premium"

• Rapporto 1:1: Significa che la velocità di rotazione della fresa è la stessa (o quasi identica) della velocità del micromotore a cui il contrangolo è collegato.

1. **Odontoiatria Conservativa:** • Rimozione della carie (specialmente quella residua o in zone sensibili). • Preparazione delle cavità dentali per le otturazioni. • Rifinitura e lucidatura delle otturazioni con frese o gommini.
2. **Chirurgia Orale:** • Osteotomie (taglio dell'osso) o odontotomie (taglio del dente) in condizioni che richiedono un controllo preciso e una velocità moderata.

40 017K23L+ Contrangolo PERIODENT a F.O. anello blu 1:1 € 380,00 € 230,00

Anello blu

(A) **Corpo in acciaio inossidabile.** Trattamenti meno stressanti per la mano e superiore resistenza in autoclave (B) **Fibre ottiche ad alta trasparenza** per garantire la massima intensità (C) **Singolo spray acqua, anti ritorno.** Eccellente per il raffreddamento, design unico per la prevenzione delle infezioni crociate (D) **Cuscinetto a sfere in ceramica.** Più duro dell'acciaio, riduce l'usura e prolunga la durata del movimento (E) **Push Button.** Integrato del pulsante termicamente isolato dalla testina, impedisce l'accumulo di calore per ridurre il rischio di ustioni ai pazienti.

